

MODIUS®

Gebrauchsanweisung

v1.0

Modius® ist eine revolutionäre neue Careable Technology®, die Ihnen zu einem schlankeren Körper verhilft.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen:

- Dieses Produkt nicht verwenden, wenn Sie an Epilepsie leiden oder einen Herzschrittmacher tragen.
- Dieses Produkt außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kleine Artikel wie Elektrodenpads können bei Verschlucken zum Erstickten führen.
- Warnung: Eine Modifikation dieses Produkts ist unzulässig.
- Bevor Sie das Modius® Headset verwenden, berücksichtigen Sie bitte alle Hinweise im Abschnitt Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen dieser Gebrauchsanweisung.

Inhalt

1. Einführung zu Modius®	2
2. Inhalt einer Modius® Packung -	2
3. Erste Schritte	2
4. Verwendung Ihres Modius® Headsets	4
5. Fehlerbehebung	6
6. Pflege Ihres Modius®	7
7. Allgemeine Produktinformationen und technische Daten	8
8. Hinweise zur Zulassung und Sicherheit.....	10
9. Kontakt.....	12

1. Einführung zu Modius®

Vielen Dank, dass Sie sich für Modius® entschieden haben und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem ersten Schritt auf dem Weg zu einem schlankeren Körper!

Modius® ist ein Headset für die transdermale Neurostimulation. Es handelt sich um ein akkubetriebenes Headset, das niedrige Energie zur Neurostimulation in Wellenform liefert und so die Aktivität des Nervus vestibularis (Gleichgewichtsnerv) stimuliert. Diese Wellenform (Strom) wird über zwei selbstklebende Elektrodenpads übertragen. Die Pads werden jeweils auf der Haut platziert, die die Warzenfortsätze (knochigen Bereiche hinter den Ohren) bedeckt. Im eingeschalteten Zustand gibt das Gerät einen leichten elektrischen Impuls ab, der vom Benutzer nach oben oder unten geregelt werden kann.

Wenn der Benutzer die Einstellung so angepasst hat, dass sich die Schwingung auf einem angenehmen sanften Niveau befindet, sollte die vom Modius® Headset erzeugte Stimulation für die Dauer der Sitzung (1 Stunde) möglichst auf diesem Niveau beibehalten werden. Mithilfe der Modius® App können weitere Anpassungen der Einstellung vorgenommen werden. Über die App kann das Gerät auch durch Drücken des Pausensymbols oder alternativ durch zweimaliges Drücken der Ein-Ausschalttaste am Headset angehalten werden. Nach Beendigung der Sitzung nimmt der Benutzer das Headset ab. Die Elektrodenpads müssen nach jeder Anwendung entsorgt werden. Wenn das Produkt nicht verwendet wird, kann es über ein Micro-USB-Kabel geladen werden. Aus Sicherheitsgründen befindet sich eine Steuerungssoftware auf dem Gerät, die verhindert, dass es elektrische Stimulationen abgibt, während der Akku über das Micro-USB-Kabel geladen wird.

Die empfohlene Anwendungsdauer beträgt eine Stunde pro Tag. Sobald die Dauer der Anwendung des Modius® Headsets eine Stunde erreicht hat, wird die Stimulation automatisch angehalten. Um bei Bedarf eine gewisse Flexibilität der Stimulationsroutinen zu ermöglichen, kann das Gerät nach einer Benutzungsunterbrechung von 16 Stunden wieder verwendet werden. Das Modius® Headset ist für die Anwendung durch Personen ab 18 Jahren im häuslichen Umfeld vorgesehen.

2. Inhalt einer Modius® Packung -

1. Modius® Headset
2. Modius® Benutzerhandbuch
3. USB-Ladekabel und Ladegerät
4. 150 Elektroden-Gelpads, 100 Alkohol-Reinigungstücher

Hinweis: Für den Betrieb des Modius® Headsets außerdem erforderlich, jedoch nicht im Lieferumfang enthalten:

Mobiles Gerät wie z. B. ein Smartphone oder ein Tablet mit den Betriebssystemen Android 5.0 oder höher oder iOS 9 oder höher.

3. Erste Schritte

Laden Ihres Modius® Headsets

- Das im Lieferumfang Ihres Modius® Headsets enthaltene USB-Netzkabel an den USB-Anschlussadapter (Lieferumfang) anschließen und das Kabel mit dem Headset verbinden.
- Wenn das Headset erfolgreich geladen wird, leuchtet die LED-Anzeige gelb.
- Wenn das Headset erfolgreich geladen ist, erlischt die gelbe LED-Anzeige.
- Wenn bei Anschluss des Netzkabels an das Headset die LED-Anzeige gelb blinkt, liegt bei dem Gerät ein Ladefehler vor (siehe „Fehlerbehebung“).
- Wenn der Batteriestand niedrig ist, blinkt das gelbe Licht 3 Mal in Folge. Zudem wird ein akustisches Signal in Form von 3 Pieptönen abgegeben. Wenn die Akkuanzeige diesen niedrigen Stand anzeigt, liegt die verbleibende Stimulationsdauer bei max. 60 Minuten, bevor sich das Headset selbst ausschaltet.

HINWEIS: Bitte achten Sie darauf, das Ladekabel zu entfernen, bevor Sie Ihr Headset benutzen. Stellen Sie sicher, dass das USB-Ladegerät genügend Platz hat, damit es sicher von dem Headset und der Stromquelle entfernt werden kann.

Koppeln Ihres Headsets mit Ihrem Bluetooth-Gerät

• Stellen Sie vor Beginn Folgendes sicher:

- Ihr Headset ist geladen (siehe „Laden Ihres Modius® Headsets“) und das Ladekabel wurde entfernt.
- Auf Ihrem Mobilgerät ist die Bluetooth-Drahtlostechnologie aktiviert.

Laden Sie die Modius® App aus dem Apple App Store oder von Google Play herunter und führen Sie die Registrierung durch.

• Bei ausgeschaltetem Headset:

- o Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste seitlich am Headset zwei Sekunden lang gedrückt.
- o Ein hoher Piepton ist zu hören und die Ein-/Ausschalttaste blinkt weiß. Um anzuzeigen, dass das Headset gekoppelt werden kann, blinkt eine blaue LED-Anzeige regelmäßig.

• Sobald Sie die Modius® App auf Ihrem Mobilgerät starten, wird über die App nach Ihrem Headset gesucht.

• Wenn sich das Headset mit der App verbindet, ertönt ein Piepton und die LED-Anzeige blinkt blau. Auf diese Weise wird Ihnen über das Headset mitgeteilt, dass Ihr Mobilgerät eine Kopplung mit dem Headset herstellen möchte.

• Drücken Sie einmal die Ein-/Ausschalttaste am Headset, um die Kopplung anzunehmen.

• Auf Ihrem Mobilgerät erhalten Sie die Mitteilung, dass das Headset eine Kopplung mit Ihrem Mobilgerät herstellen möchte. Wenn Sie der Kopplung zustimmen, wird diese durch einen zweifachen Piepton bestätigt.

• Es kann etwa 10 Sekunden dauern, bis die Kopplung abgeschlossen ist.

• Nach Abschluss der Kopplung verändert sich der App-Bildschirm und zeigt Ihnen nun das Dashboard und die Bedienelemente zur Steuerung des Headsets an.

4. Verwendung Ihres Modius® Headsets

Empfohlene Verwendungsdauer

Die empfohlene Verwendungsdauer beträgt 1 Stunde pro Tag. Als Sicherheitsfunktion stoppt Modius® die Stimulation automatisch nach 1 Stunde Anwendung pro Tag. Nach 16 Stunden können Sie eine neue Sitzung beginnen, sodass Sie Ihre Verwendungsroutine flexibel gestalten können.

Hinweis: Weitere Informationen zur Produktsicherheit finden Sie im Kapitel „Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen“.

So tragen Sie Ihr Headset

- Die Haut im Bereich des harten, knöchernen Bereichs hinter Ihren Ohren (Warzenfortsätze) mit einem Alkohol-Reinigungstuch reinigen.
- Die Schutzabdeckung aus Kunststoff von den Gelpads entfernen.
Haarsträhnen zurückstreichen, bevor Sie die Gelpads auf der gereinigten trockenen Haut hinter den Ohren anbringen.
- Das Headset wie in *Abbildung 1* auf den Kopf setzen, sodass sich die Ein-/Ausschalttaste über dem rechten Ohr befindet.
- Die Enden des Modius®-Kabels an den Gel-Pads hinter jedem Ohr befestigen.

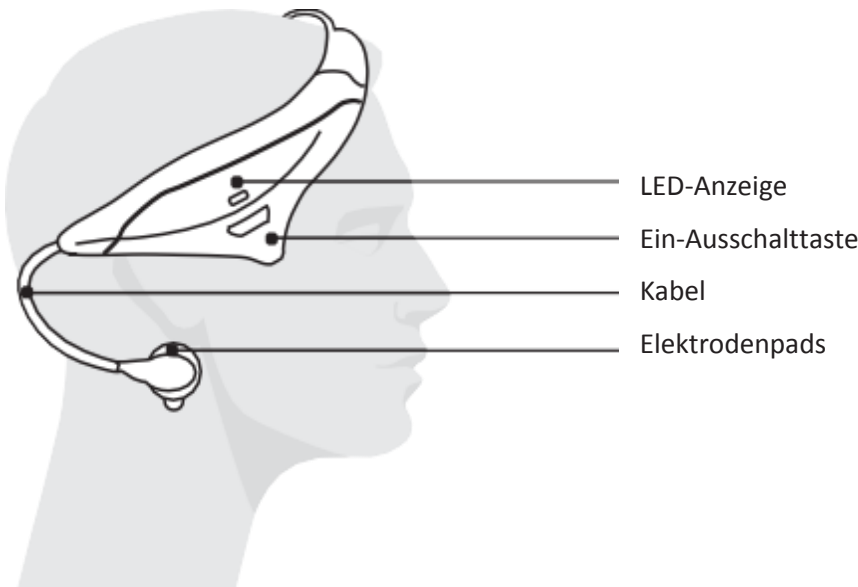


Abbildung 1

Einschalten des Headsets und Beginn einer neuen Sitzung

- Stellen Sie Folgendes sicher:
 - o Ihr Headset ist aufgeladen und mit Ihrem Mobilgerät gekoppelt.
 - o Das Headset sitzt bequem auf Ihrem Kopf und die Elektroden sind gemäß den Anweisungen angebracht.
- Schalten Sie das Headset ein, indem Sie die Ein-Ausschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt halten. Ein hoher Piepton ist zu hören und die weiße LED-Anzeige blinkt regelmäßig.
- Starten Sie die Modius® App und navigieren Sie zur Registerkarte „Dashboard“.
- Um die Stimulation bzw. die Sitzung zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Start“.
- Nach 60-minütiger Anwendung ertönen 3 kurze, hohe Pieptöne und die LED-Anzeige blinkt mehrfach dreimal in Folge weiß. Ihre Sitzung ist nun beendet.

Einstellen des Stimulationsgrads

- Navigieren Sie in der Modius® App zur Registerkarte „Dashboard“.
- Der Stimulationsgrad kann mithilfe der Bedienelemente auf dem Bildschirm nach oben „^“ oder unten „v“ geregelt werden.
- Um Sie darauf hinzuweisen, dass der Stimulationsgrad verändert wurde, gibt das Headset bei jeder Änderung des Stimulationsgrads einen Piepton ab.
- Die maximale Leistung des Headsets beträgt 10. Wenn Sie versuchen, die Leistung weiter zu erhöhen, hören Sie 2 kurze, hohe Pieptöne, die Sie darauf hinweisen, dass die maximale Leistung erreicht ist.
- Die minimale Leistung des Headsets beträgt 1. Wenn Sie die Leistung weiter senken, hören Sie 2 kurze, tiefe Pieptöne, die Sie darauf hinweisen, dass das Headset nicht mehr stimuliert und die Leistung auf 0 zurückgefahren ist, was im Prinzip dem Standby-Modus entspricht.

*Wenn Sie sich während einer Sitzung unwohl fühlen, halten Sie die Sitzung an und verringern Sie die Intensität, bevor Sie fortfahren. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen“.

Zurücksetzen Ihres Modius® Headsets

Möglicherweise müssen Sie Ihr Headset von Zeit zu Zeit zurücksetzen, wenn Probleme auftreten. Wenn Sie Ihr Headset zurücksetzen müssen, befolgen Sie die Anweisungen unten.

HINWEIS: Beim Zurücksetzen Ihres Headsets können Daten, die noch nicht mit der App synchronisiert wurden, verlorengehen.

- Schließen Sie das Modius® Headset an das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel und das USB-Ladegerät an.
- Stellen Sie sicher, dass die orangefarbene LED leuchtet (was anzeigt, dass das Headset geladen wird).
- Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste seitlich am Headset mehr als 10 Sekunden gedrückt, bis Sie drei aufeinanderfolgende lange Pieptöne hören.
- Das Headset ist nun zurückgesetzt und das Netzkabel kann entfernt werden. Sie sollten Ihr Headset nun wie gewohnt verwenden können.

Ausschalten Ihres Headsets

- Halten Sie, während das Headset verwendet wird oder sich im Standby-Modus befindet und benutzungsbereit ist, die Ein-/Ausschalttaste seitlich am Headset mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.
- Sie hören einen tiefen Piepton, der Sie darauf hinweist, dass sich das Headset ausgeschaltet hat. Nach 10 Sekunden beginnt die App erneut nach Ihrem Headset zu suchen.
- Laden Sie Ihr Headset nach jeder Verwendung, sodass es bereit für die nächste Sitzung ist.

5. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Mein Headset lässt sich einschalten, es kann aber keine Sitzung gestartet werden.	Das Headset ist ans Ladekabel angeschlossen.	Trennen Sie die Verbindung zum Kabel, bevor Sie eine Sitzung zu starten versuchen.
Mein Headset lässt sich nicht einschalten.	Das Headset ist nicht geladen.	Schließen Sie das Headset ans Ladekabel an.
	Das Headset befindet sich im Ruhemodus.	Schließen Sie das Headset an das Ladekabel an und versuchen Sie es einzuschalten.
Mein Headset funktioniert eine Zeit lang und schaltet sich dann aus.	Der Widerstand zwischen den Pads ist zu hoch.	Achten Sie darauf, vor dem Aufbringen der Gelpads die Alkohol-Reinigungstücher auf der Haut zu verwenden, die Pads korrekt hinter den Ohren zu platzieren und keine Haare zwischen den Pads und der Haut einzuklemmen.
	Die an die Elektroden angebrachten Pads sind abgetragen.	Tauschen Sie die Geldpads am Headset aus.
Mein Headset lässt sich nicht mit meinem Mobilgerät verbinden.	Auf Ihrem Handy ist kein Bluetooth aktiviert.	Stellen Sie sicher, dass Bluetooth® auf Ihrem Gerät aktiviert ist.
	An Ihrem Mobilgerät tritt beim Suchen des Headsets ein Fehler auf.	Starten Sie die App auf Ihrem Mobilgerät neu.
Während der Kopplung höre ich 3 kurze, tiefe Pieptöne und die LED-Anzeige blinkt 3 Mal blau.	Beim Warten darauf, dass Sie die Kopplungsanfrage vom Mobilgerät auf dem Headset akzeptieren, ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.	Schalten Sie das Headset aus und versuchen Sie erneut eine Kopplung gemäß den Anweisungen in „Koppeln Ihres Headsets mit Ihrem Mobilgerät“ herzustellen.
Ich finde die Benutzung des Headsets unangenehm.	Eventuell ist die Leistung des Geräts zu hoch.	Senken Sie die Leistung des Headsets mit der App, bis Sie ein leichtes Schaukeln spüren oder das unangenehme Gefühl abklingt.

Wenn ich mein Headset an das Ladekabel anschlieÙe, blinkt die LED-Anzeige gelb.	Beim Headset liegt ein Ladefehler vor.	Versuchen Sie das Ladekabel mit einem anderen USB-Anschluss zu verbinden. Wenn sich Ihr Problem dadurch nicht lösen lässt, wenden Sie sich bitte an unseren Support.
Die LED-Anzeige meines Headsets blinkt gelb und ich höre 3 kurze, tiefe Pieptöne.	Der Akkuladestand des Headsets ist niedrig.	Laden Sie das Headset (siehe „Laden Ihres Modius® Headsets“).
Wenn ich versuche das Headset einzuschalten, höre ich 3 tiefe Pieptöne.	Der Akkuladestand des Headsets ist extrem niedrig.	Laden Sie das Headset (siehe „Laden Ihres Modius® Headsets“).

6. Pflege Ihres Modius®

Headset

- Die Pads gemäß den obigen Anweisungen nur auf die Warzenfortsätze, den harten, knöchigen Bereich hinter den Ohren, auflegen. Nicht auf der Brust oder an anderen Stellen am Kopf oder Hals platzieren. Siehe „So tragen Sie Ihr Headset“.
- Nur im Sitzen oder Liegen verwenden.
- Dieses Produkt außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Unter 18-Jährige sollten dieses Produkt nicht verwenden.
- Mit einem weichen Tuch sauber wischen.
- Das Headset nach der Benutzung ausschalten.
- Das Headset nach jeder Benutzung vollständig laden, bevor es wieder ins Etui gelegt wird.
- Keine starken Scheuermittel oder aggressiven Reiniger verwenden.
- Das Headset nicht nass werden lassen.
- Nicht in Flüssigkeit eintauchen.
- Keiner übermäßigen Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Das Modius® Headset nicht so aufbewahren, dass das Stirnband eingedrückt oder gedehnt wird. Dies beeinträchtigt den Komfort und den sicheren Sitz auf Ihrem Kopf.

Gelpads

- Streichen Sie alle Haarsträhnen zurück, bevor Sie die Gelpads auf der gereinigten Haut anbringen, da sie ansonsten an den Pads festkleben können.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Haut sauber und frei von Make-up, Cremes und sonstigen Lotionen ist, bevor Sie die Pads verwenden.
- Reinigen Sie Ihre Hände, bevor Sie die Pads anfassen, und berühren Sie sie so wenig wie möglich mit den Fingern.

Die Pads nach der Benutzung in einem geeigneten Behälter oder Mülleimer entsorgen.

- Die Gelpads nicht gemeinsam mit anderen Personen verwenden. Die Pads sind nur für die Benutzung durch eine Person vorgesehen.
- Ein Pad nicht länger als für die empfohlene Maximaldauer von 1 Stunde pro Sitzung verwenden.

7. Allgemeine Produktinformationen und technische Daten

Technische Daten: Modius® Headset











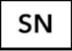


Leistungsmerkmale	
Akkulebensdauer	Ca. 10 Stunden bei Stimulation auf Stufe 10 – Ca. 4 oder 5 Tage bei normaler Benutzung
Eingangsstecker	Voll isoliert, berührungssicher, Micro-USB
Gewicht	85 g
Größe	180 x 140 x 70 mm
Informationen zum Stromversorgungseingang	
Micro-USB-Anschluss (Jeder USB-Anschluss oder jedes USB-Ladegerät muss nach EN/IEC 60601-1 zertifiziert sein. Um kontinuierliche Sicherheit zu gewährleisten, sollte nur das mitgelieferte Ladegerät zum Laden von Modius® verwendet werden.)	
Spannung: 4,75–5,25 V Max. Strom 155 mA DC	
Maximale Ausgangsspannung Maximaler Ausgangsstrom	20 V 600 uA.
Bluetooth BLE - BGM113	
Betriebsfrequenzbereich	2,4 GHz für Bluetooth-Energiesparfunktion
Maximal übertragende HR-Leistung	+3 dBm
Akku (Akku kann vom Benutzer nicht ausgetauscht werden) Lithium-Polymer 4,2 V 155 mAh	
Umgebungsbedingungen für den Betrieb	
Umgebung	Verwendung im privaten Bereich
Temperaturbereich	0 °C bis 40 °C
Wasserdichte	0 m
Geräuschpegel	0 dB
Umgebungsbedingungen für die Lagerung	
Temperaturbereich	0 bis 40 °C
Relative Feuchte	< 95 %
Erwartete Gerätelebensdauer	Die Garanzzeit des Geräts beträgt 1 Jahr; es hält aber oft länger. Die Garantie erstreckt sich nicht auf das Zubehör (Drähte, Pads und Reinigungstücher). <ul style="list-style-type: none"> Die Lebensdauer der Drähte hängt stark von der Benutzung ab. Stets vorsichtig handhaben. Die Elektrodenpads halten nur 1 Anwendung lang; die Haltbarkeitsdauer ist den Informationen des Herstellers zu entnehmen. Haltbarkeitsdauer der Reinigungstücher siehe Verpackung des Herstellers.
Haltbarkeitsdauer	<ul style="list-style-type: none"> Das Headset hat keine feste Haltbarkeitsdauer. Haltbarkeitsdauer des Zubehörs (Pads, Drähte und Reinigungstücher) siehe Informationen des Herstellers.

Symbol

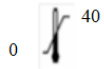

Information

Siehe Zusatzsymbole und Gebrauchsanweisung für weitere Informationen.

	Seriennummer auf dem Produktetikett zur Produktidentifizierung
	Bedianungsanweisungen beachten (Anwendung gemäß EN/IEC 60601-1)
5,0 V 	Gleichstrom Elektrischer Gleichstrom bei angezeigter Spannung.
	Anwendungsteil des Typs BF
	Nicht verwenden, wenn Packung beschädigt ist.
	Das Gerät ist nicht wasserdicht. Vor Feuchtigkeit schützen.
	Stückzahl je Packung.
	Lagerungsbedingungen: 0–40 Grad Celsius
	Relative Feuchte: < 95 %
	Schutzleiter (Erde)
	Nicht verwenden, wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen.
	Kein Schutz gegen Kontakt oder Eindringen von Gegenständen und kein Schutz gegen Eindringen von Flüssigkeiten.
	Bitte beachten Sie die Bedienungsanweisung, bevor Sie dieses Gerät benutzen. Die Nichtbeachtung der Bedienungsanweisung (z. B. Platzierung der Elektroden an der richtigen Stelle) kann dazu führen, dass der Benutzer Schaden nimmt.

Verbrauchsmaterial (Elektrodenpads, Reinigungstücher)

Nur das in der Packung enthaltene oder von Neurovalent empfohlene Verbrauchsmaterial verwenden. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers auf der Produktverpackung.

Richtlinie zu Rückgabe und Garantie

Weitere Informationen finden Sie auf www.modiushealth.com/returnsandwarranty

8. Hinweise zur Zulassung und Sicherheit

Konformitätserklärung - Modellname: ML600

Hiermit erklärt Neurovalens, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen von Richtlinien, der Richtlinie 2001/95/EG über die allgemeine Produktsicherheit und der Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie auf www.modiushealth.com/compliance.

Das Modius® Headset ist für den nicht kontinuierlichen Betrieb klassifiziert. Modius® zusammen mit dem USB-Ladegerät, das gemäß den elektrischen Sicherheitsnormen EN/IEC 60601-1 ausgeliefert wird, gilt bei der Ausübung seiner Funktion als medizinisches Gerätesystem (ME SYSTEM).

Alle Anwendungsteile entsprechen Klasse BF. Die IP-Schutzart des Headsets beträgt Null. Dies bedeutet, dass kein Schutz gegen Kontakt oder Eindringen von Gegenständen und kein Schutz gegen Eindringen von Flüssigkeiten besteht.



Enthält FCC ID: QOQBGM113

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Voraussetzungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädigenden Störungen verursachen und
2. Dieses Gerät muss unempfindlich gegen alle einwirkenden Störungen sein, einschließlich solcher Störungen, die den Betrieb unerwünscht beeinflussen könnten.



Modius® entspricht den geltenden grundlegenden Anforderungen der Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU.



Modius® entspricht den EMV-Normen in Europa und Australien.

Die Aufsichtsbehörden für Medizinprodukte der Länder, in denen Modius® derzeit verkauft wird, stufen Modius® als „allgemeines Wellnessgerät“ ein und setzen deshalb keine regulatorischen Anforderungen durch.

Zertifiziert über Siliconlabs
FCC ID:
IC ID:

FCC-15C
QOQBGM113
5123A-BGM113

Sicherheitserklärung

Dieses Gerät wurde auf seine Erfüllung der elektromagnetischen Kompatibilitäts- und Sicherheitsbescheinigung gemäß den Vorgaben der folgenden EN-Normen geprüft: EN301489-3, EN301489-17 und EN 60950-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 und IEC 60601-1-11.

Modius® wurde getestet und entspricht anerkannten Normen für die Immunität gegen Hochfrequenzinterferenzen über den Betriebsfrequenzbereich von 2,4 GHz.

Hinweis: Modius® ist ausschließlich zur Unterstützung von Erwachsenen über 18 Jahren bei einem angestrebten Gewichtsverlust oder einer angestrebten Gewichtskontrolle indiziert.

Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen - Headset



Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen:

Lesen Sie die mitgelieferten Informationen und Anweisungen, bevor Sie das Modius® Headset verwenden. Die Elektroden-Gelpads gemäß den Anweisungen nur auf den Warzenfortsätzen hinter den Ohren platzieren. Nicht auf der Brust oder an anderen Stellen am Kopf oder Hals platzieren.

Nicht verwenden, wenn Sie schwanger sind, an Reflexepilepsie leiden, die durch vestibuläre Stimulation ausgelöst wird, oder einen Herzschrittmacher tragen.

Falls unerwartete Reaktionen auftreten, sollte die Verwendung von Modius® sofort abgebrochen werden.

- Die Pads gemäß den obigen Anweisungen nur auf die Warzenfortsätze, den harten, knöchigen Bereich hinter den Ohren, auflegen. Nicht auf der Brust oder an anderen Stellen am Kopf oder Hals platzieren. Siehe „So tragen Sie Ihr Headset“.
- Nur im Sitzen oder Liegen verwenden.
- Dieses Produkt außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Unter 18-Jährige sollten dieses Produkt nicht verwenden. Kleine Artikel wie Elektrodenpads können bei Verschlucken zum Ersticken führen.
- Weil beim Aufladen des Akkus Gase entstehen können, laden Sie das Headset in einem gut belüfteten Bereich auf.

- Nicht verwenden, wenn Sie schwanger sind, an Reflexepilepsie leiden, die durch vestibuläre Stimulation ausgelöst wird, oder einen implantierten Herzschrittmacher, Herz-Defibrillator oder ein Neurostimulationsgerät tragen. Hinweis: Modius® stimuliert das Gleichgewichtsorgan des Gehirns. Dies dürfte zwar die meisten Epileptiker nicht beeinträchtigen, bei Menschen mit vestibulärer Reflexepilepsie könnte jedoch ein Anfall ausgelöst werden. Im Zweifelsfall sollten potenzielle Benutzer mit Epilepsie zuerst ihren Hausarzt zu Rate ziehen.
- Nicht verwenden, während Sie mobil sind (sich bewegen), da das Gerät Ihren Gleichgewichtssinn beeinträchtigen kann.
- Beim Konsum von Alkohol, beim Fahren oder beim Bedienen von Maschinen jeglicher Art nicht verwenden.
- Nicht in feuchten Umgebungen verwenden oder das Headset in Wasser tauchen.
- Die Gelpads nicht gemeinsam mit anderen Personen verwenden. Sie sind nur für die Benutzung durch eine Person vorgesehen.
- Ein Pad nicht länger als für die empfohlene Maximaldauer von 1 Stunde pro Sitzung verwenden.
- Das Pad sollte nach jeder Verwendung entsorgt werden. Die längere oder wiederholte Verwendung eines Pads kann dessen Wirksamkeit verringern oder Hautreizungen verursachen.
- Die Pads nicht auf verletzte oder gereizte Haut auflegen.
- Die Pads nach der Benutzung vorsichtig von der Haut entfernen. Die Pads in einem geeigneten Behälter oder Mülleimer entsorgen.
- Die Akkus nicht entfernen. Sie können vom Benutzer nicht ausgetauscht werden.

Hinweis:

Das Gerät ist weder ein medizinisches Gerät noch ein Ersatz für einen gesunden Lebensstil oder für eine professionelle medizinische Versorgung.

Falls unerwartete Reaktionen auftreten, sollte die Verwendung von Modius® sofort abgebrochen werden.

Wenn Sie sich während einer Sitzung unwohl fühlen, halten Sie die Sitzung an und verringern Sie die Intensität, bevor Sie fortfahren. Mögliche Gefahren oder Nebenwirkungen sind unter anderem:

Hautreizungen, Unbehagen durch die Stimulation, gestörtes Gleichgewichtsgefühl, gelegentlich Übelkeit und selten Erbrechen. Falls das Problem länger als 1–2 Tage anhält, ziehen Sie bitte einen Arzt hinzu.

Die empfohlene Verwendungsdauer beträgt maximal 1 Stunde pro Tag. Modius® stoppt die Stimulation automatisch, wenn Sie die Anwendungsdauer von 1 Stunde pro Tag überschreiten (oder eigentlich pro Zeitraum von 16 Stunden, um Sie nicht einzuschränken, sollten Sie Modius® einmal ein paar Stunden früher benutzen wollen).

Die Anweisungen zum Zurücksetzen sollten nicht missbräuchlich verwendet werden, um die persönliche tägliche Benutzungsdauer zu erhöhen.

Lesen und befolgen Sie diese Warnhinweise und Anweisungen. Bewahren Sie dieses Dokument zusammen mit Ihrem Headset auf.

Vorsichtshinweise zum eingebauten Akku

Ihr Modius® Headset hat einen eingebauten Akku, der vom Benutzer nicht ausgetauscht werden kann. Benutzer des Modius® Headsets sollten nicht versuchen, den Akku auszutauschen.

Manipulieren Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht es zu öffnen, da dadurch die Garantie erlischt und Ihre Sicherheit gefährdet werden kann.

Laden Sie das Headset gemäß dieser Gebrauchsanweisung mit einer Stromquelle auf, die von einem anerkannten Prüflaborator zertifiziert ist.

Versuchen Sie nicht, während der Verwendung des Geräts Wartungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen am Gerät durchzuführen (einschließlich Reinigung oder Aufladen).

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling



Eine der Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2002/96/EG beinhaltet, dass alles, was elektronisch ist, als elektronischer Abfall behandelt werden soll und nicht weggeworfen werden darf. Um Sie an diese Richtlinie zu erinnern, werden alle betroffenen Produkte jetzt mit dem Bild einer durchgestrichenen Mülltonne markiert, wie oben dargestellt.

Werfen Sie dieses Produkt oder den Akku am Ende des Produktlebenszyklus nicht in den normalen Hausmüll, sondern bringen Sie es zu einer Sammelstelle für das Recycling elektronischer Geräte. Eine falsche Entsorgung kann dazu führen, dass sich schädliche Giftstoffe in der Luft, im Wasser und im Boden anreichern, die für die menschliche Gesundheit schädlich sein können.

Hinweis: Die Pads und Reinigungstücher in einem geeigneten Behälter oder Mülleimer entsorgen.

Lizenzinformationen



Modius® arbeitet mit Bluetooth.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Weitere Informationen finden Sie auf www.modiushealth.com/termsandconditions

9. Kontakt

www.modiushealth.com
team@modiushealth.com
support.modiushealth.com



Hergestellt von Neurovalens, 4th Floor, The Warehouse, 7 James Street South, Belfast BT2 8DN.

© 2018 Neurovalens