


# MODIUS®

## Brugervejledning

### v1.0

Modius® er en revolutionerende ny pleje-agtig teknologi, der hjælper med at give dig en slankere krop.

 Advarsler og forholdsregler:

- Brug ikke dette produkt, hvis du har epilepsi eller har en pacemaker.
- Hold dette produkt væk fra børn. Små genstande som elektrodepuder kan forårsage kvælning.
- Advarsel: Ingen ændring af dette udstyr er tilladt.
- Overhold alle advarsler og forholdsregler, der er beskrevet i afsnittet Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler i denne brugsanvisning, inden brug af Modius® Headset

### Indhold

1. Introduktion til Modius® .....	2
2. Modius® pakkeindhold.....	2
3. Kom godt i gang.....	2
4. Sådan bruger du Modius® -headsettet .....	4
5. Fejlfinding .....	6
6. Sådan passer du på din Modius® .....	7
7. Generelle produktoplysninger og tekniske specifikationer.....	8
8. Lovgivnings- og sikkerhedsmæssige bemærkninger .....	10
9. Kontakt.....	12

# 1. Introduktion til Modius®

Tak fordi du har købt Modius®, tillykke med dit første skridt mod en slankere dig!

Modius® er et transdermalt neurostimulations headset. Det er et batteridrevet headset designet til at levere et lavt energi niveau i form af en neurostimulationsbølgeform, der stimulerer aktiviteten af den vestibulære kraniale nerve. Leveringen af denne bølgeform (strøm) påføres via to selvklæbende elektrodepuder. Disse puder anbringes på huden, idet de anbringes ovenpå hver mastoid-proces (bag ørerne). Når produktet er tændt, leverer det en lille elektrisk impuls, der kan justeres op eller ned af brugeren.

Når først produktet er indstillet til et niveau, hvor brugeren oplever en tolerant og behagelig blid svingende fornemmelse, bør stimuleringen, der leveres af Modius® -headsettet, forblive på dette niveau i løbet af sessionen (1 time). Yderligere justeringer kan foretages ved hjælp af Modius® App. Enheden kan også blive standset ved hjælp af appen ved at trykke på pauseikonet eller alternativt standses ved at trykke to gange hurtigt på tænd/sluk-knappen på headsettet. Når brugeren er færdig, fjernes headsettet og elektrodepuderne bortskaffes efter hver brug. Når produktet ikke bruges, kan det oplades via et micro-USB-kabel. Af sikkerhedsmæssige grunde er der softwarekontroller til stede for at forhindre, at enheden leverer elektrisk stimulering, når den er sat i mikro-USB-kablet for at oplade batteriet.

Den anbefalede brug er 1 time pr. dag. Modius® -headsettet stopper automatisk stimuleringen, hvis brugen når op på en time om dagen. Brugeren kan ikke bruge enheden igen inden for en 16-timers periode. Dette skyldes, at man således kan imødekomme en vis fleksibilitet af stimuleringsrutiner, hvis der er behov for dette. Modius® Headset er beregnet til at blive brugt af enhver over 18 år i hjemmemiljøet.

## 2. Modius® pakkeindhold

1. Modius® Headset
2. Modius® brugermanual
3. USB opladerkabel og oplader
4. 150 elektrogel geler, 100 alkoholservietter

Bemærk: Elementer der også er påkrævet til Modius® Headset-betjening, men ikke er inkluderet: Mobil enhed, dvs. Smart Phone eller Tablet Computer, med operativsystem; Android 5.0 eller højere; eller iOS 9 eller højere.

## 3. Kom godt i gang...

### Opladning af Modius® -headsettet

- Tilslut USB-strømkablet, der følger med dit Modius® -headset til USB-stikadapteren (medfølger), og tilslut kablet til headsettet.
- Hvis headsettet oplades korrekt, vil LED-indikatoren lyse konstant orange.
- Når headsettet er opladt, slukker den orangefarvede LED-indikator.
- Hvis du tilslutter strømkablet til headsettet, og LED-indikatoren blinker orange, skyldes det, at der er opstået en opladningsfejl på headsettet (se "Fejlfinding").
- Når batteriniveauet er lavt, vil du se det orange lys blinke i sekvenser på 3 blink. Der er også en lydindikation på 3 bip. Når du ser disse lavbatteri-indikatorer, betyder det, at der er op til 60 minutters stimulation (maks.), Før headsettet slukker.

Bemærk: Sørg for, at du afbryder opladerkablet, før du forsøger at bruge dit headset. Sørg for at lade USB-opladeren have plads nok til at den kan fjernes sikkert fra headsettet og strømkilden.

## Sådan forbinder du dit headset med din Bluetooth-enhed

- Før du går i gang, sørg for at:
  - Dit headset er opladet (se "Opladning af dit Modius® headset"), og at opladerkablet er blevet afbrudt.
  - Bluetooth trådløs teknologi er aktiveret på din mobile enhed.

Installér Modius® app'en fra Apple App Store eller Google Play og gennemfør registreringsprocessen.

- Med headsettet slukket:
  - o Tryk på tænd/sluk-knappen på siden af headsettet og hold den nede i 2 sekunder
  - o Du vil høre et højt bip og strømknappen vil blinke hvidt. En blå LED indikator vil blinke med jævne mellemrum for at angive, at headsettet er parat til at blive forbundet.
- Start Modius® -appen på din mobilenhed, appen vil begynde at scanne efter dit headset.
- Når headsettet er tilsluttet til app'en, vil du høre to korte bip og LED-indikatoren vil blinke blåt. Dette er headsettet, der giver dig besked om, at din mobile enhed har anmodet om at blive forbundet med det.
- Klik på tænd/sluk-knappen på headsettet en gang for at acceptere, at forbindelsen oprettes.
- På din mobile enhed vil du se en besked, der fortæller dig, at headsettet ønsker at blive forbundet med din enhed. Acceptér forbindelsen, headsettet vil bippe to gange for at bekræfte forbindelsen.
- Det kan tage omkring 10 sekunder før forbindelsen er oprettet.
- Når opretningen af forbindelsen er færdig, ændres App-skærmen, der viser instrumentbrættet og brugerens betjeningsselementer til at betjening af headsettet.

## 4. Sådan bruger du Modius® -headsettet

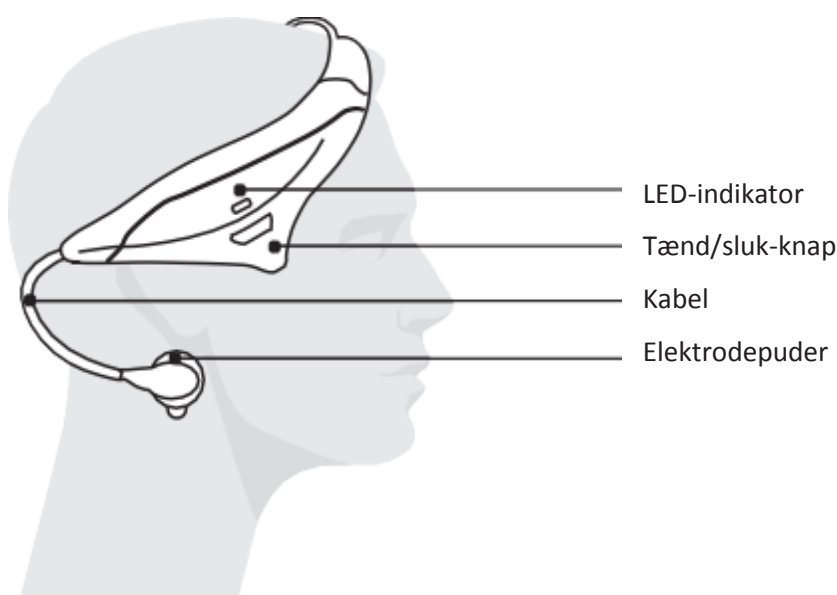
### Anbefalet brug

Anbefalet brug er maksimalt 1 time om dagen. Som en sikkerhedsfunktion stopper Modius® automatisk stimulering, hvis du overskrider 1 times brug pr. dag. Du kan starte en ny session, når en 16 timers periode er bortfaldet. Grunden til dette er, at du således kan udøve mere fleksibilitet i din brugsrutine.

Bemærk: Se advarsler og forholdsregler for yderligere information om produktsikkerhed.

### Sådan bruger du dit headset

- Brug en alkoholserviet til at rense huden på det hårde knogleområde bag dine ører (mastoiderne).
- Fjern det beskyttende plastdæksel fra gelepuderne.  
Børst eventuelle hårstreng væk, inden du lægger gelepuderne på den rene hud på dine mastoider.
- Sæt headsettet på dit hovede, som vist i *figur 1*, idet du placerer tænd/sluk-knappen over højre øre.
- Sæt enderne af Modius® -kablet på gelepuderne bag hvert øre.



Figur 1

### Tænd for dit headset og start en ny session

- Sørg for at
  - o Headsettet er opladet og forbundet med din mobile enhed.
  - o Headsettet er anbragt komfortabelt på hovedet, og elektroderne er fastgjort som i følge instruktionerne
- Tænd for headsettet ved at trykke på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder. Du vil høre et højtonet bip og den hvide LED vil begynde at blinke med mellemrum.
- Start Modius® -appen og naviger til fanen "Dashboard".
- Klik på knappen "Start" på skærmen - Dette vil starte din stimulation og session
- Efter 60 minutters brug vil du høre 3 korte højhøjede bip og LED indikatoren vil blinke hvid i rækkefølge 3 gentagne gange. Du har nu afsluttet din session.

## Justering af stimuleringsniveauet

- Navigér til fanen "Dashboard" på Modius® -appen.
- Stimulationsniveauet kan justeres ved hjælp af skærmbkontrol, det kan indstilles op 'Λ' eller 'V'
- Hver gang du justerer stimuleringsniveauet, vil headsettet bippe for at give dig besked om, at stimuleringsniveauet er ændret.
- Det maksimale effektniveau på headsettet er 10. Hvis du forsøger at øge strømniveauet yderligere, vil du høre 2 korte højtonede bip, der angiver, at du er på det maksimale effektniveau.
- Det minimale effektniveau på headsettet er 1. Hvis du forsøger at sænke strømniveauet yderligere, vil du høre 2 korte lavtonede bip, der angiver, at headsettet ikke længere virker og ligger på niveau '0', hovedsagelig i standbytilstand.

Hvis du føler ubehag under en session, skal du holde pause i sessionen og reducere intensiteten, inden du genoptager forløbet. Se yderligere advarsler og forholdsregler for yderligere oplysninger.

## Nulstilling af Modius® -headsettet

Nogle gange kan det være nødvendigt at nulstille dit headset, hvis du oplever problemer. Hvis du skal nulstille dit headset, skal du følge instruktionerne nedenfor.

Bemærk: Nulstilling af dit headset kan forårsage, at data, der ikke er synkroniseret med app'en, vil gå tabt.

- Tilslut Modius® -headsettet til det medfølgende strømkabel og USB-opladeren
- Sørg for, at den gule lysdiode er tændt (den indikerer, at headsettet oplades)
- Tryk på tænd/sluk-knappen på siden af headsettet i mere end 10 sekunder, indtil du hører en række af 3 lange bip.
- Headsettet er nu nulstillet, tag stikket ud af stikkontakten. Nu skal du kunne fortsætte med at bruge produktet som normalt.

## Sådan slukker du for headsettet

- Under brug, eller når enheden er i standby og klar til at blive brugt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen på siden af headsettet i mindst 2 sekunder.
- Du hører et lavtonet bip, der viser, at headsettet er slukket, og efter 10 sekunder vender app'en tilbage for at søge efter dit headset.
- Oplad dit headset efter hver brug, klar til din næste session.

## 5. Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Løsning
Mit headset er tændt, men vil ikke lade mig starte en session	Headsettet er tilsluttet opladerkablet	Afbryd kablet, før du forsøger at starte en session
Mit headset vil ikke tændes	Mit headset er ikke opladt	Tilslut headsettet til opladerkablet
	Headsettet er kommet i dyb standby tilstand	Tilslut headsettet til opladerkablet og prøv at tænde for det
Mit headset virker i et stykke tid og slukker så for sig selv	Modstanden mellem puderne er for høj	Sørg for, at du har brugt alkoholservietterne, før du anvender gelepuderne på din hud, at puderne er placeret korrekt bag dine ører, og at der ikke er noget hår mellem puderne og din hud
	Puderne, der er fastgjort til elektroderne, er slidt op	Udskift gelepuderne på headsettet
Mit headset vil ikke oprette forbindelse til min mobile enhed	Bluetooth er aktiveret på din mobile enhed	Sørg for at Bluetooth® er blevet aktiveret på din enhed
	Din mobile enhed oplever nogle problemer, når du søger efter headsettet	Genstart app'en på din mobile enhed
Under oprettelsen af forbindelsen hører jeg 3 korte, lavtonede bip og LED-indikatoren blinker blå 3 gange	Headsettet er løbet tør for tid, mens det ventede på, at du accepterede forbindelse til den mobile enhed	Sluk for headsettet og forsøg at opret forbindelsen igen, i det du følger vejledningen "Sådan forbinder du dit headset til din mobile enhed"
Jeg føler ubehag ved brug af headsettet	Strømniveauet på enheden kan være for høj	Reducér headsettets strømniveau ved hjælp af app'en, indtil du føler en stille gyngende fornemmelse eller indtil ubehaget langsomt forsvinder

Når jeg tilslutter headsettet til opladeren, blinker LED-indikatoren orange	Headsettet oplever en opladningsfejl	Prøv at forbinde opladerkablet til et andet USB-stik, hvis dette ikke løser problemet, bedes du kontakte support
LED-indikatoren på mit headset blinker orange og jeg hører 3 korte lavtonede bip	Batteriet på headsettet er ved at udløbe	Oplad headsettet (Se "Sådan oplader du dit Modius® headset")
Når jeg forsøger at tænde headsettet, hører jeg 3 lavtonede bip	Batteriet på headsettet er tæt på at udløbe	Oplad headsettet (Se "Sådan oplader du dit Modius® headset")

## 6. Sådan passer du på din Modius®

### Headset

- Placér kun puderne på mastoiderne, det hårde knoglede område bag øret, som anvist i instruktionerne. Placér ikke på brystet eller andetsteds på hovedet eller halsen. Se "Sådan bruger du dit headset".
- Benyt kun, når du sidder eller ligger ned.
- Hold dette produkt væk fra børn. Ingen under 18 år bør bruge dette produkt.
- Rengør med en blød klud.
- Sluk for headsettet efter brug.
- Oplad headsettet fuldstændigt, før du lægger det tilbage i tasken efter hvert brug.
- Brug ikke hårde slibemidler eller stærke vaskemidler.
- Undgå at gøre headsettet vådt
- Dyp ikke i væske.
- Lad det ikke ligge i for meget sollys.
- Læg ikke Modius® på en sådan måde, at hovedbåndet bliver mast eller strakt. Dette vil påvirke behageligheden og sikkerheden af tilpasningen til dit hoved.

### Gelepuder

- Børst eventuelle hårstrengene væk, inden du lægger gelepuderne på ren hud, da disse ellers ville kunne klæbe til puderne.
- Sørg for, at din hud er ren og fri for makeup, cremer og andre lotioner, inden du bruger puderne.
- Rengør hænder før håndtering af puderne og undgå så meget som muligt at røre dem med fingrene. Bortskaf puderne i en passende beholder eller affaldsspand.
- Du bør ikke dele puderne med nogen. Puderne er kun til brug for enkeltpersoner.
- Brug ikke pudren længere end den anbefalede 60 time pr. session.

## 7. Generelle produktoplysninger og tekniske specifikationer

### Tekniske specifikationer: Modius® Headset

Strømegenskaber	
Batteri liv	Ca. 10 timer på niveau 10 Stim - Ca. 4 eller 5 dage med nominal brug
Indgangsstik	Fuldt isoleret touch proof mikro USB
Vægt	85g
Størrelse	180x140x70mm
Strømforsyningsindløbsoplysninger	
Micro USB-port (Enhver USB-port eller USB-oplader skal certificeres til EN/IEC 60601-1 for at sikre fortsat sikkerhed, kun laderen, som følger med produktet, bør bruges til at oplade Modius® ) Spænding: 4,75 – 5,25V Maks. strøm 155mA DC	
Maksimal udgangsspænding Maksimal udgangsstrøm	20V 600uA.
Bluetooth BLE - BGM113	
Driftsfrekvensbånd	2,4 GHz til Bluetooth lav energi funktionalitet
Maksimal RF-effekt overført	+3 dBm
Batteri (Batteri kan ikke udskiftes) Lithium Polymer 4.2V 155mAh	
Driftsmæssige miljømæssige forhold	
Miljø	Til personligt brug i hjemmet
Temperaturområde	0°C to 40°C
Vandafvisende	0m
Støjniveau	0dB
Opbevaring Miljømæssige forhold	
Temperaturområde	0 to 40°C
Relativ luftfugtighed	<95%
Forventet levetid	Maskinen er garanteret i 1 år, men vil ofte vare længere.  Tilbehør (ledning, puder og alkoholservietter) dækkes ikke af garantien <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blylivet afhænger meget af brugen. Håndtér altid ledninger forsigtigt</li> <li>• Elektrodepuder holder kun til 1 session og der henvises til producentens oplysninger inden udløb.</li> <li>• Angående alkoholservietterne henvises der til producentens emballage til udløb.</li> </ul>
Lagerliv	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Headset-enheden har ingen fast holdbarhed</li> <li>• Se producentens oplysninger om tilbehørets holdbarhed (puder, ledninger og alkoholservietter)</li> </ul>

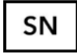

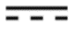










#### Symbol



#### Information

Se yderligere symboler og brugervejledningen for yderligere information



	Serienummer på produktmærke for at identificere produkt
	Følg brugsanvisningen (anvendes i overensstemmelse med EN/IEC 60601-1)
5.0v 	Jævnstrøm Jævnstrøm ved spænding vises.
	Type BF anvendt del
	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget
	Enheden er ikke vandtæt. Beskyt mod fugt
	Antal varer pr. Pakke
	Opbevaringsbetingelser: 0 - 40 grader celsius
	Relativ luftfugtighed: <95%
	Jordbeskyttelse (jord)
	Brug ikke, hvis Pacemaker monteres
	Ingen beskyttelse mod kontakt og indtræk af genstande og ingen beskyttelse mod væskeindgang
	Se venligst brugsanvisningen før brug af denne enhed. Hvis du ikke følger instruktionerne i IFU (f.eks. placering af elektroder på det rigtige sted), kan brugeren blive skadet

### Forbrugsstoffer (elektrode puder, alkoholservietter)

Brug kun de forbrugsstoffer, som befinder sig i pakken eller er anbefalet af Neurovalens. Se producentens anvisninger, der er beskrevet på produktemballagen.

### Retur og garanti politik

For yderligere information gå til [www.modiushealth.com/returnsandwarranty](http://www.modiushealth.com/returnsandwarranty)

## 8. Lovgivnings- og sikkerhedsmæssige bemærkninger

### Overensstemmelseserklæring - modelbetegnelse ML600

Hermed erklærer Neurovalens, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiver om generel produktsikkerhed - 2001/95 / EF og direktivet om radioudstyr 2014/53 EU. For at se den fulde overensstemmelseserklæring, gå til [www.modiushealth.com/compliance](http://www.modiushealth.com/compliance).

Modius® headsetudstyret er klassificeret til ikke-kontinuerlig drift. Modius® sammen med USB-opladeren leveret i overensstemmelse med elektriske sikkerhedsstandarder EN/IEC 60601-1 betragtes som et medicinsk udstyrssystem (ME SYSTEM) for at udføre dets funktion.

Alle anvendte dele er klasse BF. Headsættets IP-rating er nul. Dette betyder, at der ikke er nogen beskyttelse mod kontakt og indtrækning af genstande og ingen beskyttelse mod væskeindgang.



Indeholder FCC ID: QOQBGM113

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.



Modius® er i overensstemmelse med gældende væsentlige krav i radioudstyrdirektivet 2014/53 EU.



Modius® overholder EMC-standarder på det australske og Newzealandske marked.

Medicinske apparatregulatorer, hvor Modius® er solgt på nuværende tidspunkt, betragter Modius® som en generel wellness-enhed og håndhæver derfor ikke krav til medicinsk udstyrslovgivning.

Certificeret via Silicon Labs  
FCC ID:  
IC ID:

FCC-15C  
QOQBGM113  
5123A-BGM113

### Sikkerhedserklæring

Dette udstyr er blevet testet for at overholde elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhedscertificering i overensstemmelse med specifikationerne i EN-standarder: EN301489-3, EN301489-17 and EN 60950-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 and IEC 60601-1-11.

Modius® er blevet testet og overholder anerkendte standarder for immunitet over for radiofrekvensinterferens over driftsfrekvensområdet 2,4 GHz.

Bemærk: Modius® er udelukkende angivet til at hjælpe voksne over 18 år med deres vægttab og vægtstyringsmål.

## Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler - headset

### Advarsler og forholdsregler:

Se oplysningerne og instruktionerne, inden du bruger Modius®headsettet.

Placér kun elektrodegelænder på mastoiderne bag ørerne, som angivet i instruktionerne. Placér ikke på brystet eller andetsteds på hovedet eller halsen.

Brug ikke, hvis du er gravid, har refleksepilepsi, som udløses af vestibulær stimulering eller har en implanteret pacemaker.

Brug af Modius® skal straks seponeres, hvis uventede reaktioner opstår.

- Placér kun puderne på mastoiderne, det hårde knoglede område bag øret, som anvist i instruktionerne. Placér ikke på brystet eller andetsteds på hovedet eller halsen. Se "Sådan bruger du dit headset".
- Benyt kun, når du sidder eller ligger ned.
- Hold dette produkt væk fra børn. Ingen under 18 år bør bruge dette produkt. Små genstande som elektrodepuder kan forårsage kvælning.
- Oplad headsettet i et godt ventileret område, da der kan opstå gasser, når batteriet oplades. Af disse grunde anbefales det, at batteriet oplades i et godt ventileret område.
  
- Brug ikke, hvis du er gravid, har refleksepilepsi, som udløses af vestibulær stimulering eller har en implanteret pacemaker, hjerte defibrillator eller en neurostimuleringsenhed. Bemærk: Modius® stimulerer hjernens vestibulære (balance) system. Så selvom dette ikke bør påvirke de fleste mennesker med epilepsi, kan det udløse et anfald hos nogen med refleks vestibulær epilepsi. Hvis du er i tvivl, bør potentielle brugere med epilepsi først snakke tingene igennem med deres læge.
- Brug ikke, mens du bevæger dig, da det kan påvirke din balancesans.
- Må ikke anvendes under alkoholindtagelse, kørsel eller betjening af maskiner af nogen art.
- Må ikke anvendes i våde omgivelser og headsettet må ikke nedsættes i vand.
- Du bør ikke dele dine gelepuder med andre. De er kun til brug for enkeltpersoner.
- Brug ikke puden længere end den anbefalede 60 time pr. session.
- Det anbefales at bortskaffe puden efter hver brug. Langvarig eller gentagen brug af en enkelt pude kan reducere dens effektivitet eller føre til irritation af huden.
- Brug ikke puderne på beskadiget eller irriteret hud.
- Fjern puderne forsigtigt fra huden efter brug. Bortskaf puderne i en passende beholder eller affaldsspand.
- Forsøg ikke selv at fjerne batterierne. De kan ikke udskiftes af brugeren.

#### Bemærk:

Enheden er ikke en medicinsk enhed. Den er heller ikke en erstatning for en sund livsstil eller for professionel lægehjælp.

Brug af Modius® skal straks seponeres, hvis uventede reaktioner opstår. Hvis du føler ubehag under en session, skal du holde pause i sessionen og reducere intensiteten, inden du genoptager forløbet. Mulige farer eller bivirkninger er: hudirritation; ubehag fra stimuleringen; fornemmelse af at føle sig ude af balance, lejlighedsvis kvalme; og sjældent opkastning. Hvis et problem fortsætter efter 1-2 dage, bedes du kontakte din læge.

Anbefalet brug er maksimalt 1 time om dagen. Modius® stopper automatisk stimuleringen, hvis du overskrider 1 times brug pr. dag - eller en 16-timers periode for at undgå, at du bliver 'låst ude', hvis du vil bruge Modius® et par timer tidligere en dag.

Nulstillingsinstruktionerne bør ikke misbruges for at øge personlig daglig brug.

Læs og følg disse advarsler og instruktioner. Gem denne vejledning sammen med dit headset.

## Indbyggede batteri forholdsregler

Dit Modius® headsetprodukt har et indbygget batteri, som ikke kan udskiftes af brugeren. Brugere af Modius® bør ikke forsøge at udskifte batteriet i headsettet.

Du må ikke manipulere med dit produkt eller forsøge at åbne det, da dette annullerer garantien og kan medføre en sikkerhedsrisiko.

Oplad headsettet i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning ved hjælp af en strømforsyning, der er certificeret af et anerkendt testlaboratorium.

Forsøg ikke at udføre service eller vedligeholdelse (inkluderet rengøring eller opladning) af enheden, mens enheden er i brug

## Oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse



Et af bestemmelserne i det europæiske direktiv 2002/96/EC er at et hvilket som helst elektronisk produkt, skal behandles som elektronisk affald og må derfor ikke bortkastes. Som påmindelse om dette direktiv, er alle berørte produkter nu mærket med symbolet af den udkrydsede affaldsbeholder på hjul, som vist ovenfor.

I slutningen af produktets livscyklus må du ikke smide dette produkt eller batterier i den normale husholdningsaffaldsspand, men tag det med hen til et opsamlingssted for genbrug af elektronisk udstyr. Forkert bortskaffelse kan forårsage, at skadelige toksiner opbygges i luften, vand og jord og dette kan være skadeligt for menneskets sundhed.

Bemærk: Bortskaf pudder og alkoholservietter i en passende beholder eller affaldsspand.

## Licensoplysninger



Modius® bruger Bluetooth

## Vilkår og betingelser

For yderligere information gå til [www.modiushealth.com/termsandconditions](http://www.modiushealth.com/termsandconditions)

## 9. Kontakt

[www.modiushealth.com](http://www.modiushealth.com)  
[team@modiushealth.com](mailto:team@modiushealth.com)  
[support.modiushealth.com](http://support.modiushealth.com)



Fremstillet af Neurovalens, 4th Floor, The Warehouse, 7 James Street South, Belfast BT2 8DN.

© 2018 Neurovalens