

MODIUS®

Kasutusjuhend

v1.0

Modius® on revolutsiooniline uus hooldustehnoloogia, mis aitab saavutada saledama keha.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud:

- Ärge kasutage seda toodet, kui teil on epilepsia või kui kasutate südamestimulaatorit.
- Hoidke seda toodet lastele kättesaamatult. Väiksed detailid, nagu elektroodipadjakesed, hõlmavad lämbumisohtu.
- Hoiatus: seda seadet pole lubatud muuta.
- Enne peaseadme Modius® kasutamist järgige kõiki hoiatusi ja ettevaatusabinõusid, mis on antud selle kasutusjuhendi osas Ohutushoiatused ja ettevaatusabinõud

Sisukord

1. Süsteemi Modius® tutvustus.....	2
2. Modius®-e komplekt – sisu	2
3. Alustamine... ..	2
4. Peaseadme Modius® kasutamine	4
5. Veotsing	6
6. Seadme Modius® eest hoolitsemine	7
7. Üldine tooteteave ja tehnilised andmed	8
8. Regulaatiivsed ja ohutusalsed teated.....	10
9. Kontaktandmed	12

1. Süsteemi Modius® tutvustus

Aitäh Modius®-e ostmise eest, õnnitleme esimese sammu puhul saleduse suunas!

Modius® on nahakaudse neurostimulatsiooni peaseade. Tegemist on patarei toitel töötava peaseadmega, mis on mõeldud nõrga energia edastamiseks närve stimuleeriva laine kujul, mis stimuleerib vestibulaarse kraniálnärvi aktiivsust. Selle laine (voolu) edastamine toimub kahe kleepuva elektrodipadja kaudu. Need padjad asetatakse nahale kummagi nibujätke kohal olevale nahale (kõrvade taha). Sisselülitatult edastab toode väikest elektriimpulssi, mida kasutaja saab tugevamaks või nõrgemaks reguleerida.

Kui impulss on reguleeritud tasemeni, kus kasutaja tajub talutavat, mugavat, veidi õõtsuvat tunnet, peaks Modius®-e peaseadme edastatav stimulatsioon jääma ideaaljuhul sellele tasemele kogu sessiooni ajaks (1 tunniks). Modius®-e rakenduse abil saab teha veel reguleerimisi. Seadet saab rakenduse kaudu ka peatada, vajutades pausi ikooni, või vahelduvalt peatada, vajutades peaseadmel kaks korda järjest kiiresti toitenuppu. Lõpetamisel eemaldab kasutaja peaseadme ja viskab elektrodipadjad pärast iga kasutuskorda ära. Kui toodet ei kasutata, saab seda mikro-USB-kaabli kaudu laadida. Ohutuse huvides on olemas tarkvaranupud, mis ei lase seadmel elektrilist stimulatsiooni edastada, kui see on aku laadimiseks mikro-USB-kaabliga ühendatud.

Soovituslik kasutus on 1 tund päevas. Peaseade Modius® lõpetab automaatselt stimuleerimise, kui kasutaja saavutab ühe tunni päevas. Kasutaja ei saa seadet 16 tunni jooksul uuesti kasutada. See tagab vajaduse korral mõningase stimulatsiooniprotseduuride paindlikkuse. Peaseade Modius® on mõeldud kasutamiseks igauhele vanuses üle 18 eluaasta kodukeskkonnas.

2. Modius®-e komplekt – sisu

1. Modius®-e peaseade
2. Modius®-e kasutusjuhend
3. USB-laadimiskaabel ja laadija
4. 150 elektroodi geelpatja, 100 alkoholilappi.

Märkus. Seadmed, mida peaseadme Modius® kasutamiseks samuti vaja läheb, kuid mis komplekti ei kuulu: mobiilne seade, st nutitelefoni või tahvelarvuti operatsioonisüsteemiga Android 5.0 või uuemaga või iOS 9 või uuemaga.

3. Alustamine...

Peaseadme Modius® laadimine

- Ühendage peaseadmega Modius® kaasas olev USB-toitekaabel USB-pistikuadapteriga (kuulub komplekti) ja ühendage kaabel peaseadmega.
- Kui peaseade laeb edukalt, siis põleb LED-näidikus ühtlane oranž tuli.
- Kui peaseade on täis laetud, lülitub oranž näidik välja.
- Kui ühendate toitejuhtme peaseadmega ja LED-näidikus vilgub oranž tuli, siis on peaseadmel laadimistõrge (vt jaotist „Veotsing”).
- Kui aku on tühi, siis vilgub oranž tuli 3 välgatuse kaupa. Kõlab ka 3 piiksuga helimärguanne. Kui näete neid tühja aku märguandeid, siis tähendab see, et enne peaseadme väljalülitumist on jäänud kuni 60 minutit stimulatsiooni.

MÄRKUS: Palun jälgige, et ühendate laadimisjuhtme lahti, enne kui üritate oma peaseadet kasutada. Jätke kindlasti USB-laadijale piisavalt ruumi, et selle saaks peaseadme ja toiteallika küljest ohutult eemaldada.

Peaseadme sidumine Bluetooth-seadmega

- Enne alustamist kindlustage, et:
 - Teie peaseade on laetud (vt jaotist „Peaseadme Modius® laadimine”) ja laadimiskaabel on lahti võetud.
 - Juhtmeta Bluetooth-tehnoloogia on teie mobiilsel seadmel aktiivne.

Laadige Apple'i App Store'ist või Google Playst alla rakendus Modius® ja läbige registreerimisprotsess.

- Siis, kui peaseade on välja lülitatud:
 - o Vajutage peaseadme küljel olevat toitenuppu ja hoidke seda 2 sekundit all
 - o Kuulete kõrget piiksu, toitenupp vilgub valgelt. Sinine LED-märgutuli vilgub perioodiliselt, näidates, et peakomplekt on sidumiseks valmis.
- Käivitage rakendus Modius® oma mobiilsel seadmel, rakendus hakkab teie peaseadet skannima.
- Kui peaseade loob rakendusega ühenduse, kuulete piiksu ja LED-märgutuli vilgub siniselt. Nii annab peaseade märku, et mobiilne seade soovib end sellega siduda.
- Klõpsake üks kord peaseadme toitenuppu paaristamise aktsepteerimiseks.
- Mobiilsel seadmel esitatakse teile märguanne, mis ütleb, et peaseade soovib end teie seadmega siduda. Nõustuge sidumisega, peaseade piiksub kaks korda, kinnitades sidumise.
- Paaristamise teostamine võib võtta umbes 10 sekundit.
- Kui sidumine on lõppenud, muutub rakenduse ekraan, näidates teile töölauda ja kasutaja juhtelemente peaseadme juhtimiseks.

4. Peaseadme Modius® kasutamine


Soovitatav kasutus

Soovituslik kasutamine on kuni 1 tund päevas. Ohutusfunktsioonina lõpetab Modius® automaatselt stimuleerimise, kui ületate 1-tunnise kasutuse päevas. Uut sessiooni saate alustada pärast 16 tundi möödumist, see annab teie kasutusrutiinile pändlikkust.

Märkus. Vaadake toote ohutuse kohta lisateabe saamiseks jaotist „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“.

Kuidas peaseadet kanda

- Kasutage alkoholiga immutatud lapse nibujätkete kõrvataguse kõva luuga ala naha puhastamiseks.
- Eemaldage geelpadjakestelt kaitsev plastkate.
Lükake juuksed paigalduskohast ära ja asetage geelpadjad puhtale nahale nibujätkete piirkonnas.
- Pange peaseade pähe nii, nagu on näidatud *joonisel 1*, ja reguleerige toitenupp parema kõrva kohale.
- Kinnitage Modius®-e kaabli nupud kummagi kõrva taga geelpadja külge.

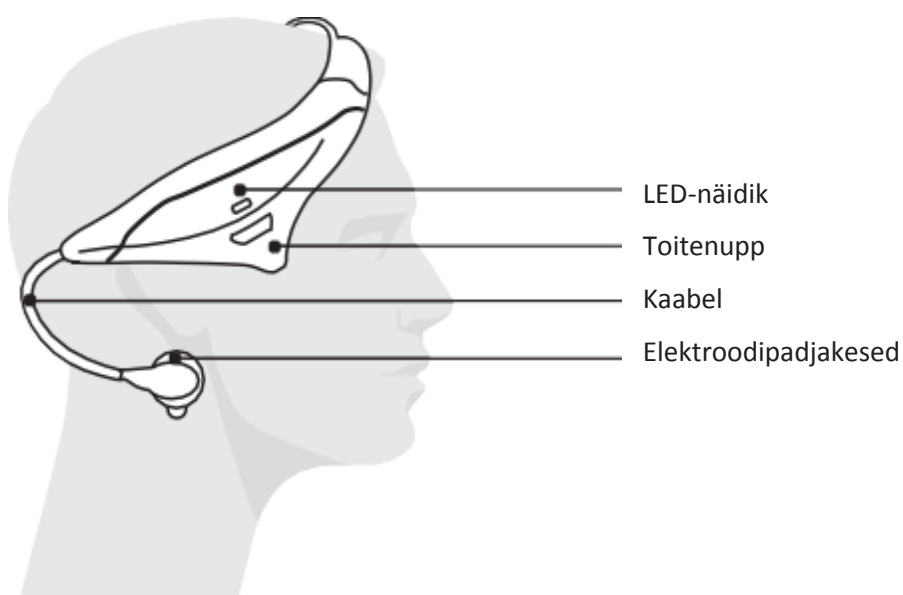

Joonis 1

Peaseadme sisselülitamine ja uue sessiooni alustamine

- Kindlustage, et
 - o Peaseade on laetud ja teie mobiilse seadmega seotud.
 - o peaseade on asetatud mugavalt pea peale ja elektroodid on kinnitatud vastavalt juhenditele.
- Lülitage peaseade sisse, vajutades toitenuppu 2 sekundit. Kuulete kõrget piiksu ja valge LED hakkab perioodiliselt vilkuma.
- Käivitage rakendus Modius® ja minge vahekaardile Dashboard (Töölaud).
- Klõpsake ekraaninuppu Start – teie stimulatsioon ja sessioon algavad
- 60 minuti pärast kuulete 3 lühikest kõrget piiksu ja valge LED-märgutuli vilgub korduvalt 3-kaupa. Nüüd on sessioon lõppenud.

Stimulatsioonitaseme reguleerimine

- Minge rakenduses Modius® vahekaardile Dashboard (Töölaud).
- Stimulatsioonitaset saab reguleerida ekraaninuppudega, seda saab reguleerida üles (Λ) või alla (V)
- Iga kord, kui stimulatsioonitaset reguleerite, teeb peakomplekt piiksu, mis näitab, et stimulatsioonitaset on muudetud.
- Peaseadme maksimaalne võimsustase on 10; kui te püüate võimsustaset veelgi suurendada, siis kuulete 2 kõrgetoonilist piiksu, mis näitab, et olete maksimaalse võimsustaseme juures.
- Peaseadme minimaalne võimsustase on 1; kui te võimsustaset veelgi vähendate, siis kuulete 2 madalatoonilist piiksu, mis näitab, et peatase enam ei stimuleeri ja on tasemel „0“, põhimõtteliselt ooterežiimil.

* Kui tunnete sessiooni ajal mistahes ebamugavust, siis peatage sessioon ja vähendage enne jätkamist intensiivsust. Lisateavet vaadake täiendavatest hoiatustest ja ettevaatusabinõudest.

Peaseadme Modius® lähtestamine

Mõnikord, kui esineb probleeme, võib olla vajalik peaseadme lähtestamine. Kui teil on vaja oma peaseade lähtestada, siis järgige alltoodud juhendeid.

MÄRKUS: Peaseadme lähtestamine võib põhjustada rakendusega sünkroniseerimata andmete kaotamist.

- Ühendage peaseade Modius® kaasas oleva toitekaabli ja USB-laadijaga
- Veenduge, et oranž LED põleks (see näitab, et peaseade laeb)
- Hoide peaseadme küljel asuvat toitenuppu alla rohkem kui 10 sekundit, kuni kõlab 3 pikka piiksu.
- Peaseade on nüüd lähtestatud, võtke pistik pesast välja. Nüüd peaks olema seda võimalik tavalisel viisil edasi kasutada.

Peaseadme välja lülitamine

- Kasutamise ajal või siis, kui peaseade on ooterežiimil ja kasutusvalmis, vajutage peaseadme küljel asuvat nuppu vähemalt 2 sekundit.
- Kuulete madalatoonilist piiksu, mis näitab, et peaseade on välja lülitatud, ja 10 sekundi pärast hakkab rakendus uuesti peaseadet otsima.
- Laadige oma peaseade pärast iga kasutust, nii et see on järgmiseks sessiooniks valmis.

5. Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Mu peaseade lülitub sisse, kuid ei lase mul sessiooni alustada.	Peaseade on ühendatud laadimisjuhtmega.	Ühendage juhe lahti, enne kui üritate sessiooni alustada.
Mu peaseade ei lülitu sisse.	Peaseade ei ole laetud.	Ühendage peaseade laadimisjuhtmega.
	Peaseade on läinud sügavasse puhkerežiimi.	Ühendage peaseade laadimisjuhtmega ja püüdke seade sisse lülitada.
Mu peaseade töötab natuke aega ja siis lülitab end ise välja.	Padjakeste vahel on liiga suur takistus.	Jälgige, et kasutate alkoholilappe enne geelpadjakeste nahale kinnitamist, et padjakesed on asetatud õigesti kõrva taha ja et padjakeste ja naha vahel ei ole juuksekarvu.
	Elektroodide külge kinnitatud padjakesed on kulunud.	Asendage peaseadme geelpadjakesed.
Mu peaseade ei saa mu mobiiltelefoniga ühendust.	Teie mobiiltelefonis ei ole Bluetoothile luba antud.	Kontrollige, et teie seadmes oleks Bluetooth® võimaldatud.
	Teie mobiiltelefonis tekib probleem peaseadme otsimisel.	Tehke oma mobiiltelefonis rakendusele taaskäivitus.
Paaristamise ajal kuulen ma kolme lühikest madalatoonilist piiksu ja LED-näidik vilgub 3 korda siniselt.	Peaseade on ühenduse katkestanud, oodates, et aktsepteeriks teie mobiiltelefoni paaristamispalvet.	Lülitage peaseade välja ja proovige uuesti paaristada, järgides juhendeid jaotises „Peaseadme paaristamine mobiiltelefoniga“.
Ma tunnen peaseadet kasutades ebamugavust.	Seadme võimsustase võib olla liiga kõrge.	Vähendage peaseadme võimsustaset, kasutades rakendust, kuni tunnete õrnalt kiigutavat tunnet või kuni ebamugavustunne vaibub.

Kui ma ühendan peaseadme laadijaga, siis LED-näidik vilgub oranžilt.	Peaseadmes esineb laadimisviga.	Püüdke ühendada laadimisjuhe erineva USB-pistikuga; kui see probleemi ei lahenda, siis võtke ühendust tugiteenusega.
Mu peaseadmel olev LED-näidik vilgub oranžilt ja ma kuulen 3 lühikest madalatoonilist piiksu.	Peaseadme patarei on tühjaks saamas.	Laadige peaseadet (Vt jaotist „Peaseadme Modius® laadimine”)
Kui ma püüan peaseadet sisse lülitada, kuulen 3 madalatoonilist piiksu.	Peaseadme patarei on kriitilises seisus.	Laadige peaseadet (Vt jaotist „Peaseadme Modius® laadimine”)

6. Seadme Modius® eest hoolitsemine

Peaseade

- Asetage elektroodidega geelpadjakesed ainult kõrvade taga asuvatele nibujätketele, nagu suunavad kaasasolevad juhendid. Ärge asetage rinnale ega kuhugi pea ega kaela peale. Vt jaotist „Kuidas peaseadet kanda”.
- Kasutage ainult istudes või lamades.
- Hoidke seda toodet lastele kättesaamatult. Seda toodet ei tohiks kasutada ükski alla 18 aasta vana isik.
- Pühkige puhtaks pehme lapiga.
- Lülitage peaseade pärast kasutamist välja.
- Pärast kasutamist laadige peaseade täielikult, enne kui selle tagasi tema karpi panete.
- Ärge kasutage tugevalt abrasiivseid või kangeid pesuaineid.
- Vältige peaseadme märjaks saamist.
- Ärge asetage seda ühegi vedeliku sisse.
- Ärge jätke tugeva päikesevalguse kätte.
- Ärge jätke peaseadet Modius® olukorda, kus peavõrre rakenduks surve või see oleks välja venitatud. See võib mõjutada teie peas istumise mugavust ja ohutust.

Geelpadjakesed

- Lükake eemale kõik juukseahlad, enne kui kinnitate geelpadjakesed puhtale nahale, kuna muidu võivad need padjakeste külge kleepuda.
 - Jälgige, et nahk oleks enne padjakeste kasutamist puhas ja ilma meigi, kreemide ja muude ihupiimadeta.
 - Enne padjakeste käsitlemist peske käsi ja vältige nende puudutamist sõrmedega nii palju kui võimalik.
- Visake padjakesed pärast kasutamist sobivasse mahutisse või prügikasti.
- Ärge jagage oma geelpadjakesi kellegi teisega. Padjakesed on üksnes ühe inimese kasutuseks.
 - Ärge kasutage padjakest kauem, kui on soovituslik 60 minutit ühe sessiooni kohta.

7. Üldine tooteteave ja tehnilised andmed

Tehnilised andmed: Peaseade Modius®

Toiteandmed	
Patarei tööiga	Umbes 10 h stimuleerimisel tasemel 10 – umbes 4 või 5 päeva tavakasutusel
Sisendpistik	Täielikult isoleeritud puutekindel mikro-USB
Kaal	85g
Suurus	180x140x70mm
Teave toite sisendi kohta	
Mikro-USB-port (kõik USB-pordid või USB-laadija peavad olema kooskõlas standardiga EN/IEC 60601-1, et tagada pidev ohutus; peaseadme Modius® laadimiseks tohib kasutada ainult kaasas olevat laadijat) Pinge: 4.75 – 5.25V maksimaalne voolutugevus 155 mA DC	
Maksimaalne väljundpinge Maksimaalne väljundvool	20V 600uA.
Bluetooth BLE - BGM113	
Töötamise sagedusriba	2,4 GHz Bluetoothi energiasäästliku funktsionaalsuse jaoks
Maksimaalne edastatav raadiosageduslik võimsus	+3 dBm
Aku (kasutaja ei saa akut vahetada) liitiumpolümeer 4,2 V 155 mAh	
Kasutuskeskkonna tingimused	
Keskkond	Isiklik kasutus kodus
Temperatuurivahemik	0–40 °C
Veekindlus	0m
Müratase	0dB
Hoiustamistingimused	
Temperatuurivahemik	0 kuni 40 °C
Suhteline niiskus	< 95%
Oodatav tööaeg	Seadmel on garanteeritud 1 aasta, kuid peab sageli kauem vastu. Tarvikud (juhtmed, padjakesed ja lepid) ei käi garantii alla. <ul style="list-style-type: none">• Juhtme tööaeg sõltub suuresti kasutusest. Käsitsege juhtmeid alati hoolikalt.• Elektroodipadjakesed kestavad vaid ühe rakenduskorra; aegumise osas vaadake palun tootja teavet.• Lappide osas vaadake aegumise kohta tootja pakendit.
Säilivusaeg	<ul style="list-style-type: none">• Peaseadmel ei ole fikseeritud säilivusaega.• Tarvikute (juhtmed, padjakesed ja lepid) säilivusaega vaadake palun tootja teabest.

Sümbol















Teave

Lisateabe saamiseks vaadake palun lisasümboleid ja kasutusjuhendit.

SN

Seerianumber toote sildil toote identifitseerimiseks

	Järgige kasutusjuhendit (kasutatakse kooskõlas standardiga EN/IEC 60601-1)
5.0v 	Alalisvool Näidatud pingega alalisvool.
	BF-tüüpi rakendusosa
	Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud
	Seade pole veekindel. Kaitske niiskuse eest
	Esemete arv pakis
 40 0	Hoiutingimused: 0–40 °C
 95 0	Suhteline niiskus: < 95%
	Kaitsemaandus
	Ärge kasutage, kui teil on südamestimulaator
 IPOX	Puudub kaitse esemetega kokkupuutumise ja sissetungi eest ja puudub kaitse vedeliku sissetungi eest
	Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendit. Kui kasutusjuhendit ei järgita (nt elektroode ei paigutata õigesti kohta), võib kasutaja viga saada.

kulukaubad (elektroodipadjakesed, lapid)

Kasutage ainult pakis kaasasolevaid kulukaupu või neid, mida soovib Neurovalens. Lugege toote pakendil olevaid tootja juhiseid.

Tagastus- ja garantiipõhimõtted

Lisateabe saamiseks minge aadressile www.modiushealth.com/returnsandwarranty

8. Regulatiivsed ja ohutusalsed teated

Vastavusdeklaratsioon – mudeli nimi: ML600

Käesolevaga deklareerib Neruovalens, et see toode on kooskõlas direktiivide – üldise tooteohutuse direktiiv 2001/95/EÜ ja raadioseadmete direktiiv 2014/53 EL – põhinõuete ja muude asjakohaste sätetega. Täieliku vastavusdeklaratsiooni vaatamiseks minige aadressile www.modiushealth.com/compliance.

Modius®-e peaseade on mõeldud mittepidevaks kasutamiseks. Modius® koos selle juurde kuuluva USB-laadijaga vastab elektriohutusstandardile EN/IEC 60601-1 ja on liigitatud meditsiinisüsteemiks (ME SYSTEM).

Kõiki rakendusosi käsitletakse BF-klassi osadena. Peaseadme IP-klass on null. See tähendab et kaitset esemetega kokkupuute ja esemete sissetungimise eest ei ole, samuti puudub kaitse vedelike sissetungimise eest.



Sisaldab FCC ID-d: QOQBGM113

See seade on vastavuses FCC (USA föderaalne sideamet) reeglite 15. osaga. Käitamisele kehtivad järgmised kaks tingimust:

1. See seade ei või põhjustada kahjustavaid sidehäireid ja

2. See seade peab aktsepteerima mistahes vastuvõetud häireid, kaasa arvatud selliseid,

mis võivad põhjustada soovimatul moel töötamist.



Modius® vastab kehtivatele raadioseadmete direktiivi 2014/53 EL põhinõuetele.



Modius® vastab Austraalia ja Uus-Meremaa elektromagnetilise ühilduvuse standarditele.

Meditsiineseadmeid reguleerivad asutused riikides, kus peaseadet Modius® praegu müüakse, käsitlevad seadet Modius® üldise heaolu vahendina ega kohalda sellele seetõttu meditsiineseadmete regulatiivnõudeid.

Sertifitseerinud Silicon Labs

FCC ID:

IC ID:

FCC-15C

QOQBGM113

5123A-BGM113

Ohutusalsane avaldus

Selle seadme puhul on katsetatud vastavust elektromagnetilise ühilduvuse ja ohutussertifikaadi nõuetele vastavalt spetsifikatsioonidele järgmistes EN-standardites: EN301489-3, EN301489-17 ja EN 60950-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 ja IEC 60601-1-11.

Modius® on katsetatud ja see vastab raadiosagedushäirete suhtes immuunsuse tunnustatud standarditele töösagedusel 2,4 GHz.

Märkus. Modius®-t tohivad kasutada üksnes üle 18 aasta vanad täiskasvanud abivahendina kaalu langetamisel ja kaalujälgimise eesmärkide saavutamisel.

Ohutusalsed hoiatused ja ettevaatusabinõud – peaseade

Hoiatused ja ettevaatusabinõud:

Enne Modius®-e peaseadme kasutamist vaadake kaasasolevat teavet ja õpetusi.

Asetage elektrodidega geelpadjakesed ainult kõrvade taga asuvatele oimuloo nibujätkele, nagu suunavad kaasasolevad juhendid. Ärge asetage rinnale ega kuhugi pea ega kaela peale.

Ärge kasutage siis, kui olete rase, teil on vestibulaarse stimulatsiooni vallandatav refleksiivne epilepsia või südamerütmiseade.

Ootamatute reaktsioonide esinemisel tuleb Modius®-e kasutamine kohe katkestada.

- Asetage elektrodidega geelpadjakesed ainult kõrvade taga asuvatele nibujätkele, nagu suunavad kaasasolevad juhendid. Ärge asetage rinnale ega kuhugi pea ega kaela peale. Vt jaotist „Kuidas peaseadet kanda”.
- Kasutage ainult istudes või lamades.
- Hoidke seda toodet lastele kättesaamatult. Seda toodet ei tohiks kasutada ükski alla 18 aasta vana isik. Väiksed detailid, nagu elektrodipadjakesed, hõlmavad lämbumisohtu.
- Laadige peaseadet hästi ventileeritud kohas, aku laadimise ajal võib tekkida gaase, seega on vajalik laadimine hästi ventileeritud kohas.

- Ärge kasutage siis, kui olete rase, teil on vestibulaarse stimulatsiooni vallandatav refleksiivne epilepsia või siirdatud südamerütmiseade, südamedefibrillaator või neurostimulatsiooniseade. Märkus. Modius® stimuleerib aju vestibulaarsüsteemi (tasakaalusüsteemi). Kuigi see ei peaks mõjutama enamikku epilepsiat põdevaid inimesi, võib see vallandada haigushoo mõnel refleksiivse vestibulaarse epilepsiaga inimesel. Kahtluse korral peaksid epilepsiat põdevad potentsiaalsed kasutajad kõigepealt asjast oma perearstiga rääkima.
- Ärge kasutage liikumise ajal, kuna see võib mõjutada teie tasakaalutaju.
- Ärge kasutage ajal, mil tarbite alkoholi, sõidate või käitate mistahes laadi masinaid.
- Ärge kasutage märgades keskkondades ega asetage peaseadet vette.
- Ärge jagage oma geelpadjakesi kellegi teisega. Need on üksnes ühe inimese kasutuseks.
- Ärge kasutage padjakest kauem, kui on soovituslik 60 minutit ühe sessiooni kohta.
- Pärast iga kasutamist on soovitatav padjake ära visata. Sama padjakese pikendatud või korduv kasutamine vähendab selle tõhusust või võib põhjustada nahaärritust.
- Ärge asetage padjakesi katkisele või ärritunud nahale.
- Pärast kasutamist eemaldage padjakesed ettevaatlikult nahalt. Visake padjakesed sobivasse mahutisse või prügikasti.
- Ärge üritage patareisid eemaldada. Kasutaja ei saa neid asendada.

Märkus.

• See peaseade ei ole meditsiiniseade ega asenda tervislikku eluviisi ega professionaalset arstiabi. Ootamatute reaktsioonide esinemisel tuleb Modius®-e kasutamine kohe katkestada. Kui tunnete sessiooni ajal mistahes ebamugavust, siis peatage sessioon ja vähendage enne jätkamist intensiivsust. Võimalike ohtude või kahjulike mõjude hulgas on nahaärritus, stimuleerimise põhjustatud ebamugavustunne, tasakaalutuse tunne, juhutine iiveldustunne ja harva ka oksendamine. Kui pärast 1–2 päeva kasutamist probleem püsib, siis pidage nõu oma arstiga.

Soovitatav kasutamine on maksimum 1 tund päevas. Modius® lõpetab automaatselt stimuleerimise, kui ületate päevas või 16 tunni pikkusel perioodil 1-tunnise kasutusaja, et seda teie eest ei suletaks, kui soovite seadet Modius® mõnel päeval mõni tund varem kasutada.

Lähtestamisõpetusi ei tohi kuritarvitada isikliku päevase kasutuse suurendamiseks.

Lugege ja järgige neid hoiatusi ja juhendeid. Hoidke seda juhendit oma peaseadme juures.

Sisseehitatud patareisid puudutavad ettevaatusabinõud

Teie peaseadmel Modius® on integreeritud aku, mida kasutaja ei saa vahetada. Seadme Modius® kasutajad ei tohiks püüda peaseadme akut vahetada.

Ärge surkige oma toodet ega üritage seda avada, kuna see muudab garantii kehtetuks ja võib kahjustada ohutust.

Laadige peaseadet vastavalt selles juhendis toodud õpetustele, kasutades toitejuhet, mille on sertifitseerinud tunnustatud katselabor.

Ärge püüdke seadet kuidagi teenindada ega hooldada (k.a puhastada või laadida) sel ajal, kui seade on kasutusel.

Kõrvaldamis- ja jäätmekäitlusteave



Direktiivi 2002/96/EÜ üks sätetest ütleb, et kõike elektroonilist tuleb käsitleda elektrooniliste jäätmetena ega tohi minema visata. Selle direktiivi meelde tuletamiseks on kõik selle alla käivad tooted nüüd tähistatud pealetõmmatud ristiga ratastel prügikasti sümboliga, nagu on siin kujutatud.

Toote elutsükli lõppedes ärge visake seda toodet ega patareisid tavaliste olmejäätmete prügikasti, vaid viige see elektrooniliste seadmete ümbertöötamise kogumispunkti. Vale kõrvaldamine võib põhjustada õhus, vees ja pinnases ohtlike mürkide kogunemist ning võib kahjustada inimeste tervist.

Märkus. Visake padjakesed sobivasse mahutisse või prügikasti.

Teave litsentsi kohta



Modius® kasutab Bluetoothi

Tingimused

Lisateavet vaadake aadressil www.modiushealth.com/termsandconditions

9. Kontaktandmed

www.modiushealth.com

team@modiushealth.com

support.modiushealth.com



Valmistanud Neurovalens, 4th Floor, The Warehouse, 7 James Street South, Belfast BT2 8DN.

© 2018 Neurovalens