

MODIUS®

Guide de l'utilisateur

v1.0

Modius® est une nouvelle technologie révolutionnaire careable® qui vous aide à obtenir un corps plus mince.

Mises en garde et précautions :

- N'utilisez pas ce produit si vous êtes épileptique ou si vous portez un cardiostimulateur.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants. Les petits objets, comme les poches à électrodes, présentent un risque d'étouffement.
- Mise en garde : Aucune modification de cet équipement n'est permise.
- Veuillez adhérer à toutes les mises en garde et précautions décrites à la section Mises en garde et précautions de sécurité de ce Guide de l'utilisateur avant d'utiliser le casque de Modius®.

Sommaire

1. Introduction à Modius®	2
2. Paquet de Modius® - contenu	2
3. Pour commencer... ..	2
4. Utilisation de votre casque de Modius®	4
5. Dépannage.....	6
6. Entretien de votre Modius®.....	7
7. Renseignements généraux et caractéristiques techniques du produit	8
8. Avis règlementaire et de sécurité	10
9. Coordonnées.....	12

1. Introduction à Modius®

Merci d'avoir acheté Modius®, félicitations pour avoir entamé votre première étape vers la minceur!

Modius® est un casque transdermique de neurostimulation. Il s'agit d'un casque alimenté par une pile conçu pour fournir de l'énergie à faible dose sous la forme d'une onde de neurostimulation qui stimule l'activité du nerf crânien vestibulaire. Cette forme d'onde (courant) est appliquée à l'aide de deux poches d'électrodes auto-adhésives. Ces poches sont placées sur la peau recouvrant chaque mastoïde (derrière les oreilles). Une fois activé, le produit libère une petite impulsion électrique dont l'utilisateur peut régler l'intensité.

Une fois ajusté à une intensité jugée tolérable par l'utilisateur, une sensation douce et confortable, la stimulation produite par le casque de Modius® devrait idéalement rester à ce niveau pendant toute la durée de la séance (1 heure). D'autres ajustements pourraient être effectués à l'aide de l'application Modius®. L'appareil peut aussi être interrompu temporairement à l'aide de l'application en appuyant sur l'icône Pause ou sinon en appuyant à deux reprises rapprochées sur le bouton d'alimentation du casque. Une fois terminé, l'utilisateur enlève le casque et jette les poches d'électrodes après chaque utilisation. Lorsque le produit n'est pas utilisé, il peut être chargé à l'aide d'un câble micro-USB. Pour des raisons de sécurité, des contrôles logiciels ont été mis en place pour empêcher l'appareil de relâcher une stimulation électrique lorsqu'il est branché dans le câble micro-USB pour charger la pile.

L'utilisation suggérée est de 1 heure par jour, le casque Modius® arrêtera automatiquement la stimulation si l'utilisation atteint une heure par jour. L'utilisateur ne peut pas se servir à nouveau de l'appareil pour une période de 16 heures, ce qui permet une certaine flexibilité aux routines de stimulation au besoin. Le casque Modius® est destiné à une utilisation personnelle pour les personnes de plus de 18 ans.

2. Paquet de Modius® - contenu

1. Casque de Modius®
2. Manuel de l'utilisateur de Modius®
3. Câble USB de chargement et chargeur
4. 150 poches de gel à électrodes et 100 lingettes à l'alcool.

Remarque : Articles requis pour le fonctionnement du casque de Modius® mais non fournis : Appareil mobile, p. ex. téléphone intelligent, tablette, avec système d'exploitation Android 5.0 ou version ultérieure ou iOS 9 ou version ultérieure.

3. Pour commencer...

Chargement de votre casque de Modius®

- Branchez le câble d'alimentation USB fourni avec votre casque de Modius® dans l'adaptateur de la prise USB (fourni) et connectez le câble au casque.
- Si le casque se charge bien, le voyant lumineux DEL s'allumera en orange.
- Une fois le casque est chargé, le voyant lumineux DEL orange s'éteindra.
- Si vous connectez le câble d'alimentation au casque et le voyant lumineux DEL orange clignote, le casque éprouve une erreur de chargement (voir « Dépannage »).
- Lorsque le niveau de la pile est faible, la lumière orange clignotera en séries de 3 répétitions. Il y a aussi un avertissement de 3 signaux sonores. Si vous voyez ces indicateurs de pile faible, cela signifie qu'une stimulation de 60 minutes (max.) est possible avant que le casque s'éteigne.

REMARQUE : Veuillez vous assurer de déconnecter le câble de chargement avant d'essayer d'utiliser votre casque. Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace au chargeur USB pour l'enlever du casque et de la source d'alimentation en toute sécurité.

Appariement de votre casque avec votre appareil Bluetooth

- Avant de commencer, assurez-vous que :
 - Votre casque est chargé (voir « Chargement de votre casque de Modius®), et que le câble a été débranché.
 - La technologie sans-fil Bluetooth est activée sur votre appareil mobile.
- Téléchargez l'application Modius® de l'App Store d'Apple ou de Google Play et continuez le processus d'enregistrement.
- Lorsque le casque est éteint :
 - o Appuyez le bouton d'alimentation sur le côté du casque et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
 - o Vous entendrez un signal sonore aigu, le bouton d'alimentation clignotera en blanc. Un voyant lumineux DEL bleu clignotera de façon périodique pour indiquer que le casque est prêt à l'appariement.
 - Lancez l'application Modius® sur votre appareil mobile, l'application commencera à chercher votre casque.
 - Une fois que le casque se connecte à l'application, vous entendrez un signal sonore et le voyant lumineux DEL clignotera en bleu. Il s'agit du casque qui vous indique que votre appareil mobile a demandé l'appariement.
 - Cliquez une fois sur le bouton d'alimentation du casque pour accepter l'appariement.
 - Sur votre appareil mobile, vous recevrez une notification vous indiquant que le casque souhaite être jumelé à votre appareil. Acceptez l'appariement, le casque émettra un signal sonore à deux reprises pour confirmer le jumelage.
 - Le processus d'appariement pourrait durer environ 10 secondes.
 - Une fois l'appariement effectué, l'écran de l'application changera en affichant « Dashboard » (le tableau de bord) et les contrôles de l'utilisateur pour faire fonctionner votre casque.

4. Utilisation de votre casque de Modius®

Utilisation suggérée

La durée d'utilisation conseillée est d'une heure maximum par jour. Pour des raisons de sécurité, le Modius® arrête automatiquement les stimulations si vous dépassez une heure d'utilisation par jour. Vous pouvez débuter une nouvelle séance au bout de 16 heures d'arrêt afin de vous donner un maximum de flexibilité pour votre utilisation quotidienne.

Remarque : Consultez la section des Mises en garde et précautions pour en savoir plus concernant la sécurité du produit.

Comment porter votre casque

- Servez-vous d'une lingette à l'alcool pour essuyer la peau au niveau de la partie osseuse derrière vos oreilles (mastoïdes).
- Retirez les protections en plastique sur les poches de gel.
Écartez vos cheveux avant de poser les poches de gel sur la peau propre sur vos mastoïdes.
- Mettez le casque sur votre tête comme sur le schéma 1 avec le bouton de marche au-dessus de votre oreille droite.
- Reliez les boutons du câble Modius® aux poches de gel derrière chaque oreille.

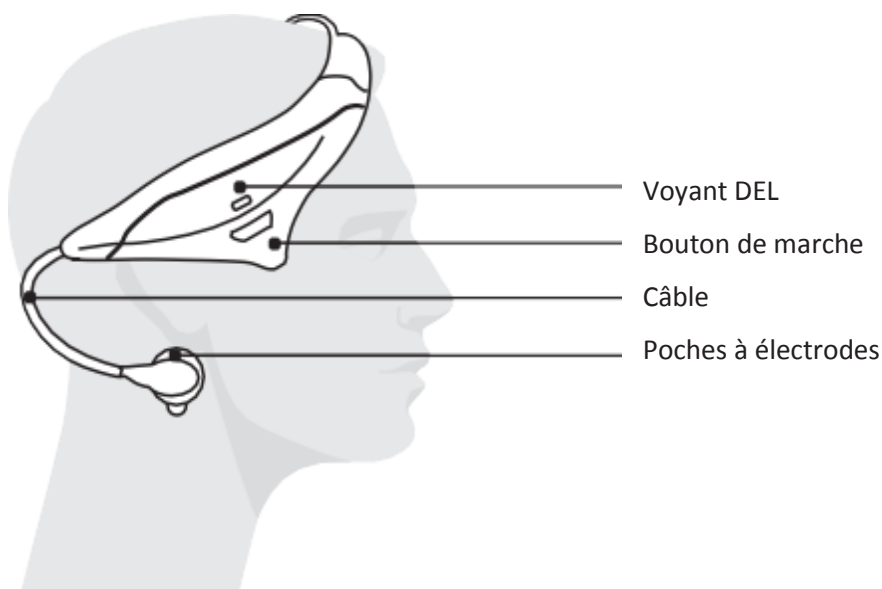


Schéma 1

Activation de votre casque et début d'une nouvelle séance

- Assurez-vous que
 - o Le casque est chargé et apparié avec votre appareil mobile.
 - o Le casque est placé confortablement sur votre tête et les électrodes sont attachées selon les instructions.
- Allumez le casque en appuyant sur le bouton de marche pendant 2 secondes. Vous entendrez un signal sonore aigu et le voyant DEL commencera à clignoter en blanc de façon périodique.
- Lancez l'application Modius® et allez à l'onglet « Dashboard » (Tableau de bord).
- Sur le bouton d'écran, cliquez sur « Start » (Démarrer), cela lancera votre stimulation et votre séance.
- Après 60 minutes d'utilisation, vous entendrez 3 petits signaux sonores aigus et l'indicateur DEL clignotera en blanc en séries de 3 répétitions; votre séance est maintenant terminée.

Ajustement du niveau de stimulation

- Sur l'application Modius®, allez à l'onglet « Dashboard » (Tableau de bord).
- Vous pouvez monter « \wedge » ou réduire « \vee » l'intensité de la stimulation à l'aide des contrôles à l'écran.
- Chaque fois que vous ajustez le niveau de stimulation, le casque émettra un signal sonore pour vous avertir que le niveau de stimulation a changé.
- Le niveau de puissance maximal du casque est de 10, si vous essayez d'augmenter le niveau de puissance encore plus, vous entendrez 2 courts signaux sonores aigus vous indiquant que le niveau de puissance maximal est atteint.
- Le niveau de puissance minimal du casque est de 1, si vous essayez de réduire le niveau de puissance encore plus, vous entendrez 2 courts signaux sonores graves vous indiquant que le casque ne libère plus de stimulation et que le niveau de « 0 » signifie que l'appareil est en attente.

* Si vous ressentez un malaise pendant une séance, mettez-le sur pause et réduisez l'intensité avant de reprendre. Pour en savoir plus, consultez les autres mises en garde et précautions.

Réinitialisation de votre casque de Modius®

Il est parfois nécessaire de réinitialiser votre casque si vous éprouvez des problèmes. Si vous devez réinitialiser votre casque, suivez les instructions ci-dessous.

REMARQUE : La réinitialisation de votre casque pourrait faire en sorte que les données qui n'ont pas été synchronisées avec l'application soient perdues.

- Branchez le casque de Modius® au câble d'alimentation fourni et au chargeur USB.
- Assurez-vous que le voyant lumineux DEL orange est allumé (indiquant que le casque est en cours de chargement).
- Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation sur le côté du casque pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une série de 3 longs signaux sonores.
- Le casque est maintenant réinitialisé, débranchez-le de la source d'alimentation. Vous devriez maintenant pouvoir continuer normalement.

Désactivation de votre casque

- Pendant l'utilisation, ou lorsque le casque est en attente et prêt à être utilisé, appuyez sur le bouton d'alimentation sur le côté du casque pendant au moins 2 secondes.
- Vous entendrez un signal sonore grave indiquant que le casque est éteint, et après 10 secondes, l'application cherchera votre casque.
- Chargez votre casque après chaque utilisation pour être prêt pour votre prochaine séance.

5. Dépannage

Problème	Cause probable	Solution
Mon casque s'active mais ne me laisse pas commencer une séance	Le casque est connecté au câble de chargement	Déconnectez le câble avant d'essayer de commencer une séance
Mon casque ne s'active pas	Le casque n'est pas chargé	Connectez le casque au câble de chargement
	Le casque est dans un état de veille prolongée	Connectez le casque au câble de chargement et essayez de l'activer
Mon casque fonctionne un peu, puis il s'éteint seul	La résistance entre les poches est trop élevée	Assurez-vous d'avoir utilisé les lingettes à l'alcool avant d'appliquer les poches de gel sur votre peau, que les poches sont bien placées correctement derrière vos oreilles et qu'il n'y a pas de cheveux entre les poches et votre peau
	Les poches attachées aux électrodes sont usées	Remplacez les poches de gel du casque
Mon casque ne se connecte pas à mon appareil mobile	Le Bluetooth n'est pas activé sur votre appareil mobile	Assurez-vous que le Bluetooth® a été activé sur votre appareil
	Votre appareil mobile éprouve quelques problèmes en cherchant le casque	Redémarrez l'application sur votre appareil mobile
Lors de l'appariement j'entends 3 courts signaux sonores graves et les voyants lumineux DEL bleus clignotent 3 fois	Le délai d'attente du casque pour l'acceptation de la demande d'appariement de votre appareil mobile est expiré	Désactivez le casque et tentez d'apparier encore en suivant les instructions dans « Appariement de votre casque à votre appareil mobile »
J'éprouve un inconfort lorsque j'utilise le casque	Le niveau de puissance de l'appareil peut être trop élevé	Réduisez l'intensité du casque à l'aide de l'application jusqu'à ce que vous ressentiez une douce sensation ou jusqu'à ce que l'inconfort disparaisse

Lorsque je connecte le casque au chargeur, le voyant lumineux DEL orange clignote	Le casque éprouve une erreur de chargement	Essayez de connecter le câble de chargement dans une autre prise USB, si le problème persiste, veuillez communiquer avec l'assistance
Le voyant lumineux DEL orange de mon casque clignote lorsque j'entends 3 courts signaux graves	La pile du casque est faible	Chargez le casque (Voir « Chargement de votre casque de Modius® »)
Lorsque j'active le casque, j'entends 3 courts signaux graves	La pile du casque est très faible	Chargez le casque (Voir « Chargement de votre casque de Modius® »)

6. Entretien de votre Modius®

Casque

- Appliquez les poches sur les mastoïdes uniquement, à savoir la zone osseuse derrière l'oreille, comme indiqué dans les instructions ci-dessus. Ne les placez pas sur votre poitrine ou à d'autres endroits de la tête ou du cou. Voir « Comment porter votre casque ».
- Utilisez uniquement en position assise ou couchée.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants. Toute personne de moins de 18 ans ne devrait jamais utiliser ce produit.
- Essayez à l'aide d'un linge doux.
- Désactivez le casque après l'utilisation.
- Chargez complètement le casque avant de le replacer dans son étui après chaque utilisation.
- N'utilisez pas de produits abrasifs ou de détergents agressifs.
- Évitez de mouiller le casque.
- Ne l'immergez pas dans un liquide.
- Ne l'exposez pas à la lumière du soleil de façon excessive.
- N'écrasez pas ou n'étirez pas le bandeau de votre casque de Modius®. Cela affecterait le confort et la sécurité de votre tête.

Poches de gel

- Écartez vos cheveux avant de poser les poches de gel sur la peau propre, sinon ils pourraient se coller aux poches.
 - Assurez-vous que votre peau est propre et dépourvue de maquillage, de crème et d'autres lotions avant d'utiliser les poches.
 - Lavez-vous les mains avant de manipuler les poches et évitez de les toucher à l'aide de vos doigts le plus souvent possible.
- Jetez les poches dans un contenant ou une poubelle approprié(e) après utilisation.
- Ne partagez pas vos poches de gel avec d'autres personnes. Les poches sont réservées à un usage personnel uniquement.
 - N'utilisez pas les poches pendant plus de 60 minutes par séance, tel que suggéré.

7. Renseignements généraux et caractéristiques techniques du produit

Caractéristiques techniques : Casque de Modius®











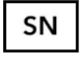


Caractéristiques de puissance	
Durée de vie de la pile	Environ 10 h au niveau de 10 stimulations, environ 4 ou 5 jours d'utilisation minimale
Prise d'entrée	Micro USB entièrement isolé à l'épreuve du contact
Poids	85 g
Taille	180 x 140 x 70 mm
Renseignements sur l'entrée de la prise d'alimentation	
Port micro USB (tout port USB ou chargeur USB doit être certifié selon la norme EN/IEC 60601-1 pour assurer une sécurité continue, seul le chargeur fourni avec le produit devrait être utilisé pour charger le casque de Modius®) Tension : 4,75 à 5,25 V Courant max. 155 mA c.c.	
Tension de sortie maximale Courant de sortie maximal	20 V 600 uA.
Bluetooth BLE - BGM113	
Bande de fréquence opérationnelle	2,4 GHz pour la fonction à faible énergie de Bluetooth
Puissance RF maximale émise	+3 dBm
Pile (la pile n'est pas remplaçable par l'utilisateur) Lithium polymère 4,2 V 155 mAh	
Conditions environnementales d'exploitation	
Environnement	Utilisation personnelle à domicile
Plage de températures	0°C à 40°C
Résistance à l'eau	0 m
Niveau de bruit	0 dB
Conditions environnementales d'entreposage	
Plage de températures	0°C à 40°C
Humidité relative	< 95 %
Durée de service prévue	L'appareil est garanti pour 1 an mais devrait durer plus longtemps. Les accessoires (fils, poches et lingettes) ne sont pas couverts par la garantie <ul style="list-style-type: none"> • La durée de vie des fils dépend grandement de l'utilisation. Manipulez toujours les fils avec soin • Les poches à électrodes ne durent que pour 1 application, et veuillez consulter les renseignements du fabricant pour connaître la date d'expiration. • Pour les lingettes, veuillez consulter les renseignements du fabricant pour connaître la date d'expiration.
Durée de conservation	<ul style="list-style-type: none"> • Le casque n'a pas de durée de conservation déterminée • Veuillez consulter les renseignements du fabricant pour connaître la durée de conservation des accessoires (poches, fils et lingettes)

Symbole

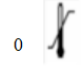

Renseignements

Veuillez vous référer aux autres symboles et consultez le guide de l'utilisateur pour en savoir plus

	Numéro de série sur l'étiquette de produit pour identifier le produit
	Suivez les instructions d'utilisation (conformes à la norme EN/IEC 60601-1)
5.0v 	Courant continu Courant continu électrique selon la tension indiquée.
	Pièces appliquées de type BF
	N'utilisez pas si l'emballage est endommagé
	L'unité ne résiste pas à l'eau. Protégez de l'humidité
	Nombre d'articles par paquet
	Conditions d'entreposage : 0 à 40 degrés Celsius
	Humidité relative : < 95 %
	Conducteur de protection (masse)
	N'utilisez pas si un cardiostimulateur est en place
	Aucune protection n'existe contre le contact et la pénétration d'objets solides et contre l'intrusion d'eau
	Veillez vous référer aux instructions d'utilisation avant d'utiliser cet appareil, à défaut de suivre les instructions (p. ex. placement des électrodes au bon endroit), l'utilisateur pourrait se blesser

Consommables (poches à électrodes et lingettes)

Utilisez les consommables fournis dans le paquet uniquement ou ceux qui sont suggérés par Neurovalens. Consultez les instructions détaillées du fabricant sur l'emballage du produit.

Politique de retour et garantie

Pour en savoir plus, allez sur www.modiushealth.com/returnsandwarranty

8. Avis réglementaire et de sécurité

Déclaration de conformité - nom du modèle : ML600

Neurovalens déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives, de la Directive 2001/95/EC de la sécurité générale du produit et la Directive 2014/53/EU des équipements radio Pour voir l'intégralité de la déclaration de conformité, allez sur www.modiushealth.com/compliance.

Le casque Modius® est classé dans la catégorie des produits à fonctionnement non continu. Le Modius®, ainsi que le chargeur USB fourni conformément aux normes électriques EN/IEC 60601-1, est considéré comme un dispositif médical (ME SYSTEM).

Les pièces appliquées sont considérées comme étant de type BF. L'évaluation de l'IP du produit est de zéro. Ce qui signifie qu'il n'y a aucune protection contre le contact et la pénétration d'objets solides et contre l'intrusion d'eau.



Contient FCC ID : QOQBGM113

Cet appareil est conforme à la Partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible, et

2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.



Modius® est conforme aux normes essentielles applicables de la Directive 2014/53/EU des équipements radio.



Modius® est conforme aux normes EMC sur le marché australien et néo-zélandais.

Les organismes de réglementation des appareils médicaux dans les pays vendant le Modius® considèrent le Modius® comme un dispositif de bien-être général et n'appliquent donc aucune exigence réglementaire relative aux dispositifs médicaux.

Certifié par Silicon Labs

ID FCC :

ID IC :

FCC-15C

QOQBGM113

5123A-BGM113

Énoncé sur la sécurité

Cet équipement a été considéré comme étant conforme à la certification sur la compatibilité et la sécurité électromagnétique selon les exigences des normes EN : EN301489-3, EN301489-17, EN 60950-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 et IEC 60601-1-11.

Le Modius® a été testé et respecte les normes reconnues d'immunité aux interférences des fréquences radio sur la plage de fréquences de fonctionnement de 2,4 GHz.

Remarque : Le Modius® est indiqué uniquement pour aider les adultes de plus de 18 ans à atteindre leurs objectifs de contrôle de poids.

Mises en garde et précautions de sécurité - casque



Mises en garde et précautions :

Référez-vous aux renseignements et aux instructions fournis avant d'utiliser le casque de Modius®. Placez les poches de gel avec électrodes sur les mastoïdes derrière les oreilles uniquement, comme indiqué dans le manuel fourni. Ne les placez pas sur votre poitrine ou à d'autres endroits de la tête ou du cou. N'utilisez pas si vous êtes enceinte, si vous avez un réflexe d'épilepsie déclenché par une stimulation vestibulaire ou si vous portez un cardiostimulateur. Arrêtez d'utiliser le Modius® immédiatement en cas de survenue d'effets indésirables.

- Appliquez les poches sur les mastoïdes uniquement, à savoir la zone osseuse derrière l'oreille, comme indiqué dans les instructions ci-dessus. Ne les placez pas sur votre poitrine ou à d'autres endroits de la tête ou du cou. Voir « Comment porter votre casque ».
- Utilisez uniquement en position assise ou couchée.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants. Toute personne de moins de 18 ans ne devrait jamais utiliser ce produit. Les petits objets, comme les poches à électrodes, présentent un risque d'étouffement.
- Chargez le casque dans un endroit bien aéré, car certains gaz pourraient être produits lors du chargement de la pile.

- N'utilisez pas si vous êtes enceinte, si vous avez un réflexe d'épilepsie déclenché par une stimulation vestibulaire ou si vous portez un cardiostimulateur, un défibrillateur cardiaque ou un appareil de neurostimulation. Remarque : Modius® stimule le système vestibulaire du cerveau (équilibre). Alors, bien que la plupart des gens souffrant d'épilepsie ne devraient pas en être affectés, cela pourrait déclencher des crises pour les gens ayant un réflexe d'épilepsie vestibulaire. En cas de doute, les utilisateurs potentiels souffrant d'épilepsie devraient d'abord aborder le sujet avec leurs médecins de famille.
- Ne pas utiliser en se déplaçant (en mouvement) car il peut provoquer un déséquilibre.
- Ne pas utiliser en consommant de l'alcool, en conduisant ou en manipulant des machines de tous genres.
- Ne pas utiliser dans un environnement humide ou ne pas immerger le casque dans l'eau.
- Ne pas partager vos poches de gel avec d'autres personnes. Elles sont réservées à un usage personnel uniquement.
- Ne pas utiliser les poches pendant plus de 60 minutes par séance, tel que suggéré.
- Il est recommandé de jeter la poche après chaque utilisation. Une utilisation prolongée ou répétée de la même poche peut réduire son efficacité ou provoquer une irritation de la peau.
- Ne pas appliquer les poches sur des plaies ou une peau irritée.
- Enlever doucement les poches de la peau après l'utilisation. Jeter les poches dans un contenant ou une poubelle approprié(e).
- Ne pas essayer de retirer les piles. Elles ne sont pas remplaçables.

Remarque :

Le casque n'est pas un dispositif médical et il ne se substitue pas à un style de vie sain ou à des soins médicaux professionnels.

Arrêtez d'utiliser le Modius® immédiatement en cas de survenue d'effets indésirables. Si vous ressentez un malaise pendant une séance, mettez en pause et réduisez l'intensité avant de reprendre. Les risques ou effets indésirables possibles incluent : irritation cutanée; malaise dû à la stimulation; sensation de déséquilibre; nausée occasionnelle et rarement vomissements. Si un problème persiste au bout d'un ou deux jours, consultez votre médecin.

La durée d'utilisation conseillée est d'une heure maximum par jour. Le Modius® cessera automatiquement la stimulation si vous dépassez 1 heure d'utilisation ou une période de 16 h pour éviter « un blocage » si vous voulez parfois utiliser Modius® quelques heures plus tôt.

Les instructions de réinitialisation ne devraient pas être interprétées à tort de façon à augmenter l'utilisation quotidienne personnelle.

Lire et tenir compte de ces mises en garde et instructions. Conservez ce guide avec votre casque

Précautions concernant la pile intégrée

Votre casque de Modius® possède une pile intégrée qui ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Les utilisateurs de Modius® ne devraient pas tenter de remplacer la pile du casque.

N'altérez pas votre produit ou n'essayez pas de l'ouvrir pour éviter une annulation de la garantie et des risques pour votre sécurité.

Chargez le casque selon les instructions fournies avec ce guide, en utilisant une prise d'alimentation certifiée par un laboratoire d'essai reconnu.

N'essayez pas de faire l'entretien (incluant le nettoyage ou le chargement) de l'appareil lorsque l'appareil est en cours d'utilisation

Renseignements sur l'élimination et le recyclage



L'une des dispositions de la Directive européenne 2002/96/EC stipule que tout appareil électronique ne devrait pas être traité comme déchet électronique ou jeté. À titre de rappel de cette directive, tous les produits concernés sont maintenant marqués d'un symbole de la poubelle sur roue barrée d'une croix, tel qu'illustré ci-dessus.

En fin de vie du produit, ne le jetez pas ni ses piles dans les déchets ménagers, mais rapportez-le à un point de récupération des équipements électroniques pour qu'il soit recyclé. Une mise au rebut inadéquate peut provoquer une accumulation de toxines nocives dans l'air, l'eau et les sols et peut être dangereuse pour la santé humaine.

Remarque : Jeter les poches et les lingettes dans un contenant ou une poubelle approprié(e).

Renseignements sur la licence



Modius® fonctionne par Bluetooth

Conditions générales

Pour en savoir plus, allez sur www.modiushealth.com/termsandconditions

9. Coordonnées

www.modiushealth.com
team@modiushealth.com
support.modiushealth.com



Fabriqué par Neurovalens, 4th Floor, The Warehouse, 7 James Street South, Belfast BT2 8DN.

© 2018 Neurovalens