

MODIUS®

Használati utasítás

v1.0

A Modius® egy forradalmian új careable technology® eszköz, amely segít a karcsúbb alak kialakításában.

Figyelmeztetések és óvintézkedések:

- Ne használja a terméket, ha Ön epilepsziás vagy szívritmus-szabályozója van.
- Tartsa a terméket gyermekektől elzárva! Az apró alkatrészek, például az elektródakorongok fulladásveszélyt jelentenek.
- Figyelem! Az eszköz módosítása tilos.
- Kérjük, kövesse a jelen Használati utasítás Biztonsági figyelmeztetések és óvintézkedések fejezetében leírt figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket a Modius® fejpánt használata során.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés a Modius® használatába	2
2. A Modius® csomag tartalma	2
3. Első lépések.....	2
4. A Modius® fejpánt használata.....	4
5. Hibaelhárítás	6
6. A Modius® eszköz karbantartása	7
7. Általános termékinformációk és termékjellemzők	8
8. Hatósági és biztonsági tájékoztatás.....	10
9. Elérhetőség:.....	12

1. Bevezetés a Modius® használatába

Köszönjük, hogy megvásárolta a Modius® fejpántot, és gratulálunk a karcsúság felé tett első lépéséhez!

A Modius® egy bőrön keresztüli neurostimulációs fejpánt. Ez az akkumulátorral működő fejpánt kialakításának köszönhetően alacsony energiát közvetít neurostimulációs hullámforma formájában, amely ingerli az egyensúlyi agyideg aktivitását. A hullámforma (áram) közvetítése két öntapadós elektródakorong által történik. A korongokat a (fülek mögött található) csecsnyúlványokat (processus mastoideus) fedő bőrre kell helyezni. A bekapcsolást követően a termék enyhe elektromos impulzust közvetít, amely a felhasználó által növelhető vagy csökkenthető.

Ha sikerült azt a szintet beállítani, amikor a felhasználó elviselhető, kellemes, enyhe ingadozó érzést tapasztal, a Modius® fejpánt által közvetített ingerlést ezen a szinten érdemes tartani a kezelés időtartama (1 óra) alatt. További beállítások a Modius® App alkalmazással végezhetőek el. Az eszköz használata szüneteltethető is az alkalmazásban a szünet ikonra kattintva, vagy a fejpánton található főkapcsoló gomb kétszeri, gyors egymásutánban történő megnyomásával. A kezelés végén vegye le a fejpántot és dobja ki az elektródakorongokat minden egyes használatot követően. Ha az eszköz nincs használatban, mikro-USB-kábelen keresztül tölthető. Biztonsági okokból a szoftver beépített védelemmel van ellátva annak megakadályozására, hogy az eszköz elektromos ingerlést közvetítsen, ha az akkumulátor töltéséhez a mikro-USB-kábel csatlakoztatva van.

A használat javasolt időtartama naponta 1 óra, a Modius® fejpánt automatikusan leállítja az ingerlést, ha a használat eléri a napi egy órát. Az eszköz nem használható újra egy 16 órás időtartamon belül. Ez szükség esetén kellő rugalmasságot nyújt az ingerlések ütemezéséhez. A Modius® fejpánt otthoni környezetben történő felhasználásra szolgál, 18 éven felüliek számára.

2. A Modius® csomag tartalma

1. Modius® fejpánt
2. Modius® felhasználói kézikönyv
3. USB-töltőkábel és töltő
4. 150 db zselés elektródapad és 100 db alkoholos törülköző

Megjegyzés: A Modius® fejpánt működéséhez szükséges, de nem biztosított eszközök: Mobilkészlet, azaz okostelefon vagy táblagép, operációs rendszerrel; Android 5.0, illetve iOS 9, vagy ezek frissebb verziói.

3. Első lépések

A Modius® fejpánt feltöltése

- Csatlakoztassa a Modius® fejpánt csomagolásában található USB-töltőkábelt a szintén a csomagolásban található USB hálózati adapterhez, és csatlakoztassa a kábelt a fejpánthoz.
- A sikeres töltést a fejpánt LED állapotjelzőjének folyamatos borostyánsárga fénye jelzi.
- Ha a fejpánt feltöltődött, a borostyánsárga LED állapotjelző kialszik.
- Ha a töltőkábelt a fejpánthoz csatlakoztatva a LED állapotjelző borostyánsárga színnel villog gyors ütemben, akkor a fejpántban töltési hiba lépett fel (lásd „Hibaelhárítás”).
- Ha az akkumulátor lemerülőben van, akkor a borostyánsárga fény sorozatosan hármat villan. Ezt 3 sípoló hangjelzés is kíséri. Ha az akkumulátor alacsony energiaszintjének jelzéseit látja, az azt jelenti, hogy legfeljebb 60 percnyi ingerlésre van lehetőség, mielőtt a fejpánt magától leállna.

MEGJEGYZÉS: A fejpánt használata előtt ne felejtse el lecsatlakoztatni a töltőkábelt. Győződjön meg arról, hogy az USB-s töltő számára elegendő helyet biztosít, így az biztonságosan eltávolítható a fejpántból és az áramforrásból.

A fejpánt párosítása Bluetooth eszközzel

- Mielőtt hozzálát, ellenőrizze, hogy:
 - a fejpánt fel van-e töltve (lásd „A Modius® fejpánt feltöltése” részt) és a töltőkábel nem csatlakozik a fejpánthoz;
 - aktiválta-e a mobilkészítékének Bluetooth kapcsolatát.

Töltse le a Modius® alkalmazást az Apple App Store vagy a Google Play alkalmazásboltból és végezze el a regisztrációs folyamatot.

- A fejpánt lekapcsolt állapotában:
 - o tartsa lenyomva a fejpánt oldalán található bekapcsológombot 2 másodpercig;
 - o magas hangú sípolás hallatszik, és a bekapcsológomb fehéren villog. A kék LED állapotjelző periodikus villogással jelzi, hogy a fejpánt készen áll a párosításra.
- Indítsa el a Modius® alkalmazást a mobilkészítékén. Az alkalmazás elkezd keresni a fejpántot.
- Amint a fejpánt csatlakozik az alkalmazáshoz, egy sípszót hall, és a LED állapotjelző kéken villog. A fejpánt ezzel jelzi, hogy a mobilkészíték engedélyt kér a párosításra.
- Az engedélyt a fejpánt bekapcsológombjának egyszeri megnyomásával adhatja meg.
- Ekkor a mobilkészítékén jelenik meg egy értesítés arról, hogy a fejpánt csatlakozni kíván az eszközhöz. Fogadja el a párosítást. A párosítás megerősítését a fejpánt két sípolással jelzi.
- A párosítás akár 10 másodpercig is eltarthat.
- A párosítás befejeztével az alkalmazás képernyője átvált a fejpánt működtetéséhez szükséges műszerfal és felhasználói vezérlés mutatójára.

4. A Modius® fejpánt használata

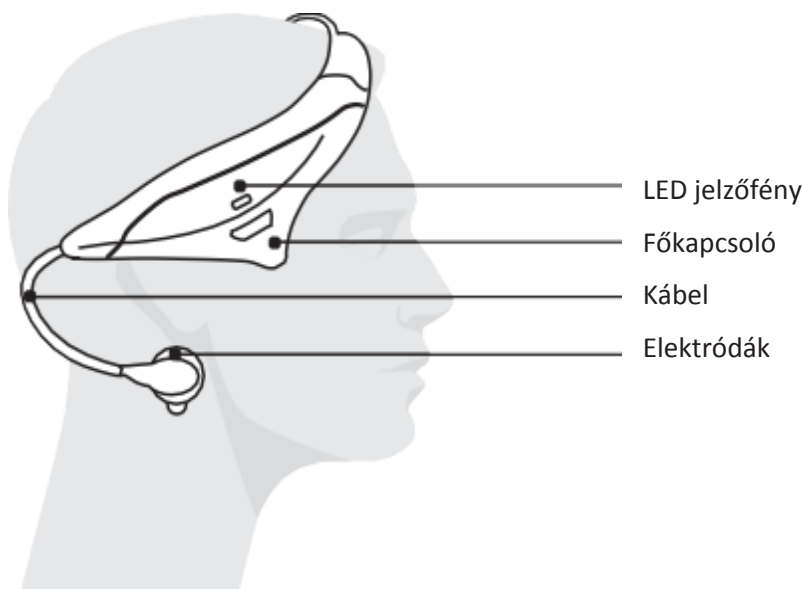
Javasolt használat

A használat javasolt időtartama naponta legfeljebb 1 óra. A Modius® az Ön biztonsága érdekében automatikusan leállítja az ingerlést, ha Ön túllépi a napi 1 órás ingerlési időtartamot. Új kezelés 16 óra elteltével indítható, ami kellő rugalmasságot nyújt a kezelések ütemezéséhez.

Megjegyzés: A termékbiztonsággal kapcsolatos további információkat lásd a „Figyelmeztetések és óvintézkedések” részben.

A fejpánt viselése

- Törölje tisztára a füle mögötti kemény csontos területet (a csecsnyúlványok területét) egy alkoholos törlőkendővel.
- Távolítsa el a zselés elektródák műanyag védőborítását.
Fésülje félre a hajszálakat, mielőtt felragasztaná a zselés elektródákat a csecsnyúlványok feletti, megtisztított bőrre.
- Tegye a fejére a fejpántot az 1. ábrán látható módon úgy, hogy a főkapcsoló a jobb füle fölött helyezkedjen el.
- Csatlakoztassa a Modius® vezetékének gombjait a fülei mögött lévő zselés elektródákhoz.



1. ábra

A fejpánt bekapcsolása és új kezelés indítása

- Ellenőrizze, hogy:
 - o a fejpánt fel van-e töltve és csatlakozik-e a mobilkészülethez;
 - o a fejpánt kényelmesen helyezkedik-e el a fején és csatlakoztatta-e az elektródákat az utasítások szerint.
- A bekapcsológombot 2 másodpercig lenyomva tartva kapcsolja be a fejpántot. Magas hangú sípolás hallatszik, és a fehér LED jelzőfény periodikusan villogni kezd.
- Indítsa el a Modius® alkalmazást és keresse fel a „Dashboard” fület.
- Kattintson a kijelzőn a „Start” gombra – ezáltal megkezdődik az ingerlés és a kezelés.
- 60 percnyi használatot követően 3 rövid, magas sípszó és a LED állapotjelző 3-as sorozatokban ismétlődő, fehér fényű villogása jelzi, hogy véget ért a kezelés.

Az ingerlés intenzitásának beállítása

- A Modius® alkalmazásban keresse fel a „Dashboard” fület.
- Az ingerlés intenzitása a képernyőn látható vezérlőgombok használatával állítható, felfelé „^” vagy lefelé „v”.
- Minden alkalommal, amikor állít az ingerlés intenzitásán, a fejpánt sípszóval jelzi, hogy az ingerlés intenzitása megváltozott.
- A fejpánt maximális intenzitása 10. A fejpánt 2 rövid, magas sípolással jelzi, ha az intenzitás emelésével elérte a maximális intenzitást.
- A fejpánt minimális intenzitása 1. A fejpánt 2 rövid, mély sípolással jelzi, ha az intenzitás csökkentésével elérte a „0” szintet, amely lényegében az ingerlés nélküli készenléti állapot.

* Ha a használat során bármilyen kellemetlenséget tapasztal, szakítsa meg a kezelést, majd folytassa alacsonyabb intenzitással. További információkért lásd a kiegészítő figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket.

A Modius® fejpánt újraindítása

Időnként szükség lehet a fejpánt újraindítására, ha problémák lépnek fel. Ha a fejpánt újraindítására van szükség, kövesse az alábbi lépéseket.

MEGJEGYZÉS: Az újraindításkor elveszhetnek azok az adatok, amelyeket nem szinkronizált az alkalmazással.

- Csatlakoztassa a Modius® fejpántot a csomagolásban található töltőkábelhez és USB-s töltőhöz.
- Ellenőrizze, hogy világít-e a narancs színű LED (amely jelzi, hogy a fejpánt feltöltése folyamatban van).
- A bekapcsológombot tartsa lenyomva több mint 10 másodpercig, amíg 3 hosszú sípolást nem hall.
- A fejpánt újraindítása megtörtént, húzza ki az áramforrásból. Ismét a megszokott módon használható.

A fejpánt lekapcsolása

- Használat közben vagy készenléti állapotban tartsa lenyomva a fejpánt oldalán található bekapcsológombot legalább 2 másodpercig.
- A fejpánt lekapcsolását egy mély sípszó jelzi, és 10 másodperc múlva az alkalmazás ismét a fejpánt keresésébe kezd.
- Töltse fel a fejpántot minden használat után, hogy használatra kész legyen a következő kezelésre.

5. Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A fejpántot bekapcsol, de nem enged, hogy új kezelésbe kezdjek.	A fejpánt még mindig a töltőkábelhez csatlakozik.	Csatlakoztassa le a kábelt új kezelés előtt.
A fejpántot nem kapcsol be.	A fejpánt nincs feltöltve.	Csatlakoztassa a fejpántot a töltőkábelhez.
	A fejpánt mély készenléti állapotba került.	Csatlakoztassa a fejpántot a töltőkábelhez, és próbálja bekapcsolni.
A fejpánt egy ideig működik, aztán magától lekapcsolódik.	Túl nagy az ellenállás a két elektróda között.	Győződjön meg arról, hogy a zselés elektródák felragasztása előtt használt alkoholos törlőkendőt, továbbá arról is, hogy a korongokat a megfelelő helyre helyezte a füle mögött, illetve hogy nem szorult haj a korongok és a bőre közé.
	Az elektródákhoz csatlakoztatott korongok elhasználódtak.	Cserélje ki a fejpánthoz csatlakoztatott elektródákat.
Nem működik a párosítás a fejpánt és a mobilkészülék között.	Nem aktiválta a Bluetooth kapcsolatot a mobilkészülékén.	Ellenőrizze, hogy aktiválta-e a Bluetooth® kapcsolatot a készülékén.
	A fejpánt keresése közben problémák lépnek fel az Ön mobilkészülékében.	Indítsa újra az alkalmazást a mobilkészülékén.
A párosításkor 3 rövid, mély sípolást hallok, és a LED állapotjelző 3 alkalommal villan fel kék színnel.	A fejpánt azt jelzi, hogy párosításkor a mobilkészülék túllépte a párosítás elfogadására szánt időt.	Kapcsolja ki a fejpántot, és próbálja ismét párosítani „A fejpánt párosítása a mobilkészülékkel” részben leírt utasítások szerint.
Diszkomfortérzésem van a fejpánt használata közben.	Elképzelhető, hogy az eszköz ingerlési intenzitása túl magas.	Csökkentse a fejpánt ingerlési intenzitását az alkalmazás segítségével addig, amíg enyhe ringató érzést nem tapasztal, vagy a diszkomfortérzés meg nem szűnik.

Ha a fejpántot a töltőkábelhez csatlakoztatom, a LED állapotjelző borostyánsárga színnel villog gyors ütemben.	A fejpántban töltési hiba lépett fel.	Próbálja a töltőkábelt egy másik USB-töltőnyílásba csatlakoztatni, és ha ez sem oldja meg a problémát, forduljon a technikai támogatáshoz.
A fejpánt LED állapotjelzője borostyánsárga színnel villog, és 3 rövid, mély sípolást hallok.	A fejpánt akkumulátora lemerülőben van.	Töltse fel a fejpántot (lásd „A Modius® fejpánt feltöltése”).
A fejpánt bekapcsolásakor 3 rövid, mély sípszót hallok.	A fejpánt akkumulátora csaknem lemerült.	Töltse fel a fejpántot (lásd „A Modius® fejpánt feltöltése”).

6. A Modius® eszköz karbantartása

Fejpánt

- A zselés elektródákat csak a csecsnyúlványra, a füle mögötti csontos területre helyezze a fenti utasítások szerint. Ne helyezze az elektródákat a mellkasára vagy a fej, illetve a nyak egyéb területeire. Lásd „A fejpánt viselése” részt.
- A fejpántot csak ülő vagy fekvő helyzetben használja.
- Tartsa a terméket gyermekektől elzárva! A terméket kizárólag 18 év felettiiek használhatják.
- Törölje át tiszta, száraz ruhával.
- Használat után kapcsolja ki a fejpántot.
- Minden használat után töltse fel a fejpántot, mielőtt visszatenné a tartójába.
- Ne használjon súrolószereket vagy erős detergenst.
- Óvja a fejpántot a víztől.
- Ne merítse vízbe a fejpántot.
- Ne tegye ki erős napsugárzásnak.
- Kerülje az olyan helyzeteket, amelyek a Modius® összenyomódását, vagy megnyúlását okozhatják. Ez befolyásolhatja a fejpánt kényelmes és biztonságos viselését.

Zselés elektródák

- Az elektródák felragasztása előtt fésülje el a hajszálakat a megtisztított területről, mivel ráragadhatnak a korongokra.
- Az elektródák felragasztása előtt gondoskodjon arról, hogy a bőrfelület tiszta, valamint sminktől, krémeiktől és egyéb ápolószerektől mentes legyen.
- Az elektródák kezelése előtt mosson kezet, és amennyire csak lehetséges, tartsa az ujjait a korongoktól távol.

Használat után az elektródákat dobja a megfelelő tárolóba vagy szemetesbe.

- Ne ossza meg mással a zselés elektródákat. Az elektródák egy személyen való használatra szolgálnak.
- Ne használja az elektródákat a javasolt 60 percnél hosszabb időtartamon túl.

7. Általános termékinformációk és termékjellemzők

Termékjellemzők: Modius® fejpánt

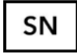

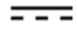










Teljesítményjellemzők	
Az akkumulátor üzemideje	Körülbelül 10 óra 10-es fokozatú ingerlés esetén – Körülbelül 4–5 nap névleges használat
Bemeneti csatlakozó	Teljesen szigetelt, érintésálló mikro-USB
Tömeg	85 g
Méret	180 x 140 x 70 mm
Bemeneti energiaellátásra vonatkozó információ	
Mikro-USB-port (A biztonságos használat érdekében minden USB-portnak vagy USB-s töltőnek meg kell felelnie az EN/IEC 60601-1 szabványnak, és kizárólag a termék csomagolásában található töltő használható a Modius® töltésére.) Feszültség: 4,75–5,25 V Maximális áramerősség 155 mA, egyenáram	
Maximális kimeneti feszültség Maximális kimeneti áramerősség	20 V 600 µA
Bluetooth BLE – BGM113	
Üzemi frekvenciasáv	2,4 GHz az alacsony energiafelhasználású Bluetooth technológia esetén
Maximális RF energiakisugárzás	+3 dBm
Akkumulátor (nem cserélhető a felhasználó által): lítium-polimer 4,2 V 155 mAh	
Környezeti működési feltételek	
Környezet	Személyes otthoni felhasználás
Hőmérsékleti tartomány	0–40 °C
Vízállóság	0 m
Zajszint	0 dB
Környezeti tárolási feltételek	
Hőmérsékleti tartomány	0–40 °C
Relatív páratartalom	<95%
Várt élettartam	Az eszközre 1 év jótállás érvényes, de élettartama rendszerint ennél hosszabb. A jótállás nem terjed ki az eszköz kiegészítőire (a vezetékekre, az elektródákra és a törlőkendőkre). <ul style="list-style-type: none">• A vezeték élettartama nagyban függ a használatától. A vezetékekkel mindig bánjon óvatosan.• Az elektródakorongok 1 alkalomra szolgálnak, a lejárat idejére vonatkozó információért forduljon a gyártóhoz.• Törlőkendők: a lejárat dátum a csomagoláson található.
Tárolási élettartam	<ul style="list-style-type: none">• A fejpántnak nincs meghatározott tárolási élettartama.• A kiegészítők (elektródák, vezetékek és törlőkendők) tárolási élettartamára vonatkozó információért forduljon a gyártóhoz.

Szimbólum



Információ

További információkért tekintse át a további szimbólumokat, és olvassa el a használati utasítást.

	A termék azonosítását szolgáló gyártási szám.
	Kövesse a használati utasítást. (az EN/IEC 60601-1 szabványnak megfelelő felhasználás)
5,0 V 	Egyenáram Elektromos egyenáram adott feszültségen.
	BF típusú alkalmazott rész
	Ne használja, ha a csomagolás sérült.
	Az eszköz nem vízálló. Óvja a nedvességtől.
	A csomagban található eszközök száma:
	Tárolási körülmények: 0–40 °C
	Relatív páratartalom: <95%
	Védőérintkező (földelés)
	Ne használja, ha beültetett szívritmus-szabályozója van.
	A készülék nem védett a kis méretű tárgyak behatolása és a velük való érintkezés ellen; a készülék nem védett folyadékok behatolása ellen.
	Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el a használati utasítást; az utasításoktól (pl. az elektródák megfelelő felhelyezése) való eltérés a felhasználó sérülését okozhatja.

Fogyóeszközök (elektródakorongok és törlőkendők)

Csak a csomagolásban található vagy a Neurovalens által javasolt fogyóeszközöket használja. Olvassa el a termék csomagolásában található gyártói használati utasítást.

Visszavételi és jótállási szabályzat

További információt az alábbi honlapon talál: www.modiushealth.com/returnsandwarranty

8. Hatósági és biztonsági tájékoztatás

Megfelelőségi nyilatkozat – Modellnév: ML600

A Neurovalens ezennel kijelenti, hogy a termék megfelel az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelv és a rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. A teljes Megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető a www.modiushealth.com/compliance oldalon.

A Modius® fejpánt a besorolása szerint nem folyamatos működésű. A Modius® készülék, valamint a hozzá mellékelt USB-s töltő megfelel az EN/IEC 60601-1 jelű elektromos biztonsági szabványnak, és a működése szempontjából orvosi berendezésnek (Medical Equipment System – ME SYSTEM) minősül.

Minden alkalmazott rész BF típusúnak minősül. A fejpánt IP-besorolása: nulla. Ez azt jelenti, hogy a készülék nem védett a kis méretű tárgyak behatolása és a velük való érintkezés, valamint folyadékok behatolása ellen.



Tartalom – FCC ID: QOQBGM113

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. pontjában foglalt előírásoknak. Az eszköznek meg kell felelnie a következő két elvárásnak:

1. ez az eszköz nem gerjeszthet káros interferenciát, illetve
2. el kell viselnie a más eszközök által gerjesztett interferenciákat, beleértve azokat is,

amelyek működési rendellenességet okozhatnak.



A Modius® megfelel a rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv vonatkozó alapvető követelményeinek.



A Modius® megfelel az ausztráliai és az új-zélandi forgalmazásra vonatkozó EMC szabványoknak.

A Modius® készüléket forgalmazó országok orvosi berendezéseket szabályozó hatóságai a Modius® készüléket általános wellness készüléknek tekintik, így használatát nem kötik orvosi berendezésekre vonatkozó hatósági előírásokhoz.

A Silicon Labs által igazolt	FCC-15C
FCC ID:	QOQBGM113
IC ID:	5123A-BGM113

Biztonsági nyilatkozat

Ez a termék tesztekkel igazoltan megfelel az elektromágneses kompatibilitási és biztonsági bizonyítványnak az alábbi EN szabványok előírásai szerint: EN301489-3, EN301489-17 és EN 60950-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 és IEC 60601-1-11.

A Modius® készülék tesztekkel igazoltan megfelel a rádiófrekvenciás interferencia érvényes zavartűrési szabványainak a 2,4 GHz-es működési frekvenciatartományban.

Megjegyzés: A Modius® használata kizárólag 18 év feletti felnőtteknél javallott a testsúly csökkentése, illetve megtartása céljából.



Figyelmeztetések és óvintézkedések:

A Modius® fejpánt használata előtt olvassa el a mellékelt tájékoztatót és használati utasítást.

A zselés elektródákat csak a csecsnyúlványra, a füle mögötti csontos területre helyezze a mellékelt utasítások szerint. Ne helyezze az elektródákat a mellkasára vagy a fej, illetve a nyak egyéb területeire. Ne használja az eszközt, ha terhes, ha vestibuláris ingerlés által kiváltható reflex epilepsziában szenved, valamint ha szívritmus-szabályozóval rendelkezik.

Váratlan reakció esetén a Modius® használatát azonnal fel kell függeszteni.

- A zselés elektródákat csak a csecsnyúlványra, a füle mögötti csontos területre helyezze a fenti utasítások szerint. Ne helyezze az elektródákat a mellkasára vagy a fej, illetve a nyak egyéb területeire. Lásd „A fejpánt viselése” részt.
- A fejpántot csak ülő vagy fekvő helyzetben használja.
- Tartsa a terméket gyermekektől elzárva! A terméket kizárólag 18 év felettek használhatják. Az apró alkatrészek, például az elektródakorongok fulladásveszélyt jelentenek.
- A fejpántot megfelelően szellőztetett környezetben töltsse fel. Az akkumulátor feltöltése során gázok képződhetnek, ezért a töltést megfelelően szellőztetett környezetben végezze.

- Ne használja az eszközt, ha terhes, ha vestibuláris ingerlés által kiváltható reflex epilepsziában szenved, valamint ha beültetett szívritmus-szabályozóval, defibrillátorral vagy neurostimulációs eszközzel rendelkezik. Megjegyzés: A Modius® az agy vestibuláris (egyensúlyérzékelő) rendszerét ingerli, ami az epilepsziások többségében nem okoz problémát, ám a vestibuláris reflex epilepsziában szenvedők esetében rohamot válthat ki. Az epilepsziában szenvedők az eszköz használata előtt forduljanak házi orvosukhoz e kérdéssel kapcsolatban.
- Ne használja mozgás közben, mert az eszköz befolyásolhatja az egyensúly-érzékelését.
- Az eszköz használatakor ne fogyasszon alkoholt, valamint ne használja gépjárművezetés vagy gépek vezetése közben.
- Ne használja nedves környezetben, és ne merítse a fejpántot vízbe.
- Ne ossza meg mással a zselés elektródákat. Ezek kizárólag egy személyen való használatra szolgálnak.
- Ne használja az elektródákat a javasolt 60 percnél hosszabb időtartamon túl.
- Javasoljuk, hogy az elektródákat cserélje le minden használat után. Az elnyújtott vagy ismételt használat csökkentheti az elektróda hatékonyságát és bőrirritációhoz vezethet.
- Ne helyezze az elektródákat sebes vagy irritált bőrfelületre.
- Használat után az elektródákat óvatosan távolítsa el a bőrről. Az elektródákat dobja a megfelelő tárolóba vagy szemetesbe.
- Ne kísérelje meg eltávolítani az akkumulátort. Az akkumulátor nem cserélhető a felhasználó által.

Megjegyzés:

A fejpánt nem orvosi berendezés, és nem alkalmas az egészséges életmód vagy az orvosi ellátás kiváltására.

Váratlan reakció esetén a Modius® használatát azonnal fel kell függeszteni. Ha a használat során bármilyen kellemetlenséget tapasztal, szakítsa meg a kezelést, majd folytassa alacsonyabb intenzitással. A használat során többek között az alábbi veszélyek vagy mellékhatások léphetnek fel: bőrirritáció; ingerlés miatti kellemetlen érzet; egyensúlyzavar; esetenként hányinger; és ritka esetben hányás. Ha a probléma 1–2 nap után sem szűnik meg, forduljon kezelőorvosához.

A használat javasolt időtartama naponta maximum 1 óra. A Modius® automatikusan leállítja az ingerlést, ha Ön túllépi a napi 1 órás ingerlési időtartamot, illetve egy 16 órás időtartamot annak érdekében, hogy elkerülje az Ön „letiltását”, ha Ön a rákövetkező napok egyikén néhány órával korábban használná a Modius® eszközt.

Ne éljen vissza az újraindítás lehetőségével a napi kezelési időtartam növelése céljából.

Olvassa el és tartsa be ezeket a figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket. Tartsa ezt az útmutatót a fejpánt mellett.

A beépített akkumulátorral kapcsolatos óvintézkedések

A Modius® fejpánt beépített akkumulátora a felhasználó által nem eltávolítható. Ne kísérelje meg kicserélni a Modius® fejpántban található akkumulátort.

Ne kísérelje meg módosítani vagy felnyitni a terméket, mert ezzel a garancia érvényét veszti, illetve biztonsági kockázathoz is vezethet.

A fejpántot az útmutató utasításai szerint töltsse fel, elismert laboratórium által hitelesített tápellátási eszközzel.

Ne kísérelje meg az eszköz szervizelését vagy karbantartását (beleértve a tisztítást és a töltést), amíg az eszköz használatban van.

Hulladékártalmatlanításra és újrahasznosításra vonatkozó információ



Az európai 2002/96/EK irányelv egyik rendelkezése szerint bármilyen elektronikus eszközt elektronikus hulladéknak kell tekinteni és nem szabad ártalmatlanítani. Ezen irányelv emlékeztetőjéül minden érintett terméket a fentebb látható, áthúzott, kerekeken guruló szemetes szimbólumával látták el. A termék életciklusa végén ne dobja ezt a terméket vagy az akkumulátorokat háztartási hulladékba, hanem juttassa az elektromos berendezések újrahasznosítását végző gyűjtőpontok egyikébe. A nem megfelelő ártalmatlanítás eredményeként emberi egészségre is veszélyes mérgeanyagok halmozódhatnak fel a levegőben, a vízben és a talajban.

Megjegyzés: Az elektródákat és a törlőkendőket dobja a megfelelő tárolóba vagy szemetesbe.

Licencinformáció



A Modius® Bluetooth kapcsolatot használ

Szerződési feltételek

További információt az alábbi honlapon talál: www.modiushealth.com/termsandconditions

9. Elérhetőség:

www.modiushealth.com

team@modiushealth.com

support.modiushealth.com



Gyártja: Neurovalens, 4th Floor, The Warehouse, 7 James Street South, Belfast BT2 8DN.

© 2018 Neurovalens