

# MODIUS®

## Naudojimo instrukcija

### v1.0

Modius® – tai visiškai nauja „Careable technology®“, padedanti džiaugtis lieknesne figūra.

#### Įspėjimai ir atsargumo priemonės:

- Šio įrenginio nenaudokite, jei turite epilepsiją arba nešiojate implantuotą širdies stimuliatorių.
- Saugokite įrenginį nuo vaikų. Smulkios detalės, pvz., elektrodų pagalvėlės, kelia užspringimo pavojų.
- Įspėjimas: Negalima keisti šios įrangos.
- Prieš naudodami Modius® ausines, laikykitės visų įspėjimų ir atsargumo priemonių, išsamiai aprašytų šios naudotojo instrukcijos skyriuje „Saugos įspėjimai ir atsargumo priemonės“

## Turinys

1. Įvadas į Modius®.....	2
2. Modius® paketo turinys.....	2
3. Pradedama.....	2
4. Modius® ausinių naudojimas .....	4
5. Trikčių šalinimas.....	6
6. Modius® priežiūra.....	7
7. Bendroji informacija apie įrenginį ir techninės specifikacijos.....	8
8. Reguliavimo ir saugos informacija .....	10
9. Kontaktinė informacija .....	12

# 1. Įvadas į Modius®

Dėkojame, kad įsigijote Modius® ir sveikiname žengus pirmąjį žingsnį norint džiaugtis lieknesne figūra!

Modius® – tai transderminės neurostimuliacinės ausinės. Šios baterija maitinamos ausinės yra skirtos tiekti žemo lygio energiją kaip neurostimuliacijos signalą, kuris stimuliuoja vestibulinio galvos smegenų nervo aktyvumą. Šio signalo (srovės) perdavimas atliekamas naudojant dvi lipnias elektrodų pagalvėles. Šios pagalvėlės yra uždedamos ant odos už mastoidų (ausų) srities. Įjungtas įrenginys tiekia nedidelius elektrinius impulsus, kuriuos naudotojas gali reguliuoti aukštyn arba žemyn.

Nustačius lygį, kai naudotojas jaučia toleruotiną, patogų ir švelnų tempimą, Modius® ausinių teikiama stimuliacija turėtų būti ir toliau naudojama tokiame lygyje viso seanso metu (1 val.). Tolesni koregavimai gali būti atliekami naudojant Modius® programėlę. Įrenginį taip pat galima pristabdyti naudojant programėlę, paspaudus pauzės piktogramą arba du kartus spustelėjus ausinių įjungimo mygtuką. Baigus seansą, ausines nuimti ir po kiekvieno naudojimo pašalinti elektrodų pagalvėles. Nenaudojamą įrenginį galima įkrauti naudojant mikro USB laidą. Saugumo sumetimais yra įdiegti programinės įrangos valdikliai, kad įrenginys negalėtų tiekti elektros stimuliacijos jį prijungus prie mikro USB laido įkraunant bateriją.

Rekomenduojama naudoti 1 val. per dieną. Įrenginį naudojant ilgiau kaip 1 val. per dieną, Modius® automatiškai sustabdo stimuliaciją. Įrenginio negalima vėl naudoti nepaėjęs 16 val. laikotarpiui. Tai, jei reikia, suteikia daugiau lankstumo naudojant stimuliaciją. Modius® ausines gali naudoti vyresni nei 18 metų asmenys namų aplinkoje.

## 2. Modius® paketo turinys

1. Modius® ausinės
2. Modius® naudotojo instrukcija
3. USB įkrovimo laidas ir įkroviklis
4. 150 gelinių elektrodų pagalvėlių ir 100 alkoholiu sudrėkintų servetėlių.

Pastaba: elementai, kurių reikia norint naudoti Modius® ausines, tačiau nėra pridėti: mobilusis įrenginys, t.y., išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris su Android 5.0 arba iOS 9 ar naujesne operacine sistema.

## 3. Pradedama...

### Modius® ausinių įkrovimas

- Prijunkite USB maitinimo kabelį, pridėtą prie Modius® ausinių, prie USB kištuko adapterio (pridėta), o laidą prijunkite prie ausinių.
- Įkraunant ausines, dega geltona šviesos diodų indikatorius lemputė.
- Įkrovus ausines, geltona šviesos diodų indikatorius lemputė išsijungs.
- Jei prijungus maitinimo kabelį prie ausinių pradeda mirksėti geltona šviesos diodų indikatorius lemputė, tai reiškia, kad įvyko ausinių įkrovimo klaida (žr. skyrių „Trikčių diagnostika“).
- Kai baterijos įkrovos lygis žemas, geltona šviesa sumirksės 3 kartus. Taip pat pasigirs trijų pyptelėjimų garsinis signalas. Pastebėjus šiuos žemo baterijos įkrovos lygio požymius, bus aišku, kad ausinės išsijungs po 60 stimuliacijos minučių (maks.).

PASTABA: prieš naudodami ausines, įsitikinkite, kad atjungėte įkrovimo laidą. Palikite pakankamai vietos aplink USB įkroviklį, kad jį būtų galima saugiai ištraukti iš ausinių ir maitinimo šaltinio.

## Ausinių sujungimas su „Bluetooth“ technologiją naudojančiu įrenginiu

- Prieš naudodami įrenginį, įsitikinkite, kad:

- Ausinės yra įkrautos (žr. skyrių „Modius® ausinių įkrovimas“), o įkrovimo laidas atjungtas.
- „Bluetooth“ belaidė technologija yra įjungta jūsų mobiliajame įrenginyje.

Atsisiųskite Modius® programėlę iš „Apple App Store“ arba „Google Play“ parduotuvių ir atlikite registraciją.

- Išjungus ausines:

- o palaikykite nuspauštą įjungimo mygtuką ausinių šone 2 sek.

- o pasigirs aukšto tono pyptelėjimas ir ims mirksėti balta lemputė. Mėlyna šviesos diodų indikatoriaus lemputė periodiškai mirksės. Tai reikš, kad galima prijungti ausines.

- Į mobilųjį įrenginį atsisiųskite Modius® programėlę ir ji pradės nuskaityti jūsų ausines.
- Ausinėms prisijungus prie programėlės, išgirsite pyptelėjimą ir pradės mirksėti mėlyna šviesos diodų indikatoriaus lemputė. Ausinės nurodys, kad jūsų mobilusis įrenginys nori prie jų prisijungti.
- Vieną kartą paspauskite ausinių maitinimo mygtuką, kad patvirtintumėte prisijungimą.
- Mobilajame įrenginyje gausite pranešimą, kad ausinės nori prisijungti prie jūsų įrenginio. Patvirtinkite prisijungimą. Ausinės pyptelės du kartus patvirtindamos prisijungimą.
- Prisijungimas gali vykti apie 10 sekundžių.
- Prisijungus programėlės ekranas pasikeis. Bus rodomas prietaisų skydelis ir naudotojo valdikliai, kad galėtumėte naudoti ausines.

## 4. Modius® ausinių naudojimas

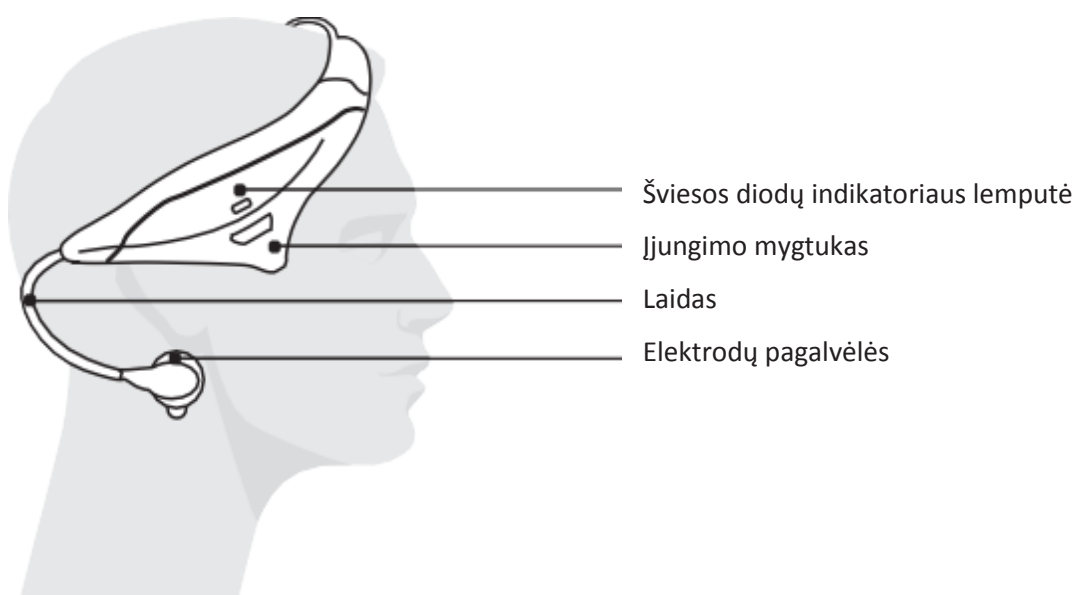
### Rekomenduojamas naudojimas

Rekomenduojama naudoti ne ilgiau kaip 1 val. per dieną. Įrenginį naudojant ilgiau kaip 1 valandą per dieną, Modius® automatiškai sustabdo stimuliavimą saugumo sumetimais. Naują seansą galite pradėti pasibaigus 16 valandų laikotarpiui. Tai suteiks lankstumo jūsų naudojimo režimui.

Pastaba: Daugiau informacijos apie įrenginio saugą žr. skyriuje „Įspėjimai ir atsargumo priemonės“.

### Kaip nešioti ausines

- Alkoholiu suvilgyta servetėlė nuvalykite odą kaulinėje dalyje už ausų (mastoidų srityje).
- Nuimkite apsauginę plastiko dangą nuo gelinių pagalvėlių.  
Prieš uždėdami gelines pagalvėles ant švarios odos mastoidų srityje, nubraukite nuo jos plaukus.
- Uždėkite ausines ant galvos, kaip parodyta 1 pav., kad įjungimo mygtukas būtų virš dešinės ausies.
- Pritvirtinkite Modius® laido gnybtus prie gelinių pagalvėlių už ausų.



1 pav.

### Ausinių įjungimas ir naujo seanso pradžia

- Įsitinkite, kad:
  - o ausinės įkrautos ir prijungtos prie mobiliojo įrenginio.
  - o ausinės patogiai uždėtos ant galvos, o elektrodai prijungti, kaip nurodyta instrukcijoje.
- Palaikykite paspaudę maitinimo mygtuką 2 sekundes ir įjunkite ausines. Pasigirs aukšto tono pyptelėjimas ir ims mirksėti balta šviesos diodų indikatorius lemputė.
- Atsisiųskite Modius® programėlę ir eikite į „Dashboard“ (prietaisų skydelio) skirtuką.
- Spustelėkite ekrano mygtuką „Start“ (Pradėti) ir pradėkite stimuliavimą bei seansą
- Po 60 min. išgirdę tris trumpus aukšto tono pyptelėjimus ir tris kartus sumirksėjus baltai šviesos diodų indikatorius lemputei, seansas baigsis.

## Stimuliavimo lygio koregavimas

- Įjunkite Modius® programėlę ir eikite į „Dashboard“ (priedaisų skydelio) skirtuką.
- Stimuliavimo lygį galima reguliuoti naudojant ekrano valdiklius: aukštyn  $\wedge$  arba žemyn  $\vee$
- Kiekvieną kartą koreguojant stimuliavimo lygį, ausinės pyptelės įspėdamos, kad pasikeitė stimuliavimo lygis.
- Maksimalus ausinių galios lygis yra 10. Norėdami padidinti galios lygį, išgirsite 2 trumpus aukšto tono pyptelėjimus, reiškiančius, kad jau pasiekėte maksimalų galios lygį.
- Minimalus ausinių galios lygis yra 1. Norėdami sumažinti galios lygį, išgirsite 2 trumpus žemo tono pyptelėjimus, reiškiančius, kad ausinės jau nebestimuliuoja, lygis nustatytas į „0“, o įrenginys veikia laukimo režimu.

\* Jei seanso metu jaučiate diskomfortą, sustokite, sumažinkite įrenginio intensyvumą ir tik tada tęskite seansą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. papildomus įspėjimus ir atsargumo priemones.

## Modius® ausinių nustatymas iš naujo

Kartais, kilus problemoms, gali reikėti nustatyti ausines iš naujo. Norėdami iš naujo nustatyti ausines, vadovaukitės žemiau pateiktais nurodymais.

PASTABA: nustatant ausines iš naujo, gali būti prarasti duomenys, kurie nebuvo sinchronizuoti su programėle.

- Prijunkite Modius® ausines prie pridėto maitinimo laido ir USB įkroviklio
- Įsitikinkite, kad šviečia oranžinė šviesos diodų lemputė (rodanti, kad ausinės yra įkraunamos)
- Palaikykite nuspaudę šoninį įjungimo mygtuką ilgiau nei 10 sek., kol išgirsite 3 ilgų pyptelėjimų seriją.
- Ausinės nustatytos iš naujo. Atjunkite jas nuo maitinimo šaltinio. Naudokite ausines kaip įprasta.

## Ausinių išjungimas

- Naudojant ausines arba joms veikiant budėjimo režimu ar parengus įrenginį naudojimui, palaikykite nuspaudę įjungimo mygtuką ausinių šone mažiausiai 2 sek.
- Išgirsite žemo tono pyptelėjimą, reiškiantį, kad ausinės buvo išjungtos, ir po 10 sek. programėlė vėl pradės ieškoti ausinių.
- Ausines įkraukite po kiekvieno naudojimo, kad pasirengtumėte kitam seansui.

## 5. Trikčių šalinimas

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Ausinės įsijungia, tačiau negaliu pradėti seanso	Ausinės prijungtos prie įkrovimo laido	Prieš pradėdami naują seansą, atjunkite laidą
Ausinės neįsijungia	Ausinės neįkrautos	Prijunkite ausines prie įkrovimo laido
	Ausinės persijungė į ilgojo laukimo režimą	Prijunkite ausines prie įkrovimo laido ir įdėkite į maitinimo tinklą
Ausinės veikia tam tikrą laiką, o paskui išsijungia	Pagalvėlių pasipriešinimas per didelis	Prieš dėdami gelines pagalvėles ant odos, nuvalykite ją alkoholiu suvilgytomis servetėlėmis, tinkamai uždėkite pagalvėles už ausų ir įsitikinkite, kad tarp jų ir odos nėra plaukų
	Prie elektrodų tvirtinamos pagalvėlės yra susidėvėjusios	Pakeiskite ausinių gelines pagalvėles
Ausinės neprisijungia prie mobiliojo įrenginio	Mobilajame įrenginyje neįjungta „Bluetooth“ technologija	Patikrinkite, ar įrenginyje įjungta „Bluetooth®“ technologija
	Ieškodamas ausinių, mobilusis įrenginys susiduria su problemomis	Iš naujo paleiskite programėlę mobilajame įrenginyje
Prijungimo metu girdimi 3 trumpi žemo tono pytelėjimai, o mėlyna šviesos diodų lemputė sumirksi 3 kartus	Laukiant, kol patvirtinsite mobiliojo įrenginio prisijungimo prašymą, baigėsi ausinėms nustatytas laikas	Išjunkite ausines ir pabandykite dar kartą sujungti vadovaudamiesi instrukcija, pateikta skyriuje „Ausinių sujungimas su mobiliuoju įrenginiu“
Naudodamas ausines jaučiu diskomfortą	Gali būti nustatyta per didelė įrenginio galia	Sumažinkite ausinių galios lygį naudodami programėlę, kol pajusite švelnų tempimą arba sumažės diskomforto jausmas

Ausines prijungus prie įkroviklio, pradeda mirksėti geltona šviesos diodų indikatorius lemputė	Ausinių įkrovimo klaida	Pabandykite įkrovimo laidą prijungti prie kito USB kištuko. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių
Mirksi geltona ausinių šviesos diodų indikatorius lemputė ir pasigirsta 3 trumpi pyptelėjimai	Ausinių baterija yra beveik išsekusi	Įkraukite ausines (žr. skyrių „Modius® ausinių įkrovimas“)
Bandant įjungti ausines, pasigirsta 3 žemo tono pyptelėjimai	Žemas ausinių baterijos įkrovos lygis	Įkraukite ausines (žr. skyrių „Modius® ausinių įkrovimas“)

## 6. Modius® priežiūra

### Ausinės

- Pagalvėles dėkite tik ant mastoidų, kietos kaulinės srities už ausų, kaip nurodyta instrukcijoje aukščiau. Įrenginio nedėkite ant krūtinės ar kitos galvos arba kaklo srities. Žr. skyrių „Kaip nešioti ausines“.
- Įrenginį naudokite tik sėdėdami arba gulėdami.
- Saugokite įrenginį nuo vaikų. Šio įrenginio negali naudoti jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys.
- Nuvalykite minkštu audiniu.
- Po naudojimo ausines išjunkite.
- Po kiekvieno naudojimo prieš dėdami ausines į dėklą, jas įkraukite iki galo.
- Nenaudokite abrazyvinių dalelių turinčių ar stiprių valiklių.
- Nesušlapinkite ausinių
- Negalima panardinti ausinių į skystį.
- Nepalikite ausinių tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Nepalinkite Modius® įrenginio, jei galvos lankelis yra suspaustas arba ištemptas. Dėl šios priežasties dedant lankelį ant galvos gali būti jaučiamas diskomforto jausmas.

### Gelinės pagalvėlės

- Prieš dėdami gelines pagalvėles, nubraukite visus plaukus, kad galėtumėte nuvalyti odą. Priešingu atveju, jie gali prilipti prie pagalvėlių.
  - Prieš uždėdami pagalvėles, įsitikinkite, kad oda yra švari ir ant jos nėra makiažo, kremo ar losjono likučių.
  - Prieš naudodami pagalvėles, nusiplaukite rankas ir stenkitės neliesti pagalvėlių pirštais.
- Panaudotas pagalvėles išmeskite į atitinkamą konteinerį ar šiukšliadėžę.
- Nesidalinkite gelinėmis pagalvėlėmis su kitais. Jos yra skirtos tik vienam naudotojui.
  - Nenaudokite pagalvėlių ilgiau nei rekomenduojama – 60 min. seanso metu.

## 7. Bendroji informacija apie įrenginį ir techninės specifikacijos

### Techninė specifikacija: Modius® ausinės

Galios charakteristikos	
Baterijos veikimo laikas	Apie 10 val. 10 stim. lygiu – apie 4 ar 5 dienos nominalaus naudojimo
Įvesties kištukas	Visiškai izoliuota nuo prisilietimo mikro USB
Svoris	85 g
Dydis	180 x 140 x 70 mm
Maitinimo informacija	
Mikro USB prievadas (siekiant užtikrinti tolesnį saugumą, USB prievadas arba USB įkroviklis turi būti sertifikuotas pagal EN/IEC 60601-1, turėtų būti naudojamas tik Modius® įkroviklis) Įtampa: 4,75–5,25 V Didžiausia srovė 155 mA DC	
Didžiausia išėjimo įtampa Didžiausia išėjimo srovė	20 V 600 uA.
„Bluetooth“ BLE - BGM113	
Veikimo dažnių juosta	2,4 GHz „Bluetooth“ veikimas maža galia
Didžiausia perduodama radijo dažnių energija	+3 dBm
Ličio polimero baterija (jos įrenginio naudotojas pakeisti negali) 4,2 V 155 mAh	
Aplinkos sąlygos	
Aplinka	Asmeninis naudojimas butyje
Temperatūros diapazonas	0–40 °C
Atsparumas vandeniui	0 m
Triukšmo lygis	0dB
Laikymo aplinkos sąlygos	
Temperatūros diapazonas	0–40 °C
Santykinė drėgmė	< 95 %
Numatomas naudojimo laikas	Įrenginiui suteikiama 1 metų garantija, tačiau įprastai jis veikia ilgiau.  Garantija netaikoma priedams (laidams, pagalvėlėms, servetėlėms) <ul style="list-style-type: none"><li>• Laidų veikimo trukmė priklauso nuo jų naudojimo. Visada atsargiai naudokite laidus</li><li>• Elektrodo pagalvėlės yra vienkartinio naudojimo. Jų galiojimo laiką žr. gamintojo pateiktoje informacijoje.</li><li>• Servetėlių galiojimo laiką žr. ant gamintojo pakuotės.</li></ul>
Saugojimo laikas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ausinių saugojimo laikas nenumatytas</li><li>• Priedų (pagalvėlių, laidų, servetėlių) saugojimo laiką žr. gamintojo pateiktoje informacijoje.</li></ul>

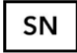

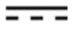




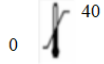





#### Simbolis



#### Informacija

Daugiau informacijos pateikta papildomuose simboliuose ir naudotojo instrukcijoje



	Serijos numeris gaminio etiketėje yra skirtas įrenginio nustatymui
	Vadovaukitės naudojimo instrukcija (naudojama pagal EN/IEC 60601-1)
5.0v 	Tiesioginė srovė Tiesioginė elektros srovė esant nurodytai įtampai.
	BF tipo pritaikyta dalis
	Nenaudokite, jei pakuotė pažeista
	Įrenginys nėra atsparus vandeniui. Saugoti nuo drėgmės
	Prekių skaičius vienoje pakuotėje
	Laikymo sąlygos: 0–40 laipsnių Celsijaus
	Santykinė drėgmė: < 95 %
	Apsauginis įžeminimas
	Nenaudokite, jei nešiojate implantuotą širdies stimuliatorių.
	Nėra apsaugos nuo sąlyčio ar objektų bei skysčių patekimo į įrenginį.
	Prieš naudodamiesi šiuo įrenginiu, susipažinkite su naudojimo instrukcija. Naudojimo instrukcijos nesilaikymas (pvz., elektrodų išdėstymas netinkamoje vietoje) gali sukelti žalą naudotojui

### Naudojimo reikmenys (elektrodų pagalvėlės, servetėlės)

Naudokite tik pakuotėje esančius ar „Neurovalens“ rekomenduojamus naudojimo reikmenis. Susipažinkite su gamintojo instrukcija, pateikta gaminio pakuotėje.

### Gražinimas ir garantijos politika

Daugiau informacijos rasite: [www.modiushealth.com/returnsandwarranty](http://www.modiushealth.com/returnsandwarranty)

## 8. Reguliavimo ir saugos informacija

### Atitikties deklaracija - Modelio pavadinimas: ML600

Šiuo dokumentu „Neurovalens“ pareiškia, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvų, Bendrosios gaminių saugos direktyvos 2001/95/EB ir Radijo įrenginių direktyvos 2014/53 ES nuostatas. Visą atitikties deklaracijos tekstą žr. [www.modiushealth.com/compliance](http://www.modiushealth.com/compliance).

Modius® ausinės klasifikuojamos kaip nepertraukiamo veikimo įrenginys. Modius® kartu su USB įkrovikliu, tiekiamu pagal EN/IEC 60601-1 saugos reikalavimus, yra laikomas medicinos įrangos sistema (ME SYSTEM), skirta numatytai funkcijai atlikti.

Visos naudojamos dalys yra laikomos BF klasės dalimis. Ausinių IP vertinimas yra lygus nuliui. Tai reiškia, kad negalima užtikrinti apsaugos nuo sąlyčio ar objektų bei skysčių patekimo į įrenginį.



Yra FCC ID: QOQBGM113

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Įrenginio naudojimui taikomos šios dvi sąlygos:

1. Įrenginys negali kelti žalingų trukdžių,
2. turi priimti visus gaunamus trikdžius, tame tarpe ir trikdžius, galinčius sukelti

nepageidaujamą veikimą.



Modius® atitinka pagrindinius Radijo įrangos direktyvos 2014/53 ES reikalavimus.



Modius® ausinės atitinka EMC standartus, taikomus Australijos ir N. Zelandijos rinkoms.

Medicinos prietaisų kontrolės institucijų, kuriose šiuo metu parduodami Modius® įrenginiai, nuomone, tai yra sveikatinimo priemonė, todėl jai netaikomi norminiai reikalavimai medicinos prietaisams.

Sertifikavo „Silicon Labs“	FCC-15C
FCC ID:	QOQBGM113
IC ID:	5123A-BGM113

### Saugos pareiškimas

Šis įrenginys buvo išbandytas siekiant atitikti elektromagnetinio suderinamumo ir saugos sertifikavimo reikalavimus pagal EN standartų specifikacijas: EN301489-3, EN301489-17 ir EN 60950-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 ir IEC 60601-1-11.

Modius® įrenginys buvo išbandytas ir atitinka standartus, nustatytus atsparumui esant didesnio nei 2,4 GHz dažnių diapazono radijo dažnių trikdžiams.

Pastaba: Modius® yra skirtas vyresniems nei 18 metų amžiaus asmenims, norintiems sumažinti ar kontroliuoti svorį.

## Saugos įspėjimai ir atsargumo priemonės – ausinės

### Įspėjimai ir atsargumo priemonės:

Prieš naudodami Modius® ausines, susipažinkite su pateikta informacija ir instrukcijomis.

Gelines elektrodų pagalvėles dėkite tik ant mastoidų srities už ausų, kaip nurodyta pateiktoje instrukcijoje.

Įrenginio nedėkite ant krūtinės ar kitos galvos arba kaklo srities.

Šio įrenginio nenaudokite, jei esate nėščia, turite refleksinę epilepsiją, kurią sukelia vestibulinė stimuliacija, arba nešiojate implantuotą širdies stimuliatorių.

Atsiradus nenumatytoms reakcijoms, nedelsdami nuimkite Modius® įrenginį.

- Pagalvėles dėkite tik ant mastoidų, kietos kaulinės srities už ausų, kaip nurodyta instrukcijoje aukščiau. Įrenginio nedėkite ant krūtinės ar kitos galvos arba kaklo srities. Žr. skyrių „Kaip nešioti ausines“.
- Įrenginį naudokite tik sėdėdami arba gulėdami.
- Saugokite įrenginį nuo vaikų. Šio įrenginio negali naudoti jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys. Smulkios detalės, pvz., elektrodų pagalvėlės, kelia užspringimo pavojų.
- Ausines įkraukite gerai vėdinamoje patalpoje. Įkraunant bateriją, gali susidaryti dujos, todėl jas būtina įkrauti gerai vėdinamoje patalpoje.
  
- Šio įrenginio nenaudokite, jei esate nėščia, turite refleksinę epilepsiją, kurią sukelia vestibulinė stimuliacija, arba nešiojate implantuotą širdies stimuliatorių, širdies defibriliatorių ar neurostimuliacijos prietaisą. Pastaba: Modius® stimuliuoja smegenų vestibuliarinę (pusiausvyros) sistemą. Nors įrenginys neturėtų sukelti neigiamos reakcijos epilepsija sergantiems asmenims, tačiau jis gali paskatinti traukilius pacientams, turintiems refleksinę vestibulinę epilepsiją. Kilus abejonėms, epilepsija sergantys įrenginio naudotojai turėtų pasikonsultuoti su šeimos gydytoju.
- Įrenginio nenaudokite judėdami, nes tai gali neigiamai paveikti jūsų pusiausvyrą.
- Įrenginio nenaudokite vartodami alkoholį, vairuodami ar valdydami mechanizmus.
- Įrenginio nenaudokite drėgnoje aplinkoje ir neįmerkite jo į vandenį.
- Nesidalinkite gelinėmis pagalvėlėmis. Jos yra skirtos tik vienam naudotojui.
- Nenaudokite pagalvėlių ilgiau nei rekomenduojama – 60 min. seanso metu.
- Po kiekvieno naudojimo rekomenduojama pašalinti pagalvėlę. Ilgalaikis ar pakartotinis pagalvėlės naudojimas gali sumažinti jos veiksmingumą arba sudirginti odą.
- Nenaudokite pagalvėlių esant pažeistai ar sudirgusiai odai.
- Po naudojimo atsargiai nuimkite pagalvėles nuo odos. Pagalvėles išmeskite į atitinkamą konteinerį ar šiukšliadėžę.
- Neišimkite baterijų. Jų įrenginio naudotojas pakeisti negali.

#### Pastaba:

Šis įrenginys nėra medicinos prietaisas ir negali pakeisti sveikos gyvensenos ar profesionalios medicinos teikiamos pagalbos.

Atsiradus nenumatytoms reakcijoms, nedelsdami nuimkite Modius® įrenginį. Jei seanso metu jaučiate diskomfortą, sustokite, sumažinkite įrenginio intensyvumą ir tik tada tęskite seansą. Galimi pavojai ar šalutinis poveikis: odos sudirginimas; stimuliavimo sukeltas diskomfortas; disbalansas; kartais pykinimas; retai vėmimas. Jei problema išlieka po 1–2 dienų, kreipkitės į gydytoją.

Rekomenduojama naudoti ne ilgiau kaip 1 val. per dieną. Įrenginį naudojant ilgiau kaip 1 valandą per dieną arba 16 valandų laikotarpį, Modius® automatiškai sustabdo stimuliavimą, kad būtų išvengta jūsų „užsiblokavimo“, jei kurią nors dieną norėtumėte pasinaudoti Modius® įrenginiu keliomis valandomis anksčiau.

Nereikėtų piktnaudžiauti nustatant ausines iš naujo, kad būtų užtikrintas jų tinkamas kasdienis naudojimas. Susipažinkite su šiais įspėjimais ir instrukcija. Laikykite šią instrukciją kartu su ausinėmis.

## Įmontuotos baterijos atsargumo priemonės

Modius® ausinėse įmontuota baterija, kurios naudotojas negali pakeisti. Modius® naudotojai negali pakeisti ausinių baterijos.

Neatidarykite ir nesugadinkite įrenginio, nes tai panaikins garantiją ir gali kilti pavojus saugumui.

Ausines įkraukite pagal su šia instrukcija pateiktus nurodymus, naudodami pripažintos bandymų laboratorijos patvirtintą maitinimo įtampą.

Negalima atlikti įrenginio aptarnavimo ar priežiūros (įskaitant valymą ar įkrovimą) įrenginio naudojimo metu

## Informacija apie šalinimą ir perdirbimą



Viena iš Europos direktyvos 2002/96/EB nuostatų teigia, kad elektronikos gaminiai turėtų būti laikomi elektronikos atliekomis, kurių negalima išmesti. Pagal šios direktyvos nuostatas visi susiję gaminiai yra pažymėti perbrauktu ratinio konteinerio simboliu, kaip parodyta aukščiau.

Pasibaigus įrenginio naudojimo laikui, jo ar baterijų nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis, o nuneškite į surinkimo punktą, skirtą elektroninės įrangos perdirbimui. Netinkamas šalinimas gali sukelti kenksmingų toksinų susidarymą ore, vandenyje ir dirvožemyje bei pakenkti žmonių sveikatai.

Pastaba: pagalvėles ir servetėles pašalinkite į atitinkamą konteinerį ar šiukšliadėžę.

## Informacija apie licenciją



Modius® naudoja „Bluetooth“ technologiją

## Sąlygos

Daugiau informacijos rasite: [www.modiushealth.com/termsandconditions](http://www.modiushealth.com/termsandconditions)

## 9. Kontaktinė informacija

[www.modiushealth.com](http://www.modiushealth.com)

[team@modiushealth.com](mailto:team@modiushealth.com)

[support@modiushealth.com](mailto:support@modiushealth.com)



Gamintojas Neurovalens, 4th Floor, The Warehouse, 7 James Street South, Belfast BT2 8DN.

© 2018 Neurovalens