

MODIUS®

Gebruikershandleiding

v1.0

Modius® is een revolutionaire nieuwe Careable Technology® die u op weg helpt naar een slanker lichaam.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

- Dit product niet gebruiken indien u epilepsie hebt of een pacemaker draagt.
- Houd dit product buiten het bereik van kinderen. Kleine onderdelen zoals de elektrodepads kunnen een verstikkingsgevaar inhouden voor kinderen.
- Waarschuwing: De uitrusting mag niet worden gewijzigd.
- Volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen zoals beschreven in de paragraaf Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen van deze gebruikershandleiding nauwkeurig op voor gebruik van de Modius® headset

Inhoud

1. Inleiding van Modius®	2
2. Modius® verpakking – inhoud	2
3. Aan de slag	2
4. Gebruik van uw Modius®-headset	4
5. Probleemoplossing	6
6. Verzorging van uw Modius®	7
7. Algemene productinformatie en technische specificaties	8
8. Vermeldingen in verband met de regelgeving en de veiligheid.....	10
9. Contact	12

1. Inleiding van Modius®

Hartelijk dank voor uw aankoop van Modius®, gefeliciteerd met uw eerste stap naar een slanker lichaam!

Modius® is een transdermale neurostimulatie headset. De headset werkt op batterijen en geeft neurostimulatie-pulsen met een laag energieniveau af, die de activiteit van de vestibulaire craniale zenuw stimuleren. De afgifte van deze pulsen (stroom) vindt plaats door middel van twee zelfklevende elektrodepads. Deze pads worden bevestigd op de huid die de mastoïden bedekt (achter de oren). Wanneer de headset wordt aangeschakeld, geeft het product een klein elektrisch signaal af, dat door de gebruiker naar boven of naar beneden kan worden bijgesteld.

Zodra de instelling is aangepast op een niveau waarbij de gebruiker een draagbaar, comfortabel zacht schommelend gevoel ondervindt. Idealiter moet de stimulatie door de Modius® headset gedurende de gehele sessie (1 uur) op dit niveau blijven staan. Overige wijzigingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de Modius®-app. Het hulpmiddel kan ook worden gepauzeerd door op het pauze-icoon van de app te drukken of eventueel door twee keer snel achter elkaar op de aan/uitknop te drukken van de headset. Wanneer de gebruiker klaar is, verwijdert hij/zij de headset en gooit na elk gebruik de elektrodepads weg. Wanneer het product niet wordt gebruikt kan het worden opgeladen met behulp van een micro-USB-kabel. Om veiligheidsredenen zijn er software-controles aanwezig om te voorkomen dat het hulpmiddel een elektrische signaal afgeeft wanneer deze aan de micro-USB-kabel is gekoppeld om de batterij op te laden.

Aanbevolen gebruik is 1 uur per dag, de Modius® headset stopt automatisch de stimulatie wanneer het gebruik langer is dan 1 uur per dag. De gebruiker kan het hulpmiddel pas weer gebruiken na een periode van 16 uur. Zo kunt u uw stimulatie-routine flexibel houden indien nodig. De Modius® headset is bedoeld voor gebruikers ouder dan 18 jaar in de thuissituatie.

2. Modius® verpakking – inhoud

1. Modius® headset
2. Modius® gebruikershandleiding
3. USB-stroomkabel en oplader
4. 150 elektrode-gelpads, 100 alcoholdoekjes

Opmerking: Onderdelen die ook nodig zijn voor gebruik van de Modius® headset maar niet meegeleverd: mobiele apparatuur bijv. smartphone of tablet computer, met besturingssysteem; Android 5.0 of hoger, of iOS 9 of hoger.

3. Aan de slag...

Uw Modius® headset opladen

- Verbind de bijgeleverde USB-stroomkabel van uw Modius® headset met de USB stekkeradapter (meegeleverd) en verbind de kabel met de headset.
- Tijdens het opladen van de headset kleurt de LED-indicator ononderbroken oranje.
- Wanneer de headset volledig is opgeladen, wordt de oranje LED-indicator uitgeschakeld.
- Als bij het aansluiten van de stroomkabel op de headset de LED-indicator oranje knippert, ondervindt de headset een probleem bij het opladen (zie "Probleemoplossing").
- Wanneer de batterij bijna leeg is, gaat het oranje lampje telkens 3 keer kort achter elkaar knipperen. Ook hoort u 3 pieptonen. Na het zien van deze lege batterij-indicatoren hebt u nog 60 minuten stimulatietijd (max) voordat de headset zichzelf uitschakelt.

OPMERKING: vergewis u ervan de stroomkabel los te koppelen voor u probeert uw headset te gebruiken. Zorg voor voldoende ruimte voor de USB-oplader zodat het veilig kan worden verwijderd van de headset en de stroombron.

Uw headset koppelen met uw Bluetooth-apparaat

- Voor u start, vergewis u ervan dat:
 - Uw headset is opgeladen (zie "Opladen van uw Modius® headset"), en de stroomkabel is losgekoppeld.
 - De draadloze Bluetooth-technologie is ingeschakeld op uw mobiele apparaat.
- Download de Modius®-app vanuit de Apple App Store of Google Play en voltooi de registratie.
- Terwijl de headset uitstaat:
 - o Druk gedurende 2 seconden op de aan/uitknop op de zijkant van de headset
 - o U hoort een hoge pieptoon en de aan/uitknop gaat wit knipperen. Een blauwe LED-indicator gaat regelmatig knipperen om aan te geven dat de headset kan worden gekoppeld.
 - Start de Modius®-app op uw mobiele apparaat op, de app zoekt contact met uw headset.
 - Zodra de headset verbinding maakt met de app, hoort u een pieptoon en knippert de LED-indicator blauw. De headset informeert u zo dat uw mobiele apparaat een verzoek tot koppeling met de headset heeft verstuurd.
 - Klik eenmaal op de aan/uitknop op de headset om de koppeling te aanvaarden.
 - Op uw mobiele apparaat ontvangt u een melding dat uw headset gekoppeld wil worden met uw mobiele apparaat. Aanvaard de koppeling, de headset geeft twee pieptonen om de koppeling te bevestigen.
 - Het kan 10 seconden duren voordat de koppeling is voltooid.
 - Wanneer de koppeling is voltooid verandert de interface van de app en toont het dashboard. De gebruiker kan nu de headset bedienen.

4. Gebruik van uw Modius®-headset

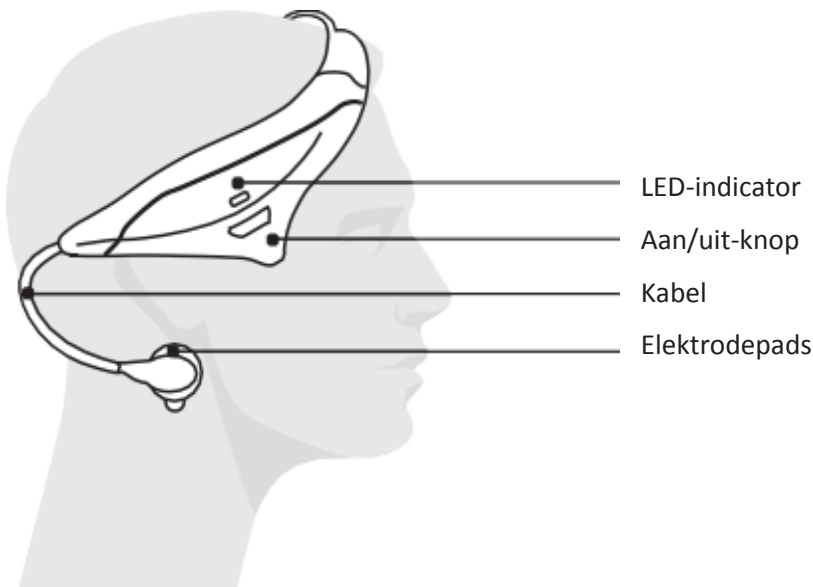
Aanbevolen gebruik

Aanbevolen gebruik is 1 uur per dag. Als veiligheidsmaatregel stopt de Modius® automatisch als u het apparaat langer dan 1 uur per dag gebruikt. Na een periode van 16 uur kunt u een nieuwe sessie starten, zo kunt u uw gebruiksroutine flexibel houden.

Opmerking: We verwijzen naar de rubriek waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor meer informatie over de productveiligheid.

Hoe draagt u uw headset

- Reinig de huid op het harde benige gebied achter uw oren met een alcoholdoekje (mastoïden).
- Verwijder de plastic beschermhoesjes van de gelpads.
Strijk eventuele haarlokken weg voordat u de gelpads bevestigt aan de schone huid van uw mastoïden.
- Plaats de headset op uw hoofd zoals geïllustreerd in *figuur 1*, met de aan/uitknop boven uw rechter oor.
- Maak de kabel-drukknoppen van de Modius® vast aan de gelpads achter elk oor.



Figuur 1

Uw headset inschakelen en een nieuwe sessie starten

- Vergewis u ervan dat
 - o De headset is opgeladen en gekoppeld aan uw mobiele apparaat.
 - o De headset comfortabel op uw hoofd zit en de elektrodes zijn aangesloten volgens de instructies.
- Zet de headset aan door gedurende 2 seconden op de aan/uitknop te drukken. U hoort een hoge piepton en de witte LED-indicator begint periodiek te knipperen.
- Start de Modius®-app op en navigeer naar de "Dashboard"-tab.
- Klik op de "Start"-knop op het scherm – Hiermee begint uw stimulatie en de sessie
- Wanneer het apparaat langer dan 60 minuten in gebruik is, hoort u 3 korte, hoge pieptonen en de LED-indicator knippert herhaaldelijk 3 keer achterelkaar wit. U hebt nu uw sessie beëindigd.

Wijzigen van het stimulatieniveau

- Op de Modius®-app navigeert u naar de "Dashboard"-tab.
- Het stimulatieniveau kan worden gewijzigd met de bedieningsknoppen op het beeldscherm, het kan naar boven '^' of naar beneden 'v' worden aangepast.
- Elke keer wanneer u het stimulatieniveau wijzigt, gaat de headset piepen om aan te geven dat het stimulatieniveau is veranderd.
- Het maximale vermogensniveau van de headset bedraagt 10. Als u tracht het vermogensniveau nog verder te verhogen, hoort u 2 korte hoge pieptonen om aan te geven dat u het hoogste vermogensniveau hebt bereikt.
- Het minimale vermogensniveau van de headset bedraagt 1. Als u het vermogensniveau nog verder verlaagt, hoort u 2 korte lage pieptonen om aan te geven dat de headset niet langer stimuleert en niveau '0' heeft bereikt, en dus eigenlijk in stand-by staat.

* Als u tijdens een sessie ongemakken ervaart, moet u de sessie stopzetten en de intensiteit verlagen voor u weer verder gaat. Zie aanvullende waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor meer informatie.

Uw Modius® headset resetten

Soms kan het nodig zijn uw headset te resetten omdat u problemen ondervindt. Om uw headset te resetten, volgt u de volgende instructies.

OPMERKING: Het resetten van uw headset kan het verlies van gegevens die niet zijn gesynchroniseerd met de app tot gevolg hebben.

- Verbind de Modius® headset met de meegeleverde stroomkabel en USB-oplader
- Controleer of de oranje LED-indicator brandt (dit geeft aan dat de headset wordt opgeladen)
- Houd de aan/uit knop op de zijkant van de headset langer dan 10 seconden ingedrukt tot u een reeks van drie lange pieptonen hoort.
- De headset is nu gereset, koppel de stroombron los. U zou nu weer zoals normaal verder moeten kunnen gaan met het gebruik.

Uw headset uitschakelen

- Tijdens gebruik of wanneer de headset in stand-by staat en klaar is om gebruikt te worden, houdt u de aan/uitknop minstens 2 seconden ingedrukt.
- U hoort een lage pieptoon om aan te geven dat de headset uitstaat en na 10 seconden begint de app opnieuw uw headset te zoeken.
- Laad uw headset op na elk gebruik, zodat ze klaar is voor uw volgende sessie.

5. Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ik kan mijn headset aanzetten, maar geen sessie starten.	De headset is aangesloten op de stroomkabel.	Koppel de kabel los voor u een sessie start.
Ik kan mijn headset niet aanzetten.	De headset is niet opgeladen.	Sluit de headset aan op de stroomkabel.
	De headset staat in een diepe stand-bymodus.	Sluit de headset aan op de stroomkabel en probeer de headset aan te zetten.
Mijn headset werkt gedurende een tijdje en schakelt dan vanzelf uit.	De weerstand tussen de pads is te groot.	Vergewis u ervan dat u de alcoholdoekjes hebt gebruikt voor u de gelpads aanbrengt op uw huid, dat de pads correct achter uw oren zijn geplaatst en dat geen haar aanwezig is tussen de pads en uw huid.
	De op de elektroden bevestigde pads zijn versleten.	Vervang de gelpads op de headset.
Mijn headset kan niet verbonden worden met mijn mobiele apparaat.	Bluetooth is niet ingeschakeld op uw mobiele apparaat.	Vergewis u ervan dat Bluetooth® is ingeschakeld op uw hulpmiddel.
	Uw mobiele apparaat ervaart problemen wanneer hij zoekt naar de headset	Start opnieuw de app op uw mobiele apparaat.
Gedurende de koppeling hoor ik 3 korte, lage pieptonen en de LED-indicator knippert 3 keer blauw.	De headset heeft de time-out bereikt tijdens het wachten op uw aanvaarding van het koppelingsverzoek van uw mobiele apparaat	Zet de headset uit en probeer de koppeling opnieuw te maken door de instructies in "Koppelen van uw headset aan uw mobiele apparaat" te volgen.
Ik ondervind ongemak bij gebruik van de headset.	Het vermogensniveau van het apparaat is misschien te hoog.	Reduceer het vermogensniveau van de headset via de app tot u een zacht schommelend gevoel ondervindt of tot het ongemak verdwijnt

Wanneer ik de headset aansluit op de oplader, knippert de LED-indicator oranje	Het headset ondervindt een probleem met het opladen	Probeer de stroomkabel aan te sluiten op een andere USB-stekker. Als dat uw probleem niet oplost, neem dan contact op met het supportteam
De LED-indicator op mijn headset knippert oranje en ik hoor 3 korte, lage pieptonen	De batterij van de headset is bijna leeg	Laad de headset op (zie "Opladen van uw Modius® headset")
Wanneer ik de headset aanzet, hoor ik 3 lage pieptonen	De batterij van de headset is kritiek.	Laad de headset op (zie "Opladen van uw Modius® headset")

6. Verzorging van uw Modius®

Headset

- Gebruik de pads uitsluitend op de mastoïden, het harde benige gebied achter uw oor, zoals aangegeven in de hierboven beschreven instructies. Plaats ze niet op uw borstkas of elders op het hoofd of de nek. Zie "Hoe draagt u uw headset".
- Gebruik de headset uitsluitend in zittende of liggende houding.
- Houd dit product buiten het bereik van kinderen. Personen jonger dan 18 jaar mogen dit product niet gebruiken.
- Reinigen met een zacht doekje.
- Na gebruik de headset uitzetten.
- Na elk gebruik de headset volledig opladen voor ze weer in de koffer te plaatsen.
- Gebruik geen schuurmiddelen of sterke detergenten.
- Zorg ervoor dat de headset niet nat wordt.
- Mag niet worden ondergedompeld in vloeistoffen.
- Mag niet blootgesteld worden aan overmatig zonlicht.
- Zorg ervoor dat de hoofdband van de Modius® niet wordt vervormd of uitgerekt. Dat beïnvloedt het comfort en de veiligheid van de pasvorm op uw hoofd.

Gelpads

- Strijk eventuele haarlokken weg voor u de gelpads aan de schone huid bevestigt. Anders kunnen ze aan het haar blijven plakken.
- Vergewis u ervan dat uw huid schoon is en alle make-up, crèmes en andere lotions volledig verwijderd zijn voor u de pads aanbrengt.
- Reinig uw handen voor u de pads hanteert en vermijd ze zoveel mogelijk met uw vingers aan te raken. Gooi de pads na gebruik weg in een geschikte container of afvalbak.
- Laat uw gelpads door niemand anders gebruiken. De pads zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik.
- Gebruik een pad niet langer dan 60 minuten per sessie zoals aanbevolen.

7. Algemene productinformatie en technische specificaties

Technische specificaties: Modius® headset

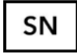

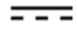










Kenmerken stroombron	
Batterijlevensduur	Bij benadering 10 uur bij stimulatieniveau 10 – bij benadering 4 of 5 dagen bij gebruik zoals voorzien.
Inputstekker	Volledig geïsoleerde touchproof micro USB
Gewicht	85g
Grootte	180x140x70mm
Informatie netaansluiting	
Micro -USB-poort (alle USB-poorten en USB-opladers moeten zijn gecertificeerd volgens EN/IEC 60601-1 om de veiligheid blijvend te waarborgen, alleen de met het product meegeleverde lader mag worden gebruikt om de Modius® op te laden. Spanning: 4,75 – 5,25V Max stroom 155 mA DC	
Maximale uitgangsspanning Maximale uitgangsstroom	20V 600uA.
Bluetooth BLE - BGM113	
Frequentieband	2,4GHz voor de Bluetooth energiearme functie
Maximaal uitgezonden RF-vermogen	+3 dBm
Batterij (batterij kan niet door de gebruiker worden vervangen) Lithium-polymeer 4,2 V 155 mAh	
Omgevingsomstandigheden bij gebruik	
Omgeving	Thuis voor persoonlijk gebruik
Temperatuurbereik	0°C tot 40°C
Waterweerstand	0m
Geluidsniveau	0dB
Omgevingsomstandigheden voor opslag	
Temperatuurbereik	0 tot 40°C
Relatieve luchtvochtigheid	< 95%
Verwachte levensduur	Het apparaat heeft een waarborg van 1 jaar, maar kan vaak langer gebruikt worden. Accessoires (kabels, pads en doekjes) vallen niet onder de waarborg. <ul style="list-style-type: none"> • De levensduur van de kabels wordt grotendeels bepaald door het gebruik. Behandel de kabel steeds met zorg. • De elektrodepads kunnen slechts voor 1 toepassing gebruikt worden. Voor de houdbaarheidsdatum, raadpleeg de informatie van de fabrikant. • Voor de houdbaarheidsdatum van de doekjes, raadpleeg de informatie van de fabrikant.
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • De headset heeft geen vaste houdbaarheidsdatum. • Voor de houdbaarheidsdatum van de accessoires (pads, kabels en doekjes), raadpleeg de informatie van de fabrikant.

Symbool



Informatie

Voor meer informatie verwijzen we naar de andere symbolen en de gebruikershandleiding.

	Het serienummer ter identificatie van het product staat weergegeven op het productlabel.
	Volg de gebruiksaanwijzing (gebruikt in overeenstemming met EN/IEC 60601-1)
5,0 V 	Gelijkstroom Elektrische gelijkstroom bij weergegeven voltage.
	Type BF toegepast onderdeel
	Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd
	De eenheid is niet waterbestendig. Tegen vocht beschermen
	Aantal onderdelen per verpakking
	Opslagcondities: 0 – 40 °C
	Relatieve luchtvochtigheid: < 95%
	Veiligheidsaarding (beschermende aarde)
	Niet gebruiken als u een pacemaker draagt
	Er is geen bescherming tegen contact en binnendringen van voorwerpen en geen bescherming tegen binnendringen van vloeistof.
	Lees voor gebruik van dit hulpmiddel eerst de gebruiksaanwijzing. Indien de gebruiksaanwijzing (IFU - instructions for use) (bijv. de juiste plaatsing van de elektrodes) niet wordt opgevolgd, kan de gebruiker letsel oplopen

Consumptieartikelen (elektrodepads, doekjes)

Gebruik uitsluitend de consumptieartikelen meegeleverd in de verpakking of aanbevolen door Neurovalens. Raadpleeg de instructies van de fabrikant die staan vermeld op de productverpakking.

Waarborg en retourbeleid

Voor verdere informatie verwijzen we naar www.modiushealth.com/returnsandwarranty

8. Vermeldingen in verband met de regelgeving en de veiligheid

Conformiteitsverklaring - model: ML600

Hierbij verklaart Neurovalens dat dit product voldoet aan de essentiële voorwaarden en andere relevante voorzieningen van de richtlijn inzake algemene productveiligheid 2001/95/EC en de radio-apparatuurrichtlijn 2014/53 EU. Voor de volledige conformiteitsverklaring verwijzen we naar www.modiushealth.com/compliance.

De Modius® headset is geclassificeerd voor niet-continu gebruik. Modius® en de meegeleverde, in overeenstemming met de elektrische veiligheidsnormen EN/IEC 60601-1 zijnde USB-oplader, wordt beschouwd als een medisch apparaat systeem (ME-SYSTEEM) om zijn functie te vervullen.

Alle toegepaste onderdelen zijn BF-geclassificeerd. De IP-waarde van de headset is nul. Dit betekent dat er geen bescherming is tegen contact en binnendringen van voorwerpen en geen bescherming tegen binnendringen van vloeistof.



Omvat FCC ID: QOQBGM113

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking van dit apparaat is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie aanvaarden, inclusief interferentie die kan leiden tot een ongewenste werking.



Modius® voldoet aan de toepasselijke essentiële voorwaarden van de radio-apparatuurrichtlijn 2014/53 EU.



Modius® voldoen aan de EMC-normen die gelden voor de markt in Australië en Nieuw-Zeeland.

Modius® wordt in een aantal landen verkocht. Deze landen beschouwen Modius® als een instrument om het algemene welzijn te bevorderen en leggen daarom geen reglementaire voorwaarden voor medische apparatuur op.

Gecertificeerd via Silicon Labs
FCC ID:
IC ID:

FCC-15C
QOQBGM113
5123A-BGM113

Veiligheidsverklaring

Deze apparatuur is getest om te voldoen aan de elektromagnetische compatibiliteit en veiligheidscertificering in overeenstemming met de specificaties van de EN-normen: EN301489-3, EN301489-17 en EN 60950-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 en IEC 60601-1-11.

Modius® is getest en voldoet aan de erkende normen voor radiofrequentie interferentie immuniteit bij een frequentiebereik van 2,4 GHz.

Opmerking: Modius® is uitsluitend geïndiceerd voor volwassenen ouder dan 18 jaar om te helpen afvallen en hun gewichtsdoelstellingen te behalen.



Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

Raadpleeg de bijgevoegde informatie en instructies voor u de Modius® headset gebruikt.

Plaats de elektrode-gelpads uitsluitend op de mastoïden, achter de oren, zoals aangegeven in de bijgevoegde handleiding. Plaats ze niet op uw borstkas of elders op het hoofd of de nek.

Gebruik dit product niet tijdens de zwangerschap, als u reflex epilepsie hebt die wordt getriggerd door vestibulaire stimulatie of als u een pacemaker draagt.

Als onverwachte reacties optreden, moet u het gebruik van de Modius® onmiddellijk staken.

- Gebruik de pads uitsluitend op de mastoïden, het harde benige gebied achter uw oor, zoals aangegeven in de hierboven beschreven instructies. Plaats ze niet op uw borstkas of elders op het hoofd of de nek. Zie "Hoe draagt u uw headset".
- Gebruik de headset uitsluitend in zittende of liggende houding.
- Houd dit product buiten het bereik van kinderen. Personen jonger dan 18 jaar mogen dit product niet gebruiken. Kleine onderdelen zoals de elektrodepads kunnen een verstikkingsgevaar inhouden voor kinderen.
- Laad de headset op in een goed geventileerde ruimte. Er kunnen gassen vrijkomen tijdens het opladen van de batterij en daarom moet de batterij worden opgeladen in een goed geventileerde ruimte.

- Gebruik dit product niet tijdens de zwangerschap, als u reflex-epilepsie hebt die wordt getriggerd door vestibulaire stimulatie of een pacemaker, hartdefibrillator of neurostimulator draagt. Opmerking: Modius® stimuleert het vestibulair (evenwicht) systeem van de hersenen. Dit apparaat veroorzaakt bij de meeste mensen met epilepsie geen problemen, maar bij iemand met vestibulaire reflex-epilepsie zou het een toeval kunnen veroorzaken. In geval van twijfel moeten mogelijke gebruikers de eventuele toepassing eerst bespreken met hun huisarts.
- Gebruik dit apparaat niet wanneer u beweegt, omdat het een invloed op uw evenwicht kan hebben.
- Mag niet gebruikt worden tijdens het besturen van voertuigen of bedienen van machines of tijdens het gebruik van alcohol.
- Gebruik dit product niet in een vochtige omgeving of dompel de headset niet onder in water.
- Laat uw geldpads door niemand anders gebruiken. Ze zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik.
- Gebruik een pad niet langer dan 60 minuten per sessie zoals aanbevolen.
- Het wordt aanbevolen de pads na elk gebruik weg te gooien. Langdurig of herhaald gebruik van een pad kan de doeltreffendheid ervan verminderen of huidirritatie veroorzaken.
- De pads mogen niet worden gebruikt op beschadigde of geïrriteerde huid.
- Verwijder de pads voorzichtig van de huid na gebruik. Gooi de pads weg in een geschikte container of afvalbak.
- Probeer de batterijen niet te verwijderen. Ze kunnen niet door de gebruiker vervangen worden.

Opmerking:

De headset is geen medisch hulpmiddel, noch kan het een gezonde levensstijl vervangen of worden toegepast als professionele medische zorg.

Als onverwachte reacties optreden, moet u het gebruik van de Modius® onmiddellijk staken. Als u tijdens een sessie ongemakken ervaart, moet u de sessie stopzetten en de intensiteit verlagen voor u opnieuw start.

Mogelijke risico's of bijwerkingen zijn onder andere: huidirritatie; ongemak wegens de stimulatie; een gevoel van evenwichtsverlies; soms optredende misselijkheid; en zelden braken. Als een probleem niet na 1-2 dagen verdwijnt, dient u uw arts te raadplegen.

Aanbevolen gebruik is maximaal 1 uur per dag. Modius® stopt automatisch met stimuleren als u het apparaat langer dan 1 uur per dag gebruikt of gedurende een periode van 16 uur, om te vermijden dat u wordt 'vergrendeld' als u op een dag de Modius® enkele uren vroeger wenst te gebruiken.

De reset-instructies mogen niet worden misbruikt om het persoonlijke dagelijkse gebruik te verhogen.

Lees en volg deze waarschuwingen en instructies. Bewaar deze handleiding bij uw headset.

Ingebouwde voorzorgsmaatregelen voor batterijen

Uw Modius® headset beschikt over een ingebouwde batterij, die niet door de gebruiker kan worden vervangen. Gebruikers van Modius® mogen geen poging doen om zelf de batterij in de headset te vervangen.

Manipuleer uw product niet of probeer niet om het te open. Dat maakt de waarborg ongeldig en kan tot een veiligheidsrisico leiden.

Laad de headset op volgens de instructies bij deze handleiding en gebruik een voeding die is gecertificeerd door een erkend testlaboratorium.

Indien het hulpmiddel in gebruik is, mag er geen service of onderhoud (inclusief schoonmaken of opladen) aan het hulpmiddel worden gepleegd.

Informatie over het verwijderen en recycling



Een van de bepalingen van de Europese richtlijn 2002/96/EC stelt dat alle elektronische onderdelen moeten worden behandeld als elektronisch afval en niet mogen worden weggegooid. Om u te herinneren aan deze richtlijn zijn alle betrokken producten nu voorzien van het symbool van de doorkruiste afvalcontainer.

Aan het einde van de levenscyclus van het product mogen dit product of de batterijen niet worden weggegooid met het normale huisafval. Ze moeten naar een verzamelpunt voor recycling van elektronische apparatuur worden gebracht. Een incorrecte verwijdering kan leiden tot ophoping van schadelijke giftige stoffen in de lucht, het water en de bodem en kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens.

Opmerking: Gooi de pads en doekjes in een geschikte container of afvalbak.

Licentie-informatie



Modius® maakt gebruik van Bluetooth

Algemene voorwaarden

Voor verdere informatie verwijzen we naar www.modiushealth.com/termsandconditions

9. Contact

www.modiushealth.com
team@modiushealth.com
support.modiushealth.com



Gefabriceerd door Neurovalens, 4e verdieping, The Warehouse, 7 James Street South, Belfast BT2 8DN.

© 2018 Neurovalens

