

MODIUS®

Poradnik użytkownika v1.0

Modius® to nowa, rewolucyjna technologia Careable®, dzięki której łatwiej uzyskasz szczupłą sylwetkę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Nie używać produktu w przypadku epilepsji lub stosowania rozrusznika serca.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe elementy, takie jak wkładki z elektrodami, stanowią zagrożenie zadławieniem.
- Ostrzeżenie: Nie zezwala się na wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji tego sprzętu.
- Należy zastosować się do wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności wyszczególnionych w sekcji Ostrzeżenia i środki ostrożności niniejszego poradnika użytkownika przed użyciem zestawu słuchawkowego Modius®

Spis treści

1. Wprowadzenie do urządzenia Modius®	2
2. Modius® — zawartość opakowania	2
3. Pierwsze kroki	2
4. Używanie zestawu słuchawkowego Modius®	4
5. Rozwiązywanie problemów	6
6. Dbanie o urządzenie Modius®	7
7. Ogólne informacje o produkcie i dane techniczne	8
8. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i prawne	10
9. Kontakt	12

1. Wprowadzenie do urządzenia Modius®

Dziękujemy za zakup urządzenia Modius® i gratulujemy wykonania pierwszego kroku na drodze do szczupłej sylwetki!

Modius® to zestaw słuchawkowy do neurostymulacji transdermalnej. Jest to akumulatorowo zasilany zestaw słuchawkowy dostarczający energii niskiego poziomu w formie fali neurostymulującej, która pobudza aktywność nerwu przedślonkowo-ślimakowego. Podawanie tej fali (prądu) następuje poprzez dwie samoprzylepne wkładki z elektrodami. Wkładki te umieszcza się na skórze na wyrostkach sutkowatych (za uszami). Po włączeniu produkt podaje małe impulsy elektryczne, których siłę może regulować użytkownik.

Po dostosowaniu do poziomu, w którym użytkownik odczuwa znośne, komfortowe, delikatne mrowienie zaleca się utrzymanie stymulacji Modius® na tym poziomie przez czas trwania jednej sesji (1 godz.). Dokładniejszej regulacji można dokonać za pośrednictwem aplikacji Modius®. Urządzenie można również zatrzymać przy użyciu aplikacji (ikona pauzy) lub poprzez szybkie dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania zestawu słuchawkowego. Każdorazowo po zakończeniu sesji użytkownik zdejmuje zestaw słuchawkowy i wyrzuca wkładki z elektrodami. Kiedy produkt nie jest używany, można go naładować przy użyciu przewodu micro-USB. Ze względów bezpieczeństwa w oprogramowaniu istnieją zabezpieczenia, które uniemożliwiają dostarczaniu stymulacji elektrycznej przez urządzenie po podłączeniu do przewodu micro-USB w celu załadowania baterii.

Zaleca się używanie urządzenia przez 1 godz. dziennie. Zestaw słuchawkowy Modius® automatycznie wstrzyma stymulację, jeśli użycie przekroczy 1 godz. dziennie. Użytkownik nie może użyć urządzenia ponownie w ciągu kolejnych 16 godzin. Taki czas zapewnia pewną swobodę w zakresie stosowania stymulacji. Zestaw słuchawkowy Modius® jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników, którzy ukończyli 18 lat, stosujących produkt w domu.

2. Modius® — zawartość opakowania

1. Zestaw słuchawkowy Modius®
2. Modius® — instrukcja obsługi
3. Przewód do ładowania i ładowarka USB
4. 150 wkładek żelowych z elektrodami, 100 chusteczek z alkoholem

Informacja: Elementy wymagane do działania zestawu słuchawkowego Modius®, które nie są dostarczane z produktem:

Urządzenie przenośne, np. smartfon, tablet, z systemem operacyjnym Android 5.0 (lub nowszym) lub iOS 9 (lub nowszym).

3. Pierwsze kroki...

Ładowanie zestawu słuchawkowego Modius®

- Podłączyć przewód zasilający USB dołączony do zestawu słuchawkowego Modius® do przejściówki USB (dostarczona z produktem), a następnie podłączyć przewód do zestawu słuchawkowego.
- Jeśli zestaw słuchawkowy jest ładowany, dioda LED będzie nieprzerwanie świecić na bursztynowo.
- Po naładowaniu zestawu słuchawkowego, bursztynowa dioda LED wyłączy się.
- Jeśli kabel zasilania zostanie podłączony do zestawu słuchawkowego, a dioda LED miga na bursztynowo, urządzenie ma problem z ładowaniem (patrz „Rozwiązywanie problemów”).
- Jeśli poziom baterii jest niski, bursztynowa dioda będzie migać w sekwencji po trzy mignięcia. Urządzenie wyemituje również ostrzeżenie dźwiękowe (3 sygnały). Po wydaniu ostrzeżeń o niskim poziomie baterii urządzenie zapewni (maksymalnie) 60 minut stymulacji, po czym zestaw słuchawkowy wyłączy się.

INFORMACJA: Przed przystąpieniem do korzystania z zestawu słuchawkowego należy odłączyć kabel ładowania. Upewnij się, że zapewniono wystarczającą ilość miejsca ładowarce USB, aby umożliwić jej bezpieczne odłączenie od zestawu słuchawkowego i źródła zasilania

Parowanie zestawu słuchawkowego z urządzeniem Bluetooth

- Przed rozpoczęciem upewnić się, że:
 - Zestaw słuchawkowy jest naładowany (patrz „Ładowanie zestawu słuchawkowego Modius®”), a kabel ładowania został odłączony.
 - W urządzeniu przenośnym włączona jest bezprzewodowa technologia Bluetooth.

Pobrano aplikację Modius® ze sklepu Apple App Store lub Google Play i zakończono proces rejestracji.

- Przy wyłączonym zestawie słuchawkowym:
 - o Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania z boku zestawu słuchawkowego przez 2 sekundy
 - o Rozlegnie się wysoki sygnał dźwiękowy, a przycisk zasilania zaświeci się na biało. Niebieska dioda LED będzie migać okresowo, co wskazuje, że zestaw słuchawkowy jest gotowy do sparowania.
- Uruchomić aplikację Modius® na urządzeniu przenośnym; aplikacja rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu zestawu słuchawkowego.
- Po połączeniu zestawu słuchawkowego z aplikacją, wyemitowany zostanie krótki dźwięk, a dioda LED zamiga na niebiesko. W ten sposób zestaw słuchawkowy informuje, że urządzenie przenośne prosi o sparowanie.
- Kliknąć raz przycisk zasilania zestawu słuchawkowego, aby zaakceptować parowanie.
- Na urządzeniu przenośnym zostanie wyświetlone powiadomienie informujące, że zestaw słuchawkowy chce sparować się z urządzeniem. Zaakceptować parowanie; zestaw słuchawkowy wyda dwa sygnały dźwiękowe, potwierdzając zakończenie parowania.
- Parowanie może potrwać około 10 sekund.
- Po zakończeniu parowania ekran aplikacji zmieni się, wyświetlając pulpit nawigacyjny oraz kontrolki użytkownika umożliwiające obsługę zestawu słuchawkowego.

4. Używanie zestawu słuchawkowego Modius®

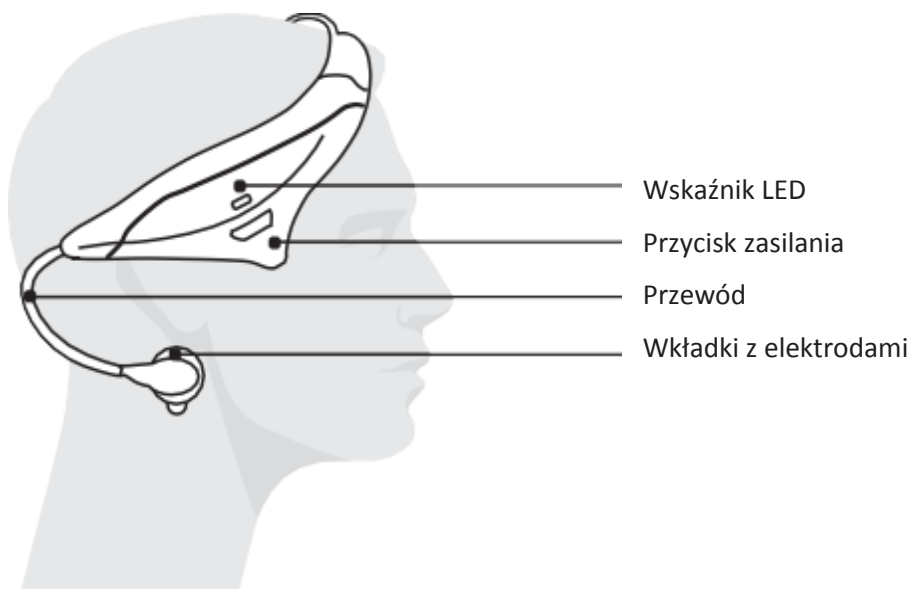
Zalecane użycie

Zaleca się stosowanie przez maksymalnie 1 godzinę dziennie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzenie Modius® automatycznie przestaje stymulować po przekroczeniu 1 godziny dziennego działania. Nową sesję można rozpocząć po upływie 16 godzin, co zapewnia elastyczność w rutynie stosowania.

Informacja: Więcej informacji na temat bezpieczeństwa produktu zawiera sekcja Ostrzeżenia i środki ostrożności.

Jak nosić zestaw słuchawkowy

- Użyć chusteczki z alkoholem, aby oczyścić skórę na twardych kościstych obszarach za uszami (wrostkach sutkowatych).
- Zdjąć plastikową pokrywę ochronną z wkładek żelowych.
Usunąć wszelkie pasma włosów przed zamocowaniem wkładek żelowych na czystej skórze wyrostków sutkowatych.
- Umieścić zestaw słuchawkowy na głowie, jak wskazano na *rysunku 1*, wyrównując przycisk zasilania nad prawym uchem.
- Podłączyć końcówki przewodów urządzenia Modius® do wkładek żelowych za uszami.



Rysunek 1

Włączanie zestawu słuchawkowego i rozpoczęcie nowej sesji

- Upewnić się, że
 - o Zestaw słuchawkowy jest naładowany i sparowany z urządzeniem przenośnym.
 - o Zestaw słuchawkowy jest wygodnie umieszczony na głowie, a elektrody są podłączone zgodnie z instrukcjami.
- Włączyć zestaw słuchawkowy, naciskając przycisk zasilania przez 2 sekundy. Zostanie wydany wysoki sygnał dźwiękowy, a biały wskaźnik LED zacznie migać okresowo.
- Uruchomić aplikację Modius® i przejść do karty „Dashboard”.
- Kliknąć przycisk „Start” na ekranie — spowoduje to rozpoczęcie stymulacji i sesji
- Po 60 minutach sesja zostaje zakończona po usłyszeniu 3 krótkich, wysokich dźwięków i kilkukrotnym zamiganiu diody LED na biało (w powtarzalnej sekwencji po 3 mignięcia).

Dostosowanie poziomu stymulacji

- W aplikacji Modius® przejść do karty „Dashboard”.
- Poziom stymulacji można wyregulować przy użyciu kontrolki na ekranie. Można go regulować w górę „^” lub w dół „v”
- Każdorazowo w przypadku regulacji poziomu stymulacji zestaw słuchawkowy wyda sygnał dźwiękowy, aby powiadomić użytkownika o zmianie poziomu stymulacji.
- Maksymalny poziom mocy zestawu słuchawkowego wynosi 10. Próba dalszego zwiększania poziomu mocy spowoduje wyemitowanie dwóch krótkich, wysokich dźwięków oznaczających maksymalny poziom mocy.
- Minimalny poziom mocy zestawu słuchawkowego wynosi 1. Próba dalszego zmniejszania poziomu mocy spowoduje wyemitowanie dwóch krótkich, niskich dźwięków na znak braku dalszej stymulacji zestawu słuchawkowego i poziomu „0”, czyli de facto trybu czuwania.

* W przypadku odczuwania jakiegokolwiek dyskomfortu podczas sesji, należy ją zatrzymać, a przed wznowieniem zmniejszyć intensywność. Zobacz dodatkowe ostrzeżenia i środki ostrożności, aby uzyskać więcej informacji.

Resetowanie zestawu słuchawkowego Modius®

Czasami, w przypadku problemów, może być konieczne zresetowanie zestawu słuchawkowego. W przypadku konieczności zresetowania zestawu słuchawkowego, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

INFORMACJA: Resetowanie zestawu słuchawkowego może spowodować utratę danych, które nie zostały zsynchronizowane z aplikacją.

- Podłączyć zestaw słuchawkowy Modius® do przewodu zasilania i ładowarki USB
- Upewnić się, że pomarańczowa dioda LED świeci (co oznacza ładowanie zestawu słuchawkowego)
- Przytrzymać przycisk zasilania z boku zestawu słuchawkowego przez ponad 10 sekund do usłyszenia serii 3 dźwięków.
- Zestaw słuchawkowy jest teraz zresetowany; odłączyć zestaw od źródła zasilania. Teraz powinno być możliwe dalsze, normalne użytkowanie urządzenia.

Wyłączanie zestawu słuchawkowego

- Podczas używania lub gdy zestaw słuchawkowy jest w stanie gotowości, nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania z boku zestawu słuchawkowego przez 2 sekundy.
- Wyemitowany zostanie niski dźwięk, aby zasygnalizować, że zestaw słuchawkowy został wyłączony. Po 10 sekundach aplikacja powróci do wyszukiwania zestawu słuchawkowego.
- Zestaw słuchawkowy należy ładować po każdym użyciu, aby był gotowy do następnej sesji.

5. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Mój zestaw słuchawkowy włącza się, ale nie pozwala mi rozpocząć sesji	Zestaw słuchawkowy jest podłączony do kabla ładowania	Przed rozpoczęciem sesji odłączyć kabel
Mój zestaw słuchawkowy nie włącza się	Zestaw słuchawkowy nie jest naładowany	Podłączyć zestaw słuchawkowy do kabla ładowania
	Zestaw słuchawkowy przeszedł w tryb głębokiego czuwania	Podłączyć zestaw słuchawkowy do kabla ładowania i spróbować włączyć
Mój zestaw słuchawkowy działa przez chwilę, a potem samoczynnie się wyłącza	Rezystancja między wkładkami jest zbyt wysoka	Upewnić się, że przed położeniem wkładek żelowych na skórę zastosowano chusteczki alkoholowe, że są one prawidłowo umieszczone za uszami i że pomiędzy wkładkami a skórą nie ma włosów
	Wkładki przymocowane do elektrod są zużyte	Wymienić wkładki żelowe w zestawie słuchawkowym
Mój zestaw słuchawkowy nie łączy się z moim urządzeniem przenośnym	W urządzeniu przenośnym wyłączona jest funkcja Bluetooth	Upewnić się, że w urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth®
	Urządzenie przenośne ma problemy w trakcie wyszukiwania zestawu słuchawkowego	Uruchomić ponownie aplikację na urządzeniu przenośnym
Podczas parowania słyszę 3 krótkie, niskie dźwięki, a dioda LED 3 razy miga na niebiesko	Zestaw słuchawkowy zakończył oczekiwanie na zaakceptowanie żądania parowania z urządzeniem przenośnym	Wyłączyć zestaw słuchawkowy i ponownie spróbować sparować zgodnie z instrukcjami z sekcji „Parowanie zestawu słuchawkowego z urządzeniem przenośnym”
Czuję dyskomfort podczas użytkowania zestawu słuchawkowego	Poziom mocy urządzenia może być za wysoki	Zmniejszyć poziom mocy zestawu słuchawkowego przy użyciu aplikacji do poczucia wrażenia delikatnego kołysania lub do ustąpienia dyskomfortu

Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do ładowarki dioda LED miga na bursztynowo	Zestaw słuchawkowy ma problem z ładowaniem	Spróbować podłączyć kabel ładowania do innego gniazda USB. Jeśli to nie rozwiązuje problemu należy skontaktować się z pomocą techniczną
Dioda LED zestawu słuchawkowego miga na bursztynowo i słychać trzy krótkie i niskie dźwięki	Niski poziom naładowania zestawu słuchawkowego	Naładować zestaw słuchawkowy (patrz „Ładowanie zestawu słuchawkowego Modius®”)
Kiedy próbuję włączyć zestaw słuchawkowy słyszę 3 niskie dźwięki	Krytyczny poziom naładowania zestawu słuchawkowego	Naładować zestaw słuchawkowy (patrz „Ładowanie zestawu słuchawkowego Modius®”)

6. Dbanie o urządzenie Modius®

Zestaw słuchawkowy

- Wkładki należy umieszczać wyłącznie na wyrostkach sutkowatych — twardych kościstych obszarach za uszami, zgodnie z instrukcjami powyżej. Nie należy umieszczać urządzenia na klatce piersiowej ani nigdzie indziej, na głowie czy karku. Patrz „Jak nosić zestaw słuchawkowy”.
- Stosować wyłącznie na siedząco lub leżąc.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zabrania się stosowania produktu przez osoby poniżej 18 roku życia.
- Wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
- Wyłączyć zestaw słuchawkowy po użyciu.
- Po każdym użyciu, a przed włożeniem do pudełka, należy całkowicie naładować zestaw słuchawkowy.
- Nie stosować szorstkich materiałów ściernych ani silnych detergentów.
- Nie dopuszczać do zamoczenia zestawu słuchawkowego
- Nie zanurzać w płynach.
- Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Nie pozostawiać urządzenia Modius® ze zgniecionym lub rozciągniętym paskiem. Wpływa to na komfort i bezpieczeństwo dopasowania do głowy.

Wkładki żelowe

- Przed przyłożeniem wkładek żelowych do skóry, należy usunąć z niej wszelkie kosmki włosów. W przeciwnym razie mogą się one przykleić do wkładek.
 - Przed użyciem wkładek upewnić się, że skóra jest czysta i bez makijażu, kremów, czy innych środków kosmetycznych.
 - Przed użyciem wkładek umyć ręce i unikać dotykania ich palcami, na tyle na ile to możliwe.
- Po użyciu wkładki należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika lub kosza.
- Jedne wkładki żelowe powinna stosować wyłącznie jedna osoba. Wkładki są przeznaczone wyłącznie do użytku indywidualnego.
 - Nie stosować wkładki dłużej niż przez zalecane 60 minut na sesję.

7. Ogólne informacje o produkcie i dane techniczne

Specyfikacja techniczna: Zestaw słuchawkowy Modius®

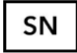

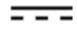










Charakterystyka mocy	
Czas działania akumulatora	Ok. 10 godzin na poziomie 10 stymulacji, ok. 4 do 5 dni normalnego użytkowania
Wtyczka wejściowa	W pełni izolowane przed dotykiem mikro USB
Masa	85 g
Rozmiar	180 x 140 x 70 mm
Dane gniazda źródła zasilania	
Port micro USB (dowolny port USB lub ładowarka USB musi mieć certyfikację EN/IEC 60601-1; aby zapewnić bezpieczeństwo, do ładowania urządzenia Modius® należy używać wyłącznie ładowarki dołączonej do produktu) Napięcie: 4,75–5,25 V Maks. prąd 155 mA DC	
Maksymalne napięcie wyjściowe Maksymalny prąd wyjściowy	20 V 600 uA.
Bluetooth BLE — BGM113	
Pasma częstotliwości roboczej	2,4 GHz dla funkcji Bluetooth o niskiej energii
Maksymalna transmitowana moc częstotliwości radiowej RF	+3 dBm
Akumulator (nie podlega wymianie przez użytkownika) litowo-polimerowy 4,2 V 155 mAh	
Robocze warunki środowiskowe	
Środowisko	Do użytku osobistego w domu
Zakres temperatur	0°C do 40°C
Wodoszczelność	0 m
Poziom hałasu	0dB
Warunki środowiskowe do przechowywania	
Zakres temperatur	od 0 do 40°C
Wilgotność względna	<95%
Oczekiwany czas eksploatacji	Urządzenie ma gwarancję na 1 rok, ale często działa dłużej. Akcesoria (przewody, wkładki i chusteczki) nie są objęte gwarancją <ul style="list-style-type: none">Okres eksploatacji przewodów zależy w dużej mierze od użytkownika. Zawsze ostrożnie obchodzić się z przewodamiWkładki z elektrodami są jednorazowe. Należy zapoznać się z informacjami producenta dotyczącymi ich okresu eksploatacji.Informacje o chusteczkach powinny znajdować się na opakowaniu producenta.
Czas składowania	<ul style="list-style-type: none">Zestaw słuchawkowy nie ma ustalonego okresu ważnościOkres ważności akcesoriów (wkładek, przewodów i chusteczek) powinien znajdować się w informacjach od producentów.

Symbol



Informacje

Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika i dodatkowych symbolach

	Numer seryjny, pozwalający zidentyfikować produkt, znajduje się na etykiecie produktu
	Przestrzegać instrukcji obsługi (zgodnie z EN/IEC 60601-1)
5.0v 	Prąd stały Prąd stały o wskazanym napięciu.
	Stosowana część typu BF
	Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania
	Jednostka nie jest wodoodporna. Chronić przed wilgocią
	Liczba elementów w opakowaniu
	Warunki przechowywania: 0–40 stopni Celsjusza
	Wilgotność względna: <95%
	Uziemienie
	Nie używać w przypadku korzystania z rozrusznika serca
	Nie zastosowano zabezpieczeń przed przedostawaniem się obiektów ani cieczy.
	Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcjami. Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w IFU (np. nieprawidłowe umieszczenie elektrod) może spowodować obrażenia u użytkownika

Materiały eksploatacyjne (wkładki z elektrodami, chusteczki)

Należy stosować wyłącznie materiały eksploatacyjne dostarczone w opakowaniu lub zalecane przez firmę Neurovalens.

Sprawdzić instrukcje producenta wyszczególnione na opakowaniu produktu.

Polityka zwrotów i gwarancja

Więcej informacji znajduje się na stronie www.modiushealth.com/returnsandwarranty

8. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i prawne

Deklaracja zgodności — Nazwa modelu: ML600

Firma Neurovalens niniejszym oświadcza, że produkt ten spełnia podstawowe wymogi i inne stosowne warunki dyrektyw: w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 2001/95/WE i w sprawie urządzeń radiowych 2014/53 UE. Pełna deklaracja zgodności znajduje się na stronie www.modiushealth.com/compliance.

Zestaw słuchawkowy Modius® jest zaklasyfikowany jako urządzenie do pracy przerywanej. Urządzenie Modius® wraz z ładowarką USB, dostarczane zgodnie ze standardami bezpieczeństwa elektrycznego EN/IEC 60601-1, jest uważane za system sprzętu medycznego (ME SYSTEM) w celu realizacji swojego przeznaczenia.

Wszystkie zastosowane części uznaje się za części klasy BF. Klasa ochrony IP zestawu słuchawkowego wynosi zero. Oznacza to, że nie zastosowano zabezpieczeń przed przedostawaniem się obiektów ani cieczy.



Zawiera FCC ID: QOQBGM113

Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 Zasad FCC. Działanie podlega dwóm poniższym warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz

2. Urządzenie musi być w stanie pracować pod wpływem wszelkiego rodzaju zakłóceń, w

tym zakłóceń mogących prowadzić do niepożądanego działania.



Urządzenie Modius® spełnia wszystkie mające zastosowanie wymagania zasadnicze dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych 2014/53 UE.



Urządzenie Modius® spełnia standardy EMC na rynek Australii i Nowej Zelandii.

Władze odpowiedzialne za urządzenia medyczne w krajach, w których obecnie sprzedaje się urządzenie Modius®, uznały urządzenie Modius® za mające wpływ na ogólne samopoczucie, a zatem nie egzekwują wymagań prawnych związanych z urządzeniami medycznymi.

Certyfikacja Silicon Labs	FCC-15C
FCC ID:	QOQBGM113
IC ID:	5123A-BGM113

Oświadczenie o bezpieczeństwie

To urządzenie zostało przetestowane pod kątem zgodności elektromagnetycznej i certyfikacji bezpieczeństwa zgodnie z normami EN: EN301489-3, EN301489-17 i EN 60950-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 i IEC 60601-1-11.

Urządzenie Modius® zostało przetestowane i jest zgodne z uznanymi normami odporności na zakłócenia częstotliwości radiowych w zakresie częstotliwości roboczych 2,4 GHz.

Informacja: Urządzenie Modius® jest przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych powyżej 18 lat, zamierzających schudnąć lub kontrolować swoją wagę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności — zestaw słuchawkowy

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu słuchawkowego Modius® należy zapoznać się z dołączonymi informacjami i instrukcjami.

Wkładki żelowe z elektrodami należy umieszczać wyłącznie na wyrostkach sutkowatych za uszami, zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Nie należy umieszczać urządzenia na klatce piersiowej ani nigdzie indziej, na głowie czy karku.

Nie stosować podczas ciąży, w przypadku padaczki odruchowej wyzwalanej stymulacją przedsionkową lub z wszczepionym rozrusznikiem serca.

Stosowanie urządzenia Modius® należy przerwać natychmiast po wystąpieniu nieoczekiwanych reakcji.

- Wkładki należy umieszczać wyłącznie na wyrostkach sutkowatych — twardych kościstych obszarach za uszami, zgodnie z instrukcjami powyżej. Nie należy umieszczać urządzenia na klatce piersiowej ani nigdzie indziej, na głowie czy karku. Patrz „Jak nosić zestaw słuchawkowy”.
- Stosować wyłącznie na siedząco lub leżąc.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zabrania się stosowania produktu przez osoby poniżej 18 roku życia. Małe elementy, takie jak wkładki z elektrodami, stanowią zagrożenie zadławieniem.
- Ładować zestaw słuchawkowy w dobrze wentylowanym miejscu. Podczas ładowania akumulatora mogą wytwarzać się gazy, dlatego należy ładować urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu.

- Nie stosować podczas ciąży, w przypadku padaczki odruchowej wyzwalanej stymulacją przedsionkową lub z wszczepionym rozrusznikiem serca, defibrylatorem serca lub urządzeniem do neurostymulacji. Informacja: Urządzenie Modius® stymuluje układ przedsionkowy (równowagi) w mózgu. Pomimo że nie powinno to dotyczyć większości osób cierpiących na padaczkę, istnieje niebezpieczeństwo wywołania napadu u osób z odruchową padaczką przedsionkową. W przypadku wątpliwości potencjalni użytkownicy z padaczką powinni najpierw skonsultować się z lekarzem rodzinnym.
- Nie stosować podczas poruszania się, gdyż urządzenie może wpływać na poczucie równowagi.
- Nie stosować podczas spożywania alkoholu, prowadzenia pojazdu lub obsługiwanie jakichkolwiek maszyn.
- Zestawu słuchawkowego nie należy stosować w środowiskach wilgotnych, ani nie zanurzać w wodzie.
- Jedne wkładki żelowe powinna stosować wyłącznie jedna osoba. Przeznaczone wyłącznie do użytku indywidualnego.
- Nie stosować wkładki dłużej niż przez zalecane 60 minut na sesję.
- Zaleca się utylizację wkładki po każdym użyciu. Długotrwałe lub wielokrotne użycie jednej wkładki może zmniejszyć jej skuteczność lub prowadzić do podrażnienia skóry.
- Wkładek nie należy stosować na zranionej lub podrażnionej skórze.
- Po użyciu ostrożnie zdjąć wkładki ze skóry. Wkładki należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika lub kosza.
- Nie próbować wyjmować akumulatorów. Nie są one przeznaczone do wymiany przez użytkownika.

Informacja:

Zestaw słuchawkowy nie jest urządzeniem medycznym, nie zastępuje zdrowego stylu życia ani profesjonalnej opieki medycznej.

Stosowanie urządzenia Modius® należy przerwać natychmiast po wystąpieniu nieoczekiwanych reakcji. W przypadku odczuwania jakiegokolwiek dyskomfortu podczas sesji, należy ją zatrzymać, a przed wznowieniem zmniejszyć intensywność. Możliwe zagrożenia lub działania niepożądane obejmują: podrażnienia skóry, dyskomfort spowodowany stymulacją, odczucie braku równowagi, okazjonalne nudności i rzadko wymioty. Jeśli problem utrzymuje się dłużej niż 1–2 dni należy skonsultować się z lekarzem.

Zaleca się stosowanie przez maksymalnie 1 godzinę dziennie. Urządzenie Modius® automatycznie przestaje stymulować po przekroczeniu 1 godziny na dobę lub na 16 godzin, aby uniknąć „blokady” w przypadku chęci użycia urządzenia Modius® kilka godzin wcześniej któregoś dnia.

Resetowania nie należy nadużywać w celu zwiększenia codziennego użytkowania.

Należy przeczytać i stosować się do zawartych ostrzeżeń i instrukcji. Niniejszy przewodnik należy przechowywać razem z zestawem słuchawkowym

Środki ostrożności dotyczące wbudowanego akumulatora

Zestaw słuchawkowy Modius® posiada wbudowany niewymienny akumulator. Użytkownicy zestawu Modius® nie powinni podejmować prób wymiany akumulatora w zestawie słuchawkowym. Zabrania się modyfikowania oraz otwierania produktu, ponieważ może to spowodować utratę gwarancji i zagrożenie bezpieczeństwa. Zestaw słuchawkowy należy ładować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z niniejszym przewodnikiem, używając zasilacza certyfikowanego przez uznane laboratorium testowe.

Nie podejmować żadnych prac serwisowych lub konserwacyjnych (w tym czyszczenia lub ładowania) na urządzeniu podczas jego użytkowania

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu



Jednym z postanowień dyrektywy europejskiej 2002/96/WE jest to, że produkty elektroniczne nie powinny być traktowane jak odpady elektroniczne i nie powinny być wyrzucane. W celu przypominania niniejszej dyrektywy, wszystkie objęte nią produkty są oznaczane przekreślonym symbolem kosza na śmieci (z kółkami), w sposób przedstawiony powyżej.

Po zakończeniu cyklu życia produktu, nie wolno wyrzucać takiego produktu ani akumulatorów do normalnych pojemników w gospodarstwie domowym, lecz należy dostarczyć je do punktu zbiórki sprzętu do recyklingu urządzeń elektronicznych. Niewłaściwe usuwanie może powodować nagromadzenie szkodliwych toksyn w powietrzu, wodzie i glebie oraz może być szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Informacja: Wkładki i chusteczki należy wyrzucać do odpowiedniego pojemnika lub kosza.

Informacje o licencji



Urządzenie Modius® korzysta z łączności Bluetooth

Regulamin

Więcej informacji znajduje się na stronie www.modiushealth.com/termsandconditions

9. Kontakt

www.modiushealth.com
team@modiushealth.com
support.modiushealth.com



Wyprodukowane przez Neurovalens, 4th Floor, The Warehouse, 7 James Street South, Belfast BT2 8DN.

© 2018 Neurovalens