

MODIUS®

Guia do usuário

v1.0

Modius® é uma nova tecnologia Careable® revolucionária que ajuda no processo de emagrecimento.

Avisos e precauções:

- Não utilize este produto caso você sofra de epilepsia ou utilize marca-passo.
- Mantenha este produto fora do alcance das crianças. Itens pequenos, como as almofadas de eletrodos, representam um perigo de asfixia.
- Aviso: Não é permitida nenhuma modificação deste equipamento.
- Respeite todos os avisos e precauções detalhados na seção Avisos de segurança e precauções deste Guia do usuário para poder utilizar o fone de ouvido Modius®

Índice

1. Apresentação do Modius®	2
2. Embalagem Modius® – conteúdo.....	2
3. Iniciando.....	2
4. Usando seu fone de ouvido Modius®	4
5. Resolução de problemas.....	6
6. Procurando por seu Modius®	7
7. Especificações técnicas e informações gerais do produto	8
8. Avisos de segurança e regulamentares.....	10
9. Contato	12

1. Apresentação do Modius®

Obrigado por adquirir o Modius® e parabéns por seu primeiro passo rumo ao emagrecimento!

Modius® é um fone de ouvido de neuroestimulação transdérmica. O fone é alimentado por bateria e projetado para fornecer um nível baixo de energia na forma de ondas de neuroestimulação que estimulam a atividade do nervo craniano vestibular. A transmissão desta forma de onda (corrente) é realizada por meio de duas almofadas de eletrodos autoadesivas. As almofadas ficam colocadas sobre a pele, sobrepondo cada processo mastoide (por trás das orelhas). Quando ativado, o produto gera um pequeno impulso elétrico que pode ser ajustado pelo usuário para mais ou para menos.

Depois de finalizado o ajuste para um nível em que o usuário perceba uma sensação de oscilação suave, confortável e tolerável, o estímulo fornecido pelo fone Modius® deverá preferencialmente ser mantido neste nível por toda a duração da sessão (uma hora). Mais ajustes podem ser feitos por meio do aplicativo Modius®. O dispositivo pode ser pausado usando o aplicativo, pressionando o ícone de pausa, ou pressionando o botão Power no fone de ouvido rapidamente duas vezes. Após a conclusão, o usuário remove o fone de ouvido e retira as almofadas de eletrodos. Quando o produto não estiver sendo usado, ele pode ser recarregado por meio de um cabo micro USB. Por razões de segurança, existem controles no software para prevenir que o dispositivo libere estímulos elétricos quando estiver plugado no cabo micro USB para recarga da bateria.

Recomenda-se o uso por uma hora diária, e o fone de ouvidos Modius® interromperá os estímulos automaticamente se o uso atingir uma hora por dia. O usuário não pode utilizar o dispositivo novamente durante um período de 16 horas, permitindo certa flexibilidade de rotinas de estímulo, se exigido. O fone de ouvido Modius® foi projetado para ser usado por pessoas maiores de 18 anos em ambiente doméstico.

2. Embalagem Modius® – conteúdo

1. Fone de ouvido Modius®
2. Manual do usuário - Modius®
3. Carregador e cabo de alimentação USB
4. 150 almofadas em gel de eletrodos e 100 lenços embebidos em álcool

Nota: Itens também exigidos para a operação do fone de ouvido Modius®, mas não fornecidos: Dispositivo móvel, como smartphone ou PC tablet, com sistema operacional Android 5.0 ou superior, ou iOS 9 ou superior.

3. Iniciando...

Recarregando seu fone de ouvido Modius®

- Conecte o cabo USB que acompanha seu fone de ouvido Modius® ao adaptador USB (fornecido) e conecte o cabo ao fone de ouvido.
- Se o fone de ouvido estiver sendo recarregado, o LED indicador acenderá na cor âmbar.
- Quando o fone de ouvido estiver carregado, o LED indicador âmbar se apagará.
- Se você conectar o cabo de alimentação ao fone de ouvido e o LED indicador piscar na cor âmbar, o fone de ouvido está com algum problema de recarga (consulte "Resolução de problemas").
- Quando o nível da bateria estiver baixo, a luz âmbar piscará em sequências de três. Há também um indicador sonoro de três bipes. Quando você perceber estes indicadores de bateria baixa, significa que há até 60 minutos de estímulos (máx.) antes que o fone de ouvido se desligue.

NOTA: Sempre desconecte o cabo de alimentação antes de usar seu fone de ouvido. Disponibilize espaço suficiente para o carregador USB para que ele possa ser removido com segurança do fone de ouvido e da fonte de energia.

Emparelhando seu fone de ouvido com seu dispositivo Bluetooth

- Antes de iniciar:
 - Confirme que seu fone de ouvido esteja carregado (consulte "Carregando seu fone de ouvido Modius®") e que o cabo de alimentação esteja desconectado.
 - Confirme que a tecnologia sem fio Bluetooth esteja habilitada em seu dispositivo móvel.

Faça o download do aplicativo Modius® na Apple App Store ou Google Play e conclua o processo de registro.

- Com o fone de ouvido desligado:
 - o Pressione o botão Power na lateral do fone de ouvido e segure por dois segundos
 - o Você ouvirá um bipe agudo e o botão Power piscará na cor branca. Um LED indicador azul piscará periodicamente para indicar que o fone de ouvido está pronto para o emparelhamento.
- Inicie o aplicativo Modius® em seu dispositivo móvel, e o aplicativo começará a escanear por seu fone de ouvido.
- Quando o fone de ouvido se conectar a seu aplicativo, você ouvirá um bipe e o LED indicador piscará na cor azul. Trata-se do fone de ouvido informando que seu dispositivo móvel solicitou emparelhamento com ele.
- Clique uma vez no botão Power do fone de ouvido para aceitar o emparelhamento.
- Seu dispositivo móvel apresentará uma notificação informando que o fone de ouvido deseja se emparelhar com seu dispositivo. Aceite o emparelhamento e o fone de ouvido emitirá dois bipes de confirmação.
- Pode levar até dez segundos para a conclusão do emparelhamento.
- Quando o emparelhamento for concluído, a tela do aplicativo mudará, exibindo o painel e os controles do usuário para operação de seu fone de ouvido.

4. Usando seu fone de ouvido Modius®

Uso recomendado

A utilização recomendável é de, no máximo, uma hora por dia. Como funcionalidade de segurança, o Modius® interromperá automaticamente a produção de estímulos após uma hora de utilização por dia. Você poderá iniciar uma nova sessão após um período de 16 horas, o que permite uma rotina de utilização flexível.

Nota: Consulte a seção Avisos e Precauções para mais informações sobre segurança do produto.

Como usar seu fone de ouvido

- Utilize um lenço embebido em álcool para limpar a pele na área óssea dura atrás das orelhas (mastoides).
- Remova a proteção plástica das almofadas em gel.
Afastar quaisquer fios de cabelo antes de fixar as almofadas em gel na pele limpa nas mastoides.
- Coloque o fone de ouvido na cabeça conforme ilustrado na figura 1, com o botão Power alinhado acima da sua orelha direita.
- Fixe nas almofadas em gel conectadas aos cabos do Modius® por trás de cada orelha.

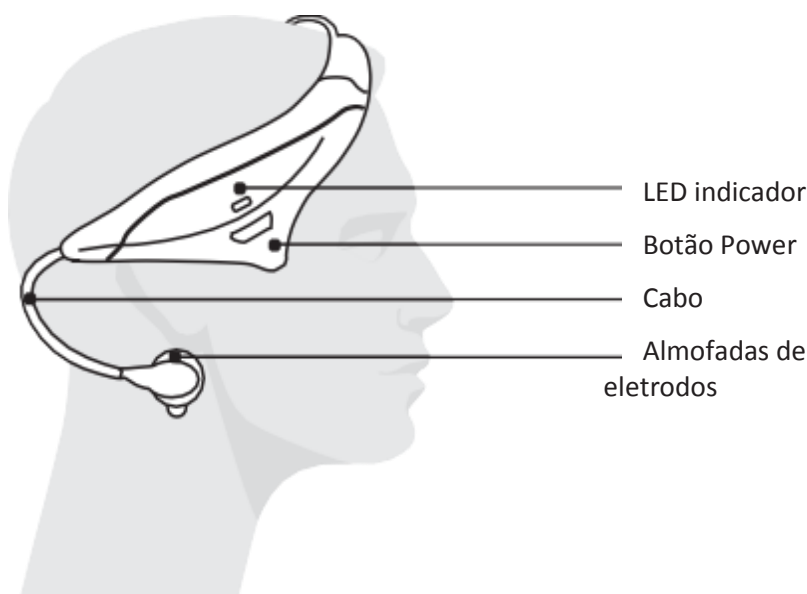


Figura 1

Ligando seu fone de ouvido e iniciando uma nova sessão

- Confirme que
 - o o fone de ouvido esteja carregado e emparelhado com seu dispositivo móvel.
 - o o fone de ouvido esteja posicionado confortavelmente em sua cabeça e os eletrodos estejam afixados de acordo com as instruções.
- Ligue o fone de ouvido pressionando o botão Power por dois segundos. Você ouvirá um aviso sonoro agudo e o LED branco começará a piscar regularmente.
- Inicie o aplicativo Modius® e acesse a guia “Dashboard”.
- Clique em “Start” no botão da tela, dando início à sua sessão e produção de estímulos
- Depois de 60 minutos de uso você ouvirá três bipes agudos breves, e o LED indicador piscará na cor branca repetidamente em sequências de três, indicando o fim de sua sessão.

Ajustando o nível de produção de estímulos

- No aplicativo Modius®, acesse a guia “Dashboard”.
- O nível de produção de estímulos pode ser ajustado usando os controles na tela, para cima ‘^’ ou para baixo ‘v’
- Cada vez que você ajusta o nível de produção de estímulos, o fone de ouvido emite um bipe para notificá-lo quanto à alteração realizada.
- O nível de potência máxima do fone de ouvido é 10, e se você tentar aumentá-lo ainda mais serão emitidos dois bipes agudos breves para indicar que você já está no nível máximo.
- O nível de potência mínimo do fone de ouvido é 1, e se você tentar reduzi-lo ainda mais serão emitidos dois bipes graves breves para indicar a interrupção da produção de estímulos e a entrada em nível 0, essencialmente um modo stand-by.

* Caso sinta qualquer desconforto durante a sessão, interrompa-a e reduza a intensidade antes de retomá-la. Consulte os avisos e precauções adicionais para mais informações.

Reiniciando seu fone de ouvido Modius®

Às vezes pode ser necessário reiniciar seu fone de ouvido caso esteja tendo problemas. Para reiniciar seu fone de ouvido, siga as instruções abaixo.

NOTA: Reiniciar seu fone de ouvido pode fazer com que os dados não sincronizados com o aplicativo sejam perdidos.

- Conecte o fone de ouvido Modius® ao cabo de alimentação fornecido e ao carregador USB
- Confirme que o LED laranja esteja aceso (indicando que o fone de ouvido está em recarga)
- Segure o botão Power na lateral do fone de ouvido por mais de dez segundos, até que sejam emitidos três bipes longos.
- O fone de ouvido foi reiniciado, desconecte-o da fonte de energia. Agora você poderá continuar a utilizá-lo normalmente.

Desligando seu fone de ouvido

- Durante o uso, ou quando o fone de ouvido estiver em stand-by e pronto para ser usado, pressione o botão Power na lateral do fone de ouvido por pelo menos dois segundos.
- Você ouvirá um bipe grave para indicar que o fone de ouvido foi desligado, e depois de dez segundos o aplicativo reverterá para o modo de busca por seu fone.
- Recarregue o fone de ouvido após cada utilização, para prepará-lo para sua próxima sessão.

5. Resolução de problemas

Problema	Possível causa	Solução
Meu fone de ouvido liga mas não inicia uma sessão	O fone de ouvido está conectado ao cabo de recarga	Desconecte o cabo antes de tentar iniciar uma sessão
Meu fone de ouvido não liga	O fone de ouvido não está carregado	Conecte o fone de ouvido ao cabo de alimentação
	O fone de ouvido entrou em modo stand-by profundo	Conecte o fone de ouvido ao cabo de alimentação e tente ligá-lo
Meu fone de ouvido funciona por um tempo e desliga sozinho	A resistência entre as almofadas é muito alta	Verifique se você utilizou o lenço embebido em álcool antes de posicionar as almofadas em gel à sua pele, se as almofadas estão corretamente posicionadas por trás de suas orelhas e se não há fios de cabelo entre as almofadas e sua pele.
	As almofadas afixadas aos eletrodos estão desgastadas	Substitua as almofadas em gel no fone de ouvido
Meu fone de ouvido não se conecta ao meu dispositivo móvel	O Bluetooth não está habilitado em seu dispositivo móvel	Verifique se o Bluetooth® foi habilitado em seu dispositivo
	Seu dispositivo móvel está tendo problemas ao pesquisar pelo fone de ouvido	Reinicie o aplicativo em seu dispositivo móvel
Durante o emparelhamento eu ouço três bipes graves e o LED indicador pisca três vezes na cor azul	O fone de ouvido teve o tempo esgotado ao esperar para que você aceitasse a solicitação de emparelhamento de seu dispositivo móvel	Desligue o fone de ouvido e tente emparelhar novamente seguindo as instruções em "Emparelhando seu fone de ouvido a seu dispositivo móvel"
Estou sentindo desconforto ao usar o fone de ouvido	O nível de potência do dispositivo pode estar muito alto	Reduza o nível de potência do fone de ouvido usando o aplicativo até que você sinta uma sensação suave de oscilação ou até que o desconforto seja reduzido

Quando eu conecto o fone de ouvido ao carregador, o LED indicador pisca na cor âmbar	O fone de ouvido está com algum erro de carregamento	Tente conectar o cabo de alimentação a um plugue USB diferente, e se não resolver entre em contato com o suporte
O LED indicador em meu fone de ouvido está piscando na cor âmbar e eu escuto três bipes breves	A bateria do fone de ouvido está com pouca carga	Recarregue o fone de ouvido (Consulte "Recarregando seu fone de ouvido Modius®")
Quando tento ligar o fone de ouvido eu escuto três bipes graves	A bateria do fone de ouvido está com pouquíssima carga	Recarregue o fone de ouvido (Consulte "Recarregando seu fone de ouvido Modius®")

6. Procurando por seu Modius®

Fone de ouvido

- Aplique as almofadas apenas nas mastoides, a área dura atrás das orelhas, conforme indicado nas instruções acima. Não coloque no peito ou em outro ponto qualquer da cabeça ou do pescoço. Consulte "Como usar seu fone de ouvido".
- Utilize apenas quando estiver sentado ou deitado.
- Mantenha este produto fora do alcance das crianças. Este produto não é autorizado para menores de 18 anos de idade.
- Limpe-o com um pano macio.
- Desligue o fone de ouvido após o uso.
- Recarregue totalmente o fone de ouvido antes de colocá-lo de volta na caixa após cada uso.
- Não utilize abrasivos agressivos ou detergentes fortes.
- Evite molhar o fone de ouvido
- Não o mergulhe em líquido.
- Não o deixe receber luz do sol em excesso
- Não deixe o Modius® em uma situação em que o arco esteja prensado ou esticado. Isto afetará o conforto e segurança do encaixe em sua cabeça.

Almofadas em gel

- Retire quaisquer fios de cabelo antes de afixar as almofadas em gel à pele limpa, para que os fios não grudem nas almofadas.
- Verifique se sua pele está limpa e sem maquiagem, cremes e outras loções antes de utilizar as almofadas.
- Limpe as mãos antes de manusear as almofadas e evite tocá-las com os dedos o máximo possível. Elimine as almofadas em local adequado após a utilização.
- Não compartilhe as almofadas em gel com outro usuário. As almofadas são de uso exclusivo por um único usuário.
- Não utilize as almofadas por mais de 60 minutos por sessão, de acordo com o recomendado.




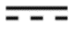










7. Especificações técnicas e informações gerais do produto

Especificações técnicas: Fone de ouvido Modius®

Características elétricas	
Vida da bateria	Aproximadamente 10 horas em nível 10 de produção de estímulos; aproximadamente 4 ou 5 dias de uso nominal
Plugue de entrada	Micro USB protegido contra contato totalmente isolado
Peso	85 g
Dimensões	180x140x70mm
Informações de entrada de energia	
Porta micro USB (qualquer porta USB ou carregador USB deve atender à EN/IEC 60601-1 para garantir segurança permanente, e somente o carregador fornecido com o produto deve ser usado para recarregar o Modius®) Voltagem: 4,75 - 5,25 V Corrente máxima: 155 mA - DC	
Voltagem de saída máxima Corrente de saída máxima	20 V 600 uA
Bluetooth BLE - BGM113	
Banda de frequência operacional	2,4 GHz para a funcionalidade Bluetooth de baixa energia
Máxima potência de RF transmitida	+3 dBm
Bateria (não substituível pelo usuário) de lítio-polímero de 4,2V e 155 mAh	
Condições ambientais de operação	
Ambiente	Uso pessoal doméstico
Faixa de temperatura	0°C a 40°C
Resistência à água	0 m
Nível de ruído	0 dB
Condições ambientais de armazenamento	
Faixa de temperatura	0 a 40°C
Umidade relativa	< 95%
Expectativa de vida útil	O equipamento tem garantia de 1 (um) ano, mas frequentemente tem maior durabilidade. Acessórios (conectores, almofadas e lenços) não são cobertos pela garantia <ul style="list-style-type: none"> A vida útil dos conectores varia consideravelmente com o uso. Sempre manuseie os conectores com cuidado As almofadas de eletrodo duram somente uma aplicação, e as informações dos fabricantes devem ser consultadas quanto à validade. Consulte a embalagem dos fabricantes quanto à validade dos lenços.
Tempo de armazenamento	<ul style="list-style-type: none"> A unidade de fone de ouvido não tem tempo de armazenamento fixado Consulte as informações dos fabricantes para o tempo de armazenamento dos acessórios (almofadas, conectores e lenços)

Símbolo

Informações

	Consulte os símbolos adicionais e guia do usuário para mais informações
	Número de série no rótulo do produto para identificação
	Siga as instruções para uso (utilizado em conformidade com a EN/IEC 60601-1)
5.0v 	Corrente contínua Corrente contínua na voltagem apresentada.
	Parte aplicada do tipo BF
	Não utilize se a embalagem estiver danificada
	A unidade não é à prova d'água. Proteção contra umidade
	Número de itens por embalagem
 40 0	Condições de armazenamento: 0 a 40 graus Celsius
 95 0	Umidade relativa: < 95%
	Aterramento de proteção (terra)
	Não utilizar em usuários com marca-passo
 IPOX	Não há proteção contra o contato e entrada de objetos, nem proteção contra a entrada de líquidos
	Consulte as instruções para uso antes de utilizar este dispositivo, e o desrespeito às instruções no IFU (como a colocação dos eletrodos no local correto) pode ser nocivo ao usuário

Consumíveis (almofadas de eletrodo, lenços)

Utilize somente os consumíveis fornecidos na embalagem ou recomendados pela Neurovalens. Consulte as instruções do fabricante detalhadas na embalagem do produto.

Política de garantia e devolução

Para mais informações, acesse www.modiushealth.com/returnsandwarranty

8. Avisos de segurança e regulamentares

Declaração de conformidade - nome do modelo: ML600

Pelo presente, a Neurovalens declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva de Segurança Geral dos Produtos 2001/95/EC e Diretiva de Equipamentos de Rádio 2014/53 EU. Para acessar a íntegra da Declaração de Conformidade, acesse www.modiushealth.com/compliance.

O equipamento fone de ouvido Modius® está classificado para um funcionamento não contínuo. O Modius®, juntamente com o carregador USB fornecido em conformidade com as normas relativas à segurança elétrica EN/IEC 60601-1, é considerado como um sistema de equipamento médico (ME SYSTEM) na realização das suas funções.

Todas as partes aplicadas são consideradas de classe BF. A classificação IP do fone de ouvido é zero. Isto significa que não há proteção contra o contato e entrada de objetos, nem proteção contra a entrada de líquidos.



Contém a ID FCC: QOQBGM113

Este dispositivo atende à Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que

possa causar operação indesejável.



O Modius® cumpre os requisitos essenciais aplicáveis da Diretiva de Equipamentos de Rádio 2014/53 EU.



O Modius® está em conformidade com as normas de EMC no mercado australiano e neozelandês.

As entidades reguladoras de dispositivos médicos sob a alçada das quais o Modius® se encontra atualmente à venda consideram o Modius® como um dispositivo de bem-estar geral e, portanto, não impõem os requisitos normativos aplicáveis a dispositivos médicos.

Certificado via Silicon Labs

ID FCC:

ID IC:

FCC-15C

QOQBGM113

5123A-BGM113

Declaração de segurança

Este equipamento foi testado para atender à certificação de segurança e compatibilidade eletromagnética em conformidade com as especificações de Padrões EN: EN301489-3, EN301489-17 e EN 60950-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 e IEC 60601-1-11.

O Modius® foi testado e cumpre as normas reconhecidas para imunidade em interferência de radiofrequência na gama de frequência operacional de 2,4 GHz.

Nota: O Modius® é indicado apenas para a utilização em adultos, com mais de 18 anos de idade, com objetivos próprios de perda e controle de peso.

Precauções e avisos de segurança – Fone de ouvido

Avisos e precauções:

Consulte as informações e instruções fornecidas antes de utilizar o fone de ouvido Modius®. Coloque as almofadas em gel de eletrodos apenas nas mastoides, atrás das orelhas, conforme as instruções fornecidas. Não coloque no peito ou em outro ponto qualquer da cabeça ou do pescoço. Não utilize se você estiver em gestação, tiver epilepsia reflexa ativada por estimulação vestibular, ou caso use um marca-passo.

A utilização do Modius® deverá ser interrompida imediatamente caso ocorram reações inesperadas.

- Aplique as almofadas apenas nas mastoides, a área dura atrás das orelhas, conforme indicado nas instruções acima. Não coloque no peito ou em outro ponto qualquer da cabeça ou do pescoço. Consulte "Como usar seu fone de ouvido".
- Utilize apenas quando estiver sentado ou deitado.
- Mantenha este produto fora do alcance das crianças. Este produto não é autorizado para menores de 18 anos de idade. Itens pequenos, como as almofadas de eletrodos, representam um perigo de asfixia.
- Recarregue o fone de ouvido em uma área bem ventilada, já que gases podem ser produzidos quando a bateria estiver em recarga.

- Não utilize se você estiver em gestação, tiver epilepsia reflexa ativada por estimulação vestibular, ou caso use um marca-passo, cardiodesfibrilador ou dispositivo de neuroestimulação. Nota: O Modius® estimula o sistema vestibular cerebral (balanço). Portanto, embora não deva afetar a maioria das pessoas com epilepsia, pode desencadear uma crise epilética em pessoas com epilepsia vestibular reflexa. Se estiver em dúvida, o potencial usuário com epilepsia deve primeiro conversar com seu médico da família.
- Não utilize o dispositivo enquanto estiver em movimento, já que ele poderá afetar o seu equilíbrio.
- Não utilize o dispositivo durante o consumo de álcool, ao dirigir ou durante a operação de maquinaria de qualquer gênero.
- Não utilize o dispositivo em ambientes úmidos, nem mergulhe o fone de ouvido em água.
- Não compartilhe as almofadas em gel com outro usuário. As almofadas são de uso exclusivo por um único usuário.
- Não utilize as almofadas por mais de 60 minutos por sessão, de acordo com o recomendado.
- Recomenda-se descartar a almofada após cada uso. O uso prolongado ou repetido de qualquer almofada pode reduzir a sua eficácia ou levar à irritação da pele.
- Não aplique almofadas em pele irritada ou ferida.
- Remova as almofadas da pele com cuidado após o uso. Elimine as almofadas em local adequado após a utilização.
- Não tente remover as baterias. Elas não são substituíveis pelo usuário.

Nota:

O dispositivo não é um aparelho médico, nem substitui um estilo de vida saudável ou a supervisão profissional de um médico.

A utilização do Modius® deverá ser interrompida imediatamente caso ocorram reações inesperadas. Caso sinta qualquer desconforto durante a sessão, interrompa-a e reduza a intensidade antes de retomá-la. Possíveis perigos ou efeitos adversos incluem: irritação cutânea; desconforto causado pelo estímulo; sensação de desequilíbrio; náusea ocasional; e, em alguns casos, vômitos. Caso o problema persista após um ou dois dias, consulte o seu médico.

A utilização recomendável é de, no máximo, uma hora por dia. O Modius® interromperá automaticamente a produção de estímulos se você exceder uma hora de uso diário ou um período de 16 horas, para evitar que você seja "bloqueado" se desejar usar o Modius algumas horas antes em algum dia.

Não se deve abusar das instruções de reinicialização para aumentar a utilização pessoal diária.

Leia e acate estes avisos e instruções. Mantenha este manual juntamente com o fone de ouvido

Precauções quanto à bateria interna

Seu fone de ouvido Modius® possui uma bateria embutida não substituível. Usuários do Modius® não devem tentar substituir a bateria do fone de ouvido. Não adultere seu produto ou tente abrir, sob pena de perder a garantia e incorrer em risco à segurança. Recarregue o fone de ouvido em conformidade com as instruções fornecidas neste guia, usando uma fonte de alimentação certificada por um laboratório de testes reconhecido.

Não tente realizar manutenção ou reparos (incluindo limpeza ou recarga) do dispositivo enquanto ele estiver sendo usado

Informações de reciclagem e descarte



Uma das provisões da diretiva europeia 2002/96/CE é que todo equipamento eletrônico não deve ser tratado como lixo eletrônico ou jogado fora. Para lembrá-lo desta diretiva, todos os produtos afetados estão agora sendo marcadas com o símbolo da lixeira com uma cruz, conforme demonstrado acima.

No fim da vida útil do produto, não jogue fora o produto ou suas baterias em lixo normal. Leve-o para um ponto de coleta para reciclagem de equipamentos eletrônicos. O descarte incorreto pode causar o acúmulo de toxinas nocivas no ar, água e solo, e pode ser prejudicial para a saúde humana.

Nota: Descarte as almofadas em local adequado após a utilização.

Informações de licença



O Modius® utiliza Bluetooth

Termos e condições

Para mais informações, acesse www.modiushealth.com/termsandconditions

9. Contato

www.modiushealth.com
team@modiushealth.com
support.modiushealth.com



Fabricado por Neurovalens, 4th Floor, The Warehouse, 7 James Street South, Belfast BT2 8DN.

Neurovalens © 2018