

# MODIUS®

## Kullanıcı Kılavuzu

### v1.0

Modius® daha ince bir vücuda sahip olmanızı sağlayan, çığır açıcı, yeni bir teknolojidir®.

#### Uyarılar ve önlemler:

- Epilepsi hastasıysanız veya kalp pili taşıyorsanız bu ürünü kullanmayın.
- Bu ürünü çocuklardan uzak tutun. Elektrot pedleri gibi küçük ürünler boğulma tehlikesine yol açarlar.
- Uyarı: Bu cihaz üzerinde değişiklik yapamazsınız.
- Modius® Baş Takımını kullanmadan önce bu Kullanıcı Kılavuzunun Güvenlik Uyarıları ve Önlemleri bölümünde ayrıntılı olarak açıklanan tüm uyarı ve önlemlere riayet ediniz.

#### İçindekiler

1. Modius®'un Tanıtımı .....	2
2. Modius® paketi – içindekiler.....	2
3. Başlarken.....	2
4. Modius® Baş Takımınızın Kullanımı.....	4
5. Sorun giderme .....	6
6. Modius® Cihazınızın Bakımı .....	7
7. Genel ürün bilgileri ve teknik özellikler .....	8
8. Mevzuat ve Güvenlik bildirimleri.....	10
9. İletişim .....	12

## 1. Modius®'un Tanıtımı

Modius®'u satın aldığınız için teşekkür ederiz, daha hafif bir hayata yönelik ilk adımınızdan dolayı sizi tebrik ederiz!

Modius®, transdermal bir nörostimülasyon baş takımıdır. Bu baş takımı, vestibüler kraniyal sinir aktivitesini uyaran nörostimülasyon dalga formunda düşük düzeyde enerji verecek şekilde tasarlanmış, pille çalışan bir baş takımıdır. Bu dalga formu (geçerli) kendinden yapışkanlı iki adet elektrot pedi aracılığıyla uygulanır. Bu pedler (kulakların arkasında yer alan) her bir mastoid kemiğinin üzerine yerleştirilir. Ürün açıldığında, küçük bir elektrik impuls gönderir ve bu impuls kullanıcı tarafından artırılıp, azaltılabilir.

Kullanıcının tolere edilebileceği, rahat ve hafif bir sallanma hissi duyuncaya kadar ayarlandığında, Modius® baş takımı tarafından sağlanan uyarım, seans boyunca ideal olarak bu seviyede kalmalıdır (1 saat). Modius® Uygulaması kullanılarak ilave ayarlamalar yapılabilir. Cihaz, uygulamadan yararlanılarak duraklatma simgesine basılarak veya baş takımı üstündeki güç düğmesine iki kez hızlı bir şekilde basılarak duraklatılabilir. İşlem sona erdiğinde kullanıcı baş takımını çıkarır ve her kullanımdan sonra elektrot pedlerini atar. Ürün kullanılmadığında, bir mikro-USB kabloyla şarj edilebilir. Güvenlik nedenlerinden dolayı, cihaz pilinin şarj edilmesi amacıyla mikro-USB kablosuna takılıyken elektrik uyarımı vermesini önleyen yazılım kontrolleri mevcuttur.

Tavsiye edilen kullanım süresi günde 1 saattir, kullanım süresinin günde bir saatin üzerine çıkması halinde Modius® baş takımı uyarımı otomatik olarak sonlandırır. Kullanıcı cihazı 16 saatlik dönem içinde tekrar kullanamaz, bu, gerektiğinde uyarım rutinlerine bir parça esneklik kazandırır. Modius® Baş Takımı ev ortamında, 18 yaş üzeri kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

## 2. Modius® paketi – içindekiler

1. Modius® Baş Takımı
2. Modius® Kullanıcı Kılavuzu
3. USB şarj kablosu ve şarj cihazı
4. 150 adet elektrot jel pedi, 100 adet alkollü mendil.

Not: Modius® Baş Takımının çalışması için gerekli olan ancak temin edilmeyen parçalar: Mobil Cihaz; yani, Android 5.0 veya üzeri ya da iOS 9 veya üzeri işletim sistemine sahip Akıllı Telefon veya Tablet Bilgisayar.

## 3. Başlarken...

### Modius® baş takımının şarj edilmesi

- Modius® baş takımıyla birlikte verilen USB güç kablosunu USB fiş adaptörüne (temin edilen) ve kabloyu ise baş takımına bağlayın.
- Baş takımı başarılı bir şekilde şarj ediliyor ise, LED göstergesi koyu sarı renkte yanacaktır.
- Baş takımı şarj olduğunda koyu sarı LED göstergesi kapanır.
- Güç kablosunu baş takımına bağlarsanız ve LED göstergesi koyu sarı renkte yanıp sönüyorsa, baş takımı bir şarj hatasına maruz kalıyordur (bkz. "Sorun Giderme").
- Pil seviyesi düştüğünde koyu sarı ışığın arka arkaya 3 kez yanıp söndüğünü görürsünüz. Ayrıca 3 sinyal sesi de duyulur. Söz konusu düşük pil göstergelerini görmeniz, baş takımının kendini kapatmadan önce 60 dakikalık uyarım (maks) süresinin kaldığını gösterir.

NOT: Baş takımınızı kullanmayı denemeden önce şarj kablosunu ayırdığınızdan emin olun. Baş takımından ve güç kaynağından güvenli şekilde çıkarılabilmesi için USB Şarj cihazı için yeterli alan ayırdığınızdan emin olun.

## Baş takımınızı Bluetooth cihazınızla eşleştirme

• Başlamadan önce şunlara dikkat edin:

- Baş takımınız şarj edilmiş (bkz. "Modius® baş takımınızı şarj etme") ve şarj kablosu ayrılmış olmalıdır.
- Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi mobil cihazınızda etkinleştirilmiş olmalıdır.

Modius® uygulamasını Apple App Store veya Google Play'den yüklemeli ve kayıt işlemini tamamlamalısınız.

• Baş takımı kapalıyken:

o Baş takımının yan tarafındaki güç düğmesine 2 saniye basın ve basılı tutun

o Tiz bir uyarı sesi duyacaksınız ve güç düğmesi beyaz renkte yanıp sönmeye başlayacaktır.

Periyodik olarak yanıp sönen mavi LED göstergesi baş takımının eşleşmeye hazır olduğunu gösterir.

• Modius® uygulamasını mobil cihazınızda başlatın, uygulama baş takımınızı taramaya başlar.

• Baş takımı uygulamaya bağlandıktan sonra bir uyarı sesi duyacaksınız ve LED göstergesi mavi renkte yanıp sönecektir. Bu, mobil cihazınızın kendisi ile eşleşmek istediğini bildiren baş takımıdır.

• Eşleştirmeyi kabul etmek için baş takımındaki güç düğmesine bir kez tıklayın.

• Mobil cihazınızda, baş takımınızın cihazınızla eşleşmek

istediğini bildiren bir bildirim görüntülenir. Eşleştirmeyi onaylayın, baş takımından eşleşmeyi onayladığına dair iki uyarı sesi gelir.

• Eşleştirmenin tamamlanması yaklaşık 10 saniye sürebilir.

• Eşleşme tamamlandığında, Uygulama ekranı değişerek size baş takımını çalıştırmanızı sağlayan gösterge tablosu ve kullanıcı kumandalarını gösterir.

## 4. Modius® Baş Takımınızın Kullanımı


### Önerilen kullanım

Önerilen kullanım, günde maksimum 1 saattir. Güvenlik özelliği olarak, günde 1 saat kullanımını aşarsanız, Modius® uyarımı otomatik olarak durdurur. 16 saatlik süre geçtikten sonra yeni bir seans başlatabilirsiniz, bu kullanım rutininize esneklik getirir.

Not: Ürün güvenliği hakkında daha fazla bilgi için bkz. Uyarılar ve Önlemler.

### Baş takımınız nasıl takılır

- Bir alkollü mendil ile mastoidleri yani kulaklarınızın arkasındaki sert kemikli bölgeyi temizleyin.
- Koruyucu plastik kapağı jel pedlerden çıkarın.  
Jel pedleri mastoidlerinizin üzerindeki temiz cilde yapıştırmadan önce tüm saç tellerini fırçalayarak temizleyin.
- Baş takımını Şekil 1'de gösterildiği gibi sağ kulağınızın üzerindeki güç düğmesi ile aynı hizaya getirerek yerleştirin.
- Modius® kablo düğmelerini her bir kulağınızın arkasında bulunan jel pedlerinin üzerine yapıştırın.

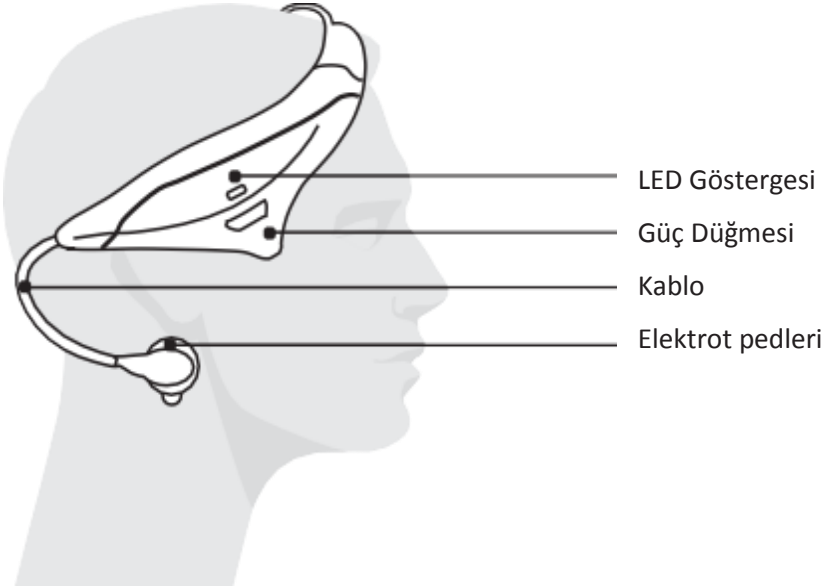

Şekil 1

### Kulaklığınızı açma ve yeni bir seans başlatma

- Şunları sağlayın
  - o Baş takımını şarj edin ve mobil cihazınızla eşleştirin.
  - o Baş takımı başınızın üzerinde rahat konumlandırılmış ve elektrotlar talimatlara uygun olarak takılmış olmalıdır.
- Güç düğmesine 2 saniye boyunca basarak baş takımını açın. Tiz bir uyarı sesi duyacaksınız ve beyaz LED periyodik olarak yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Modius® uygulamasını başlatın ve "Dashboard" sekmesine gidin.
- Ekran düğmesi üstündeki "Start"a tıklayın – Böylelikle uyarınız ve seansınız başlamış olur
- 60 dakikalık kullanım sonunda 3 kısa, tiz bir uyarı sesi duyup, LED göstergesi art arda3 beyaz renkte yanıp söndüğünde, seansınızı tamamlamış olmalısınız.

## Uyarım Seviyesini Ayarlama

- Modius® uygulamasında, “Dashboard” sekmesine gidin.
- Uyarım seviyesi ekran üstü kumandalar kullanılarak ayarlanabilir, söz konusu seviye yukarı ‘^’ veya aşağı ‘v’ ayarlanabilir
- Uyarım seviyesini her ayarlayışınızda, baş takımından, uyarım seviyesinin değiştiğini bildiren bir uyarı sesi gelir.
- Baş takımının maksimum güç seviyesi 10'dur, eğer güç seviyesini daha fazla artırmaya çalışırsanız, azami güç seviyesinde olduğunuzu belirtmek için 2 kısa, tiz bir uyarı sesi duyarsınız.
- Baş takımının minimum güç seviyesi 1'dir, eğer güç seviyesini daha fazla azaltırsanız, baş takımının artık uyarımda bulunmadığını ve esas olarak bekleme modunda '0' seviyesinde olduğunu gösteren 2 kısa, pes bir uyarı sesi duyarsınız.

\* Seans sırasında herhangi bir rahatsızlık duyarsanız, seansı duraklatın ve devam etmeden önce yoğunluğu azaltın. Daha fazla bilgi için diğer uyarılara ve önlemlere bakın.

## Modius® baş takımınızın sıfırlanması

Arada sorun yaşıyorsanız, baş takımınızı sıfırlamanız gerekebilir. Baş takımınızı sıfırlamanız gerekiyorsa, aşağıdaki talimatları uygulayın.

NOT: Baş takımınızı sıfırlamak, uygulama ile senkronize edilmemiş verilerinizin kaybolmasına neden olabilir.

- Modius® Baş Takımını verilen güç kablosuna ve USB şarj cihazına bağlayın
- Turuncu LED'in yandığından emin olun (baş takımının şarj olduğunu gösterir)
- 3 uzun uyarı sesi duyana kadar baş takımının yan tarafındaki güç düğmesine 10 saniyeden fazla basılı turun.
- Baş takımı artık sıfırlanmıştır, güç kaynağından çekebilirsiniz. Artık cihazınızı normal şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

## Baş takımınızı kapatma

- Kullanım sırasında veya baş takımı beklemede olduğu ve kullanılmaya hazır olduğu zaman, baş takımının yanındaki güç düğmesine en az 2 saniye basın.
- Baş takımının kapatıldığına işaret etmek için pes bir uyarı sesi duyacaksınız ve 10 saniye sonra uygulama baş takımınızı aramaya dönecektir.
- Baş takımınızı her kullanımdan sonra şarj edin, bir sonraki oturuma hazır olun.

## 5. Sorun giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Baş takımım açılıyor, ancak bir seansı başlatmaya izin vermiyor	Baş takımını şarj kablosuna bağlıdır	Bir seansı başlatmaya çalışmadan önce kablonun bağlantısını kesin
Baş takımım açılmıyor	Baş takımını şarj edilmemiş	Baş takımını şarj kablosuna bağlayın
	Baş takımını derin bir bekleme moduna girmiştir	Baş takımını şarj kablosuna bağlayın ve açmaya çalışın
Baş takımım bir süre çalışıyor ve sonra kendiliğinden kapanıyor	Pedler arasındaki direnç çok yüksektir	Jel pedleri cildinize uygulamadan önce alkollü mendil kullandıktan sonra, pedlerin kulaklarınızın arkasına doğru yerleştirildiğinden ve pedler ile cildiniz arasında saç olmadığından emin olun
	Elektrotlara yapıştırılmış pedler yıpranmıştır	Baş takımındaki jel pedleri değiştirin
Baş takımım mobil cihazıma bağlanmıyor	Mobil cihazınızda Bluetooth etkin değildir	Bluetooth®'un cihazınızda etkinleştirilmiş olduğundan emin olun
	Mobil cihazınız baş takımını ararken bazı sorunlar yaşıyor	Mobil cihazınızdaki uygulamayı yeniden başlatın
Eşleştirme sırasında, 3 kısa, pes uyarı sesi duyuyorum ve LED göstergesi mavi olarak 3 kez yanıp sönüyor	Baş takımını eşleştirme isteğini mobil cihazdan kabul etmenizi beklerken zaman aşımına uğramıştır	Baş takımını kapatın ve "Baş takımınızı mobil cihazınızla eşleştirme" kısmındaki talimatları izleyerek eşleştirmeyi tekrar deneyin.
Baş takımını kullanırken rahatsızlık duyuyorum	Cihazın güç seviyesi çok yüksek olabilir	Hafif bir sallantı algısı hissedene kadar veya rahatsızlık hafifleyinceye kadar uygulamayı kullanarak baş takımının güç düzeyini azaltın

Baş takımını şarj cihazına bağladığımda LED göstergesi sarı renkte yanıp sönüyor	Baş takımı bir şarj hatasına maruz kalıyordur	Şarj kablosunu farklı bir USB fişine takmayı deneyin, ancak bu sorunu çözmezse lütfen destek birimi ile iletişime geçin.
Baş takımımın üzerindeki LED göstergesi sarı renkte yanıp sönüyor ve 3 kısa alçak uyarı sesi duyuyorum	Baş takımının pili zayıftır	Baş takımını şarj edin (Bkz. "Modius® Baş Takımınızı Şarj Etme")
Baş takımını açmaya çalıştığımda 3 alçak sinyal sesi duyuyorum	Baş takımının pili kritiktir	Baş takımını şarj edin (Bkz. "Modius® Baş Takımınızı Şarj Etme")

## 6. Modius® Cihazınızın Bakımı

### Baş takımı

- Pedleri, yukarıdaki talimatlara uygun şekilde, mastoidlere, yani kulağınızın arkasındaki sert kemikli bölgeye uygulayın. Göğsünüze veya başınızın veya boynunuzun başka yerlerine koymayın. "Baş Takımınız nasıl takılır" kısmına bakın.
- Yalnızca otururken veya yatarken kullanın.
- Bu ürünü çocuklardan uzak tutun. 18 yaşın altındaki hiç kimse bu ürünü kullanmamalıdır.
- Yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Baş takımını kullandıktan sonra kapatın.
- Her kullanımdan sonra, baş takımını kılıfına geri yerleştirmeden önce şarj edin.
- Sert aşındırıcılar veya güçlü deterjanlar kullanmayın.
- Baş takımını ıslatmaktan kaçının
- Sıvıya batırmayın.
- Aşırı güneş ışığı altında bırakmayın.
- Modius®'u baş bandının ezilmesine ya da gerilmesine neden olacak bir durumda bırakmayınız. Bu, başınıza oturmanın sağladığı rahatlığı ve güvenliği etkileyecektir.

### Jel pedler

- Jel pedleri temiz cilde yapıştırmadan önce tüm saç tellerini fırçalayarak temizleyin, aksi takdirde bunlar pedlere yapışabilirler.
- Pedleri kullanmadan önce cildinizin temiz ve makyaj, krem ve diğer losyonlardan arındırılmış olduğundan emin olun.
- Pedleri tutmadan önce ellerinizi temizleyin ve mümkün olduğunca bunlara parmaklarınızla dokunmamaya özen gösterin.

Kullanımdan sonra pedleri uygun bir kutuya veya tenekeye atın.

- Jel pedleri başka kimseyle paylaşmayın. Pedler yalnızca tek kişinin kullanımı içindir.
- Seans başına önerilen 60 dakikadan daha uzun süre ped kullanmayınız.

## 7. Genel ürün bilgileri ve teknik özellikler

### Teknik Özellikler: Modius® Baş Takımı

Güç Özellikleri	
Pil Ömrü	10. Seviye Uyarımda yakl. 10 sa - Yakl. 4 veya 5 Gün Nominal kullanım
Giriş Soketi	Tamamen yalıtılmış dokunma korumalı mikro USB
Ağırlık	85g
Boyut	180x140x70 mm
Güç Kaynağı Giriş Bilgileri	
Micro USB Port (USB portu veya USB şarj cihazı EN/IEC 60601-1'e göre onaylanmalıdır, Kesintisiz güvenliği sağlamak için, Modius®'u şarj etmek için sadece ürünle birlikte verilen şarj cihazı kullanılmalıdır) Gerilim: 4,75 – 5,25V Maks. akım 155mA DC	
Maksimum çıkış gerilimi Maksimum çıkış akımı	20V 600uA.
Bluetooth BLE - BGM113	
Çalışma frekansı bandı	Bluetooth düşük enerjili işlevsellik için 2.4GHz
İletilen maksimum RF gücü	+3 dBm
Batarya (Batarya kullanıcı tarafından değiştirilemez) Lityum Polimer 4.2V 155mAh	
Çalıştırmayla İlgili Çevresel Koşullar	
Çevre	Evde Kişisel Kullanım
Sıcaklık Aralığı	0°C ila 40°C
Suya Karşı Dayanıklılık	0 m
Gürültü seviyesi	0dB
Saklamayla İlgili Çevresel Koşullar	
Sıcaklık Aralığı	0 - 40°C
Bağıl Nem	<%95
Beklenen Hizmet ömrü	Makine 1 yıl garantilidir, ancak çoğu kez daha uzun sürecektir. Aksesuarlar (kablolar, pedler ve mendiller) garanti kapsamına girmez <ul style="list-style-type: none"><li>Kablo ömrü büyük ölçüde kullanıma bağlıdır. Kabloları her zaman özenle tutun</li><li>Elektrot pedleri sadece 1 uygulama için geçerlidir ve son kullanma tarihi için üretici bilgilerine bakın.</li><li>Mendilin son kullanma tarihi için lütfen üreticilerin paketine bakın.</li></ul>
Saklama Ömrü	<ul style="list-style-type: none"><li>Baş takımının sabit bir raf ömrü yoktur</li><li>Aksesuarların raf ömrü için üreticilerin bilgilerine bakın (pedler, kablolar ve mendiller)</li></ul>











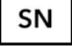


#### Sembol



#### Bilgi

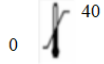Daha fazla bilgi için lütfen ek sembollere ve kullanıcı kılavuzuna bakın.



	Ürün etiketindeki seri numarası ürünü tanımlamak içindir
	Kullanım Talimatlarına Uyun (EN/IEC 60601-1 uyarınca kullanılmıştır).
5.0v 	Doğru Akım Gösterilen voltajda doğru elektrik akımı.
	Tip BF Uygulanan Parça
	Ambalajı hasarlı ürünleri kullanmayın
	Ünite suya dayanıklı değildir. Nemden koruyun
	Her pakette bulunan parça sayısı
	Saklama koşulları: 0 – 40 Derece
	Bağıl Nem: <%95
	Koruyucu Topraklama (Topraklama)
	Kalp pili varsa kullanmayın
	Temasa, nesne girişine ve sıvı girişine ilişkin bir koruma bulunmamaktadır
	Cihazı kullanmadan önce talimatlara bakın, kullanma kılavuzu içindeki talimatlara uyulmaması (örn, elektrotların doğru yere yerleştirilmesi) kullanıcının zarar görmesine neden olabilir

### Sarf malzemeleri (elektrot pedleri, mendil)

Sadece paket içinde verilen veya Neurovalens tarafından önerilen sarf malzemelerini kullanın. Ürün ambalajında ayrıntılı olarak belirtilen üretici talimatlarına bakın.

### İade ve Garanti politikası

Daha fazla bilgi için [www.modiushealth.com/returnsandwarranty](http://www.modiushealth.com/returnsandwarranty) adresine gidin

## 8. Mevzuat ve Güvenlik bildirimleri

### Uygunluk Bildirimi - Model adı: ML600

İşbu belge ile, Neurovalens, bu ürünün Direktifler, Genel Ürün Güvenliği Direktifi - 2001/95/EC ve 2014/53 AB Telsiz Ekipmanları Direktifi'nin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uyumluluk Bildirgesinin tamamını görüntülemek için [www.modiushealth.com/compliance](http://www.modiushealth.com/compliance) adresini ziyaret edin.

Modius® baş takımı, kesintili çalışma için sınıflandırılmıştır. Elektrik güvenlik standartları EN/IEC 60601-1 uyarınca USB şarj cihazıyla birlikte temin edilen Modius® işlevini yerine getiren bir Tıbbi Ekipman Sistemi (ME SİSTEMİ) olarak kabul edilmektedir.

Uygulanan tüm parçalar BF sınıfı olarak kabul edilmektedir. Baş takımının IP değeri sıfırdır. Bu, temasa, nesne girişine ve sıvı girişine ilişkin bir koruma bulunmadığını göstermektedir.



FCC ID Numarası: QOQBGM113

Bu cihaz FCC Kuralları Kısım 15'e uyumludur. Cihaz aşağıdaki iki şart altında çalıştırılabilir:

1. Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz, ve
2. Bu cihaz istenmeyen çalışmaya yol açabilecek parazitler dahil alınan bütün parazitleri

kabul etmelidir.



Modius® 2014/53 AB Telsiz Ekipmanları Direktifi'nin yürürlükteki temel gerekliliklerine uygundur.



Modius® Avustralya ve Yeni Zelanda pazarındaki EMC standartlarına uygundur.

Hali hazırda Modius® satan Tıbbi Cihaz Düzenleyicileri Modius®'u bir Genel Sağlık cihazı olarak kabul eder ve bu nedenle yasal zorunlulukları yerine getirmez.

Silicon Labs onaylıdır  
FCC ID:  
IC ID:

FCC-15C  
QOQBGM113  
5123A-BGM113

### Güvenlik bildirimleri

Bu ekipman, EN Standartlarının özelliklerine uygun olarak elektromanyetik uyumluluk ve güvenlik sertifikasyonuna uygun olarak test edilmiştir: EN301489-3, EN301489-17 ve EN 60950-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 ve IEC 60601-1-11.

Modius®, 2.4 GHz çalışma frekansı aralığında radyo frekansı girişimine karşı bağıışıklık için test edilmiştir ve bunun için kabul edilmiş standartlara uygundur.

Not: Modius®'un yalnızca 18 yaş üstü erişkinlere kilo kaybı ve ağırlık yönetimi hedefleri konusunda yardımcı olacağı belirtilmektedir.

## Güvenlik uyarıları ve önlemleri – Baş takımı



### Uyarılar ve Önlemler:

Modius® baş takımını kullanmadan önce verilen bilgilere ve talimatlara bakın.

Verilen talimatlara uygun olarak elektrot jel pedleri sadece mastoidlerin üzerine, kulakların arkasına yerleştirin. Göğsünüze veya başınızın veya boynunuzun başka yerlerine koymayın.

Hamileyseniz, vestibüler uyarımla tetiklenen refleks epilepsisine sahipseniz veya bir kalp pili takıyorsanız kullanmayın.

Beklenmedik reaksiyonlar meydana gelmesi durumunda Modius® kullanımını derhal durdurulmalıdır.

- Pedleri, yukarıdaki talimatlara uygun şekilde, mastoidlere, yani kulağınızın arkasındaki sert kemikli bölgeye uygulayın. Göğsünüze veya başınızın veya boynunuzun başka yerlerine koymayın. “Baş Takımınız nasıl takılır” kısmına bakın.
- Yalnızca otururken veya yatarken kullanın.
- Bu ürünü çocuklardan uzak tutun. 18 yaşın altındaki hiç kimse bu ürünü kullanmamalıdır. Elektrot pedleri gibi küçük ürünler boğulma tehlikesine yol açarlar.
- Bataryanın şarj edilmesi sırasında gaz oluşumu meydana gelebileceğinden baş takımını iyi havalandırılmış bir alanda şarj edin.
- Hamileyseniz, vestibüler uyarımla tetiklenen refleks epilepsisine sahipseniz veya kalp pili, kalp defibrilatörü veya nörostimülasyon cihazı kullanıyorsanız kullanmayın. Not: Modius®, beyindeki vestibüler (denge) sistemini uyarır. Bu, epilepsi hastalarının çoğunu etkilemese de refleks vestibüler epilepsili bir hastada nöbeti tetikleyebilir. Şüpheleniyorsanız, epilepsisi olan potansiyel kullanıcılar önce aile hekimleriyle konuşmalıdırlar.
- Denge duygunuzu etkileyebileceğinden hareket halindeyken kullanmayın.
- Alkol kullanırken, araba sürerken veya herhangi tür bir makineyi çalıştırırken kullanmayın.
- Baş takımını ıslak ortamlarda kullanmayın veya suya batırmayın.
- Jel pedlerinizi başka kimseyle paylaşmayın. Bunlar yalnızca tek kişinin kullanımı içindir.
- Seans başına önerilen 60 dakikadan daha uzun süre ped kullanmayınız.
- Her kullanımdan sonra pedin atılması önerilir. Herhangi bir pedin uzun süreli veya tekrar tekrar kullanılması etkinliğini azaltıp ciltte tahrişe neden olabilir.
- Pedleri bozuk veya tahriş olmuş cilde uygulamayın.
- Kullanımdan sonra ciltten pedleri dikkatlice çıkarın. Pedleri uygun bir kutuya veya tenekeye atın.
- Pilleri çıkarmaya çalışmayın. Kullanıcı tarafından değiştirilemezler.

### Not:

Baş takımı tıbbi bir cihaz değildir ve sağlıklı bir yaşam tarzının veya profesyonel tıbbi bakımın yerini alamaz. Beklenmedik reaksiyonlar meydana gelmesi durumunda Modius® kullanımını derhal durdurulmalıdır. Bir seans sırasında herhangi bir rahatsızlık duyarsanız, seansı duraklatın ve devam etmeden önce yoğunluğu azaltın. Olası tehlikeler veya olumsuz etkiler şunlardır: cilt tahrişi; uyarımdan rahatsızlık; denge hissi algısı; ara sıra bulantı; ve nadiren kusma. 1-2 gün sonra sorun devam ederse, lütfen doktorunuza danışın.

Önerilen kullanım, günde maksimum 1 saattir. Modius®, bir gün birkaç saat erken kullanmak istemeniz durumunda, 'kilitli' kalmamanız için günde 1 saatlik kullanımı - veya 16 saatlik bir süreyi aşarsanız, Modius® uyarımı otomatik olarak durduracaktır.

Sıfırlama talimatları kişisel günlük kullanımınızı arttıracak şekilde kötüye kullanılmamalıdır.

Bu uyarıları ve talimatları okuyun ve dikkat edin. Bu kılavuzu baş takımınızla birlikte tutun

## Yerleşik pil önlemleri

Modius® baş takımı ürününüzün yerleşik bir bataryası vardır; bu da kullanıcı tarafından değiştirilemez. Modius® kullanıcıları baş takımındaki bataryayı değiştirmeye çalışmamalıdır.

Ürününüzü kurcalamayın veya açmaya çalışmayın; bu, garantiyi geçersiz kılacaktır ve güvenlik açısından bir tehlikeye neden olabilir.

Baş takımını, tanınmış bir test laboratuvarı tarafından onaylanmış bir güç kaynağı kullanarak, bu kılavuzda verilen talimatlara uygun olarak şarj edin.

Cihaz kullanımdayken herhangi bir servis veya bakım işlemi (temizlik ve şarj dahil) gerçekleştirmeyin

## İmha ve geri dönüşüm bilgileri



2002/96/EC Avrupa direktifinin bir hükmü, elektronik olan herhangi bir şeyin elektronik atık muamelesi görmesi veya atılması gerektiği şeklindedir. Bu direktifi hatırlatmak için, etkilenen tüm ürünler artık yukarıda gösterildiği gibi çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu simgesiyle işaretlenmektedir.

Ürünün kullanım ömrünün sonunda, bu ürünü veya pilleri normal ev çöp kutularına atmayın; ancak elektronik ekipmanın geri dönüşümü için bir toplama noktasına getirin. Yanlış bertaraf, hava, su ve toprakta zararlı toksinlerin oluşmasına neden olabilir ve insan sağlığına zararlı olabilir.

Not: Pedleri ve mendilleri uygun bir kutuya veya tenekeye atın.

## Lisans bilgileri



Modius® Bluetooth kullanır

## Hüküm ve Şartlar

Daha fazla bilgi için [www.modiushealth.com/termsandconditions](http://www.modiushealth.com/termsandconditions) adresine gidin

## 9. İletişim

[www.modiushealth.com](http://www.modiushealth.com)

[team@modiushealth.com](mailto:team@modiushealth.com)

[support.modiushealth.com](http://support.modiushealth.com)



Üretici: Neurovalens, 4th Floor, The Warehouse, 7 James Street South, Belfast BT2 8DN.

© 2018 Neurovalens