

Käyttöohje

MagniLink Vision BASIC

Maahantuonti ja markkinointi: Low Vision Inno Oy

Sirrikuja 3 L

Puh: 040 777 1320

Sähköposti: info@lowvision.fi

00940 Helsinki

Fax: 09 6898 8342

Internet: www.lowvision.fi

Valmistaja: LVI Low Vision International

Verkstadsgatan 5

Puh: 0046 470 72 77 00

Sähköposti: info@lvi.se

SE-35246 Växjö

Fax: 0046 470 72 77 25

Internet: www.lvi.se

SISÄLTÖ

1.	YLEISTÄ.....	5
2.	TURVALLISUUSOHJEET	7
3.	PURKAMINEN PAKKAUKSESTA	9
3.1	Pakkausmateriaalit.....	9
4.	ASENNUS	10
4.1	Työpiste miellyttäväksi.....	11
5.	KÄYTTÖ	12
5.1	Ohjauspaneeli.....	12
5.2	Lukupöytä.....	13
6.	VIANETSINTÄ	14
7.	TEKNISET TIEDOT	15

Tämän käyttöoppaan tiedot on tarkastettu huolellisesti ja niiden uskotaan olevan tarkkoja. LVI ei kuitenkaan ole millään tavoin vastuussa mistään epätarkkuuksista, joita tämä käyttöopas saattaa sisältää. Missään tapauksessa LVI ei ole vastuussa, suorista, epäsuorista, erityisistä, nimenomaisista, satunnaisista tai seurannaisvahingoista, joita aiheutuu mistään tämän käyttöoppaan virheestä tai puutteesta.

Jatkuvan tuotekehittelyn johdosta LVI varaa oikeuden tehdä parannuksia tähän käyttöoppaaseen ja sen kuvaamaan tuotteeseen milloin tahansa ilman ennakoilmoitusta tai mitään velvoitteita.

1. Yleistä

MagniLink Vision (MLV) on videosuurennuslaite, jota on saatavana useaa eri mallia. Kaikissa malleissa on sama rakenne, lukupöytä ja elektronikka. Näiden lisäksi moduuli valitaan kolmessa vaiheessa:

- kamera (saatavana standard definition (SD) ja teräväpiirtokamera (HD))
- Näytön koko (integroitu 18,5" tai 23" TFT-laajakuvanäyttö)



Malli	Kamera	Näyttö	Ohjauspaneeli
MLV-BASIC-19	SD	18,5"	3 säätönuppia
MLV-BASIC-SD-23	SD	23,0"	3 säätönuppia
MLV-BASIC-19	HD	18,5"	3 säätönuppia
MLV-BASIC-HD-23	HD	23,0"	3 säätönuppia



Laite täyttää lääketieteellisten laitteiden CE-hyväksynnälle asetetut vaatimukset direktiivien 93/42/ETY ja MDD 93/42/ECC sekä direktiivin 2007/47/EY mukaisesti.

2. Turvallisuusohjeet

MagniLink Vision on tarkoitettu käytettäväksi lukuapuna kotona, koulussa ja toimistossa.

- Ennen liittämistä tarkasta ja varmista, ettei järjestelmässä, virransyötössä ja virtajohdossa ole mitään vioittunut. Mukana toimitettu virtalähde on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan MagniLink Vision -laitteen kanssa. Älä koskaan käytä MagniLink Vision -laitetta, jos se on joutunut alttiiksi vedelle, sateelle tai muille nesteille. Viallinen virtajohto tai pistoke voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Älä anna minkään painaa virtajohtoa puristuksiin tai vierä sen päältä. Jos MagniLink Vision -laite on puhdistettava, irrota laitteen pistoke pistorasiasta ja käytä kosteaa (ei märkää) kangaspalaa. Käytä vain vettä tai näyttöjen ja tietokoneiden puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta. Älä käytä suihkepuhdistusaineita suoraan MagniLink Vision -laitteeseen, koska suihketta voi tulla liikaa ja aiheuttaa sähköiskun.
- Lukupöytää käytettäessä älä aseta käsiä lukupöydän alle tai sen taakse. Sormet voivat jäädä puristuksiin lukupöydän ja telineen tai liikutukien väleihin. MagniLink Vision on sijoitettava vähintään 10 cm päähän pöydän reunasta.
Varoitus! MagniLink Vision -laitteen kokonaispaino on pieni, joten on tärkeää sijoittaa laite oikein niin, että se pysyy aina tasapainossa erityisesti silloin, kun lukupöytä on kaikkein uloimmassa asennossaan. Ylikuormitus tässä asennossa voi saada laitteen kaatumaan, mikä voi johtaa henkilövahinkoihin.
- Jos MagniLink Vision -laitetta on siirrettävä, älä nosta sitä näytöstä tai lukupöydästä, koska ne ovat liikkuvia osia.

- Älä tee mitään ylimääräisiä säätöjä, jos laite ei toimi normaalisti, vaikka oletkin toiminut ohjeiden mukaan. Kytke laite irti ja ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoon. Käytä vain LVI:n ilmoittamia varaosia.
- Jos laitetta siirretään kylmästä lämpimään tilaan, voi sen sisäpintoihin tai kameran linssiin muodostua kosteutta (kondensoituminen). Anna silloin laitteen lämpötilan tasaantua noin 30 minuuttia ennen kuin käytät sitä. Älä altista laitetta liian suurille tai äkillisille lämpötilan vaihteluille.

Jos olet epävarma, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoon.



Tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Älä poista kotelointia. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Jätä huolto valtuutetun huoltohenkilöstön hoidettavaksi.

3. Purkaminen pakkauksesta

Laite toimitetaan yhdessä pakkauksessa, joka sisältää

- laitteen
- käyttöohjeen
- Verkkolaite

Tarkista pakkaus ulkoisten vaurioiden varalta. Huomaa, että vakavista vaurioista on ilmoitettava kuljetusyhtiölle.

Avaa laatikko ja nosta MagniLink Vision pois laatikosta. Poista pakkausmateriaali ja nosta laite pöydälle. Virtajohto on laitteen takaosassa. Katso lisätietoja seuraavasta luvusta Asennus.

3.1 Pakkausmateriaalit

Laitteen pakkausmateriaalit koostuvat seuraavista:

- solumuovia (EPP)
- aaltopahvia
- polyetyleenä (LDPE4)

LVI suosittelee kaiken pakkausmateriaalin säästämistä käytettäväksi tulevia lähetystarpeita varten.

4. Asennus

Aseta laite pöydälle. MagniLink Visionin on oltava vähintään 10 cm:n päässä pöydän reunasta. Huomaa, että laitteen lukupöytää voidaan siirtää 30 cm kolmeen eri suuntaan. MagniLink Vision on erittäin kevyt, minkä vuoksi on tärkeää sijoittaa laite oikein siten, että se pysyy vakaana. Tämä koskee erityisesti tilannetta, jossa lukupöytä on ääriasennossaan. Laitteen liiallinen kuormittaminen tässä asennossa saattaa aiheuttaa laitteen kaatumisen.

Liitä virtajohto pistorasiaan ja paina virtapainiketta. Laite on nyt valmis käyttöön. Näyttöä voi kallistaa 10 astetta ja laskea 8,5 cm yläasennosta. Aseta kätesi näytön molemmilla puolilla oleville pehmusteille* ja säädä näyttö oikeaan kohtaan. Vapauta lukupöydän lukitus. Nyt olet valmis käyttämään MagniLink Visionia.

Kirjoitusasento

Aseta lukupöytä haluamaasi kohtaan. Lukitse lukupöytä painamalla sivuttaislukitsin oikeaan ääriasentoon ja syvyyslukitsin kauimpaan asentoon (kohti laitteen takaosaa).

Kuljetusasento

Aseta lukupöytä keskiasentoon ja työnnä se mahdollisimman taakse. Lukitse lukupöytä painamalla sivuttaislukitsin oikeaan ääriasentoon ja syvyyslukitsin taakse.

4.1 Työpiste miellyttäväksi


On tärkeää saada työpiste MagniLinkin ympärillä miellyttäväksi.

Kannattaa pitää mielessä seuraavat asiat:

- Tuolissa tulisi olla selkänoja.
- Istuimen tulee olla sellaisella korkeudella, etteivät jalat puudu.
- Anna jalkojen levätä lattialla.
- Lukupöydän tulisi olla sellaisella korkeudella, että käsivarret voivat levätä vaakasuorassa pöydällä.
- Suojaudu suoralta päivänvalolta. Kattolamppujen, pöytälamppujen ja ikkunoiden valot voivat heijastua näyttöön.

5. Käyttö

5.1 Ohjauspaneeli

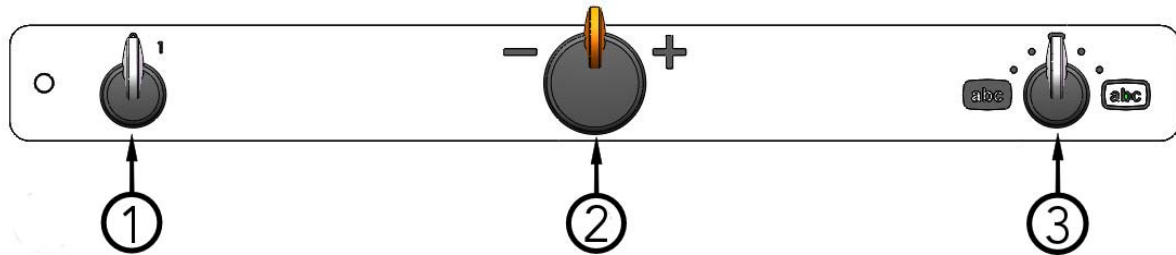

1. Virtakytkin

Kytke virta päälle tai pois tätä säädintä kääntämällä.

2. Suurennuksen säätö

Kääntämällä tätä säädintä vasemmalle voit pienentää suurennusta tai kääntämällä sitä oikealle voit lisätä suurennusta. Tällä säätimellä suurennus voidaan asettaa 16 eri tasoon.

3. Värikuva-tila ja korkean kontrastin tila

Kun säätönupin osoitin on suoraan ylöspäin lähtöasennossa, näytön kuva näkyy värillisenä luonnollisin värein. Kun säädintä kierretään vasemmalle, saadaan korkean kontrastin negatiivinen kuva, ja oikealle kierrettäessä korkean kontrastin positiivinen kuva. Vakiokokoonpanoon kuuluu neljä yhdistelmää:


Tausta/teksti

valkoinen/musta
musta/valkoinen

Tausta/teksti

keltainen/musta
musta/keltainen

5.2 Lukupöytä

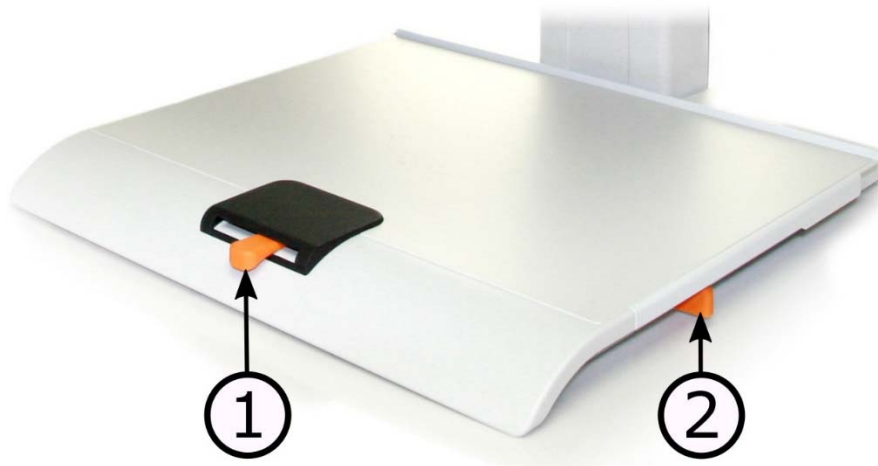

1. Sivuttaissuuntaisen vastuksen säätö

Tällä vivulla voit säätää lukupöydän sivuttaissuuntaista vastusta. Kun lukitus on vasemmassa ääriasennossa, lukupöytä on vapautettuna. Voit lisätä vastusta painamalla sivuttaislukitsinta oikealle.

2. Syvyysasuuntaisen vastuksen säätö

Tällä vivulla voit säätää lukupöydän syvyysasuuntaista vastusta. Kun lukitus on ääriasennossa käyttäjää kohti, lukupöytä on vapautettuna. Voit lisätä vastusta painamalla syvyyslukitsinta taaksepäin.

6. Vianetsintä

Jos mitään ei tapahdu laitetta käynnistettäessä, tarkista, että kaikki liitännät ovat oikein luvun "Asennus" mukaan.

Jos led-merkkivalo pääkatkaisimessa tai sen vasemmalla puolella palaa tasaisesti punaisena, laitteessa on jokin vika ja sitä ei voi käyttää. Paina pääkatkaisinta kerran ja MagniLink Vision yrittää käynnistystä kolme kertaa uudestaan. Jos valo edelleen palaa tasaisesti punaisena, sammuta laite ja ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen.

Älä koskaan pura mitään laitteen suojuksia ja yritä korjata laitetta itse.

7. Tekniset tiedot

MagniLink Vision, jossa 18,5" TFT-laajakuvanäyttö

Suurennus:	2,8 – 59x (SD) tai 1,7–60x (HD)
Resoluutio:	1 366 x 768
Virrankulutus:	28 W (SD) tai 40 W (HD)
Virrankulutus valmiustilassa:	1,3 W
Paino:	11,8 kg

MagniLink Vision, jossa 23" TFT-laajakuvanäyttö

Suurennus:	3,5 -68 (SD) tai 2,0–60x (HD)
Resoluutio:	1 920 x 1 080
Virrankulutus:	40 W (SD) tai 50 W (HD)
Virrankulutus valmiustilassa:	1,3 W
Paino:	13,5 kg

Yleiset ominaisuudet

Virkistystaajuus:	60 Hz
Luminanssi:	300 cd/m ²
Kontrasti:	1 000:1
Tarkennusetäisyys:	0–60 mm (maksimisuurennuksessa)
Työtila:	110–195 mm
Lamppu:	2 LEDiä (SD)
Verkkojännite:	100–240 V, 50–60 Hz
Lukupöydän koko:	420 x 300 mm (L x S)
Mitat käytössä:	420 x 470 x 570 mm (L x S x K)
Mitat pakattuna:	620 x 590 x 610 mm (L x S x K)
Lämpötilaraja:	Kuljetus ja säilytys: –20...+60 °C Käyttö: +5...+35 °C
Suhteellinen ilmankosteus:	< 80 %



Vanhojen sähkölaitteiden hävittäminen (Voimassa EUmaissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on käytössä erityinen keräysjärjestelmä)

Tämä tuotteissamme esiintyvä symboli ilmaisee, että tätä tuotetta ei tule käsitellä kotitalousjätteenä. Se pitää sen sijaan toimittaa asianmukaiseen kierrätettävien sähkölaitteiden keräyspisteeseen. Varmistamalla tämän laitteen asianmukaisen hävittämisen autat ehkäisemään sellaisia mahdollisia ympäristölle ja terveydelle koituvia negatiivisia seuraamuksia, joita tämän tuotteen epäasianmukaisista hävittämistoimista muutoin saattaisi seurata. Materiaalien kierrätys edesauttaa luonnonvarojen säilymistä. Jos haluat yksityiskohtaisempaa tietoa tämän tuotteen kierrättämisestä, ota yhteyttä kunnalliseen jäteneuvontaan, taloyhtiösi jätehuollosta vastaavaan tahoon tai siihen myymälään, josta ostit tämän tuotteen.

DECLARATION OF CONFORMITY

according to the Medical Devices Directive, 93/42/EEC with amendments from
directive 2007/47/EC

Type of equipment: *Reading Aid*
Brand name or trademark: *MagniLink*
Type designation: *MLV*
Product class: *Class 1.*
Manufacturer: *LVI Low Vision International AB*
Address: *Verkstadsgatan 5
S-352 46 Växjö
Sweden*
Web: <http://www.lvi.se>
Phone: *+46 470 - 72 77 00*
Fax: *+46 470 - 72 77 25*

As the manufacturer, we declare under our sole responsibility that:

- the product complies with the provisions of the Council Directive 93/42/EEC with amendments from directive 2007/47/EC.
- we will keep the technical documentation described in section 3 of Annex VII available to the national authorities for a period ending at least five years after the last product has been manufactured.
- the device meets the Essential Requirements of Annex 1 which applies to it, taking into account the intended purpose of the device.
- to follow the requirements regarding products placed on the market as described in section 4 of Annex VII.

Manufacturer

Manufacturer's authorized representative

Date

Signature

Position

2010-09-21



Managing Director

Clarification

Erik Bondemark