

Brugsanvisning

MagniLink S PREMIUM - Chromebook

LVI Danmark ApS

Hørkær 24
2730 Herlev

Tel: 57 67 20 99

info@lvi.dk
www.lvi.dk

LVI Low Vision International

Verkstadsgatan 5
SE-352 46 Växjö

Tel: +46 470-727700
Faks: +46 470-727725

info@lvi.se
www.lvi.se

Inhold

1	Om LVI.....	5
2	Introduktion af MagniLink S.....	6
3	Sikkerhedsinformation	8
4	Udpakning.....	9
4.1	Emballage	10
5	Tilbehør	11
6	Hardware.....	14
6.1	Installation af hardware	14
6.2	Brug af hardwaren	15
7	MagniLink ChromeViewer.....	18
7.1	Systemkrav	18
7.2	Anbefalede systemkrav	18
7.3	Installation af software.....	19
7.4	Brug af softwaren.....	21
8	Arbejde med læsekameraet.....	27
9	Fejlfinding	28
10	Teknisk information	29
11	KONFORMITETSERKLÆRING.....	30

1 Om LVI

LVI Low Vision International AB blev grundlagt i 1978 og er en af verdens førende producenter af forstørrende tv- og computersystemer til synshæmmede. Nye produkter udvikles i tæt samarbejde med brugere og professionelt personale på synsrehabilitationscentre. LVI er en certificeret virksomhed med Quality System Certified ISO 9001 og Environmental System Certified ISO 14001.

Oplysningerne i denne manual er blevet omhyggeligt kontrolleret og anses for at være nøjagtige. LVI påtager sig dog ikke noget ansvar for nogen unøjagtigheder, der måtte være indeholdt i denne manual. LVI er under ingen omstændigheder ansvarlig for direkte, indirekte, særlige, pønale, hændelige skader eller følgeskader, der skyldes en fejl eller mangel i denne manual. Med tanke på den fortsatte produktudvikling forbeholder LVI sig ret til at foretage ændringer i denne manual og de produkter, den beskriver, til enhver tid og uden forudgående varsel eller anden form for forpligtelser.

2 Introduktion af MagniLink S

Tak fordi, du har valgt dette læseapparat. Vi vil gerne sikre, at du er helt tilfreds med dit valg af leverandør og læsehjælpemiddel.

MagniLink S er et bærbart kamerasystem med autofokus, og kan tilsluttes til en computer eller direkte til en ekstern skærm. Systemet styres vha. et tastatur og/eller betjeningsboks. MagniLink S fås i mange forskellige modeller. Vælg model i de følgende trin:




Vælg læsekamera HD eller FHD.

Model	Kamera
MLS-HD	HD (720p)
MLS-FHD	FHD (1280p)

Vælg blandt det følgende tilbehør.

Produktkode	Tilbehør
A	Text To Speech til PC
B	Text To Speech til Mac
C	MagniLink dockingstation med læseplade (DVI).
D	MagniLink dockingstation med læseplade (HDMI)
E	MagniLink dockingstation med bordbeslag (DVI)

	MagniLink S lever op til alle kravene for CE-godkendelse af medicinske anordninger iht. 93/42/EØF-direktiv. Vores produkter overholder kravene iht. MDD 93/42/EØF med tillæg fra direktiv 2007/47/EF.
---	---

3 Sikkerhedsinformation

Læsehjælpemidlet er kun beregnet til indendørs brug og skal bruges i overensstemmelse med de følgende sikkerhedsinstruktioner.

- Brug kun den medleverede strømforsyning til MagniLink S. Hvis der anvendes en forkert forsyningstype til MagniLink S, kan dette beskadige systemet.
- Enheder som f.eks. HDMI-skærme og/eller computere, der er tilsluttet til systemet, skal overholde de gældende sikkerhedsregler i det pågældende land.
- Tænd eller benyt aldrig produktet, hvis det har været udsat for vand, regn eller andre væsker. Træk USB-kablet ud, og lad faguddannet servicepersonale kontrollere produktet, før det tages i brug igen.
- Anbring ledningen på et sted, hvor du ikke kan falde over den, og hvor ledningen ikke bliver klemt.
- Hvis produktet flyttes fra et koldt til et varmt lokale, kan der dannes kondens (fugt) i enheden eller på kameraobjektivet. For at undgå problemer med kondens skal udstyret anbringes i lokalet mindst 30 minutter før brug.
- Hvis systemet skal rengøres, skal du trække alle kabler ud og bruge en let fugtet (ikke våd) klud. Brug kun vand eller et rengøringsmiddel, der er beregnet til skærme og computere.
- Stol ikke 100 procent på resultaterne ved en OCR-konvertering. OCR-programmet kan misfortolke teksten. Det er specielt vigtigt at huske dette, når du behandler følsomme informationer som f.eks. en medicinsk recept.
- Foretag ikke yderligere justeringer, selvom produktet ikke fungerer normalt, efter du har fulgt de funktionelle beskrivelser. Træk USB-kablet ud, og kontakt servicepersonalet eller produkt distributoren. Brug kun reservedele, som er specificerede af LVI.

I tvivlstilfælde, kontakt leverandøren.

ADVARSEL



MagniLink S leveres emballeret i en plastikpose. For at undgå kvælningsrisiko skal posen holdes væk fra børns rækkevidde.

4 Udpakning

Systemet leveres i en kasse med følgende indhold:



- Læsekamera
- USB-kabler
- Kasse
- USB-stik med software
- Polérklud
- Brugsanvisning
- Strømadaptor
- HDMI til HDMI-kabel
- HDMI til DVI-kabel

Kontroller først, at kassen ikke er beskadiget udvendigt. I tilfælde af beskadigelse skal du kontakte transportfirmaet og anmelde beskadigelsen.

Åbn kassen, og tag MagniLink S ud. Fjern den hvide emballage. For yderligere oplysninger, se Installation.

4.1 Emballage

Emballagen består af følgende emballeringsmateriale (LVI-anbefaler, at du gemmer emballagen, hvis systemet skal sendes tilbage eller flyttes):

- Emballeringsmateriale (EPP)
- Kasse (bølgepap)
- Plastikpose (LDPE4)

For oplysninger om reglerne for sortering og indsamling af emballeringsmaterialer i dit område, bedes du kontakte kundeservicen på genbrugsstationen.

5 Tilbehør



Ekstern betjeningsboks (MLS-A100).



Stor ekstern betjeningsboks (MLV-A110A).



MagniLink dockingstation (MLS-A101), stationær læseplade.



MagniLink læseplade (MLRT), bærbar læseplade.



LVI-skærm 19" (MLS-A103) og 23" (MLS-A104).




Text To Speech til PC (TTS-PC) eller Mac (TTS-MAC).

6 Hardware

6.1 Installation af hardware



Åbn kameraets arm, og træk kameraets støtteben ud. Det er ikke muligt at bevæge kameraets arm, før støttebenene er trukket ud.

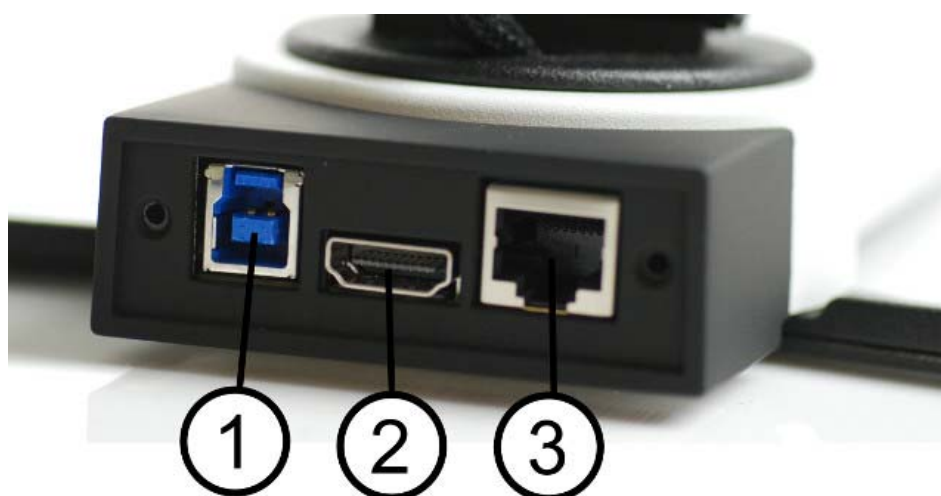

På bagsiden af kameraet er der flere tilslutningsmuligheder. De tilgængelige tilslutningsmuligheder afhænger af kameramodellen.

1. **USB-forbindelse**

Ud over at overføre billeder til en computer, anvendes USB-forbindelsen til at levere strøm til systemet.

2. **HDMI-forbindelse**


Her kan kameraet forbindes til en skærm, der understøtter HDMI eller DVI.

3. Eksternt kontrolpanel

Der kan tilsluttes et eksternt kontrolpanel via denne indgang.

6.2 Brug af hardwaren

6.2.1 Betjeningsboks

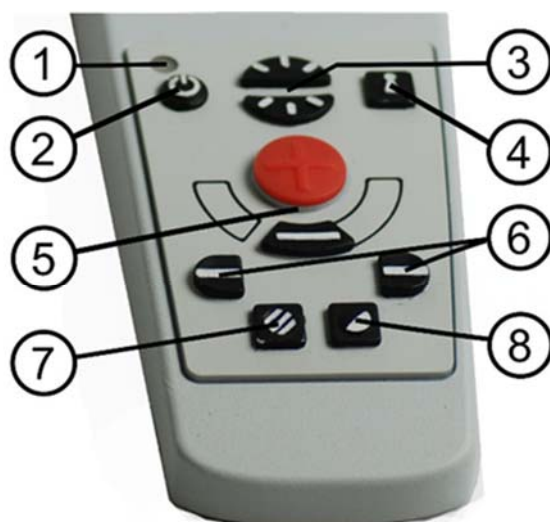

1. LED

En grøn lampe betyder, at systemet er tændt. En blinkende grøn lampe betyder, at system starter op. En langsomt blinkende gul lampe betyder standby. En rød lampe betyder, at der er noget galt med systemet. Se kapitlet Fejlfinding side 28.

2. Tænd/sluk

Tryk på start, eller luk systemet ned.

3. Lyskonfiguration

Bruges til at konfigurere lysstyrken for at optimere læsebetingelserne. Tryk på den øverste halvdel for at øge lysstyrken og den nederste halvdel for at reducere den. Ved systemer med LED-lys reguleres styrken ved at holde knappen (7) nede.

4. Autofokus til/fra

Tryk på knappen én gang for at fastlåse fokus. Dette kan bruges, når du vil skrive i hånden. Autofokus påvirkes ikke af pennen eller din hånd. Tryk på knappen i et sekund, for at genaktivere autofokus.

5. Zoom-knap

Beregnet til at indstille zoom. Hvis du vil reducere zoom, skal du trykke på den nederste knap (minus) og hvis du vil øge zoom, skal du trykke på den øverste knap (plus).

6. Læselinje/bjælke

Justerer læselinjens position. Tryk på højre knap for at flytte den horisontale linje nedad. Hold knappen inde for at ændre læselinjen til lodret og flytte den til højre. Læselinjen bliver nu til en vandret bjælke, der reducerer visningsområdet. Tryk på knappen igen for at gøre bjælken lodret. Den venstre knap giver det modsatte resultat.

7. Billedindstilling

Tryk på knappen for at skifte billedindstilling mellem naturlige farver og gråskala.

Lysindstilling

Hold knappen nede for midlertidigt at aktivere lysindstillingen via lyskonfigurationen (3). Når lyskonfigurationen (3) bruges til at indstille lyset, skiftes der ikke mellem farve og gråskala (kun muligt, hvis systemet har LED-lys).

Spejlvending

Du kan spejlvende billedet ved at holde knappen nede i tre sekunder.

8. Høje kontrastindstillinger ved kunstige farver

Tryk på knappen for at skifte mellem de forskellige farvekombinationer.

Rotation

Hvis du holder knappen nede i tre sekunder, kan billedet roteres 180 grader.

6.2.2 Positionssensor



MagniLink S er udstyret med en positionssensor, der bruges til at skifte mellem læseindstilling (brugeren peger kameraet ned, og objektivet vippes på plads) og distanceindstilling (objektivet åbner sig). Begge indstillinger gemmes automatisk, når du skifter fra det ene til det andet.

Indstillinger, der gemmes automatisk er:

- Kunstige farver
- Negativ/positiv/naturlige farver
- Lys
- Forstørrelsesniveau
- Læselinje/bjælke
- Rotation af kamerabillede
- Spejlvending af kamerabillede

7 MagniLink ChromeViewer

MagniLink ChromeViewer er et program, der bruges på en Chromebook til at vise billeder fra et MagniLink-kamerasystem. Programmet kan styre kameraets egenskaber, f.eks. forstørrelsesniveau, kunstige farver og lysstyrke.

7.1 Systemkrav

- Chrome OS version 59
- 2 integrerede USB 2.0-porte.
- Intel Celeron, 2 GB RAM

7.2 Anbefalede systemkrav

- 1 integreret USB 3.0-port type A.
- Intel i5-processor
- 4 GB RAM

LVI anbefaler, at du bruger en Intel-baseret Chromebook sammen med et MagniLink-kamera, fordi vi har bemærket kompatibilitetsproblemer med ARM-baserede Chromebooks.


En USB 3.0 Y kan være nødvendig for at kunne forsyne MagniLink-kamerasystemet med tilstrækkelig strøm. Et USB Y-kabel gør det muligt at bruge 2 USB-porte til at drive et MagniLink-kamerasystem.

LVI har testet softwaren på et antal Intel-baserede Chromebooks uden problemer, men der er ingen garanti for, at systemet vil fungere sammen med alle Chromebooks, der følger specifikationerne. LVI anbefaler, at du tester softwaren sammen med den Chromebook, hvor systemet skal bruges, for at sikre, at det er kompatibelt. Computere, der præsterer bedre, fremmer en bedre kamerapræstation.


7.3 Installation af software

MagniLink ChromeViewer kan downloades fra Chrome Webshop. Hvis du ikke kan finde programmet ved hjælp af søgefunktionen i Chrome Webshop, er der et direkte link på vores hjemmeside, som fører dig til installationssiden.


Linket åbner en ny side med Chrome Webshop, og MagniLink ChromeViewer vælges automatisk.

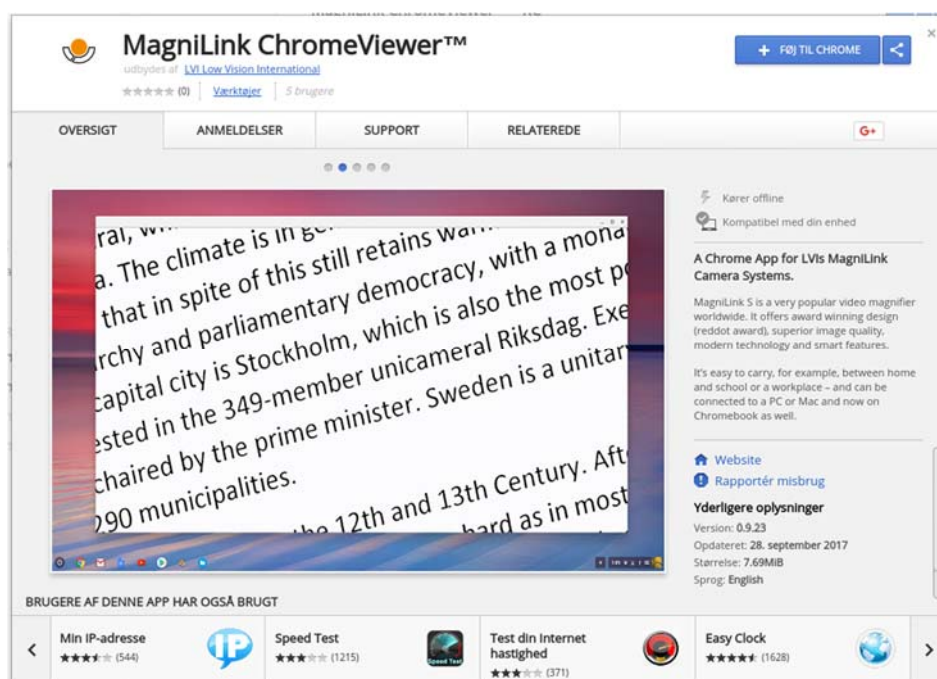

Klik på **Tilføj** for at starte installationen.

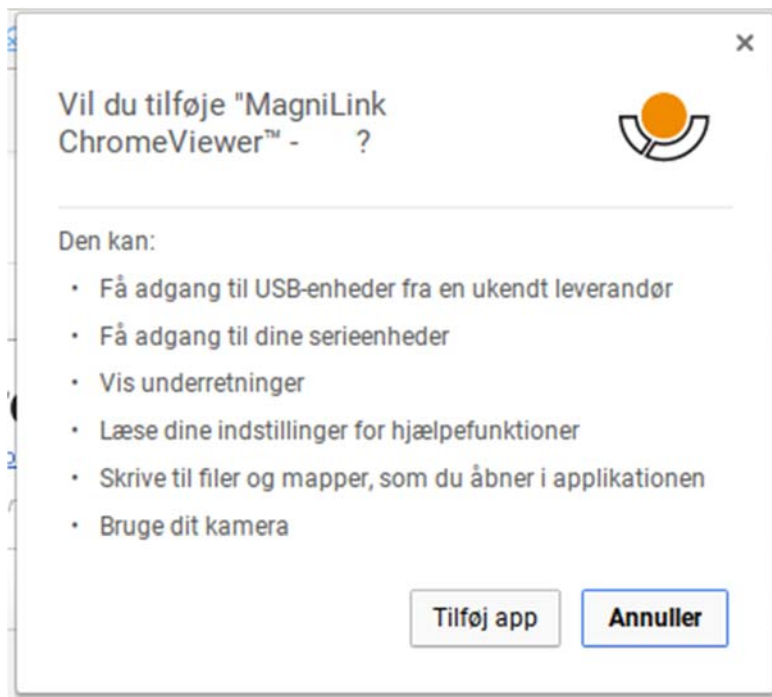

Derefter vises en informationsboks, der forklarer hvad programmet kan gøre. Klik på **Tilføj app** for at fortsætte.

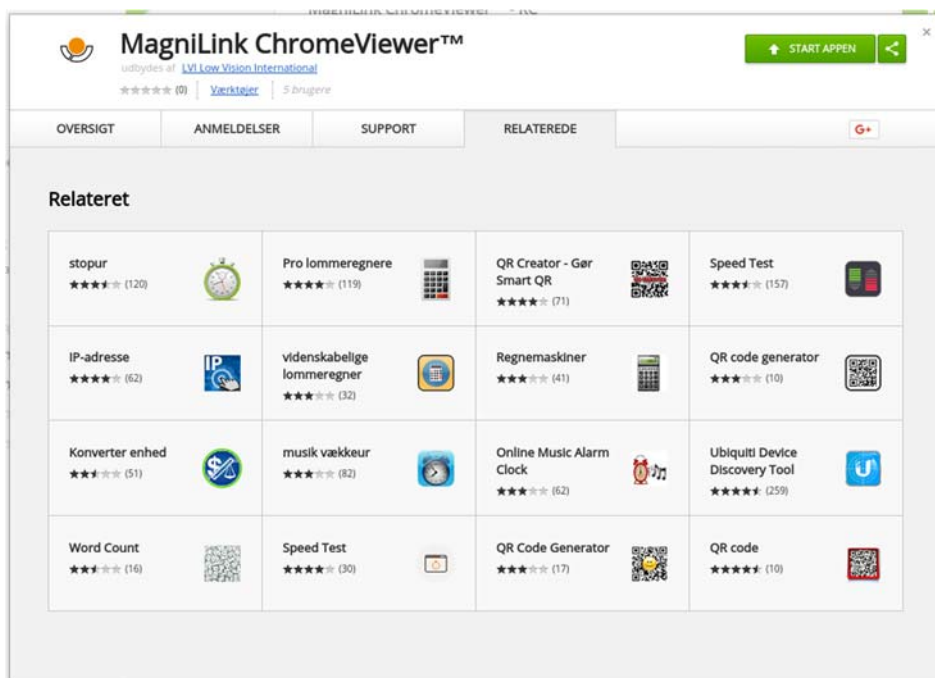

Når installationen er færdig, kan du starte programmet ved at klikke på **START APP** eller søge efter programmet via App Launcher.

Du kan også bruge App Launcher til at tilføje MagniLink ChromeViewer permanent til startområdet.

7.4 Brug af softwaren

7.4.1 Funktioner via tastaturet

MagniLink-kameraet vises som en Chrome-app, og de fleste funktioner kan håndteres via tastaturet. Med forskellige menuer kan du ændre genvejskommandoerne. Herunder følger standardindstillingerne for genvejskommandoerne.

- | | |
|----------|--|
| 1 | Naturlige farver |
| 2 | Positivt billede med øget kontrast
Kunstige farver: hvid/sort, gul/sort, grøn/sort, rød/sort, gul/blå, hvid/blå. Tryk på 2 gentagne gange for at skifte mellem de forskellige farver. (Shift + 2 for at gå tilbage) |
| 3 | Negativt billede med øget kontrast
Kunstige farver: Hvid/Sort, Sort/Gul, Sort/Grøn, Sort/Rød, Blå/Gul, Blå/Hvid. Tryk på 3 gentagne gange for at skifte mellem de forskellige farver. (Shift + 3 for at gå tilbage) |
| Ctrl + P | Tag et snapshot
Tryk på Ctrl + P for at åbne dialogboksen "Gem fil". Der foreslås automatisk et filnavn (med dato og tidspunkt) og en mappe (Downloads). Tryk på Enter for at gemme billederne. Hvis du vil gemme det samme billede et andet sted eller med et andet navn, kan du ændre dette manuelt. |
| Ctrl + M | Start/stop videooptagelse
Tryk på Ctrl + M for at starte optagelsen. Stop optagelsen ved at trykke på Ctrl + M. Når optagelsen stopper, åbnes dialogboksen "Gem fil". Der foreslås automatisk et filnavn (med dato og tidspunkt) og en mappe (Downloads). Tryk på Enter for at gemme med det foreslåede navn. Hvis du vil gemme videoen i en anden mappe eller under et andet navn, kan du ændre dette i dialogboksen. |
| 8 | Forudindstil Delt billede
Tryk gentagne gange på 8 for at skifte mellem de forudindstillede indstillinger for delte billeder på den primære skærm. Vinduet kan altså styres med musen eller med Chrome OS-standardkommandoer. |


9	Vindue for informationer og indstillinger Under dette vindue kan der anvendes forskellige indstillinger for applikationen.
0	Scan efter LVI-kamera Tryk på 0 for at scanne efter et MagniLink-kamerasystem. Det kan være nyttigt, hvis der er sluttet flere LVI-kameraer til computeren. I dette tilfælde åbnes en dialogboks, hvorfra det aktive kamera til programmet kan vælges. Hvis kameraet ikke starter af en eller anden grund, kan det også hjælpe at scanne efter et MagniLink-kamerasystem.
Pil op	Øg forstørrelsen
Pil ned	Reducer forstørrelsen
Venstrepil	Reducer lysstyrke/kontrast
Højrepil	Øg lysstyrken
Ctrl + venstrepil	Læselinje venstre/op
Ctrl + Højrepil	Læselinje højre/ned
Ctrl + R	Roter kamerabilledet med uret Hver gang du vælger denne tastekombination, vil kamerabilledet rotere 90° med uret (90°, 180°, 270° og 0°).
Ctrl + Shift + R	Roter kamerabilledet mod uret Hver gang du vælger denne tastekombination, vil kamerabilledet rotere 90° mod uret (270°, 180°, 90° og 0°).
Ctrl + I	Spejlvend kamerabilledet Spejlvender kamerabilledet. Denne funktion er praktisk, hvis du f.eks. vil anvende kameraet som forstørret kosmetikspejl.
Ctrl + F	Frys kamerabillede Hvis du benytter denne tastekombination, fryser kamerabilledet, for at ophæve frysning skal du benytte den samme tastekombination igen. Du gemmer et frosset billede ved at trykke på Ctrl + F.

Ctrl + A	Deaktiver/aktiver "altid øverst" Genvejskommandoen aktiverer funktionen "Altid øverst" for applikationsvinduet. Hvis "Altid øverst" er aktiveret, placeres kamerabilledet over andre åbne applikationer. Dette betyder, at et andet program kan være i fokus, og at du f.eks. kan bruge Google Docs, mens du ser på kamerabilledet.
Ctrl + 6	Reducere lampens lysstyrke
Ctrl + 7	Øg lampens lysstyrke

7.4.2 Vindue for informationer og indstillinger

Vinduet for informationer og indstillinger består af et antal af forskellige faner, der indeholder applikationsinformationer og alternative indstillinger.

7.4.2.1 Applikationsindstillinger

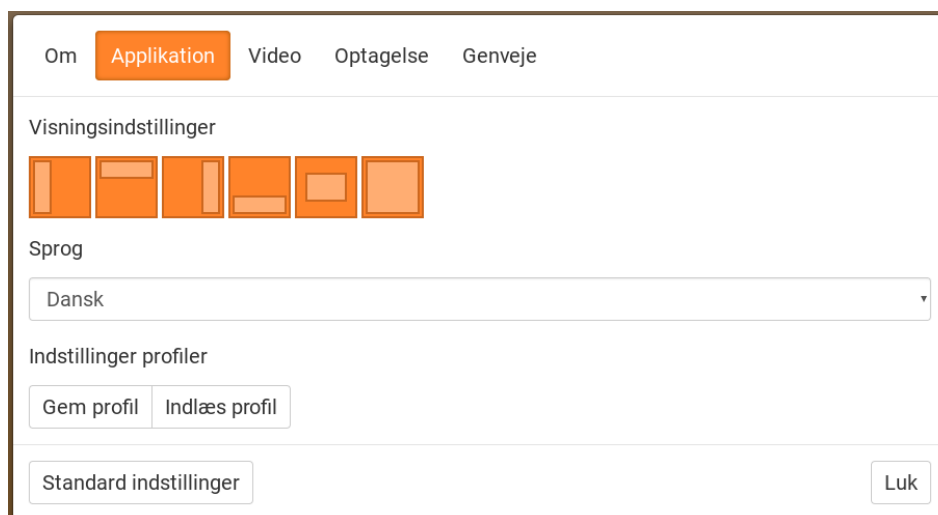

Indstilling af delt billede

Vælg hvilken af indstillingerne for delte billeder, du vil bruge, ved at trykke på 8.

Sprog

Skift sprog i softwaren. Softwaren er indstillet til at bruge samme sprog som computerens standard. Hvis dette sprog ikke er tilgængeligt, vælges engelsk automatisk som standard.


Tilgængelige sprog:

- Engelsk
- Tysk
- Dansk
- Spansk
- Finsk
- Fransk
- Hollandsk
- Norsk
- Svensk

Profil

Importer eller eksporter indstillinger Brug knappen Eksporter indstillinger til at gemme den nuværende konfiguration af indstillinger på harddisken eller for eksempel Google Drev. Brug knappen Importindstillinger til at importere dine eksporterede indstillinger.

7.4.2.2 Videoindstillinger

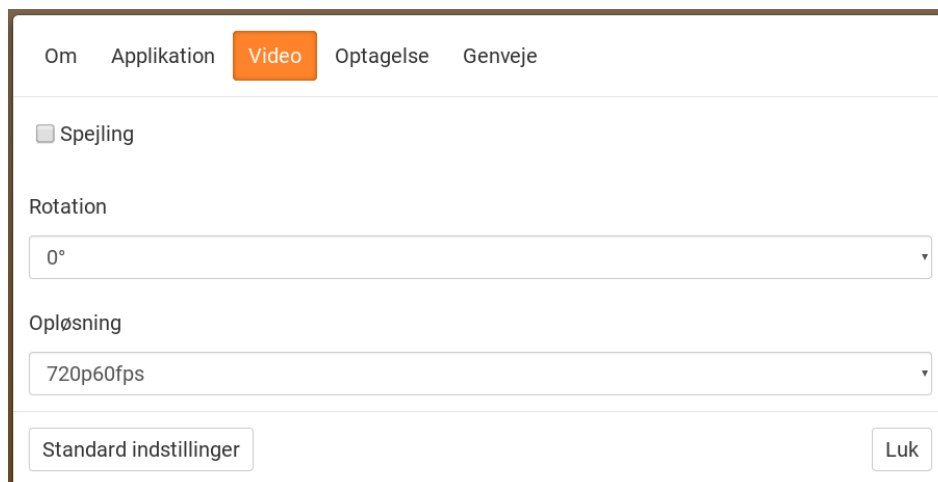

The screenshot shows a settings window with a top navigation bar containing 'Om', 'Applikation', 'Video' (highlighted in orange), 'Optagelse', and 'Genveje'. Below the navigation bar, there is a checkbox for 'Spejling' which is unchecked. Underneath, there is a 'Rotation' section with a dropdown menu currently set to '0°'. Below that is an 'Opløsning' section with a dropdown menu currently set to '720p60fps'. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Standard indstillinger' on the left and 'Luk' on the right.

Spejlvend

Når denne funktion er aktiv, spejlvendes kamerabilledet.


Roter billede

Kamerabilledets rotationsvinkel kan indstilles her. MagniLink ChromeViewer understøtter rotation af kamerabilledet til følgende vinkler: 0°, 90°, 180° og 270°.

Opløsning

Vælg mellem kameraets forskellige opløsningsindstillinger. Den bedste billedkvalitet opnås ved at vælge den højeste opløsning. En lavere opløsning kan være nødvendig, hvis programmet bruges på en computer med lavere ydeevne.

7.4.2.3 Optagelsesindstillinger

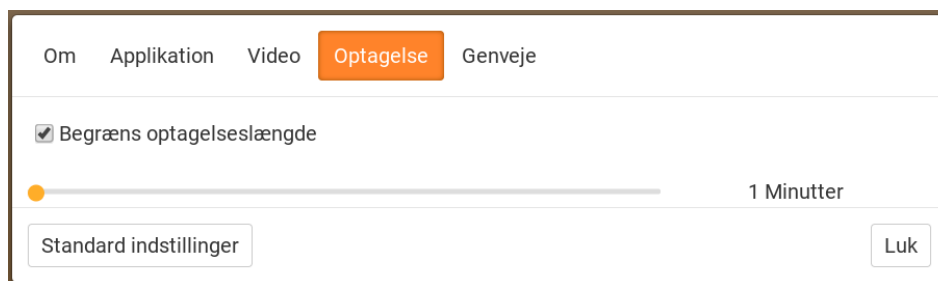

Begræns optagelseslængde

Aktiver denne funktion, hvis du vil begrænse optagelseslængden.

Længde i minutter

Hvis du har valgt at begrænse optagelseslængden, kan du indstille grænsen i minutter her, fra 1 til 60 minutter.

Læs omhyggeligt følgende oplysninger, før du bruger videooptagelsesfunktionen.


MagniLink ChromeViewer kan optage videosekvenser fra et MagniLink-kamerasystem i WebM-format (.webm). Det er ikke muligt at optage lyd. Videooptagelsen startes med tastaturet (Ctrl + M), og en rød indikator vises nederst til højre i videovinduet, mens der optages video.

7.4.2.4 Indstillinger for genvejskommandoer

Om	Applikation	Video	Optagelse	Genveje
Indstillinger				<input type="text" value="9"/>
Re-enumerate cameras				<input type="text" value="0"/>
Næste visning				<input type="text" value="8"/>
Naturlige farver				<input type="text" value="1"/>
Næste positive farver				<input type="text" value="2"/>

Her kan du ændre de anvendte genvejskommandoer for applikationen. Hvis du vil ændre en genvejskommando, skal du tabulere til den kommando, der skal ændres, og trykke på mellemrum eller Enter og derefter indtaste den nye tastaturkombination. Hvis der indtastes en kombination, der allerede er i brug til en anden kommando, slettes den anden kommando. Der skal indtastes en ny tastaturkombination for at ændre kommandoen.

7.4.2.5 Om applikationen

Om	Applikation	Video	Optagelse	Genveje
				
MagniLink ChromeViewer™ 0.9.23				
Copyright © 2017 Low Vision International AB, all rights reserved				
<input type="text" value="MagniLink ChromeViewer™ is made possible with the use of open source software"/>				
<input type="button" value="Standard indstillinger"/>				<input type="button" value="Luk"/>

Informationer vedrørende softwareversion og copyright finder du under denne fane.

8 Arbejde med læsekameraet

Nu er dit læsekamera klar til brug. Det er vigtigt, at du har en komfortabel arbejdsplads omkring MagniLink, og at du sidder korrekt. Så kan du bruge kameraet i lang tid uden at udsætte din nakke og ryg for en alt for stor belastning.

Du bør huske følgende:

- Din stol bør være placeret tæt på bordet, hvor udstyret er placeret, og du bør ikke sidde for længe i stolen. Vi anbefaler en god kontorstol, der kan justeres i højden.
- Stolesædet bør være indstillet i en højde, så benene ikke begynder at sove. Benene bør have en vinkel på 90 grader, og dine fødder bør hvile på jorden.
- Læsepladen bør stå i en højde, hvor du kan hvile din højre arm vandret på det. Det er vigtigt, at bordet hverken er for højt eller for lavt til dig. Det er den ideelle placering, hvis skærmen befinder sig en smule under øjenhøjde og står så lige som muligt foran dig.
- Luk dagslyset ude. Lamper i loftet, bordlamper og lys fra vinduet kan reflektere sig i skærmen. Af denne årsag bør du undgå at placere lamper, så de skinner direkte ind i skærmen eller mod dig selv.

9 Fejlfinding

Hvis indikatorlampen blinker:

En rød lampe eller en blinkende rød lampe angiver en systemfejl.

Genstart systemet ved at afbryde og tilslutte alle kabler igen og genstarte systemet. Hvis der stadig lyser en rød, skal du kontakte en servicetekniker.

10 Teknisk information

Forstørrelsesområde HD-kamera	1,4 - 75 x (15,4" 16:9 skærm)
Forstørrelsesområde FHD-kamera	1,1 - 75 x (15,4" 16:9 skærm)
Strømudgang	5 W
Strømudgang, standby	1,7 W
Vægt	1,7 kg
Billedhastighed	60 Hz
Dimensioner bxdxh	350x270x390 mm
Driftstemperatur	0 til 30 °C
Opbevarings- og transporttemperatur	-20 til 60°C



Bortskaffelse af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr (gælder for EU-lande og alle andre europæiske lande, der har særlige sorteringsystemer)

Hvis produktet eller emballagen bærer dette symbol, må det ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet for indleveres på en dertil egnet genbrugsstation for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Hvis du sikrer, at dette produkt bortskaffes på en ordentlig måde, er du med til at forhindre en negative påvirkning af helbred og miljø, der ellers ville være resultatet af en ukorrekt bortskaffelse af dette produkt. Genbrug er med til at bevare vores naturlige ressourcer. Hvis du ønsker flere oplysninger om genbrug af dette produkt, kan du kontakte din hjemkommune, dit renovationselskab eller rette henvendelse til den butik, hvor du har købt produktet.

11 KONFORMITETSERKLÄRING

DECLARATION OF CONFORMITY

according to the Medical Devices Directive, 93/42/EEC with amendments from directive 2007/47/EC

Type of equipment: *Reading Aid*
 Brand name or trademark: *MagniLink*
 Type designation: ***MLS-HD, MLS-FHD***
 Product class: *Class 1.*
 Manufacturer: *LVI Low Vision International AB*
 Address: *Verkstadsgatan 5
S-352 46 Växjö
Sweden*
 Web: <http://www.lvi.se>
 Phone: *+46 470 - 72 77 00*
 Fax: *+46 470 - 72 77 25*

As the manufacturer, we declare under our sole responsibility that:

- the product complies with the provisions of the Council Directive 93/42/EEC with amendments from directive 2007/47/EC.
- we will keep the technical documentation described in section 3 of Annex VII available to the national authorities for a period ending at least five years after the last product has been manufactured.
- the device meets the Essential Requirements of Annex 1 which applies to it, taking into account the intended purpose of the device.
- to follow the requirements regarding products placed on the market as described in section 4 of Annex VII.

Manufacturer

Manufacturer's authorized representative

Date

Signature

Position

12-11-2012



Managing Director

Clarification

Erik Bondemark

Alfabetisk indeks

Anbefalede systemkrav	18
Applikationsindstillinger	23
Arbejde med læsekameraet	27
Betjeningsboks	15
Brug af hardwaren	15
Brug af softwaren	21
Emballage	10
Fejlfinding	28
Funktioner via tastaturet	21
Hardware	14
Indstillinger for genvejskommandoer	26
Installation af hardware	14
Installation af software	19
Introduktion af MagniLink S	6
KONFORMITETSERKLÆRING	30
MagniLink ChromeViewer	18
Om applikationen	26
Om LVI	5
Optagelsesindstillinger	25
Positionssensor	17
Sikkerhedsinformation	8
Systemkrav	18
Teknisk information	29
Tilbehør	11
Udpakning	9
Videoindstillinger	24
Vindue for informationer og indstillinger	23