



Manuel d'utilisation MagniLink Visus 4,3''

Distributeur en Belgique : LVI België NV

Grauwmeer 1/42 bus 40
3001 Leuven

Tél: 03 455 92 64,
Télé: 03 455 92 88,

Courriel: info@lvi.be
Internet: www.lvi.be

LVI Low Vision International GmbH

Hinterbrunnenstrasse 1
CH-8312 Winterberg

Tel. 052 202 96 16
Fax: 052 202 96 15

E-mail: info@lvi.ch
Internet: www.lvi.ch

Fabricant : LVI Low Vision International

Verkstadsgratan 5
352 46 Växjö

Tel : +46 470 – 727700
Fax : +46 470 – 727725

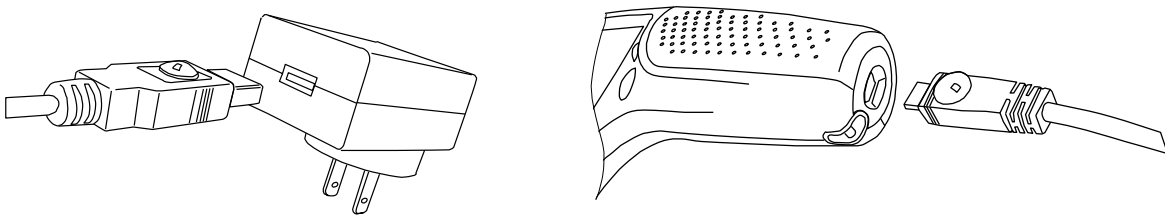
E-mail : info@lvi.se
Internet : www.lvi.se

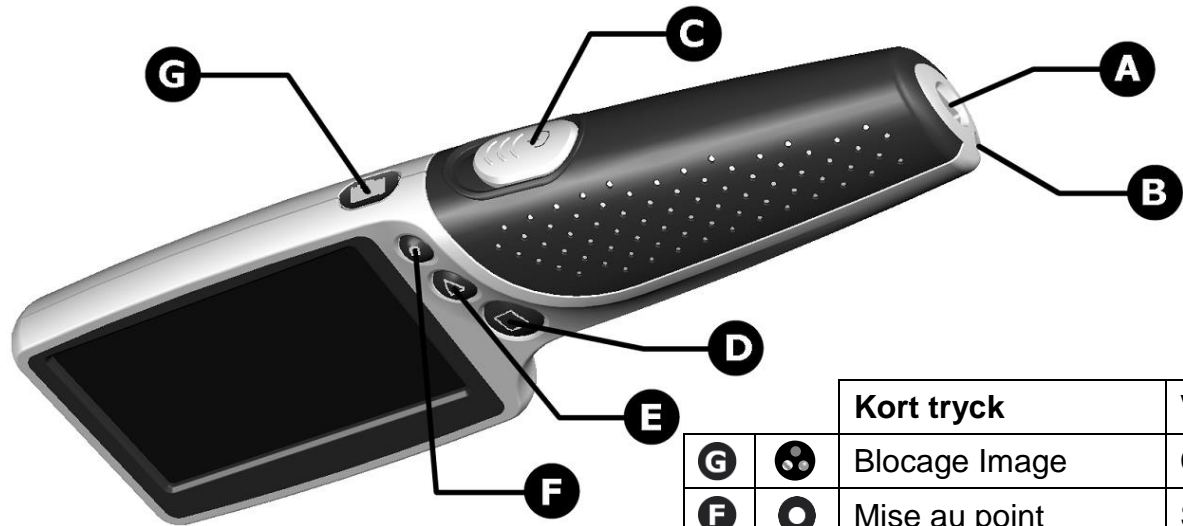
Première opération





Nous vous recommandons de charger complètement votre loupe MagniLink Visus avant la première utilisation. Le chargeur est fourni avec une gamme d'adaptateurs et vous devez choisir celui qui convient à votre pays. Placez le comme indiqué sur l'image et faites une rotation jusqu'à entendre un clic.

Placez le câble dans le chargeur et l'autre partie dans le connecteur du MagniLink Visus (A). Une diode rouge s'allumera le temps de la charge de l'appareil. Dès celle-ci terminée, la diode va s'éteindre. La charge dure environ trois heures.

Une dragonne est également livrée avec l'appareil. Vous pouvez la fixer à l'emplacement (B) au besoin.





		Kort tryck	Vid tryck 3 sekunder
G		Blocage Image	Clarté écran
F		Mise au point	Stockage des images
E		Mise au point proche/moyenne/loin	Changer les couleurs
D		Niveau Agrandissement	Illumination on/off



Allumage

Déplacez le curseur (C) vers l'avant. L'éclairage en dessus de l'appareil va s'allumer et l'image apparait à l'écran. Placez la loupe au dessus de la zone à voir et le centre sur la partie à agrandir. Il faudra éloigner ou rapprocher la loupe pour avoir une image nette.





Agrandissement

En appuyant plusieurs fois sur le bouton  (D) vous pourrez parcourir les trois niveaux d'agrandissement. Il vous suffit de choisir celui qui vous convient pour votre vision.



Bouton Mise au point


Il arrive parfois que vous ayez besoin de localiser une zone spécifique sur une page. Le bouton  (E) permet de régler la mise au point de l'objectif sur une distance supérieure ou inférieure. Vous pouvez ainsi éloigner ou rapprocher l'appareil de la page pour avoir une vue élargie ou rapprochée de ce que vous voulez lire. Appuyez sur le bouton  pour permuter entre la mise au point F1 (rapprochée) et F2 (éloignée). Remarque : il existe une autre mise au point. Voir le menu Options dans la section suivante.

Menu Options

Le menu Options vous permet de choisir entre deux ou trois niveaux de mise au point. Pour accéder à ce menu, appuyez simultanément sur les boutons  et . Allez jusqu'à la NEAR FOCUS à l'aide du bouton . Appuyez sur le bouton  pour l'activer (ON) ou la désactiver (OFF). Lorsque "ON" est sélectionné, l'appareil fonctionne en utilisant trois niveaux de mise au point (F1, F2, F3) au lieu de deux.




Figier une image et Enregistrer une image :

Une pression brève sur le bouton  fige l'image. Une nouvelle pression brève sur  permet de revenir à l'image animée.



Lorsque l'image est figée, une pression longue sur le bouton  enregistrera l'image figée sur la mémoire interne. Lorsque l'image est enregistrée, vous accédez automatiquement au mode **Image Recall** (Rappel d'image) décrit ci-dessous.

Rappel d'image :






À partir de l'image animée, une pression longue sur  permet d'accéder au mode Rappel image. La dernière image enregistrée s'affiche ainsi qu'un numéro d'image exprimé au format "# 10" par exemple.

Utilisez  (suivante) et  (précédente) pour vous déplacer vers les images enregistrées précédentes et suivantes. Une pression sur  permet de repasser en mode caméra directe.

Suppression des images enregistrées :

En mode **Image Recall** (voir ci-dessus), vous pouvez effacer l'image actuellement affichée en effectuant une pression longue sur le bouton . L'appareil affichera une icône représentant une poubelle avec un "?" à côté, et vous demandera de confirmer la suppression. Une nouvelle pression longue sur  supprimera l'image et affichera, le cas échéant, l'image enregistrée auparavant.


Suppression de toutes les images enregistrées :

Appuyez simultanément sur  et  et relâchez-les pour afficher le menu. Utilisez  pour aller dans le champ "Delete All" (Tout effacer), et effectuez une pression longue sur . Une fenêtre s'ouvre et vous demande de confirmer la suppression. Effectuez une nouvelle pression longue sur  pour confirmer ou sur n'importe quel bouton pour quitter.

Connexion de MagniLink Visus au PC



Les images enregistrées sur MagniLink Visus peuvent être visionnées sur tout PC ayant un port USB libre. Insérez la prise micro USB du câble fourni sur la fiche micro USB de l'**appareil**. Connectez l'autre extrémité du câble sur un port USB de votre PC. Lors de la première connexion de MagniLink Visus sur le PC, attendez que le PC installe automatiquement les pilotes appropriés. Un message s'affiche sur le PC lorsque l'installation est terminée. MagniLink Visus s'affiche à présent comme un lecteur sur le PC et vous pouvez visionner les images enregistrées.

Mode Image

En appuyant plusieurs fois sur le bouton (G)  vous pourrez choisir un mode d'image parmi: couleur naturelles, blanc sur noir ou noir sur blanc, ou mi-teinte. Choisissez le mode qui convient à votre vision.

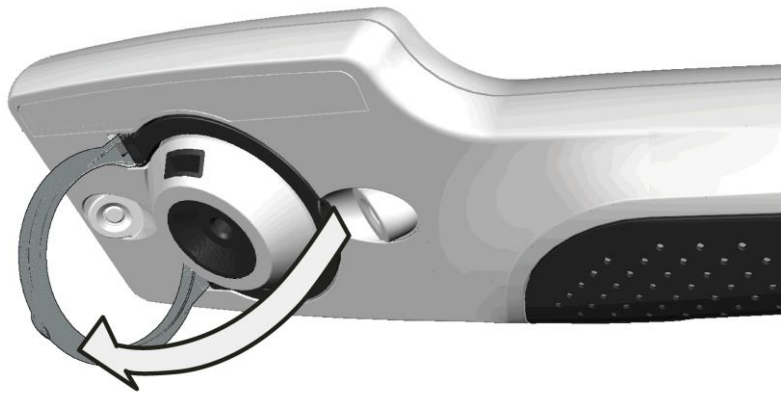
L'appareil, au rallumage, aura retenu le niveau d'agrandissement et le mode Image que vous aurez choisi.

Bouton de mise au point

Il arrive que vous souhaitez voir un point précis sur une page. Le bouton (F)  vous permet de modifier la distance de mise au point afin de pouvoir élargir le champ de vision. En pressant à nouveau le bouton , vous revenez à une mise au point rapprochée pour voir clairement votre cible.


Bras stabilisateur

Le MagniLink Visus est équipé d'un bras stabilisateur que vous pouvez déplier, se trouvant en dessous, autour de la lentille. Dépliez le pour pouvoir poser votre appareil sur la page et ainsi gagner en stabilité. Le stabilisateur doit être utilisé lorsque la mise au point est réglée sur le niveau "moyen".




Blocage Image


Lorsque vous avez des endroits difficiles d'accès, comme un prix en rayon, vous pouvez

photographier cet endroit et le porter à vos yeux par la suite. Appuyez sur le bouton (G)  et l'image se bloque; un nouvel appui sur le bouton retourne au mode caméra. La photographie ne peut pas être enregistrée ni exportée.

Illumination

Vous pouvez arrêter l'éclairage de la loupe afin de lire plus facilement des appareils rétro éclairés (gsm, écran d'ordinateur). Appuyez sur le bouton  pendant trois seconde pour éteindre l'éclairage. Un nouvel appui de trois seconde rallume l'éclairage?


Modification de la couleur artificielle

Vous pouvez choisir différentes combinaisons de couleurs artificielles si vous le souhaitez. Vous devez avant tout utiliser le mode d'image semi-couleur. Maintenez le bouton  appuyé 3 secondes pour permuter entre les différentes options disponibles et relâchez le bouton lorsque le choix vous satisfait. Une nouvelle option sera enregistrée dans la mémoire pour une utilisation ultérieure.








Indicateur de niveau de batterie

Après mise sous tension, un indicateur apparait quelques secondes sur l'écran, indiquant le niveau de charge résiduelle de la batterie. Si la batterie est pratiquement vide, l'indicateur s'affiche automatiquement en haut à gauche de l'écran.

Changer la luminosité de l'écran

Appuyez sur le bouton  pendant trois secondes pour changer la luminosité de l'écran. Il y a trois options: 100%, 75% et 50%. Le MagniLink Visus retiendra le dernier niveau demandé lors d'un prochain rallumage.

Réglage du mode anti-scintillement de la caméra

Appuyez simultanément sur  et  et relâchez-les pour afficher le menu. Utilisez  pour vous déplacer dans le champ "MODE". Utilisez  et  pour sélectionner le mode anti-scintillement (50 Hz pour l'Europe, 60 Hz pour les USA) ou le mode FAST (défini par défaut - permet d'apporter une réponse rapide aux mouvements du texte dans les environnements d'éclairage sans scintillement). Puis utilisez  pour vous déplacer dans le champ "Save & exit" (Enregistrer et quitter) et appuyez sur  pour confirmer les nouveaux paramètres.

Coupure automatique

L'appareil est pourvu d'un système à économie d'énergie. S'il n'y a aucun mouvement pendant trois minutes, l'appareil va se couper automatiquement. L'écran et l'éclairage vont s'éteindre. En cas de mouvements détectés, le tout va se rallumer. Au bout de 8 minutes d'inactivité, l'appareil va se couper complètement. Il faudra dès lors le rallumer avec l'interrupteur.

Si la batterie est déchargée, l'appareil ne se rallumera que lorsqu'il sera en charge.

Charge alternative

L'appareil MagniLink Visus peut se recharger via un port USB d'ordinateur ou tout type de chargeur d'appareil usuel au standard mini USB. Ce standard est connu de l'industrie mais les temps de charge peuvent varier d'un chargeur à l'autre.

Instructions de précautions

Lorsque vous désirez nettoyer l'appareil n'utilisez pas de produits solvants ou abrasifs. Ne le plongez pas dans l'eau! Utilisez le tissu livré avec l'appareil. En cas de saletés tenaces, utilisez un chiffon légèrement humide.

N'ouvrez pas l'appareil.

L'éclairage LED est particulièrement puissant. Ne vous exposez pas à cet éclairage trop longtemps.

A la fin de vie de l'appareil, portez le dans un centre de recyclage. Ne le brûlez pas.

Technical Data

	MagniLink Visus 4,3 (MLVISUS4,3)
Charger Supply	100V – 240Vac 50/60Hz with supplied adaptor
Unit supply voltage	5V dc, micro-USB connector
Display	4.3"-diagonal TFT LCD 16:9
Operating temperature	0°C to 45°C
Recharging time	4 hours with supplied charger
Run time <i>Dependant on mode of operation and subject matter.</i>	4 hours
Weight	198g
Magnification (near) (middle) (far)	7X, 9X and 14X 3.4X, 4.5X and 7X 1.5X, 2X and 3X

Specification is preliminary and is subject to change

Declaration of Conformity

We, Ash Technologies Ltd., declare under our sole responsibility that the products MagniLink Visus 3.4 and MagniLink Visus 4.3 of the brand LVI (Low Vision International), to which this declaration relates, are in conformity with the following standards or other normative documents:

EN55022: 2007

EN55024: 2008

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 2008 and A1:2001 to EN61000-3-3:2008

Equipment classification: Class B

EN62471:2008 Classification: Risk Group 1 – (Low Risk)

following the provisions of EMC directive 2004/108/EC.

Alan Johnston

Ash Technologies Ltd, Naas, Ireland.

6 October 2011

