

Brukerhåndbok

MagniLink TAB

ProVista AS

Nils Hansens Vei 20
0667 Oslo - Norway

Tel: +47 22 69 61 00
Faks: +47 37 05 86 87

mail@provista.no
www.provista.no

LVI Low Vision International

Verkstadsgatan 5
SE-352 46 Växjö

Tel: +46 470-727700
Faks: +46 470-727725

info@lvi.se
www.lvi.se

Innholdsfortegnelse

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Om LVI..... | 5 |
| 2 | Introduksjon til MagniLink TAB | 6 |
| 3 | Sikkerhetsinformasjon | 7 |
| 4 | Utpakking | 8 |
| 4.1 | Emballasje | 8 |
| 5 | Maskinvare | 9 |
| 5.1 | Stativ | 9 |
| 5.2 | Nettbrett..... | 10 |
| 5.3 | Avstandskamera..... | 11 |
| 5.4 | Installasjon..... | 12 |
| 6 | Programvare..... | 13 |
| 6.1 | Funksjoner via menyer..... | 14 |
| 6.2 | Funksjoner via bevegelser..... | 17 |
| 6.3 | Funksjoner via tastaturet..... | 18 |
| 6.4 | Informasjons- og innstillingsvindu..... | 20 |
| 6.5 | Kvalitet på OCR-behandling..... | 25 |
| 7 | Ergonomi..... | 26 |
| 8 | Teknisk informasjon..... | 27 |
| 9 | Samsvarserklæring..... | 29 |

1 Om LVI

LVI Low Vision International AB ble grunnlagt i 1978 og er en av verdens ledende produsenter av utstyr for synshemmede. Nye produkter utvikles i tett samarbeid med brukere og fagfolk innen synsrehabilitering. LVI er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 og miljøsertifisert i henhold til ISO 14001.

Informasjonen i håndboken er nøye kontrollert. Det påpekes allikevel at LVI tar ingen ansvar for unøyaktigheter i håndboken. Under ingen forhold vil LVI være ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige, eller følgeskader som et resultat av feil eller utelatelser i håndboken. LVI Low Vision International har en uttrykt målsetning om kontinuerlig produktutvikling. Vi forbeholder oss derfor retten ved alle tilfeller uten advarsel å gjøre endringer og forbedringer i denne håndboken og det produkt som her beskrives.

2 Introduksjon til MagniLink TAB

Takk for at du valgte dette systemet. Vårt mål er at du skal bli fornøyd med ditt valg av leverandør og lesehjelpemiddel.

MagniLink TAB er et system med nettbrett og stativ, utviklet for å gjøre hverdagen enklere for synshemmede. Systemet har autofokus, flere kunstige farger og innstilling for forstørrelsesnivå. Det er mulig å OCR-behandle tekst og få den opplest av en talesyntese.



MagniLink TAB tilfredsstillter alle kravene for CE-merking av medisinsk utstyr i henhold til direktivet 93/94/EØF. Våre produkter tilfredsstillter kravene for MDD 93/94/EØF med tillegg fra direktiv 2007/47/EF.

3 Sikkerhetsinformasjon

- Bruk kun strømadapteren som leveres med produktet. Hvis du bruker feil type adapter, kan dette skade systemet.
- Bruk aldri produktet hvis det har vært utsatt for vann eller andre væsker. Skadede eller våte produkter kan forårsake elektrisk støt eller brann.
- Plasser strømledningen slik at du verken kan snuble i den eller at den kan komme i klem noe sted.
- Hvis produktet flyttes fra kulden og inn i et varmt rom, kan det danne seg kondens (fuktighet) inni enheten eller på katedralinsen. For å unngå problemer med kondens, bør enheten installeres i rommet minst 30 minutter før bruk.
- Hvis systemet må rengjøres, kobler du fra alle kablene. Bruk en lett fuktet (ikke våt) klut til å rengjøre systemet. Bruk kun vann eller et rengjøringsmiddel som er ment for skjermer og datamaskiner.
- Når du skal flytte systemet, tar du av avstandskameraet (hvis aktuelt), legger sammen systemet og løfter det via håndtaket.
- Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene når du legger sammen systemet.
- Stol ikke 100 prosent på resultatet av en OCR-konvertering; OCR-motoren kan feiltolke teksten. Det er spesielt viktig å være klar over dette når du skal behandle sensitiv informasjon, f.eks. en legemiddelresept.

Hvis du er i tvil, ta kontakt med leverandøren.

ADVARSEL



Produktet leveres pakket i en plastpose. For å unngå fare for kveling, må du oppbevare posen utilgjengelig for barn og spedbarn.

4 Utpakking

Systemet leveres i en eske som inneholder følgende:

- Stativ
- Nettbrett (Microsoft Surface)
- Strømadapter
- Avstandskamera
- Pusseklut
- Etui
- Brukerveiledning

Kontroller først at esken ikke har ytre skader. Hvis den har skader, må du kontakte transportøren og melde fra om skaden.

Åpne esken, ta ut MagniLink TAB og fjern emballasjen.

4.1 Emballasje

Emballasjen består av følgende emballasjematerialer (LVI anbefaler at emballasjen ligger igjen i esken i tilfelle du må returnere systemet eller flytte det):

- Emballasjemateriale (XPE)
- Eske (bølgepapp)
- Polyetylen (LDPE4)

Når det gjelder sortering og innsamling av emballasjematerialer, kan du ringe til kommunen for å høre hvilke regler som gjelder der du bor.

Vær klar over at produktet og tilbehøret må resirkuleres som elektronisk avfall. Et utslitt batteri resirkuleres som elektronisk avfall.

5 Maskinvare


5.1 Stativ



Stativet består av en arm med en holder for et nettbrett. Armen på stativet fungerer også som håndtak når du legger sammen og skal bære systemet. Stativet har også feste for et avstandskamera.

Hvis nettbrettet skal settes tilbake i stativet, er det viktig at du setter det inn med kameraet ned. Ellers kan det blir vanskelig å ta ut igjen.

5.2 Nettbrett

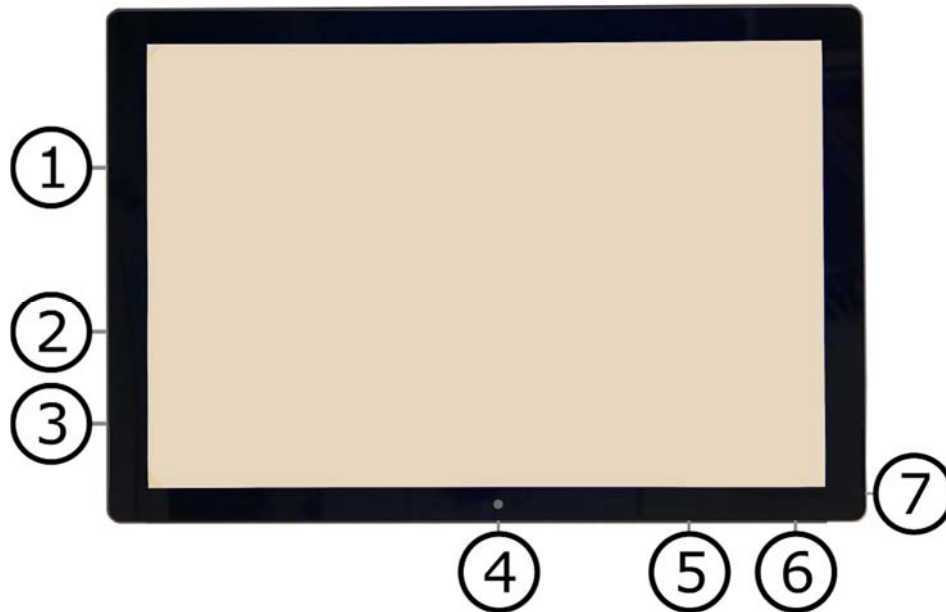

Nettbrettet er av typen Microsoft Surface Pro.

1. Strømadapterinngang.
2. USB-innganger.
3. Mini-DisplayPort, for tilkobling av ekstern skjerm.
4. Kamera.
5. Volumkontroll.
6. Av/på-knapp. Trykk for å starte. Trykk på og slipp knappen raskt for å gå til standby-modus. Trykk på og hold knappen inne for å slå av enheten.
7. Hodetelefonkontakt.

5.3 Avstandskamera



Avstandskameraet kobles til nettbrettet via en USB-kabel. Katedralinsen må åpnes ved bruk på avstand.

5.4 Installasjon



1. Sett stativet på bordet foran deg.
2. Ta tak i armen på stativet, og før den til ønsket posisjon.
3. Koble strømadapteren til inngangen på venstre side av nettbrettet.
4. Sett avstandskameraet på høyre side av stativet. Koble USB-kabelen fra kamerahuset til USB-inngangen på venstre side av nettbrettet.

6 Programvare

Programvaren leveres forhåndsinstallert og starter automatisk når du slår på enheten. Programvaren omfatter tre ulike visninger; en kameravisning, en OCR-visning og en innstillingsvisning. Programvarens ulike funksjoner kan betjenes via menyer, bevegelser eller tastaturet. Når det kommer ut en ny versjon, oppdateres programvaren automatisk.

Hvis du ønsker å slå av programvaren, trykker og holder du fem fingre på skjermen for å gå ut av fullskjermsmodus. Trykk på krysset oppe i høyre hjørne

LVI påtar seg ikke noe ansvar for konflikter som kan oppstå når brukere installerer tredjeparts programvare på enheten. Hvis det oppstår problemer, er det et gjenopprettingspunkt. Hvis du vil gjenopprette Windows til dette punktet, kan du trykke på **Søk**. Skriv inn **Gjenoppretting** i søkefeltet, og klikk på **Gjenoppretting**. Trykk på **Åpen systemgjenoppretting**, og velg gjenopprettingspunktet **LVI Factory Restore**. Det kan ta opptil en time å gjenopprette systemet.

6.1 Funksjoner via menyer

Følgende meny vises når applikasjonen er i kameravisning.



Veksle mellom kameravisning og OCR-visning.



Veksle mellom avstandskamera og det fremre og bakre kameraet. Et trykk med to fingre endrer retning.



Zoom inn.



Zoom ut.



Start OCR. Når du trykker på knappen med to fingre, vises resultatet av OCR-behandlingen på en ny side.



Åpne en undermeny med følgende to knapper.



Ta opp video. Et trykk med to fingre starter opptak uten dialog.



Ta et bilde. Et trykk med to fingre tar et bilde uten dialog.



Åpne en undermeny med følgende fem knapper.



Veksle mellom naturlige farger og gråtoneskala.



Veksle mellom kunstige farger. Du kan få paletten med kunstige farger til å rulle bakover ved å trykke med to fingre.



Øk lysstyrke eller kontrast.



Reduser lysstyrke eller kontrast.



Speilvend bilde.



Åpne Innstillinger-visningen.

Følgende meny vises når applikasjonen er i OCR-visning.



Veksle mellom kameravisning og OCR-visning.



Åpne en undermeny der du finner følgende to alternativer.



Åpne dokument. I dialogboksen velger du filen du vil åpne. Du kan åpne lagrede ZIP-filer.



Lagre dokument. Det foreslås automatisk et filnavn (dagens dato og klokkeslett). Du kan lagre teksten som en RTF- (.rtf) eller ZIP-fil.



Start lesing.



Gå bakover i teksten. Avhengig av hvilken lesemodus som er valgt, vil du enten gå tilbake til forrige kapittel, ord, setning eller blokk. Et trykk med to fingre tar deg tilbake til forrige side.



Gå forover i teksten. Avhengig av hvilken lesemodus som er valgt, vil du enten gå forover til neste kapittel, ord, setning eller blokk. Et trykk med to fingre går til neste side.



Åpne en undermeny med følgende innstillinger.



Gå til neste lesemodus. Tilgjengelige moduser er: tegn, ord, setning og blokk.



Endre visningsmodus. Visningsmodusene som er tilgjengelige, er "page view", "row view", "word view", "image view", "image and word" og "image and row".



Øk skriftstørrelse.



Reduser skriftstørrelse.



Åpne en undermeny med følgende fire knapper.



Veksle mellom naturlige farger og gråtoneskala.



Veksle mellom kunstige farger. Du kan få paletten med kunstige farger til å rulle bakover ved å trykke med to fingre.



Øk lysstyrke eller kontrast.



Reduser lysstyrke eller kontrast.



Åpne Innstillinger-visningen.

6.2 Funksjoner via bevegelser

Noen funksjoner kan betjenes via bevegelser på nettbrettet. Å trykke og holde betyr at du holder fingrene på stedet i mer enn et halvt sekund. Du kan velge hvilke bevegelser du vil slå av i innstillingene.

| | |
|-------------------------------|---|
| Trykk med to fingre | Naturlige farger |
| Trykk med tre fingre | Autofokus av/på Ikke mulig med det fremre kameraet. |
| Langt trykk med en finger | Start OCR-behandling |
| Trykk og hold med to fingre | Vinkelkorrigering av/på |
| Trykk og hold med tre fingre | Speilvend bilde |
| Trykk og hold med fire fingre | Åpne innstillinger |
| Trykk og hold med fem fingre | Slå fullskjermsvisning av og på |
| Knip | Endre forstørrelse |
| Dra en finger | Panorer gjennom bildet |
| Dra to fingre horisontalt | Endre kontrastnivå |
| Dra tre fingre horisontalt | Endre manuelt fokus (i kameravisning) Bare mulig med avstandskameraet. |
| Dra fire fingre horisontalt | Juster talehastigheten (i OCR-visning) |
| Dra to fingre vertikalt | Endre visningsmodus |
| Dra tre fingre vertikalt | Endre kunstig farge |
| Dobbeltrykk med en finger | Juster volumet |
| | Skjul meny |

6.3 Funksjoner via tastaturet

De fleste funksjonene kan håndteres via tastaturet. Snarveikommandoene kan endres i innstillingene. Nedenfor ser du standardinnstillingene for snarveikommandoene.

| | |
|-------------------|---|
| F1 | Naturlige farger |
| F2 | Positive farger forover |
| Skift + F2 | Positive farger bakover |
| F3 | Negative farger forover |
| Skift + F3 | Negative farger bakover |
| Pil opp | Øk forstørrelsen |
| Pil ned | Reduser forstørrelsen |
| Ctrl + J | Autofokus av/på Ikke mulig med det fremre kameraet. |
| Skift + pil opp | Øk fokusavstand Bare mulig med avstandskameraet. |
| Skift + pil ned | Reduser fokusavstand Bare mulig med avstandskameraet. |
| Pil høyre | Øk lysstyrke/kontrast |
| Pil venstre | Reduser lysstyrke/kontrast |
| Ctrl + I | Gjenspeil kamerabilde |
| Ctrl + K | Vinkelkorrigering av/på |
| Ctrl + F | Slå fullskjermsvisning av og på |
| Ctrl + B | Vis batteristatus |
| F9 | Innstillinger |
| F7 | Bytt kamera |
| F5 | Lagre bilde |
| Skift + F5 | Lagre bilde raskt |
| Ctrl + F5 | Start videoopptak |
| Ctrl + Skift + F5 | Start videoopptak raskt |
| A | Panorerer til venstre Bare mulig hvis bildet er forstørret. Ikke mulig med avstandskameraet. |

| | |
|---------------|--|
| D | Panorer til høyre Bare mulig hvis bildet er forstørret. Ikke mulig med avstandskameraet. |
| W | Panorer opp Bare mulig hvis bildet er forstørret. Ikke mulig med avstandskameraet. |
| S | Panorer ned Bare mulig hvis bildet er forstørret. Ikke mulig med avstandskameraet. |
| F4 | Start OCR Teksten fra OCR-behandlingen erstatter eksisterende tekst. |
| Shift + F4 | Start OCR-innsetting Teksten fra OCR-behandlingen settes inn på en ny side. |
| V | Veksle mellom kameravisning og OCR-visning |
| Alt + F5 | Lagre dokumenter |
| F6 | Åpne dokument |
| Skift + Pluss | Øk skriftstørrelse |
| Skift + Minus | Reduser skriftstørrelse |
| 1 | Start lesing |
| 2 | Stopp lesing |
| B | Endre visningsmodus |
| 3 | Les forrige |
| 4 | Les neste |
| 5 | Bytt lesemodus |
| Page Down | Neste page Hvis flere sider er skannet, går du til neste side. |
| Page Up | Forrige side Hvis flere sider er skannet, går du til forrige side. |
| 8 | Reduser lydstyrken |
| 9 | Øk lydstyrken |
| 6 | Reduser talehastighet |

7

Øk talehastighet

Ctrl + 0

Neste stemme

6.4 Informasjons- og innstillingsvindu

Informasjons- og innstillingsvinduet består av en rekke ulike faner som inneholder applikasjonsinformasjon og alternative innstillinger.

6.4.1 Om programmet



Informasjon om programvareversjon og systemlisens finner du under denne fanen.

Hvis du vil oppdatere systemlisensen, kan du gjøre dette ved å trykke på knappen "enter licence".

6.4.2 Applikasjonsinnstillinger



Farger

Du kan fjerne og endre systemets kunstige farger.

Begrens opptakslengde

Aktiver denne funksjonen hvis du ønsker å begrense opptakslengden.

Lengde i minutter

Hvis du valgte å begrense opptakslengden, kan du angi grensen i minutter her, fra 1 til 60 minutter.

Vinkelkorrigering

Når denne er valgt, kompenseres det for nettbrettets tilt i videoen.


Fremre kamera

Når denne ikke er valgt, kan du ikke bytte til fremre kamera. Du kan ikke oppheve dette valget hvis det bakre kameraet ikke er valgt.

Bakre kamera

Når denne ikke er valgt, kan du ikke bytte til bakre kamera. Du kan ikke oppheve dette valget hvis det fremre kameraet ikke er valgt.

6.4.3 Taleinnstillinger

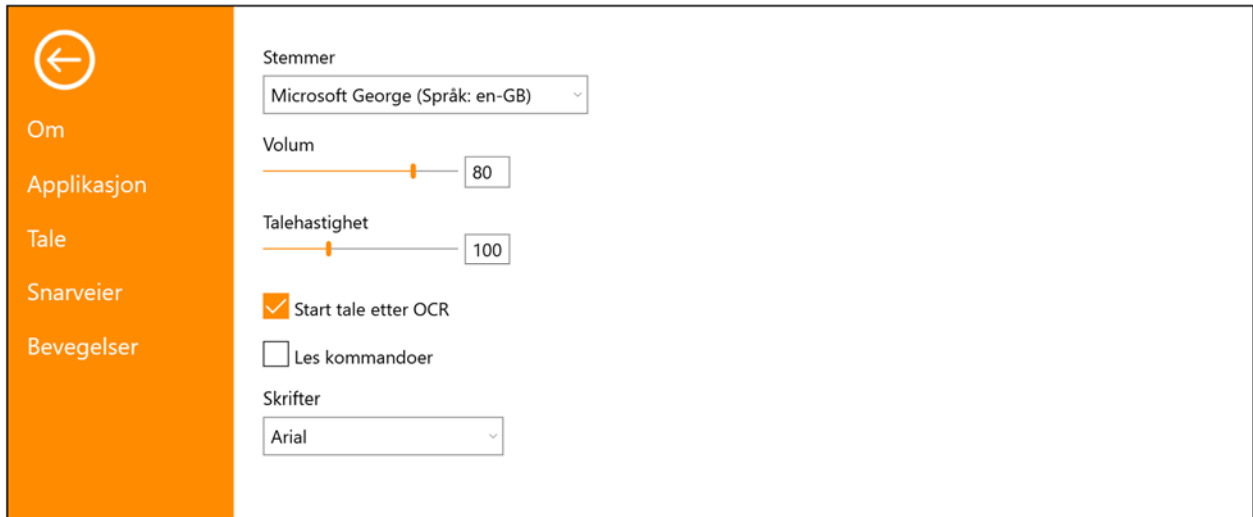

Stemmer

Hvis flere stemmer er tilgjengelige, kan du velge mellom dem.

Volum

Stille inn lydnivået til stemmen.

Talehastighet

Stille inn talehastigheten.

Start tale etter OCR

Hvis det er krysset av for dette valget, vil teksten automatisk bli lest opp høyt etter at et bilde er OCR-behandlet.


Les kommandoer

Når denne er krysset av, vil applikasjonen lese opp menyene når du bruker dem.

Skrift


Her kan du angi hvilken skrift som skal brukes til å vise den OCR-behandlede teksten. Skriften som brukes, har ingen innvirkning på resultatet av OCR-behandlingen.

6.4.4 Snarveikommandoer

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  Om Applikasjon Tale Snarveier Bevegelser | Kamera | |
| | Øk forstørrelsen | Pil opp |
| | Reduser forstørrelsen | Pil ned |
| | Øk lysstyrke/kontrast | Pil høyre |
| | Reduser lysstyrke/kontrast | Pil venstre |
| | Reduser fokusavstand | Skift+Pil ned |
| | Øk fokusavstand | Skift+Pil opp |
| | Bytt kamera | F7 |
| | Naturlige farger | F1 |
| | Positive farger forover | F2 |
| | Positive farger bakover | Skift+F2 |
| | Negative farger forover | F3 |
| | Negative farger bakover | Skift+F3 |
| | Lagre bilde | F5 |
| | Lagre bilde raskt | Skift+F5 |
| | Start videoopptak | Ctrl+F5 |
| | Start videoopptak raskt | Ctrl+Skift+F5 |
| | Spillvend kamerabilde | Ctrl+I |
| | Autofokus av/på | Ctrl+J |
| | Vinkelkorrigering av/på | Ctrl+K |
| | Innstillinger | F9 |
| | Skjul meny | Ctrl+H |
| | Slå fullskjermvisning av og på | Ctrl+F |
| | Vis batteristatus | Ctrl+B |
| Panorer til venstre | A | |
| Panorer til høyre | D | |

Her kan du endre snarveikommandoene som brukes for applikasjonen. Når du skal endre en snarveikommando, tabulerer du til kommandoen som skal endres og skriver inn den nye tastekombinasjonen. Hvis du taster inn en kombinasjon som allerede er i bruk for en annen kommando, vil den andre kommandoen bli slettet. Du må legge inn en ny tastekombinasjon for den andre kommandoen.

6.4.5 Bevegelser

| | | |
|---|--|-------------------------------|
|  Om Applikasjon Tale Snarveier Bevegelser | Generelt | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Naturlige farger | Trykk med to fingre |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Innstillinger | Trykk og hold med fire fingre |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Slå fullskjermvisning av og på | Trykk og hold med fem fingre |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Forstørrelse | Knip |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Panorer | Dra en finger |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrast | Dra to fingre horisontalt |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Kunstige farger | Dra to fingre vertikalt |
| | Kamera | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bytt kamera | Dra fire fingre horisontalt |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Vinkelkorrigering av/på | Trykk og hold med to fingre |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Speilvend kamerabilde | Trykk og hold med tre fingre |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Autofokus av/på | Trykk med tre fingre |

Her kan du velge hvilke bevegelser som skal brukes. Du kan slå av en bevegelse ved å fjerne avkrysningen i den aktuelle boksen.

6.5 Kvalitet på OCR-behandling

For å få best mulig resultat av OCR-konverteringen, bør du være klar over følgende.

- Forviss deg om at forstørrelsen er tilstrekkelig. Svært liten tekst gir dårlig resultat i OCR-programvaren. Vi anbefaler en skriftstørrelse på minst 12 pkt. for den minste forstørrelsen på lesekameraet.
- Unngå glanset papir da dette gir refleksjoner i bildet. Dette gir dårligere resultat av OCR-konverteringen. Hvis du skal bruke glanset papir, anbefaler vi at du slår av lyset på enheten.
- OCR-motoren kan ha problemer med å tolke enkelte skrifter.
- Det er viktig at teksten har høy nok kontrast.
- Det er viktig at språket for OCR-motoren er det samme som for teksten.

7 Ergonomi

Det er viktig at arbeidsplassen rundt systemet er komfortabel og at du sitter riktig. Dette for at du skal kunne bruke det så lenge som mulig uten å utsette nakke og rygg for unødvendige belastninger.

Du bør tenke på følgende.

- Stolen bør stå inntil bordet som utstyret står på, og du bør ikke sitte i stolen for lenge om gangen. Vi anbefaler en god kontorstol med regulerbar høyde.
- Setet på stolen skal være i en høyde som ikke gjør at bena dine visner bort; bena skal ha en vinkel på 90 grader og føttene skal være på gulvet.
- Bordet skal være i en høyde der du kan hvile underarmen horisontalt på den. Det er viktig at bordet verken er for høyt eller for lavt for deg. Den ideelle løsningen er om skjermen er litt under øyenivå og i en så rett linje foran deg som mulig.
- Steng ut dagslyset. Lys fra taklamper, bordlamper og vinduer kan forårsake refleksjoner på skjermen. Derfor bør du ikke plassere lysene der de lyser direkte på skjermen eller deg selv.
- Hvis du bruker enheten i lange perioder, er det en fare for at gjentatte bevegelser gir deg smerter i nakken, skuldrene og ryggen. Du kan også bli sliten i øynene av å se på skjermen for lenge.

8 Teknisk informasjon

Stativ

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Mål lagt sammen | 365 x 300 x 30 mm (B x D x H) |
| Mål, åpnet | 230 x 310 x 350 mm (B x D x H) |
| Vekt | 2,2 kg |

Avstandskamera

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Forstørrelsesområde | 0,8 – 80x (høyde 33 cm) |
| Vekt | 700 g |
| Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Lengde på kamera og arm | 620 mm |

Nettbrett

| | |
|--|------------------------|
| Type | Microsoft Surface Pro |
| Vekt | 800 g |
| Skjermstørrelse | 12,3" |
| Oppløsning | 2736 x 1924 |
| Forstørrelsesområde (Innebygd kamera) | 0,7 – 8x (høyde 30 cm) |
| Batteritid | I bruk: ca 2,5 timer |
| Temperaturområde | 0 °C – 35 °C |
| Mål (B x H x D) | 292 x 202 x 8 mm |



Avhending av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder for EU-land og alle andre europeiske land med egne innsamlingsordninger)

Hvis produktet eller emballasjen har dette symbolet på seg, skal det ikke håndteres som vanlig husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres inn til en miljøstasjon for resirkulering av elektriske og elektroniske komponenter. Ved å sørge for at dette produktet avhendes på riktig måte hjelper du til med å redusere den negative virkningen på helse og miljø som ellers kunne ha skjedd hvis produktet ble kastet på feil måte. Resirkulering bidrar til en mer bærekraftig bruk av naturressursene. Hvis du ønsker mer informasjon om resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, din lokale miljøstasjon eller butikken der du kjøpte produktet.

9 Samsvarserklæring

DECLARATION OF CONFORMITY

according to the Medical Devices Directive, 93/42/EEC with amendments from directive 2007/47/EC

Type of equipment: *Reading Aid*

Brand name or trademark: *MagniLink*

Type designation: ***MLTAB***

Product class: *Class 1*

Manufacturer: *LVI Low Vision International AB*

Address: *Verkstadsgatan 5
S-352 46 Växjö
Sweden*

Web: <http://www.lvi.se>

Phone: *+46 470 - 72 77 00*

Fax: *+46 470 - 72 77 25*

As the manufacturer, we declare under our sole responsibility that:

- the product complies with the provisions of the Council Directive 93/42/EEC with amendments from directive 2007/47/EC.
- we will keep the technical documentation described in section 3 of Annex VII available to the national authorities for a period ending at least five years after the last product has been manufactured.
- the device meets the Essential Requirements of Annex 1 which applies to it, taking into account the intended purpose of the device.
- to follow the requirements regarding products placed on the market as described in section 4 of Annex VII.

Manufacturer


Manufacturer's authorized representative

Date

Signature

Position

05-03-2019

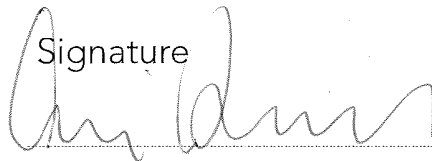

Managing Director

Clarification

Erik Bondemark

Alfabetisk stikkordregister

| | |
|---|----|
| Applikasjonsinnstillinger | 21 |
| Avstandskamera | 11 |
| Bevegelser | 24 |
| Emballasje | 8 |
| Ergonomi | 26 |
| Funksjoner via bevegelser | 17 |
| Funksjoner via menyer | 14 |
| Funksjoner via tastaturet..... | 18 |
| Informasjons- og innstillingsvindu..... | 20 |
| Installasjon | 12 |
| Introduksjon til MagniLink TAB | 6 |
| Kvalitet på OCR-behandling | 25 |
| Maskinvare | 9 |
| Nettbrett | 10 |
| Om LVI..... | 5 |
| Om programmet | 20 |
| Programvare | 13 |
| Samsvarserklæring | 29 |
| Sikkerhetsinformasjon | 7 |
| Snarveikommandoer | 23 |
| Stativ | 9 |
| Taleinnstillinger | 22 |
| Teknisk informasjon..... | 27 |
| Utpakking | 8 |