

Brugsanvisning

MagniLink TAB

LVI Danmark ApS

Hørkær 24
2730 Herlev

Tel: 57 67 20 99

info@lvi.dk
www.lvi.dk

LVI Low Vision International

Verkstadsgatan 5
SE-352 46 Växjö

Tel: +46 470-727700
Faks: +46 470-727725

info@lvi.se
www.lvi.se

Inhold

1	Om LVI.....	5
2	Introduktion til MagniLink Zip.....	6
3	Information.....	7
3.1	Genbrug, installation og vedligeholdelse	7
3.2	Rengøring.....	7
3.3	Sikkerhedsinformation.....	7
4	Udpakning.....	9
4.1	Emballage	9
5	Hardware.....	10
5.1	Stativ	10
5.2	Tablet computer	11
5.3	Afstandskamera	12
5.4	Installation	13
6	Software.....	14
6.1	Funktioner via menuer.....	14
6.2	Funktioner via bevægelser.....	19
6.3	Funktioner via tastaturet	20
6.4	Noteværktøj	23
6.5	Vindue for informationer og indstillinger.....	26
6.6	Kvalitet af OCR-behandling.....	31
7	Ergonomi.....	32
8	Teknisk information	33
9	KONFORMITETSERKLÆRING.....	36

1 Om LVI

LVI Low Vision International AB blev grundlagt i 1978 og er en af verdens førende producenter af udstyr til svagtseende. Nye produkter udvikles i tæt samarbejde med brugere og professionelle inden for synsrehabilitering. LVI er kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001 og er miljøcertificeret i henhold til ISO 14001.

Oplysningerne i denne manual er blevet omhyggeligt kontrolleret og anses for at være nøjagtige. LVI påtager sig dog ikke noget ansvar for nogen unøjagtigheder, der måtte være indeholdt i denne manual. LVI er under ingen omstændigheder ansvarlig for direkte, indirekte, særlige, pønale, hændelige skader eller følgeskader, der skyldes en fejl eller mangel i denne manual. Med tanke på den fortsatte produktudvikling forbeholder LVI sig ret til at foretage ændringer i denne manual og de produkter, den beskriver, til enhver tid og uden forudgående varsel eller anden form for forpligtelser.

2 Introduktion til MagniLink Zip

Tak fordi, du har valgt dette system. Det er vores mål, at du er tilfreds med dit valg af leverandør og læsehjælpemiddel.

MagniLink TAB er et system med en tabletcomputer og stativ, der er udviklet for at gøre hverdagen lettere for mennesker med et synshandicap. Systemet tilbyder automatisk fokusering, flere kunstige farver og mulighed for at indstille forstørrelsen. Det er muligt at OCR-behandle en tekst og få den læst op med en talesyntese.



MagniLink TAB lever op til alle kravene for CE-mærkning af medicinske anordninger iht. 93/94/EF-direktiv. Vores produkter overholder kravene iht. MDD 93/94/EØF med tillæg fra direktiv 2007/47/EF.

3 Information

3.1 Genbrug, installation og vedligeholdelse

Anordningen må kun revideres og forberedes teknisk af en autoriseret virksomhed. Videre anvendelse må kun foretages efter passende inspektion og rengøring/desinfektion.

3.2 Rengøring

Før rengøring og vedligeholdelse af udstyr, bemærk:

- Frakobl enheden fra strømforsyningen, før den rengøres.
- Brug en let fugtig (ikke våd) klud og et rengørings-/desinficeringsmiddel, der er beregnet til monitorer og computere.
- Lad ikke væsker trænge ind i enheden.

3.3 Sikkerhedsinformation

- Brug kun den strømforsyning, der følger med produktet. Brug af en forkert type strømforsyning kan beskadige systemet.
- Produktet må ikke betjenes, hvis det har været udsat for vand eller andre væsker. Et beskadiget eller vådt produkt kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- Anbring ledningen på et sted, hvor du ikke kan falde over den, og hvor ledningen ikke bliver klempt.
- Hvis produktet flyttes fra et koldt til et varmt lokale, kan der dannes kondens (fugt) i enheden eller på kameraobjektivet. For at undgå problemer med kondens skal udstyret anbringes i lokalet mindst 30 minutter før brug.
- Hvis systemet skal rengøres, skal du trække alle kabler ud og bruge en let fugtet (ikke våd) klud. Brug kun vand eller et rengøringsmiddel, der er beregnet til skærme og computere.

- Når systemet skal flyttes, fjernes afstandskameraet (hvis monteret), systemet klappes sammen og løftes med håndtaget.
- Pas på ikke at få fingrene i klemme, når du folder systemet sammen.
- Stol ikke 100 procent på resultaterne ved en OCR-konvertering. OCR-programmet kan misfortolke teksten. Det er specielt vigtigt at huske dette, når du behandler følsomme informationer som f.eks. en medicinsk recept.

I tvivlstilfælde, kontakt leverandøren.

ADVARSEL



Produktet leveres emballeret i en plastikpose. For at undgå kvælningssrisiko skal posen holdes væk fra børns rækkevidde.

4 Udpakning

Systemet leveres i en kasse med følgende indhold:

- Stativ
- Tablet computer (Microsoft Surface Pro)
- Strømforsyning
- Afstandskamera
- Polérklud
- Kasse
- Brugsanvisning

Kontroller først, at kassen ikke er beskadiget udvendigt. Hvis de er beskadigede, skal du kontakte transportselskabet og anmelde beskadigelsen.

Åbn kassen, tag MagniLink TAB ud, og fjern emballeringsdelene.

4.1 Emballage

Emballagen består af følgende emballeringsmateriale (LVI-anbefaler, at du gemmer emballagen, hvis systemet skal sendes tilbage eller flyttes):

- Emballeringsmateriale (XPE)
- Kasse (bølgepap)
- Polyethylen (LDPE4)

For oplysninger om reglerne for sortering og indsamling af emballeringsmaterialer i dit område, bedes du kontakte kundeservicen på genbrugsstationen.

Bemærk, at produktet og dets tilbehør skal bortskaffes som elektronisk affald. Et udtjent batteri skal bortskaffes som elektronikaffald.

5 Hardware

5.1 Stativ



Stativet består af en arm med en holder til en tablet computer. Stativets arm fungerer også som et håndtag, når systemet klappes sammen og flyttes. Stativet indeholder desuden en fastgørelse til et afstandskamera.

Hvis tabletten skal sættes tilbage på stativet, er det vigtigt at indsætte det med kameraet nedad. Ellers kan det være vanskeligt at fjerne.

5.2 Tablet computer



Denne tablet er af mærket Microsoft Surface Pro.

1. Strømforsyningsstik.
2. USB-stik.
3. USB-C eller Mini DisplayPort (afhængig af model).
4. Kamera.
5. Lydstyrkeregulering.
6. Tænd/sluk-knap. Tryk for at starte. Tryk på og slip knappen hurtigt for at gå i standby tilstand. Tryk på og hold knappen nede for at slukke apparatet.
7. Hovedtelefonstik.

5.3 Afstandskamera



Afstandskameraet er tilsluttet tablet computeren med et USB-kabel. Kameraets objektiv kan foldes ned, hvis du ønsker at betragte et objekt på afstand.

5.4 Installation



1. Anbring stativet på bordet foran din siddeplads.
2. Tag fat i stativets arm og før den til den ønskede position.
3. Tilslut strømforsyningen til stikket på venstre side af tabletten.
4. Placer afstandskameraet på højre side af stativet. Tilslut USB-kablet fra kamerahuset til USB-stikket på venstre side af tabletten.

6 Software

Softwareen leveres forudinstalleret og starter automatisk, når du tænder for enheden. Softwareen omfatter tre forskellige visninger: en kameravisning, en OCR-visning og en visning af indstillingerne. Der er desuden et værktøj du kan anvende til at tage noter i et PDF-dokument, eller i et billede der er blevet taget. Softwarens forskellige funktioner kan styres med menuer, bevægelser eller tastatur. Softwaren er kompatibel med Microsoft Surface Pen og skærmlæseren i Windows 10.

Hvis du vil lukke softwaren, skal du trykke og holde fem fingre på skærmen for at gå ud af fuldskræmstilstanden. Tryk derefter på lukkemærket x i øverste højre hjørne.

LVI accepterer intet ansvar for konflikter, der måtte opstå, når brugere installerer tredjeparts software på enheden. Hvis der opstår problemer, er der et gendannelsespunkt. Tryk på **Søg** for at gendanne Windows til dette punkt. Indtast **Gendannelse** i søgefeltet, og klik derefter på **Gendannelse**. Tryk på **Åben systemgendannelse** og vælg Gendannelsespunkt **LVI fabriksgendannelse**. Gendannelse af systemet kan tage på til en time.

6.1 Funktioner via menuer

Følgende menu vises, når applikationen er i kameravisning.



Skift mellem kameravisning og OCR-visning.



Skift mellem afstandskamera samt frontkamera og bagkamera. Et tryk med to fingre skifter retning.



Zoom ind.



Zoom ud.



Start OCR. Når du trykker på knappen med to fingre, vises resultatet af OCR-behandlingen på en ny side.



Åben en undermenu med følgende fem knapper.



Åben video i Windows standardprogram til videovisning. Ét tryk med to fingre åbner den sidst optagne video uden dialog.



Åben billede i Windows standardprogram til billedvisning. Ét tryk med to fingre åbner det sidst optagne billede uden dialog.



Optag video. Der åbnes en "Gem videoklip" dialogboks. Der foreslås automatisk et filnavn (dags dato og klokkeslæt). Tryk på "Gem" for at gemme med det foreslåede navn. Hvis du vil gemme videoen i en anden mappe eller under et andet navn, er det muligt at ændre dette i dialogboksen. Stop optagelsen ved at trykke på knappen igen. Ét tryk med to fingre starter optagelsen uden dialog.



Tag et billede. Dialogboksen "Gem billeder" åbnes. Der foreslås automatisk et filnavn (dags dato og klokkeslæt). Tryk blot på "Gem" for at gemme billedet. Hvis du vil gemme det samme billede et andet sted, eller med et andet navn eller i et andet format, (standarden er JPG), kan du ændre dette manuelt. Ét tryk med to fingre tager et billede uden dialog.



Åben noteværktøjet. Ét tryk med to fingre åbner det sammen med kamerabilledet.



Åben en undermenu med følgende knapper.



Skift mellem naturlige farver og gråtoner.



Skift mellem kunstige farver. Ved at trykke med to fingre køres der baglæns mellem de kunstige farver..



Øg lysstyrke eller kontrast.



Sænk lysstyrke eller kontrast.



Spejlvend billedet.



Roter billedet med uret. Ét tryk med to fingre roterer billedet mod uret.



Åben menuen indstillinger.

Følgende menu vises, når applikationen er i OCR-visning.



Skift mellem kameravisning og OCR-visning.



Åben en undermenu med følgende tre alternativer.



Åben dokument. Vælg den fil, du vil åbne, i dialogboksen. Det er muligt at åbne PDF-filer, billedfiler af typen .bmp, .jpg, .png, .gif og tiff. samt gemte zip-filer.



Gem dokument. Der foreslås automatisk et filnavn (dags dato og klokkeslæt). Det er muligt at gemme teksten som en RTF (.rtf) eller ZIP fil.



Åben noteværktøjet. Ét tryk med to fingre åbner det sammen med det relevante dokument.



Start læsning.



Spring tilbage i teksten. Afhængigt af hvilken læsetilstand der er valgt, vil du enten springe tilbage til forrige tegn, ord, sætning eller blok. Et tryk med to fingre springer tilbage til forrige side.



Spring fremad i teksten. Afhængigt af hvilken læsetilstand der er valgt, vil du enten springe frem til næste tegn, ord, sætning eller blok. Et tryk med to fingre skifter til næste side.



Åben en undermenu med følgende indstillinger.



Skift til næste læsetilstand. De tilgængelige tilstande er: tegn, ord, sætning og blok.



Skift visningsindstilling. De tilgængelige visningsindstillinger er "sidevisning", "rækkevisning", "ordvisning", "billedvisning", "billede og ord" samt "billede og række".



Øg skriftstørrelse.



Reducer skriftstørrelse.



Åben en undermenu med følgende fire knapper.



Skift mellem naturlige farver og gråtoner.



Skift mellem kunstige farver. Ved at trykke med to fingre køres der baglæns mellem de kunstige farver..



Øg lysstyrke eller kontrast.



Sænk lysstyrke eller kontrast.



Åben menuen indstillinger.

6.2 Funktioner via bevægelser

Nogle funktioner kan styres med bevægelser på tabletten. "At trykke" og "At holde" betyder at man holder fingrene på stedet i mere end et halvt sekund. Det er muligt at vælge hvilke bevægelser du ønsker at frakoble i indstillingerne.

Almindelig

Tryk med to fingre	Naturlige farver
Tryk og hold med fire fingre	Åben indstillinger
Tryk og hold med fem fingre	Skift til fuldskærm
Knib	Skift forstørrelse
Rotere to fingre	Roter billedet
Træk med én finger	Panorer gennem billedet
Træk to fingre horisontalt	Skift kontrastniveau
Træk to fingre vertikalt	Skift kunstige farver

Kamera

Træk fire fingre horisontalt	Skift kamera
Tryk og hold med to fingre	Vinkelkorrektion til/fra
Tryk og hold med tre fingre	Spejlvend billedet
Tryk med tre fingre	Autofokus til/fra Ikke muligt med frontkameraet.
Træk tre fingre horisontalt	Skift manuel fokus Kun mulig med afstandskameraet.
Tryk og hold med én finger	Start OCR-behandling

OCR

Træk tre fingre vertikalt	Justere lydstyrken
Træk tre fingre horisontalt	Indstilling af talehastigheden
Træk fire fingre horisontalt	Skift visningsindstilling

6.3 Funktioner via tastaturet

De fleste funktioner kan håndteres ved at bruge tastaturet. Genvejskommandoerne kan ændres under indstillinger. Herunder følger standardindstillingerne for genvejskommandoerne.

F1	Naturlige farver
F2	Positive farver fremad
Shift + F2	Positive farver tilbage
F3	Negative farver fremad
Shift + F3	Negative farver tilbage
Pil op	Øg forstørrelsen
Pil ned	Reducer forstørrelsen
Ctrl + J	Autofokus til/fra Ikke muligt med frontkameraet.
Shift + Pil op	Øg fokuseringsafstanden Kun muligt med afstandskameraet.
Shift + Pil ned	Reducer fokuseringsafstanden Kun muligt med afstandskameraet.
Højrepil	Øg lysstyrke/kontrast
Venstrepil	Reducer lysstyrke/kontrast
Ctrl + I	Spejlvend kamerabillede
Ctrl + R	Roter med uret
Ctrl + Shift + R	Roter mod uret
Ctrl + K	Vinkelkorrektion til/fra
Ctrl + F	Skift til fuldskærm
Ctrl + B	Vis batteristatus
F9	Indstillinger
F7	Skift kamera
F5	Gem billede
Shift + F5	Gem billede hurtigt
Ctrl + F5	Start videooptagelse
Ctrl + Shift + F5	Start videooptagelse hurtigt
F6	Åben billede

Shift + F6	Åben billede hurtigt
Ctrl + F6	Åben video
Ctrl + Shift + F6	Åben video hurtigt
A	Panorer til venstre Kun muligt, hvis billeder er forstørret. Ikke muligt med afstandskameraet.
D	Panorer til højre Kun muligt, hvis billeder er forstørret. Ikke muligt med afstandskameraet.
W	Panorer op Kun muligt, hvis billeder er forstørret. Ikke muligt med afstandskameraet.
S	Panorer ned Kun muligt, hvis billeder er forstørret. Ikke muligt med afstandskameraet.
F4	Start OCR Teksten fra OCR-behandlingen erstatter eksisterende tekst.
Shift + F4	Start OCR enter Teksten fra OCR-behandlingen indtastes på en ny side.
V	Skift mellem kameravisning og OCR-visning
Alt + F5	Gemme dokumenter
F6	Åbne dokument
Shift + Plus	Øg skriftstørrelse
Shift + Minus	Reducer skriftstørrelse
1	Start læsning
2	Stop læsning
B	Skift visningsindstilling
3	Læs forrige
4	Læs næste
5	Skift læseindstilling
Side ned	Næste side Hvis der er scannet flere sider, går du til næste side.

Side op

Forrige side

Hvis der er scannet flere sider, går du til forrige side.

8

Reducer lydstyrke

9

Øg lydstyrke

6

Reducer talehastighed

7

Øg talehastighed

Ctrl + 0

Næste stemme

Ctrl + S

Gem tegning

Ctrl + O

Åben billede

Ctrl + Z

Fortryd

Ctrl + Shift + Z

Annuler fortryd





6.4 Noteværktøj






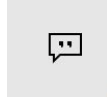
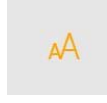





Noteværktøjerne består af tre komponenter.

- Øverst er der en menu med knapper.
- Til venstre er der en liste over billeder. Ved at klikke på et billede kan du navigere til det. Du kan slette et billede ved at klikke i øverste højre hjørne.
- En overflade, hvor du kan tegne, forstørre og panorere i billedet.

Knapperne i menubjælken har følgende funktioner.

	Luk noteværktøjet.
	Åben billede. Det er muligt at åbne billedfilerne .jpg og .png.
	Gem billede. Det er muligt at gemme billeder som .pdf og .png.
	Fortryd.

-  Gendan efter tryk på fortryd.
-  Tegn med en pen. Tryk og hold åbner en dialog, hvor du kan vælge farven og størrelse.
-  Tegn med en markør. Tryk og hold åbner en dialog, hvor du kan vælge farven og størrelse.
-  Forstør og panorer i billedet.
-  Slet.
-  Indsæt tekst. Når du har indsat tekst kan du flytte den rundt.
-  Skift tekstens farve og størrelse.
-  Roter billedet. Alle ændringer du foretager med billeder bliver fjernet hvis du roterer.
-  OCR-behandling. Når billedet er blevet OCR-behandlet kan du begynde at læse.
-  Start læsning.



Stop læsning.



Læs forrige.



Læs næste.



Gå til indstillinger.

6.5 Vindue for informationer og indstillinger

Vinduet for informationer og indstillinger består af et antal af forskellige faner, der indeholder applikationsinformationer og alternative indstillinger.

Du kan ændre størrelsen på indstillingsmenuer ved at placere to fingre på skærmen og sprede eller samle dem.


6.5.1 Om applikationen



Informationer vedrørende softwareversion og licens finder du under denne fane.

Hvis du har brug for at opdatere licensen, kan det gøres ved at trykke på knappen "enter license".

6.5.2 Programindstillinger

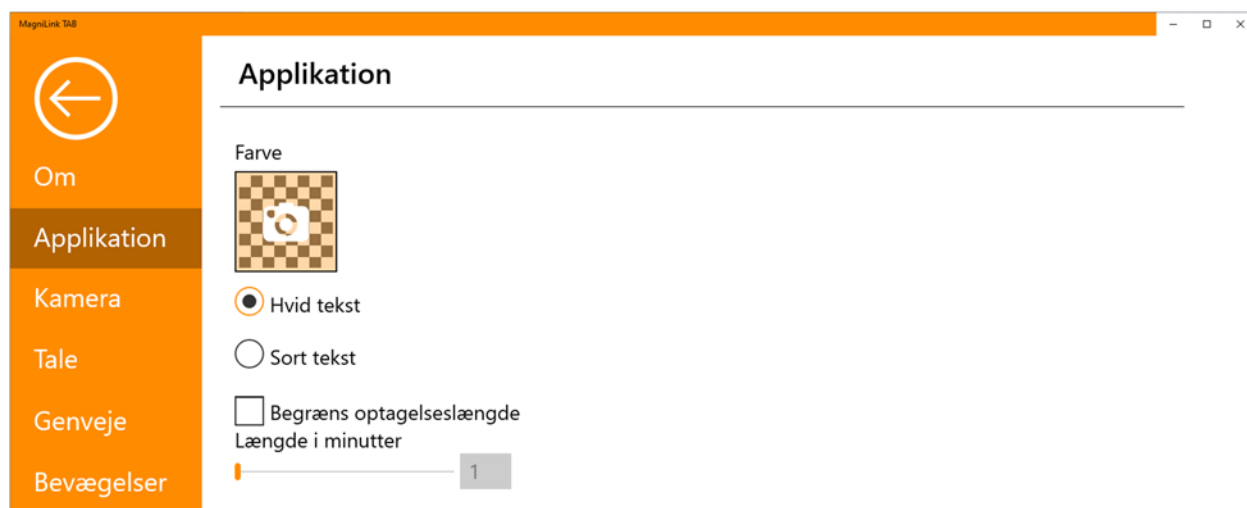

Farve

Det er muligt at trykke på kameraikonet og specificere, hvilken applikationsfarve der ønskes. Du kan desuden justere gennemsigtigheden. Denne farve anvendes både på indstillingsmenuen og menuerne i kamera- og OCR-tilstand.

Hvid tekst

Afkryds her for hvid tekst og hvide symboler i menuerne.

Sort tekst

Afkryds her for sort tekst og sorte symboler i menuerne.


Begræns optagelseslængde

Aktiver denne funktion, hvis du vil begrænse optagelseslængden.

Længde i minutter

Hvis du har valgt at begrænse optagelseslængden, kan du indstille grænsen i minutter her, fra 1 til 60 minutter.

6.5.3 Kameraindstillinger

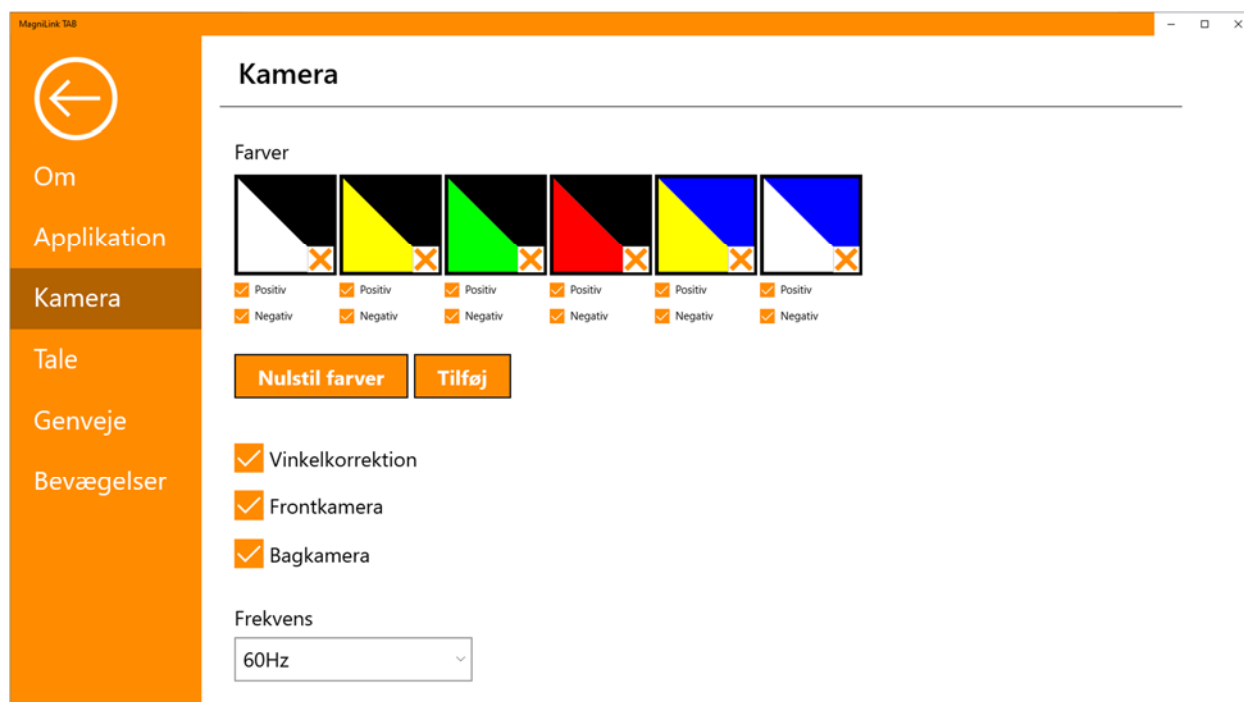

Farver

Det er muligt at fjerne kunstige farver ved at sætte et x i boksen med den valgte farve og ændre de kunstige farver på systemet ved at trykke på en hvilken som helst farvetrekant og angive den ønskede farve fra det farvekort, der kommer op.

Vinkelkorrektion

Når denne er valgt, kompenseres der for vip af kameraet i videoen.

Frontkamera

Når denne er deaktiveret er det ikke muligt at skifte til frontkameraet. Det er ikke muligt at fravælge dette, hvis bagkameraet er deaktiveret.


Bagkamera

Når denne er deaktiveret er det ikke muligt at skifte til bagkameraet. Det er ikke muligt at fravælge dette, hvis frontkameraet er deaktiveret.

Frekvens

Afhængigt af den omgivende belysning kan det være en god ide at ændre kameraernes frekvens mellem 50Hz og 60Hz. Når du har ændret afstandskameraets frekvens, skal du tage stikket ud af kameraet og genstarte applikationen.

6.5.4 Taleindstillinger

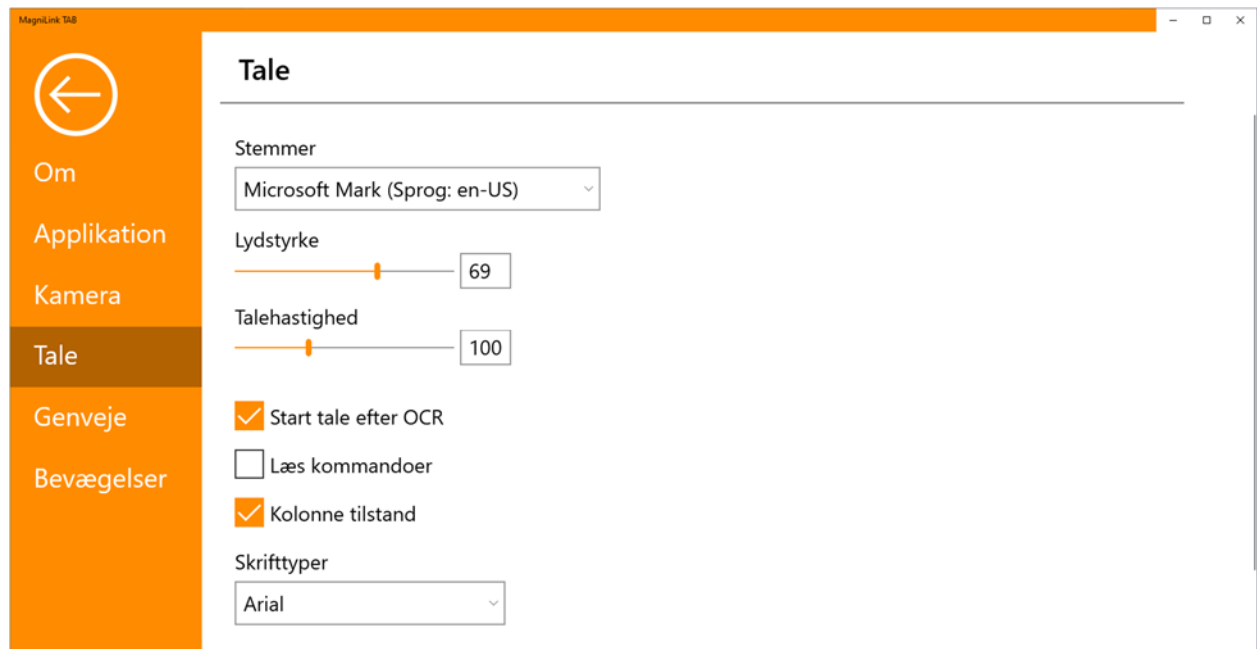

Stemmer

Hvis flere stemmer er tilgængelige, kan brugeren vælge mellem dem. Du kan få andre stemmer ved at downloade sprog i Windows-indstillinger. For at gøre en stemme tilgængelig, skal Windows OCR understøtte stemmens sprog.

Lydstyrke

Indstilling af stemmens lydniveau.

Talehastighed

Indstilling af talehastigheden.

Start tale efter OCR

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, læses teksten automatisk højt efter OCR-behandling af et billede.

Læs kommandoer

Når denne er markeret, læser programmet menuerne højt, når du bruger dem.


Kolonne tilstand

Når denne indstilling er aktiv, behandler OCR-programmet teksten pr. kolonne, hvilket er praktisk, hvis tekst fra en avis skal OCR-behandles.

Skrifttype


Her kan du angive, hvilken skrifttype der skal bruges til visning af den OCR-behandlede tekst. Den anvendte skrifttype har ingen indflydelse på resultatet af OCR-behandlingen.

6.5.5 Genvejskommandoer

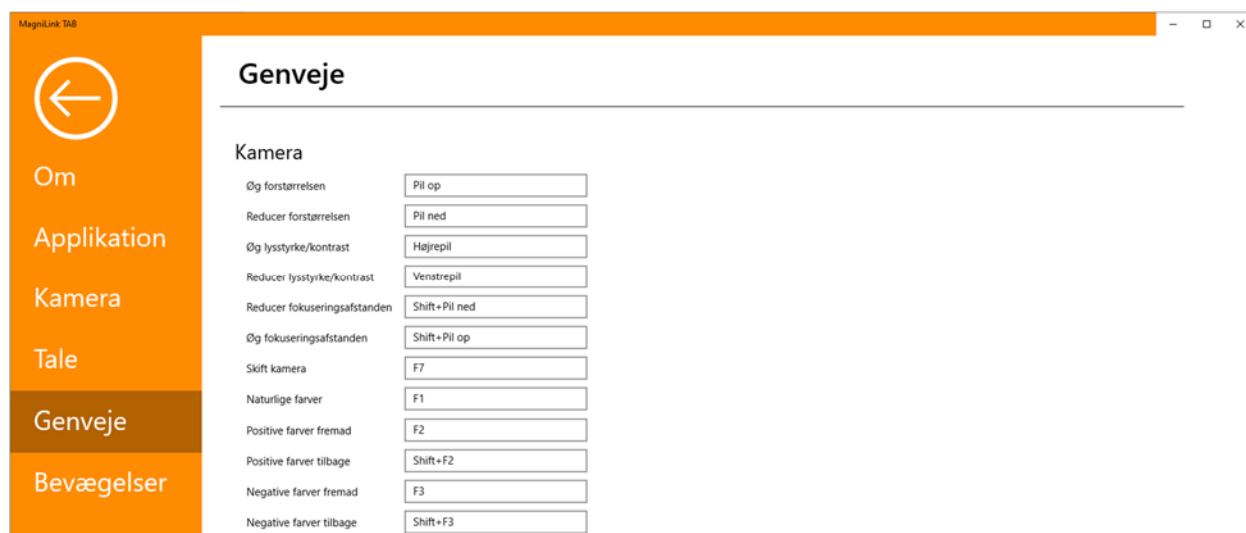

Her kan du ændre de anvendte genvejskommandoer for applikationen. Hvis du vil ændre en genvejskommando, skal du gå med tabulatoren til den kommando, der skal ændres og indtaste den nye tastaturkombination. Hvis der indtastes en kombination, der allerede er i brug til en anden kommando, slettes den anden kommando. Der skal indtastes en ny tastaturkombination for den anden kommando.

6.5.6 Bevægelser

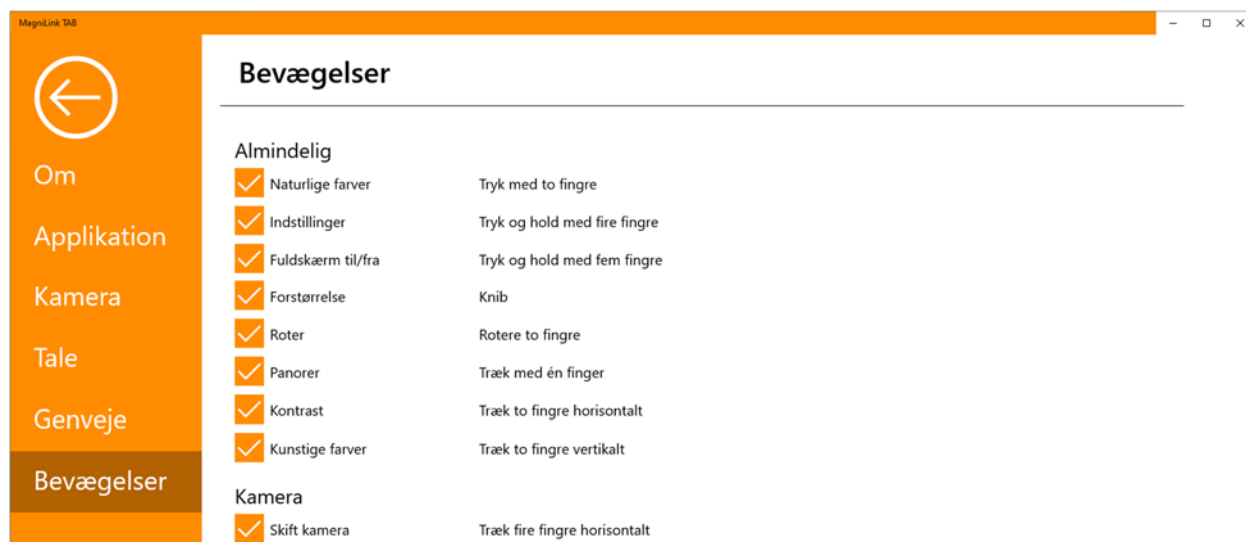

Her kan du vælge hvilke bevægelser der bliver anvendt. Du kan fravælge den relevante boks for at afbryde en bevægelse.

6.6 Kvalitet af OCR-behandling

For at optimere resultaterne af OCR-konverteringen skal du huske følgende.

- Kontroller, at forstørrelsen er tilstrækkelig. Tekst med meget små bogstaver giver dårlige resultater i OCR-softwaren. Vi anbefaler mindst 12pt for den laveste forstørrelse på læsekameraet.
- Undgå papir med glans, da dette reflekterer sig i billedet. Dette forringer resultatet af OCR-konverteringen. Hvis du vil bruge papir med glans, anbefaler vi, at lyset i enheden kobles fra.
- Bestemte skrifttyper kan være svære at fortolke for OCR-programmet.
- Det er vigtigt, at tekstkontrasten er tilstrækkelig.
- Det er vigtigt, at det OCR-programmets sprog er det samme som tekstens.

7 Ergonomi

Det er vigtigt, at du har en komfortabel arbejdsplads omkring systemet, og at du sidder korrekt. Så kan du bruge det i lang tid uden at udsætte din nakke og ryg for en alt for stor belastning.

Du bør være opmærksom på følgende.

- Din stol bør være placeret tæt på bordet, hvor udstyret er placeret, og du bør ikke sidde for længe i stolen. Vi anbefaler en god kontorstol, der kan justeres i højden.
- Stolesædet bør være indstillet i en højde, så benene ikke begynder at sove. Benene bør have en vinkel på 90 grader, og dine fødder bør hvile på jorden.
- Bordet bør stå i en højde, hvor du kan hvile din højre arm vandret på det. Det er vigtigt, at bordet hverken er for højt eller for lavt til dig. Det er den ideelle placering, hvis skærmen befinder sig en smule under øjenhøjde og står så lige som muligt foran dig.
- Afskærm dagslyset. Lamper i loftet, bordlamper og lys fra vinduet kan reflektere sig i skærmen. Af denne årsag bør du undgå at placere lamper, så de skinner direkte ind i skærmen eller mod dig selv.
- Hvis du bruger enheden i længere tid, er der risiko for, at gentagne bevægelser kan give dig smerter i nakke, skuldre og ryg. Dine øjne kan også blive trætte af at se på skærmen for længe.

8 Teknisk information

Stativ

Dimensioner, sammenfoldet	365 × 300 × 30 mm (B × D × H)
Dimensioner, åbnet	230 × 310 × 350 mm (B × D × H)
Vægt	2,2 kg

Afstandskamera

Forstørrelsesområde	0,8 - 80× (højde 33 cm)
Vægt	700 g
Billedhastighed	60 Hz
Kameraet og armens længde	620 mm

Tablet computer

Type	Microsoft Surface Pro
Vægt	800 g
Skærmstørrelse	12,3"
Opløsning	2.736 × 1.924
Forstørrelsesområde (indbygget i kamera)	0,7 - 8× (højde 30 cm)
Batteritid	I brug: ca. 2,5 timer
Temperaturområde	0°C – 35°C
Størrelser (B × H × D)	292 × 202 × 8 mm



Bortskaffelse af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr (gælder for EU-lande og alle andre europæiske lande, der har særlige sorteringsystemer)

Hvis produktet eller emballagen bærer dette symbol, må det ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet for indleveres på en dertil egnet genbrugsstation for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Hvis du sikrer, at dette produkt bortskaffes på en ordentlig måde, er du med til at forhindre en negative påvirkning af helbred og miljø, der ellers ville være resultatet af en ukorrekt bortskaffelse af dette produkt. Genbrug er med til at bevare vores naturlige ressourcer. Hvis du ønsker flere oplysninger om genbrug af dette produkt, kan du kontakte din hjemkommune, dit renovationselskab eller rette henvendelse til den butik, hvor du har købt produktet.

9 KONFORMITETSERKLÄRING

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturers name: *LVI Low Vision International AB*

Manufacturers Address: *Verkstadsgatan 5
S-352 46 Växjö
Sweden*

Web: *http://www.lviglobal.se*

SRN (Single Registration Number): *SE-MF-000004178*

Basic UDI-DI (GMN): *7330724MLTABWG*

Brand name or trademark: *MagniLink*

Product code: **MLTAB**

Classification: *Class 1*

Type of equipment: *Reading Aid*

Conformity assessment route: *LVI Low Vision International AB uses the following procedures for the CE-labeling of their products according to the Regulation MDR 2017/745:
Class [1]: EC conformity declaration according to Annex I + Annex II +Annex VII*

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of LVI Low Vision International AB. We hereby declare that the medical device(s) specified above meet the provision of the Regulation (EU) MDR 2017/745 for medical devices. This declaration is supported by the Quality System approval to ISO 9001 issued by Intertek. All supporting documentation is retained at the premises of the manufacturer.

Manufacturer Manufacturer's authorized representative

Date
20-05-2021

Signature


Position
Managing Director

Clarification
Henrik Blomdahl

Alfabetisk indeks

Afstandskamera	12
Bevægelser	30
Emballage	9
Ergonomi	32
Funktioner via bevægelser	19
Funktioner via menuer	14
Funktioner via tastaturet	20
Genbrug, installation og vedligeholdelse	7
Genvejskommandoer	30
Hardware	10
Information	7
Installation	13
Introduktion til MagniLink Zip	6
Kameraindstillinger	28
KONFORMITETSERKLÆRING	36
Kvalitet af OCR-behandling	31
Noteværktøj	23
Om applikationen	26
Om LVI	5
Programindstillinger	27
Rengøring	7
Sikkerhedsinformation	7
Software	14
Stativ	10
Tablet computer	11
Taleindstillinger	29
Teknisk information	33
Udpakning	9
Vindue for informationer og indstillinger	26