



Manual del usuario

LVI Low Vision International

Verkstadsgatan 5 Tel.: +46 470 – 727700

352 46 Växjö Fax: +46 470 – 727725

Correo electrónico: info@lvi.se

Internet: www.lvi.se

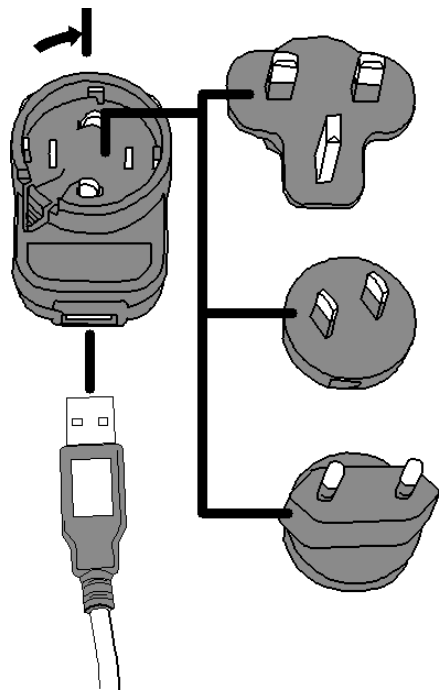
MagniLink Visus manual del usuario 7942202a

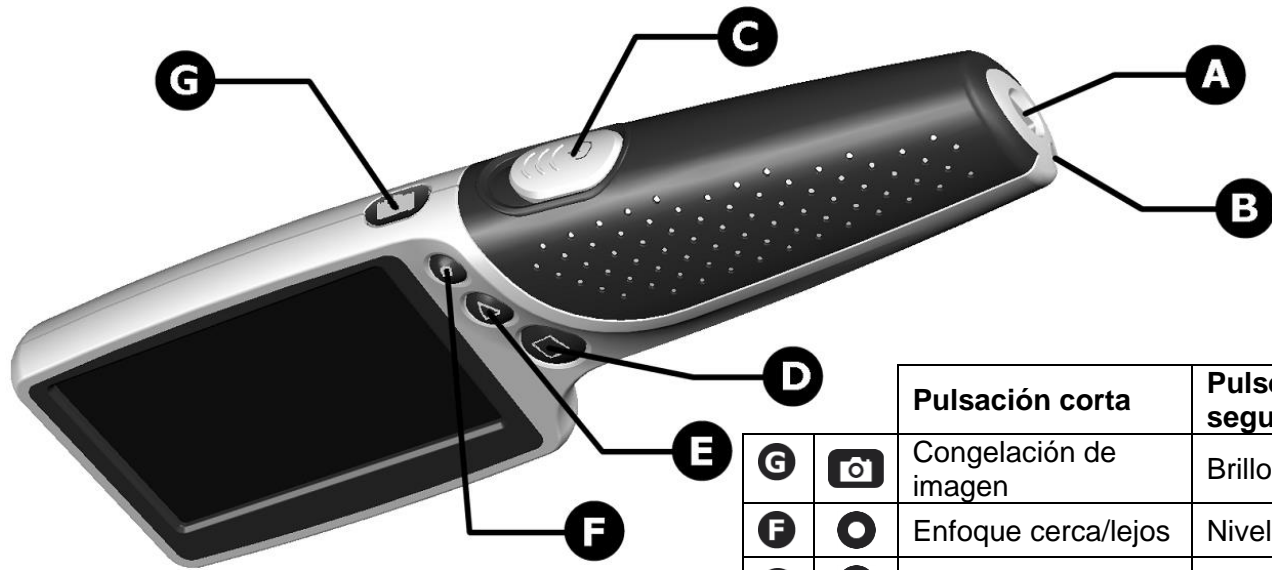
La primera vez que usa el producto





Le recomendamos que cargue totalmente su lupa MagniLink Visus antes de usarla por primera vez. El cargador se suministra con una serie de conectores de alimentación internacionales y usted elegir el más adecuado para su país. Colóquelo como se indica en la figura contigua y gírelo hasta que enganche en su posición.

Conecte el cable al cargador y enchúfelo al extremo del mango de MagniLink Visus (A). El indicador de carga alrededor del conector de alimentación brilla con luz roja cuando el MagniLink Visus se está cargando, y se apaga cuando la carga ha finalizado. Una carga completa lleva aproximadamente 3 horas.

La unidad se suministra con una correa de cuello que puede fijarse al extremo del mango (B) si es necesario.






		Pulsación corta	Pulse durante 3 segundos
G		Congelación de imagen	Brillo de pantalla
F		Enfoque cerca/lejos	Nivel de batería
E		Modo de imagen	Cambiar color artificial
D		Nivel de aumento	Encender/apagar iluminación


Encendido/apagado

Deslice el interruptor (C) hacia delante para encender la unidad. Los LED en el lado inferior se iluminan y aparece una imagen en la pantalla. Coloque la unidad arriba del objeto que desea aumentar con la pantalla centrada sobre la zona de interés. Para encontrar el enfoque más nítido necesitará subir o bajar la pantalla.

Aumento



Si pulsa varias veces el botón  (D) se desplazará entre los tres niveles de aumento. Puede elegir el nivel que mejor se adapta al tamaño de texto que está viendo.

Modo de imagen

Si pulsa varias veces el botón  (E) se desplazará entre los diferentes modos de imagen: todo color, negro en blanco y blanco en negro, y color artificial. Debe elegir el modo que le ofrece la mejor imagen para lo que está viendo.

MagniLink Visus volverá a usar sus últimos ajustes de aumento, modo de imagen y enfoque la próxima vez que lo encienda.

Botón de enfoque

A veces, es posible que usted quiera ubicar un área específica de interés en una página. El botón  (F) ajustará el enfoque de la lente a una mayor distancia permitiéndole así levantar la unidad de la página y obtener una visión más amplia de lo que quiere leer. Si pulsa el botón  una vez más, volverá al ajuste de enfoque cercano.


Soporte de estabilidad

MagniLink Visus tiene en su lado inferior un soporte abatible colocado alrededor de la lente. Simplemente, tírelo totalmente hacia fuera para que le ayude a mantener la distancia ideal del objeto que está leyendo. Vuelva a abatir el soporte cuando no la use.


Congelación de imagen

MagniLink Visus tiene una función para






congelar la imagen que puede ser útil para lugares de difícil acceso o, por ejemplo, para llevar un número de teléfono hasta el teléfono. Si pulsa el botón  (G), la imagen se congela; púselo una vez más para volver a la imagen en vivo. La imagen congelada no es almacenada y no puede leerse fuera de la unidad.


Iluminación

Para facilitar la lectura de objetos retroiluminados, como teléfonos móviles o una pantalla de ordenador, se puede apagar la iluminación del aparato. Pulse y mantenga presionado el botón  durante 3 segundos para apagar las luces. Repita esto para volver a encenderlas, o simplemente apague la unidad y enciéndala otra vez.


Cambio de color artificial

Si lo desea, puede elegir entre varias combinaciones en falso color. Primero necesita usar el modo de imagen de color artificial. Pulse y mantenga presionado el botón  durante 3 segundos hasta que aparezca un indicador en el centro de la pantalla. Pulse el botón  para acceder a las opciones y cuando esté satisfecho con su elección, pulse y mantenga presionado el botón  durante 3 segundos para guardar su preferencia.

Indicador de nivel de batería

Pulse y mantenga presionado el botón  durante 3 segundos y aparecerá un indicador en la pantalla indicando el nivel de carga restante en la batería. Si la batería está casi agotada, el indicador aparecerá automáticamente en el centro de la pantalla.

Cambio del brillo de la pantalla

Pulse y mantenga presionado el botón  durante 3 segundos y la pantalla cambiará de brillo. Existen tres ajustes: 100%, 75% y 50%. La unidad recordará el último ajuste de nivel y lo restablecerá cuando se encienda el aparato.

Desconexión automática

Después de ver durante 3 minutos una imagen que no varía, MagniLink Visus reducirá su consumo eléctrico. La pantalla se oscurecerá y la iluminación se apagará. Si advierte un movimiento, volverá a encenderse automáticamente. Si no se detecta ningún movimiento durante 8 minutos, la unidad se apagará totalmente y usted deberá pulsar un botón para encenderla otra vez.

Si la batería está agotada, MagniLink Visus se apagará y sólo volverá a encenderse después de que se cargue la batería.

Carga alternativa

MagniLink Visus puede cargarse desde el puerto USB de un ordenador o con muchos cargadores estándar para dispositivos portátiles. El conector utilizado es uno estándar de la industria y todos estos cargadores deben ser compatibles si bien los tiempos de carga pueden variar.

Instrucciones de mantenimiento y advertencias

Al limpiar la lupa MagniLink Visus no use soluciones jabonosas, solventes ni abrasivos. ¡No la sumerja en agua! Use el paño que se incluye para eliminar las huellas digitales, etc. Las manchas más difíciles pueden eliminarse con un paño húmedo.

No abra la lupa MagniLink Visus - la misma no incluye piezas que pueden ser reparadas por el usuario.

La iluminación LED en el MagniLink Visus es sumamente intensa. No mire directamente a la iluminación LED durante períodos prolongados.

Al final de su ciclo de vida, la MagniLink Visus se debe reciclar a través de una instalación de reciclado certificada. No incinerar.

Datos técnicos

	MagniLink Visus 3.4 (MLVISUS3,4)
Alimentación del cargador	100V – 240V AC 50/60Hz con el adaptador que se incluye
Tensión de alimentación de la unidad	5V DC, conector micro USB
Pantalla	Diagonal de 3,4” AMOLED 16:9
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 45 °C
Tiempo de recarga	3 horas con el cargador suministrado
Tiempo de funcionamiento <i>Depende del modo de operación y del tema.</i>	Desde 2 horas en modo positivo hasta 4 horas como máximo en negativo.
Peso	168 g
Aumento (ajuste cercano) (ajuste lejano)	2,8X, 4,5X y 5,5X 1.3x, 2x y 2,5x

Las especificaciones son preliminares y están sujetas a modificación.

Declaración de conformidad

Nosotros, Ash Technologies Ltd., declaramos bajo nuestra responsabilidad que los productos MagniLink Visus 3.4 y MagniLink Visus 4.3 de la marca LVI (Low Vision International), al que hace referencia esta declaración, cumplen las siguientes normas y otros documentos normativos:

EN55022: 2007

EN55024: 2008

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 2008 y A1:2001 de acuerdo con EN61000-3-3:2008

Clasificación del equipo Clase B

EN62471:2008 Clasificación: Grupo de riesgo 1 - (Bajo riesgo)

de conformidad con lo dispuesto en la Directiva CEM 2004/108/CE.

Alan Johnston

Ash Technologies Ltd, Naas, Irlanda.

6 de octubre de 2011

