



Brukerhåndbok MagniLink Visus 4,3"

ProVista AS

Tromøyveien 24

Telefon: +47 22 69 61 00

Epost: mail@provista.no

4841 Arendal – Norway

Faks: +47 37 05 86 87

Web: www.provista.no**LVI Low Vision International**

Verkstadsgatan 5

Tel: +46 470 – 727700

E-post: info@lvi.se

352 46 Växjö

Faks: +46 470 – 727725



Internett: www.lvi.se


Førstegangs bruk

Vi anbefaler at du lader lesekameraet MagniLink Visus helt opp før du tar det i bruk. Laderen har en rekke internasjonale strømkontakter, og du må velge den som gjelder for ditt land. Sett den på slik det er vist i illustrasjonen, og roter den til den klikker på plass.

Sett kabelen inn i laderen, og sett den inn i enden av håndtaket på MagniLink Visus (A). Ladeindikatoren ved strømkontakten vil lyse rødt når MagniLink Visus lader og slukke når den er fulladet. Det tar ca. 3 timer å lade den helt opp.

Enheten leveres med en nakkestropp som kan festes til enden av håndtaket (B) ved behov.

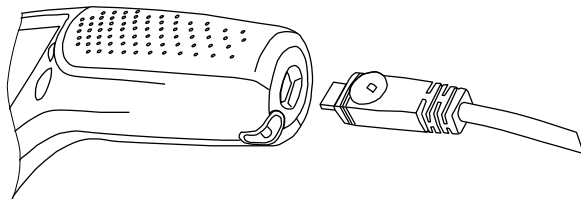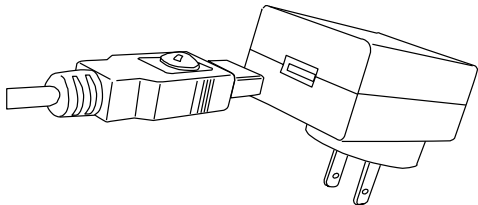

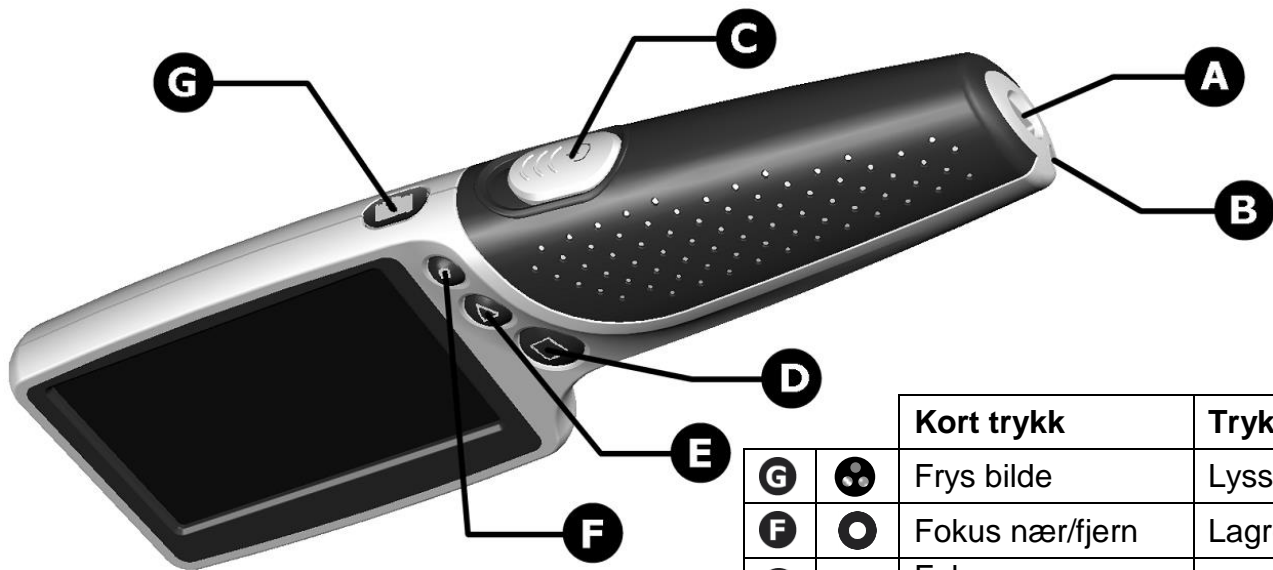


		Kort trykk	Trykk i 3 sekunder
G		Frys bilde	Lysstyrke skjerm
F		Fokus nær/fjern	Lagre bilde
E		Fokuser nært/middels/fjernt	Endre kunstig farge
D		Forstørrelsesnivå	Lys på/av



Slå av/på

Skyv strømbryteren (C) forover for å slå på enheten. LED-lampene på undersiden vil lyse, og det vises et bilde på skjermen. Legg enheten over det du vil forstørre med skjermen sentrert over det aktuelle området. Du må løfte eller senke enheten for å finne det skarpeste fokuset.





Forstørrelse

Du går gjennom de tre forstørrelsesnivåene ved å trykke gjentatte ganger på -knappen (D). Du kan velge nivået som best passer deg for den aktuelle tekststørrelsen.



Fokusknapp


Det kan hende du vil finne et bestemt område på en side. Knappen  (E) vil stille inn fokuset til linsen til en større eller mindre avstand, slik at du kan løfte eller senke enheten fra siden og få en større eller mindre visning av det du vil lese. Når du trykker på knappen , vil du veksle mellom F1 (nært) og F2 (fjernt) fokuspunkt. Merk at du har et ekstra fokuspunkt tilgjengelig. Se menyen Alternativer i neste avsnitt.

Menyen Alternativer





I menyen Alternativer kan du velge mellom to eller tre fokusnivåer. Du åpner denne menyen ved å trykke på knappene  og  samtidig. Gå til NEAR FOCUS ved hjelp av knappen . Trykk på knappen  for å velge mellom OFF og ON. Når du har valgt ON, vil enheten bruke tre fokusnivåer (F1, F2, F3) i stedet for to.

Frys bilde og Lagre bilde:



Når du trykker kort på knappen , fryser du bildet. Når du trykker kort på  en gang til, går du tilbake til direktevisning av bildet.

Når bildet er fryst og du holder knappen  inne en stund, lagres det fryste bildet i internminnet. Når bildet er lagret, kommer du automatisk til **Hent bilde**-modusen, som er beskrevet nedenfor.






Hent bilde:

Når du er i direktevisning og holder  inne en stund, kommer du til Hent bilde-modusen. Det sist lagrede bildet vil vises, og det vises et bildenummer, for eksempel som “# 10”. Bruk  (neste) og  (forrige) til å gå til forrige og neste lagrede bilde. Når du trykker på , kommer du tilbake til direktevisningsmodus.

Slette lagrede bilder:

Når du er i **Hent bilde**-modus (ovenfor), kan du slette bildet som vises ved å holde  inne en stund. Enheten vil vise et søppeldunkikon med et “?” ved siden av, som ber deg bekrefte slettingen. Hvis du trykker lenge på  enda en gang, slettes bildet slik at det forrige lagrede bildet vises, hvis det finnes.


Slette alle lagrede bilder:

Trykk på  og  samtidig, og slipp dem for å få opp menyen. Bruk  for å gå til “Slett alle”-feltet, og trykk lenge på . Du blir bedt om å bekrefte slettingen; trykk lenge på  igjen for å bekrefte, eller på en annen knapp for å avbryte.

Koble MagniLink Visus til PC-en

De lagrede bildene på MagniLink Visus kan vises på en PC med en ledig USB-port. Sett inn mikro-USB-pluggen på den medfølgende kabelen inn i mikro-USB-kontakten på **enheten**. Sett den andre enden av kabelen inn i en USB-port på PC-en. Hvis dette er første gang du kobler MagniLink Visus til PC-en, må du vente til PC-en automatisk installerer de riktige driverne. Det vises en melding på PC-skjermen når installasjonen er fullført. MagniLink Visus vil nå vises som en stasjon på PC-en, og du kan vise de lagrede bildene.

Bildemodus


Du går gjennom de ulike bildemodiene ved å trykke gjentatte ganger på -knappen (E): fullfarge, hvitt på svart og svart på hvitt og kunstig farge. Du bør velge modusen som gir deg det beste bildet. Neste gang du slår på MagniLink Visus, vil den bruke de samme innstillingene for forstørrelse, bildemodus og fokus.

Støttering


MagniLink Visus har en utfellbar støttering rundt linsen på undersiden. Denne kan du enkelt vippe ut for å holde en ideell avstand til det du skal lese. Du legger den bare inn igjen etter bruk. Støttingen skal brukes med fokus stilt inn på “middels” nivå.



Lys

For at det skal bli lettere å lese bakgrunnsbelyste enheter slik som mobiler eller datamaskinskjerm, kan du slå av lyset på enheten. Trykk og hold -knappen inne i 3 sekunder for å slå av lyset. Du slår på lyset igjen ved å gjenta denne prosedyren eller ved å slå enheten av og på igjen.


Endre den kunstige fargen

Du kan velge mellom en rekke uekte fargekombinasjoner hvis du vil. Du må først bruke bildemodusen for semifarge. Trykk og hold knappen  inne i 3 sekunder for å veksle mellom tilgjengelige alternativer, og slipp knappen når du er fornøyd med valget. Det nye valget vil bli lagret i minnet for senere bruk.








Batterinivåindikator

Når du starter enheten, vises det en indikator på skjermen i noen sekunder som angir ladestatusen til batteriet. Hvis batteriet er nesten tomt for strøm, vil indikatoren automatisk vises øverst til venstre på skjermen.

Endre skjermens lysstyrke

Trykk og hold -knappen inne i 3 sekunder for å endre skjermens lysstyrke. Det er tre innstillinger: 100%, 75% og 50%. Enheten husker det sist innstilte nivået og bruker dette neste gang den slås på igjen.

Angi antiflimmermodus for kameraet

Trykk på  og  samtidig, og slipp dem for å få opp menyen. Bruk  for å gå til “MODE”-feltet. Bruk  og  for å velge antiflimmermodus (50 Hz for Europa, 60 Hz for USA) eller FAST-modus (angitt som standard – gir rask respons på bevegelig tekst i flimmerfrie lysmiljøer). Bruk deretter  for å gå til “Lagre og avslutt”-feltet, og trykk på  for å bekrefte de nye innstillingene.

Automatisk avslåing

Hvis MagniLink Visus holdes over et uendret bilde i tre minutter, vil den automatisk redusere strømforbruket. Skjermen og lyset vil slå seg av. Når den registrerer bevegelse, slår den seg på igjen automatisk. Hvis enheten ikke registrerer bevegelse på 8 minutter, vil den slå seg helt av, og du må da trykke på en knapp for å slå den på igjen.

Hvis batteriet er tomt for strøm, vil MagniLink Visus slå seg av og være avslått helt til den lades opp igjen.

Alternativ lading

MagniLink Visus kan lades via USB-porten på en datamaskin eller via standardladere for bærbare forbrukerenheter. Kontakten som brukes, er industristandard, og alle slike ladere skal være kompatible selv om ladetidene vil variere.

Vedlikeholdsinstruksjoner og advarsler

Når du skal rengjøre MagniLink Visus, må du ikke bruke såpeløsninger, løsemidler eller slipemidler. Enheten må ikke senkes ned i vann! Bruk den medfølgende kluten til å fjerne fingeravtrykk osv. Mer gjenstridig skitt kan fjernes med en fuktet klut.

Du må ikke åpne MagniLink Visus – den inneholder ingen deler som brukeren kan utføre service på.

LED-lyset i MagniLink Visus er eksepsjonelt sterkt. Du må ikke se inn i LED-lyset i lengre perioder.

Etter endt levetid skal MagniLink Visus leveres til resirkulering på et godkjent returpunkt. Enheten må ikke brennes.

Tekniske data

	MagniLink Visus 4,3 (MLVISUS4,3)
Laderforsyning	100V – 240VAC 50/60Hz med medfølgende adapter
Enhetens matespenning	5VDC, mikro-USB-kontakt
Skjerm	4,3" diagonal TFT LCD 16:9
Driftstemperatur	0 °C til 45 °C
Ladetid	4 timer med medfølgende lader
Driftstid <i>Avhengig av bruksmåte og emne.</i>	4 timer.
Vekt	198 g
Forstørrelse (nært) (middels) (fjernt)	7X, 9X og 14X 3,4x, 4,5x og 7x 1,5x, 2x og 3x

Spesifikasjonene er foreløpige og kan endres

Declaration of Conformity

We, Ash Technologies Ltd., declare under our sole responsibility that the products MagniLink Visus 3.4 and MagniLink Visus 4.3 of the brand LVI (Low Vision International), to which this declaration relates, are in conformity with the following standards or other normative documents:

EN55022: 2007

EN55024: 2008

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 2008 and A1:2001 to EN61000-3-3:2008

Equipment classification: Class B

EN62471:2008 Classification: Risk Group 1 – (Low Risk)

following the provisions of EMC directive 2004/108/EC.

Alan Johnston

Ash Technologies Ltd, Naas, Ireland.

6 October 2011

