

Brukerhåndbok

MagniLink S PREMIUM - Chromebook

ProVista AS

Tromøyveien 24

4841 Arendal - Norway

Tel: +47 22 69 61 00

Faks: +47 37 05 86 87

mail@provista.no

www.provista.no

LVI Low Vision International

Verkstadsgatan 5

SE-352 46 Växjö

Tel: +46 470-727700

Faks: +46 470-727725

info@lvi.se

www.lvi.se

Innholdsfortegnelse

1	Om LVI.....	5
2	Introduksjon til MagniLink S	6
3	Sikkerhetsinformasjon	8
4	Utpakking	10
4.1	Emballasje	11
5	Tilbehør	12
6	Maskinvare	15
6.1	Installasjon av maskinvare	15
6.2	Bruke maskinvaren.....	16
7	MagniLink ChromeViewer.....	19
7.1	Minimumskrav til system	19
7.2	Anbefalte systemkrav	19
7.3	Installasjon av programvare	20
7.4	Bruke programvaren.....	22
8	Arbeide med lesekameraet	28
9	Feilsøking	29
10	Teknisk informasjon.....	30
11	Samsvarserklæring.....	31

1 Om LVI

LVI Low Vision International AB ble grunnlagt I 1978 og er en av verdens ledende produsenter av forstørrende videosystemer og dataløsninger for mennesker med nedsatt synsfunksjon. Utvikling av nye produkter skjer i tett samarbeid med brukere og fagpersoner innen synsrehabiliteringen. LVI er kvalitetssertifisert etter ISO9001 og miljøsertifisert etter ISO 14001

Informasjonen i håndboken er nøye kontrollert. Det påpekes allikevel at LVI tar ingen ansvar for unøyaktigheter I håndboken. Under ingen forhold vil LVI være ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige, eller følgeskader som et resultat av feil eller utelatelser i håndboken. LVI Low Vision International har en uttrykt målsetning om kontinuerlig produktutvikling. Vi forbeholder oss derfor retten ved alle tilfeller uten advarsel å gjøre endringer og forbedringer i denne håndboken og det produkt som her beskrives.

2 Introduksjon til MagniLink S

Takk for at du valgte denne lesemaskinen. Vårt mål er at du skal bli fornøyd med ditt valg av leverandør og lesehjelpemiddel.

MagniLink S er et portabelt kamerasystem med autofokus, som kan kobles til en datamaskin eller direkte til en ekstern skjerm. Systemet styres via tastatur og/eller kontrollboks. MagniLink S er tilgjengelig i en rekke ulike modeller. Velg modell gjennom følgende trinn:




Velg lesekamera HD eller FHD.

Modell	Kamera
MLS-HD	HD (720p)
MLS-FHD	FHD (1280p)

Velg mellom følgende tilbehør.

Produktkode	Tilbehør
A	Tekst til tale for PC
B	Tekst til tale for Mac
C	MagniLink dokkingstasjon med XY-bord (DVI).
D	MagniLink dokkingstasjon med XY-bord (HDMI)
E	MagniLink dokkingstasjon med bordklemme (DVI)

	MagniLink S tilfredsstillter alle kravene for CE-merking av medisinsk utstyr iht. 93/42/EØF-direktivet. Våre produkter tilfredsstillter kravene for MDD 93/42/EØF med tillegg fra direktiv 2007/47/EF.
---	--

3 Sikkerhetsinformasjon

Lesehjelpen er kun beregnet for innendørs bruk og må brukes iht. følgende sikkerhetsinstruksjoner.

- Bruk kun strømadapteren som leveres med MagniLink S. Hvis det brukes feil type adapter til å drive MagniLink S, kan dette skade systemet.
- Enheter slik som HDMI-skjermer og/eller datamaskiner som skal kobles til systemet, må overholde sikkerhetsforskriftene som gjelder i det aktuelle landet.
- Produktet må ikke startes eller brukes hvis det har vært utsatt for vann, regn eller andre væsker. Trekk ut USB-kabelen og la kvalifisert servicepersonell se over produktet før det tas i bruk igjen.
- Plasser strømledningen slik at du verken kan snuble i den eller at den kan komme i klem noe sted.
- Hvis produktet flyttes fra kulden og inn i et varmt rom, kan det danne seg kondens (fuktighet) inni enheten eller på kameralinsen. For å unngå problemer med kondens, bør enheten installeres i rommet minst 30 minutter før bruk.

- Hvis systemet må rengjøres, trekker du ut alle kablene og bruker en litt fuktig (ikke våt) klut. Bruk kun vann eller et rengjøringsmiddel som er ment for skjermer og datamaskiner.
- Stol ikke 100 prosent på resultatet av en OCR-konvertering; OCR-motoren kan feiltolke teksten. Det er spesielt viktig å være klar over dette når du skal behandle sensitiv informasjon, f.eks. en legemiddelresept.
- Gjør ingen flere justeringer, selv om produktet ikke fungerer normal etter å ha fulgt funksjonsbeskrivelsene. Trakk ut USB-kabelen, og ta kontakt med servicepersonell eller forhandleren. Bruk bare reservedeler som er spesifisert av LVI

Hvis du er i tvil, ta kontakt med leverandøren.

ADVARSEL



MagniLink S leveres pakket i en plastpose. For å unngå fare for kveling, må du oppbevare posen utilgjengelig for barn og spebarn.

4 Utpakking

Systemet leveres i en eske som inneholder følgende:



- Leseamera
- USB-kabler
- Etui
- USB-minnepinne med programvare
- Polerduk
- Brukerveiledning
- Strømadapter
- HDMI til HDMI-kabel
- HDMI til DVI-kabel

Kontroller først at esken ikke har ytre skader. Hvis den har skader, må du kontakte transportøren og melde fra om skaden.

Åpne esken og ta ut MagniLink S. Fjern det hvite emballasjematerialet. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se [Installasjon](#).

4.1 Emballasje

Emballasjen består av følgende emballasjematerialer (LVI anbefaler at emballasjen ligger igjen i esken i tilfelle du må returnere systemet eller flytte det):

- Emballasjemateriale (EPP)
- Eske (bølgepapp)
- Polytenpose (LDPE4)

Når det gjelder sortering og innsamling av emballasjematerialer, kan du ringe til kommunen for å høre hvilke regler som gjelder der du bor.

5 Tilbehør



Ekstern kontrollboks (MLS-A100).



Større ekstern kontrollboks (MLV-A110A).



MagniLink dokkingstasjon (MLS-A101), stasjonær leseplate.



MagniLink Reading Table (MLRT), bærbar leseplate.



LVI-skjerm 19" (MLS-A103) og 23" (MLS-A104).




Tekst til tale for PC (TTS-PC) eller Mac (TTS-MAC).

6 Maskinvare

6.1 Installasjon av maskinvare



Åpne kameraarmen, og trekk ut kameraets støtteben. Det er ikke mulig å manipulere kameraarmen før støttebenene er trukket ut.

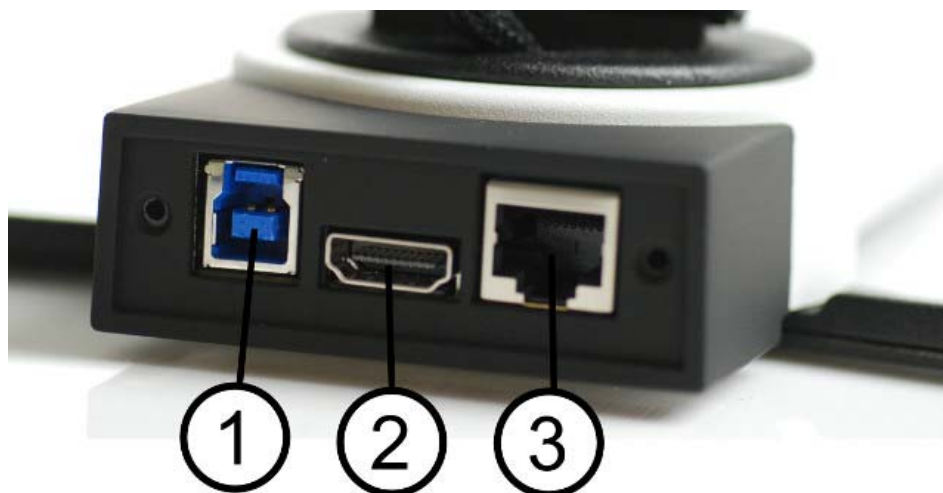

På baksiden av kameraet er det flere tilkoblingsmuligheter. Hvilke tilkoblingsmuligheter som finnes, avhenger av kameramodellen.

1. USB-tilkobling

I tillegg til å overføre bilder til datamaskinen, brukes USB-tilkoblingen til å forsyne systemet med strøm.

2. HDMI-tilkobling


Her kan kameraet kobles til en skjerm som støtter HDMI eller DVI.

3. Eksternt kontrollpanel

Et eksternt kontrollpanel kan kobles til via denne inngangen.

6.2 Bruke maskinvaren

6.2.1 Kontrollboks

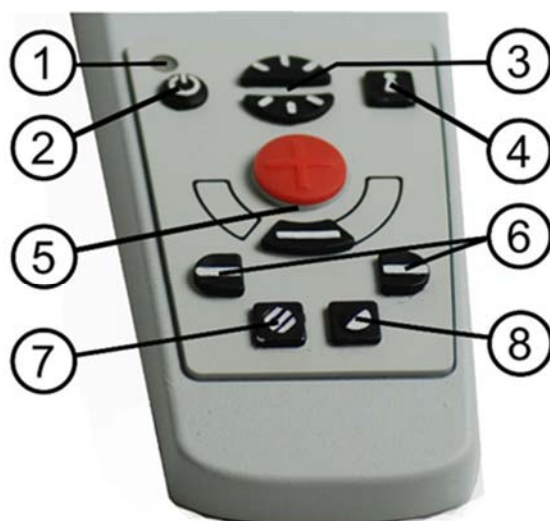

1. **LED**
En grønn lampe angir at systemet er på. En blinkende grønn lampe betyr at systemet starter. En sakte blinkende gul lampe angir standby. En rød lampe angir at noe er galt med systemet. Se kapitlet på Feilsøking side 29.
2. **Strøm av/på**
Trykk for å starte eller slå av systemet.
3. **Lyskonfigurasjon**
Brukes til å konfigurere lysnivået for å optimalisere leseforholdene. Trykk på den øvre halvdelen for å øke lysnivået og på den nedre for å redusere det. På systemer med LED-lys justerer du lysnivået ved å holde inne knappen (7).
4. **Autofokus av/på**
Trykk én gang på knappen for å låse fokus. Dette kan du gjøre når du ønsker å skrive for hånd. Autofokus påvirkes ikke av pennen eller hånden. Trykk en gang til på knappen for å aktivere autofokus igjen.
5. **Zoomkontroll**
Brukes til å angi zoom. Når du skal redusere zoomen, trykker du på den nedre knappen (minus). Når du skal øke zoomen, trykker du på den øvre knappen (pluss).

6. Referanselinje

Justerer posisjonen til referanselinjen. Trykk på høyre knapp for å flytte den horisontale linjen nedover. Hold knappen inne for å gjøre referanselinjen vertikal og flytte den til venstre.

Referanselinjen blir da en horisontal linje som reduserer visningsområdet. Du gjør linjen vertikal ved å trykke på knappen igjen. Venstre knapp gir motsatt resultat.

7. Bildemodus

Trykk på knappen for å veksle bildemodusen mellom naturlige farger og gråskala.

Lysjustering

Hold knappen inne for å kunne justere lyset via lyskonfigurasjonen (3). Når du bruker lyskonfigurasjonen (3) til å justere lyset, kan du ikke veksle mellom farge og gråskala (bare mulig hvis systemet har LED-lys).

Speilbilde

Du kan speilvende bildet ved å holde knappen nede i tre sekunder.

8. Høykontrastmoduser med kunstige farger

Trykk på knappen for å veksle mellom de ulike fargekombinasjonene.

Rotasjon

Du kan rotere bildet 180 grader ved å holde knappen nede i tre sekunder.

6.2.2 Posisjonssensor



MagniLink S har posisjonssensor som brukes til å veksle mellom lesemodus (brukeren peker kameraet ned og vipper linsen på plass) og avstandsmodus (brukeren åpner linsen). Innstillingene for begge modiene lagres automatisk når du veksler fra den ene til den andre.

Innstillinger som automatisk lagres for disse modiene, er:

- Kunstige farger
- Negative/positive/naturlige farger
- Lys
- Forstørrelsesnivå
- Referanselinje
- Rotasjon av kamerabilde
- Speilvending av kamerabilde

7 MagniLink ChromeViewer

MagniLink ChromeViewer er et program som brukes på en Chromebook til å vise bilder fra et MagniLink kamerasystem. Programmet kan kontrollere kameraegenskapene, slik som forstørrelsesnivå, kunstige farger og lysstyrke.

7.1 Minimumskrav til system

- Chrome OS versjon 59
- 2 integrerte USB 2.0-porter.
- Intel Celeron, 2 GB RAM

7.2 Anbefalte systemkrav

- 1 integrert USB 3.0 type A-port.
- Intel i5-prosessor
- 4 GB RAM

LVI anbefaler å bruke en Intel-basert Chromebook sammen med MagniLink-kameraet, fordi vi har registrert kompatibilitetsproblemer med ARM-baserte Chromebook-maskiner.


Det kan hende du trenger en USB 3.0 Y for å få tilstrekkelig strømforsyning til MagniLink-kamerasystemet. Med en USB Y-kabel kan du bruke 2 USB-porter til å drive MagniLink-kamerasystemet.

LVI har testet programvaren på en rekke Intel-baserte Chromebook-maskiner uten problemer, men det er ingen garanti for at systemet vil fungere med alle Chromebook-maskiner med denne spesifikasjonen. LVI anbefaler å teste programvaren med Chromebook der systemet skal brukes, for å sikre kompatibilitet. Datamaskiner med bedre ytelse vil gi bedre kameraytelse.


7.3 Installasjon av programvare

MagniLink ChromeViewer kan lastes ned via Chrome Web Store. Hvis du ikke finner applikasjonen med søkefunksjonen på Chrome Web Store, er det en direktekobling på vårt webområde som tar deg til installasjonssiden.


Koblingen åpner en ny side på Chrome Web Store, og MagniLink ChromeViewer velges automatisk.

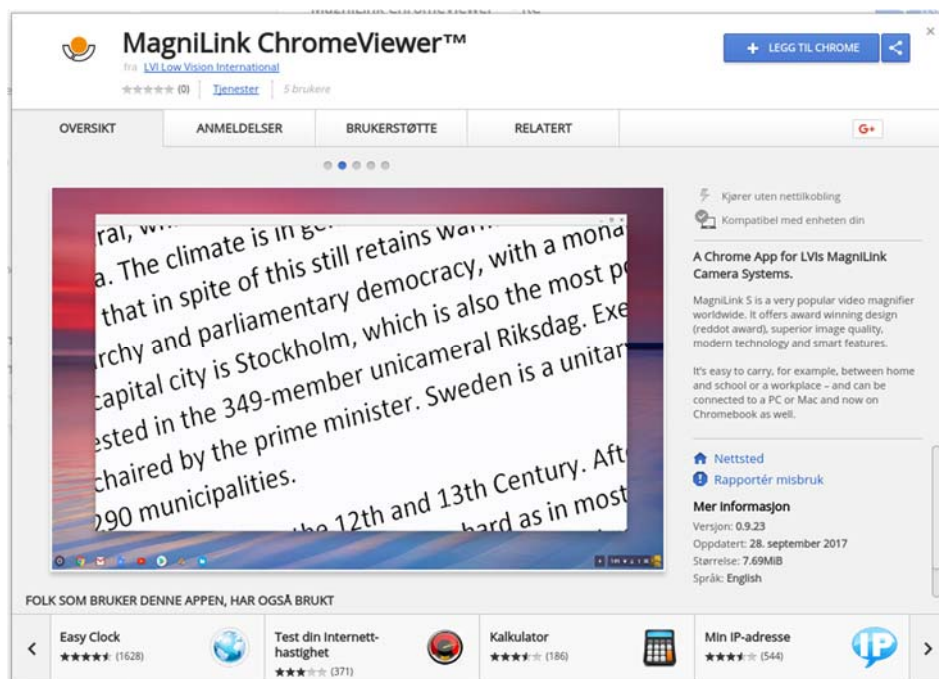

Klikk på **LEGG TIL** for å starte installasjonen.

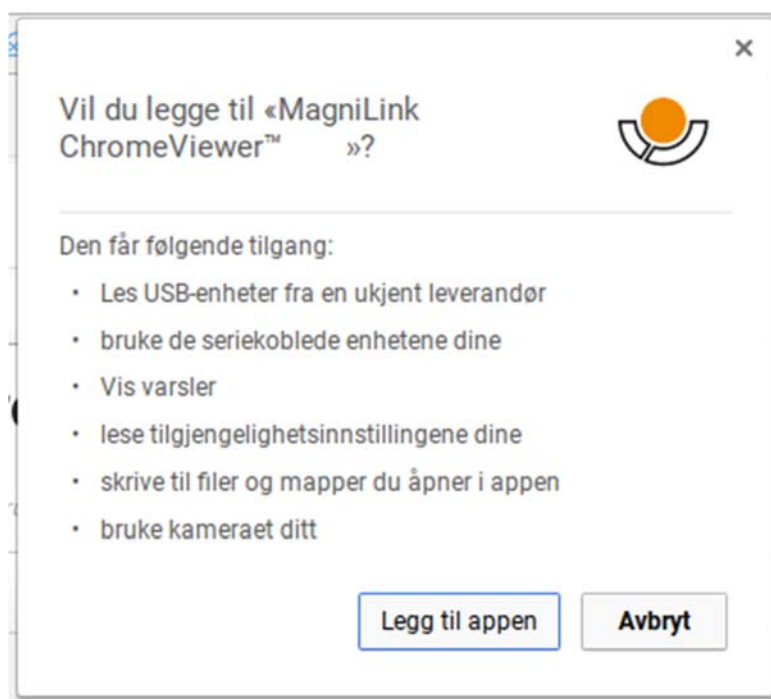

Du vil da se en informasjonsboks som forklarer hva applikasjonen kan gjøre; klikk på **Legg til app** for å fortsette.

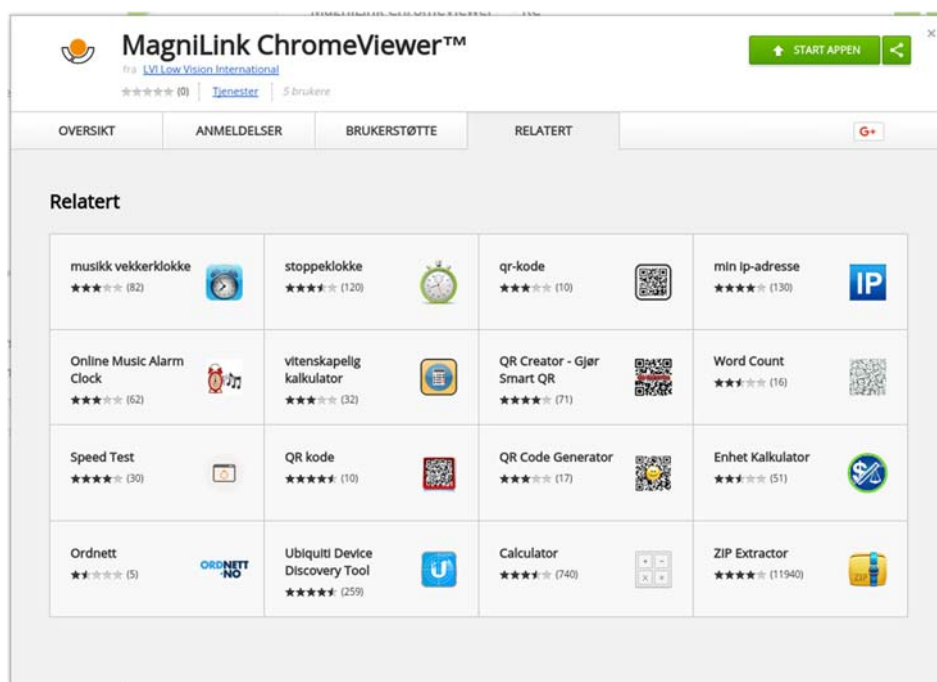

Når installasjonen er ferdig, kan du starte applikasjonen ved å klikke på **START APP** eller søke etter applikasjonen via App Launcher.

Via App Launcher kan du også permanent legge til MagniLink ChromeViewer i oppstartsområdet.

7.4 Bruke programvaren

7.4.1 Funksjoner via tastaturet

MagniLink-kameraet vises som en Chrome-app, og de fleste funksjonene kan betjenes via tastaturet. Du kan endre snarveikommandoer via ulike menyer. Nedenfor ser du standardinnstillingene for snarveikommandoene.

- | | |
|----------|---|
| 1 | Naturlige farger |
| 2 | Positivt bilde med økt kontrast
Kunstige farger; hvit/svart, gul/svart, grønn/svart, rød/svart, gul/blå, hvit/blå. Trykk gjentatte ganger på 2 for å bytte mellom de ulike fargene. (Skift + 2 for å gå tilbake) |
| 3 | Negativt bilde med økt kontrast
Kunstige farger; hvit/svart, svart/gul, svart/grønn, svart/rød, blå/gul, blå/hvit. Trykk gjentatte ganger på 3 for å bytte mellom de ulike fargene. (Skift + 3 for å gå tilbake) |
| Ctrl + P | Ta et bilde
Trykk på Ctrl + P for å åpne dialogboksen "Lagre fil". Det foreslås automatisk et filnavn (med dagens dato og klokkeslett) og en mappe (Nedlastinger). Bare trykk på Enter for å lagre bildet. Hvis du ønsker å lagre bildet et annet sted, eller med et annet navn, kan du endre dette manuelt. |
| Ctrl + M | Starte/stoppe videoopptak
Trykk på Ctrl + M for å starte opptaket. Du stopper opptaket ved å trykke på Ctrl + M. Når opptaket stopper, åpnes dialogboksen "Lagre fil". Det foreslås automatisk et filnavn (med dagens dato og klokkeslett) og en mappe (Nedlastinger). Trykk på Enter for å lagre med det foreslåtte navnet. Hvis du vil lagre videoen i en annen mappe eller med et annet navn, kan du endre dette i dialogboksen. |
| 8 | Forhåndsinnstilt delt skjermmodus
Trykk gjentatte ganger på 8 for å bytte mellom de forhåndsinnstilte delte skjermmodusene for hovedskjermen. Vinduet kan også kontrolleres via musen eller med standardkommandoene i Chrome OS. |


9	Informasjons- og innstillingsvindu I dette vinduet kan det angis ulike innstillinger for programmet.
0	Skann etter LVI-kamera Trykk på 0 for å skanne etter et MagniLink kamerasystem. Dette kan være nyttig hvis det er koblet flere LVI-kameraer til datamaskinen. I dette tilfellet åpnes det en dialogboks der du kan velge det aktive kameraet for applikasjonen. Hvis kameraet av en eller annen grunn ikke starter, kan det også hjelpe å skanne etter et MagniLink kamerasystem.
Pil opp	Øke forstørrelsen
Pil ned	Redusere forstørrelsen
Pil venstre	Reduser lysnivå/kontrast
Pil høyre	Øk lysnivå
Ctrl + pil venstre	Referanselinje venstre/opp
Ctrl + pil høyre	Referanselinje høyre/ned
Ctrl + R	Roter kamerabildet medurs Hver gang du trykker på denne tastekombinasjonen, vil kamerabildet rotere 90° medurs (90°, 180°, 270° og 0°).
Ctrl + Skift + R	Roter kamerabildet moturs Hver gang du trykke på denne tastekombinasjonen, vil kamerabildet rotere 90° moturs (270°, 180°, 90° og 0°).
Ctrl + I	Gjenspeil kamerabilde Gjenspeiler kamerabildet. Dette er en nyttig funksjon hvis du f.eks. ønsker å bruke kameraet som et forstørret sminkespeil.
Ctrl + F	Fryse kamerabilde Når du trykker på denne tastekombinasjonen, fryser du kamerabildet. Du frigjør bildet ved å trykke på samme tastekombinasjon igjen. Trykk på Ctrl + F for å lagre et fryst bilde.
Ctrl + A	Deaktiver/aktiver "alltid øverst" Snarveikommando aktiverer funksjonen "Alltid øverst" for applikasjonsvinduet. Hvis "Alltid øverst" er aktivert, vil kamerabildet legge seg over andre åpne applikasjoner. Dette betyr at et annet program kan være i fokus og at du f.eks. kan bruke Google Docs mens du ser på kamerabildet.

Ctrl + 6	Reduser lampelysstyrke
Ctrl + 7	Øk lampelysstyrke

7.4.2 Informasjons- og innstillingsvindu

Informasjons- og innstillingsvinduet består av en rekke ulike faner som inneholder applikasjonsinformasjon og alternative innstillinger.

7.4.2.1 Applikasjonsinnstillinger

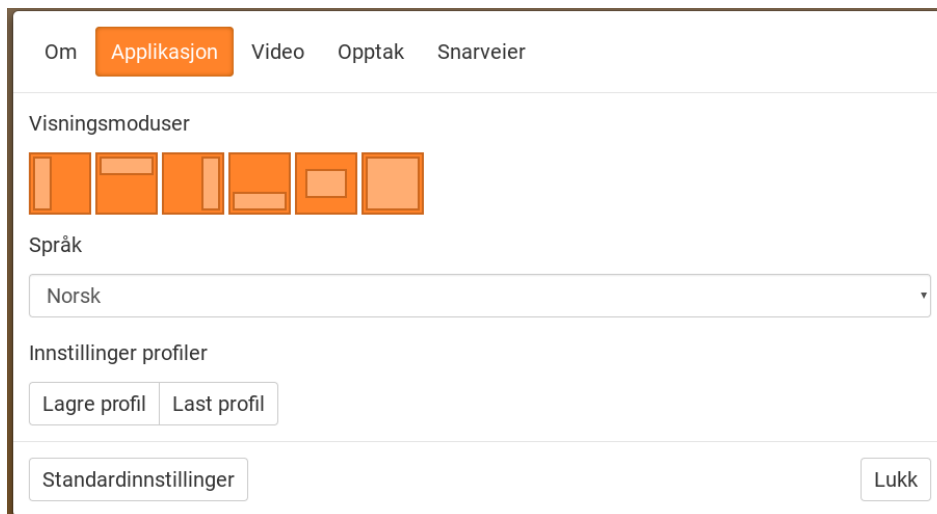

Delt skjermmodus

Trykk på 8 for å velge hvilken av de delte skjermmodusene du vil bruke.

Språk

Endre språket til programvaren. Programvaren er stilt inn til å bruke samme språk som datamaskinen. Hvis dette språket ikke er tilgjengelig, velges engelsk automatisk som standard.

Tilgjengelige språk:


- Engelsk
- Tysk
- Dansk
- Spansk
- Finsk
- Fransk
- Nederlandsk

- Norsk
- Svensk

Profil

Importere eller eksportere innstillinger Bruk Eksporter innstillinger-knappen for å lagre gjeldende innstillinger på harddisken eller f.eks. Google Drive. Bruk Importer innstillinger-knappen til å importere de eksporterte innstillingene.

7.4.2.2 Skjerminnstillinger

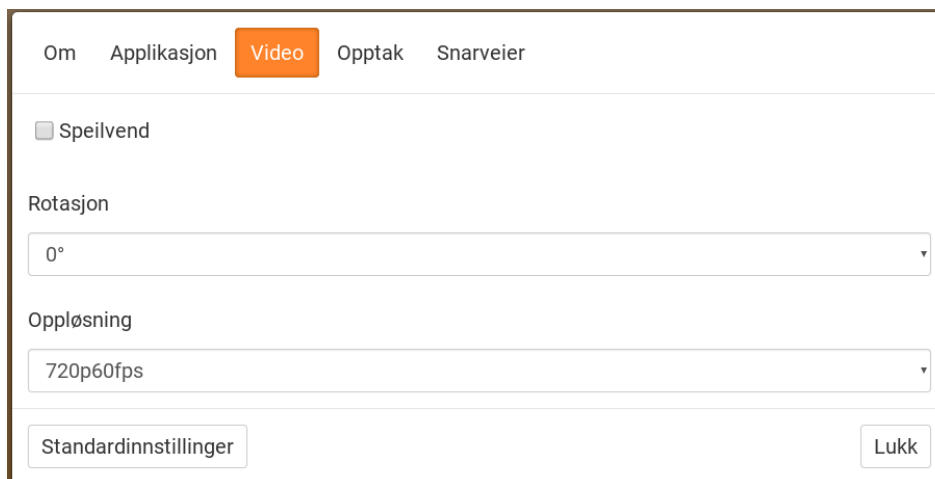

Speilvend bilde

Når denne funksjonen er aktivert, speilvendes kamerabildet.

Roter bilde

Rotasjonsvinkelen til kamerabildet kan angis her. MagniLink ChromeViewer støtter rotasjon av kamerabildet til følgende vinkler: 0°, 90°, 180° og 270°.

Oppløsning

Velg mellom kameraets ulike oppløsninger. Den beste bildekvaliteten får du ved å velge den høyeste oppløsningen. Det kan kreves lavere oppløsninger hvis applikasjonen brukes på en datamaskin med lav ytelse.

7.4.2.3 Opptaksinnstillinger



Begrens opptakslengde

Aktiver denne funksjonen hvis du ønsker å begrense opptakslengden.

Lengde i minutter

Hvis du valgte å begrense opptakslengden, kan du angi grensen i minutter her, fra 1 til 60 minutter.

Les følgende informasjon nøye før du tar i bruk videopptaksfunksjonen.


MagniLink ChromeViewer kan ta opp videosekvenser fra et MagniLink kamerasystem til WebM-format (.webm). Det er ikke mulig å ta opp lyd. Du starter videoopptaket via tastaturet (Ctrl + M), og det vises en rød indikator nede til høyre i videovinduet når det tas opp video.

7.4.2.4 Innstillinger for snarveikommandoer

Om	Applikasjon	Video	Opptak	Snarveier
Innstillinger				<input type="text" value="9"/>
Re-enumerate cameras				<input type="text" value="0"/>
Neste visning				<input type="text" value="8"/>
Fargebilde				<input type="text" value="1"/>
Neste positive farger				<input type="text" value="2"/>

Her kan du endre snarveikommandoene som brukes for applikasjonen. Når du skal endre en snarveikommando, tabulerer du til kommandoen som skal endres og trykker på mellomromstasten eller Enter, før du skriver inn den nye tastekombinasjonen. Hvis du taster inn en kombinasjon som allerede er i bruk for en annen kommando, vil den andre kommandoen bli slettet. Du må legge inn en ny tastekombinasjon for å endre kommandoen.

7.4.2.5 Om programmet

Om	Applikasjon	Video	Opptak	Snarveier
				
MagniLink ChromeViewer™ 0.9.23				
Copyright © 2017 Low Vision International AB, all rights reserved				
<input type="text" value="MagniLink ChromeViewer™ is made possible with the use of open source software"/>				
<input type="button" value="Standardinnstillinger"/>			<input type="button" value="Lukk"/>	

Informasjon om programvareversjon og opphavsrettigheter finner du under denne fanen.

8 Arbeide med lesekameraet

Lesekameraet er nå klart til bruk. Det er viktig at arbeidsplassen rundt MagniLink er komfortabel og at du sitter riktig. Dette for at du skal kunne bruke kameraet så lenge som mulig uten å utsette nakke og rygg for unødvendige belastninger.

Du bør tenke på følgende:

- Stolen bør stå inntil bordet som utstyret står på, og du bør ikke sitte i stolen for lenge om gangen. Vi anbefaler en god kontorstol med regulerbar høyde.
- Setet på stolen skal være i en høyde som ikke gjør at bena dine visner bort; bena skal ha en vinkel på 90 grader og føttene skal være på gulvet.
- Leseplaten skal være i en høyde der du kan hvile underarmen horisontalt på den. Det er viktig at bordet verken er for høyt eller for lavt for deg. Den ideelle løsningen er om skjermen er litt under øyenivå og i en så rett linje foran deg som mulig.
- Stenge dagslyset ute. Lys fra taklamper, bordlamper og vinduer kan forårsake refleksjoner på skjermen. Derfor bør du ikke plassere lysene der de lyser direkte på skjermen eller deg selv.

9 Feilsøking

Hvis indikatorlampen blinker:

En rød lampe eller en blinkende rød lampe indikerer en systemfeil. Start systemet på nytt ved å koble alle kablene fra og til og start systemet på nytt. Hvis den røde lampen fortsatt lyser, må du ta kontakt med serviceteknikeren.

10 Teknisk informasjon

Forstørrelsesområde SD-kamera	1,4 – 75 x (15,4" 16:9 skjerm)
Forstørrelsesområde HD-kamera	1,1 – 75 x (15,4" 16:9 skjerm)
Strømutgang	5 W
Strømutgang, standby	1,7 W
Vekt	1,7 kg
Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Mål B x D x H	350 x 270 x 390 mm
Driftstemperatur	0 til 30 °C
Oppbevarings- og transporttemperatur	-20 til 60 °C



Avhending av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder for EU-land og alle andre europeiske land med egne innsamlingsordninger)

Hvis produktet eller emballasjen har dette symbolet på seg, skal det ikke håndteres som vanlig husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres inn til en miljøstasjon for resirkulering av elektriske og elektroniske komponenter. Ved å sørge for at dette produktet avhendes på riktig måte hjelper du til med å redusere den negative virkningen på helse og miljø som ellers kunne ha skjedd hvis produktet ble kastet på feil måte. Resirkulering bidrar til en mer bærekraftig bruk av naturressursene. Hvis du ønsker mer informasjon om resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, din lokale miljøstasjon eller butikken der du kjøpte produktet.

11 Samsvarserklæring

DECLARATION OF CONFORMITY

according to the Medical Devices Directive, 93/42/EEC with amendments from
directive 2007/47/EC

Type of equipment: *Reading Aid*
Brand name or trademark: *MagniLink*
Type designation: ***MLS-HD, MLS-FHD***
Product class: *Class 1.*
Manufacturer: *LVI Low Vision International AB*
Address: *Verkstadsgatan 5
S-352 46 Växjö
Sweden*
Web: <http://www.lvi.se>
Phone: *+46 470 - 72 77 00*
Fax: *+46 470 - 72 77 25*

As the manufacturer, we declare under our sole responsibility that:

- the product complies with the provisions of the Council Directive 93/42/EEC with amendments from directive 2007/47/EC.
- we will keep the technical documentation described in section 3 of Annex VII available to the national authorities for a period ending at least five years after the last product has been manufactured.
- the device meets the Essential Requirements of Annex 1 which applies to it, taking into account the intended purpose of the device.
- to follow the requirements regarding products placed on the market as described in section 4 of Annex VII.

Manufacturer

Manufacturer's authorized representative

Date

Signature

Position

12-11-2012



Managing Director

Clarification

Erik Bondemark

Alfabetisk stikkordregister

Anbefalte systemkrav	19
Applikasjonsinnstillinger	24
Arbeide med lesekameraet	28
Bruke maskinvaren	16
Bruke programvaren	22
Emballasje	11
Feilsøking	29
Funksjoner via tastaturet.....	22
Informasjons- og innstillingsvindu.....	24
Innstillinger for snarveikommandoer	27
Installasjon av maskinvare.....	15
Installasjon av programvare.....	20
Introduksjon til MagniLink S	6
Kontrollboks.....	16
MagniLink ChromeViewer	19
Maskinvare	15
Minimumskrav til system	19
Om LVI.....	5
Om programmet	27
Opptaksinnstillinger	26
Posisjonssensor	18
Samsvarserklæring	31
Sikkerhetsinformasjon	8
Skjerminnstillinger	25
Teknisk informasjon.....	30
Tilbehør	12
Utpakking	10