


HAR MO NIZE

RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA

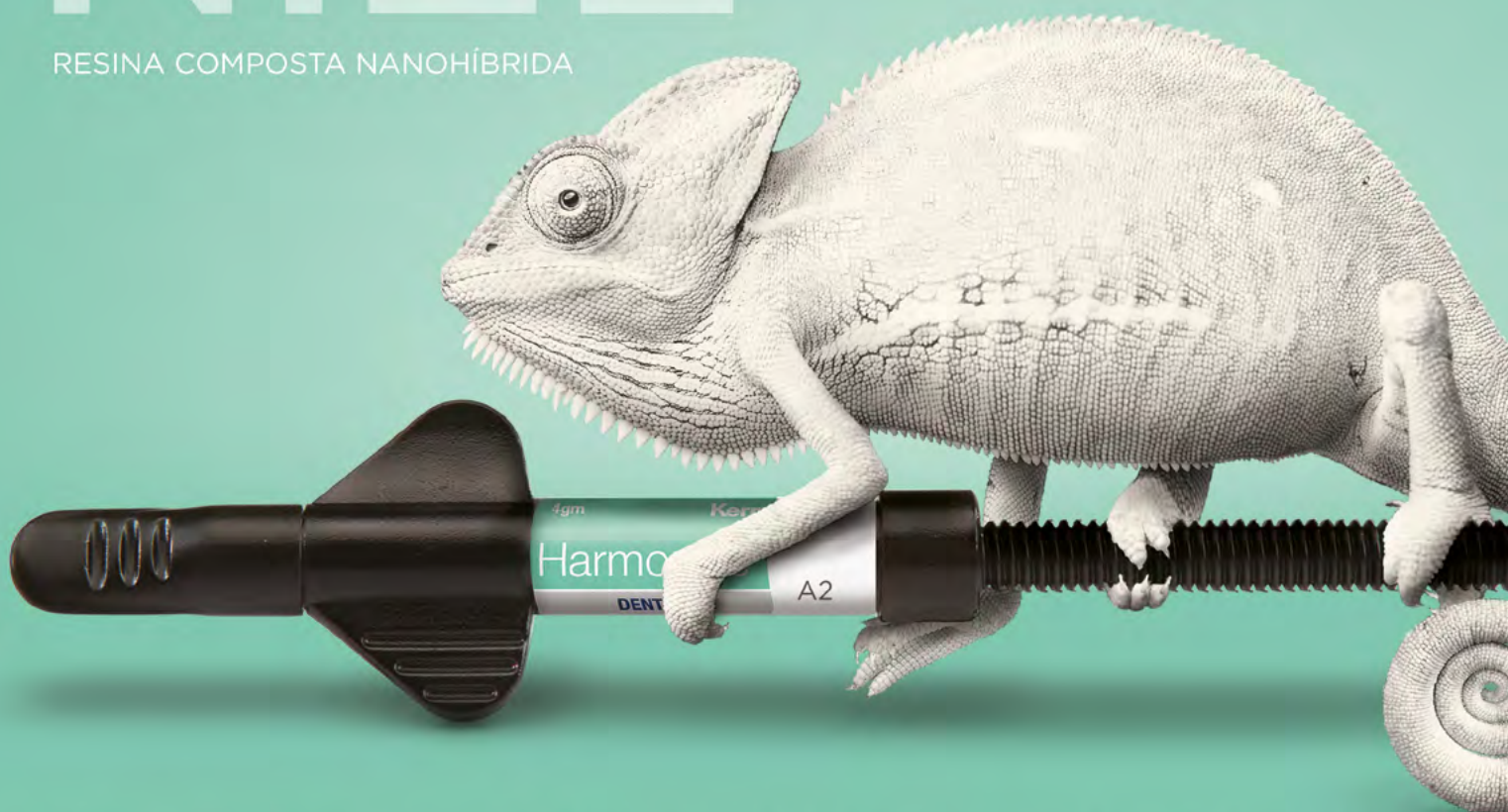

Tão simples e perfeito quanto o dente natural.
Harmonize-se.

Crie restaurações duradouras com uma experiência única. Premiada internacionalmente, a **resina nanohíbrida Harmonize** mimetiza a estética natural da estrutura dentária, garantindo excelentes resultados nos procedimentos em dentes anteriores e posteriores.





Kerr
RESTORATIVES

RESTAURAÇÕES REALISTAS PRECISAM DO SEU TOQUE DE ARTE

Harmonize começa com **ART**, Adaptive Response Technology¹, um sistema de cargas nanoparticuladas que torna a obtenção de **restaurações realistas** mais fácil que nunca.

ART também possibilita uma **mimetização à estrutura dentária remanescente**, entregando restaurações com força excepcional e estética incomparável.

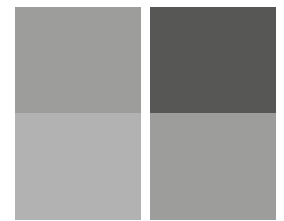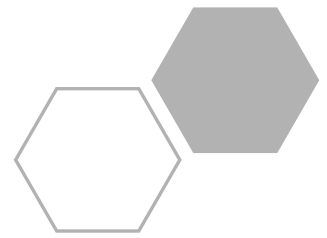

CIÊNCIA E BELEZA FINALMENTE JUNTAS.

2 A 3 DENTISTAS
CADA 3 CONSIDERARIAM
TROCAR SUA RESINA ATUAL
PRA HARMONIZE²



¹ Tecnologia de Resposta Adaptável

² 18 de 27 Dentistas Líderes de Opinião na Europa. Campo de avaliação da Harmonize, EMEA, Set-2016.

FÁCIL DE ESCULPIR

Sinta uma maneira mais fácil de alcançar a anatomia de restaurações por meio da combinação das partículas esféricas patenteadas **ART** e um modificador reológico patenteados.

- **Consistência adaptável durante a aplicação**, Dependendo da pressão aplicada ao instrumento.

- **Aderência ao instrumento minimizada e estabilidade na escultura**. Dispensa retrabalho.



94%

DOS LÍDERES DE OPINIÃO NOS ESTADOS UNIDOS AVALIARAM HARMONIZE COMO EXCELENTE EM MANIPULAÇÃO⁴.

⁴ Em estudo cego, 94% dos líderes de opinião declararam que Harmonize tinha excelentes características de manipulação incluindo baixa pegajosidade ao instrumento, facilidade de esculpir, espalhamento e viscosidade.

VISCOSIDADE DINÂMICA

O sistema de nanopartículas ART **se adapta ao comportamento do clínico**.

O exclusivo **modificador reológico** melhora a fluidez enquanto se esculpe, tornando **fácil dar forma à restauração**.


Ao se completar a escultura, a viscosidade aumenta, **prevenindo que o material escoe**.

Tudo que pode minimizar o esforço exigido para alcançar a forma desejada, reduzindo o tempo necessário para acabamento e polimento.*


FORMATO ESFÉRICO

O formato esférico do sistema de partículas ART é cuidadosamente controlado para maximizar a concentração de cargas, **minimizando pegajosidade e simplificando a escultura**.

Isso reduz o risco de formação de fendas e bolhas cavosuperficiais.

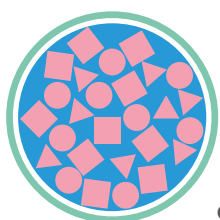

CONCORRENTE

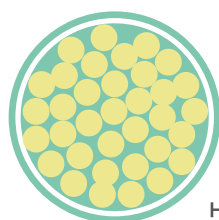

HARMONIZE



* (dados de estudo interno disponíveis sob consulta)

FORÇA EXCEPCIONAL

Conte com restaurações duráveis, graças a **um sistema reforçado de carga** criado pela interação de Harmonize e as nanopartículas ART.

- **APRIMORAMENTO DA FORÇA**, propiciado pela alta concentração de carga (81% do peso).

- **FORTE ADESÃO ENTRE RESINA E CARGA**, proporcionando uma performance duradoura.

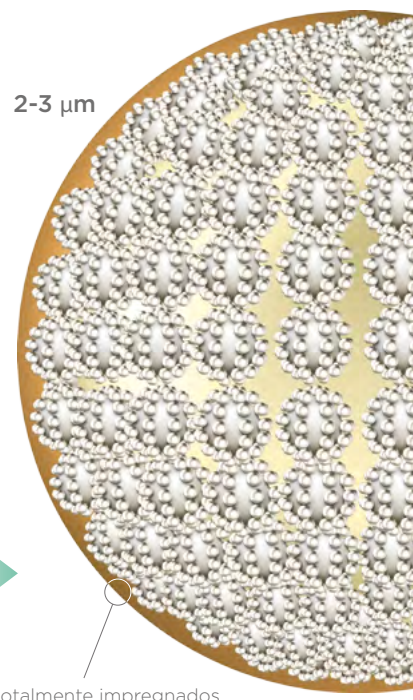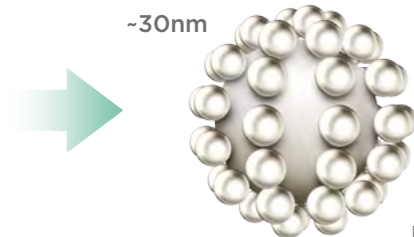

Rede de polímeros totalmente impregnados, proporcionando integridade estrutural e excelente adesão à matriz resinosa.

ESTRUTURA DE CARGAS REFORÇADA

Partículas de sílica e de zircônia muito pequenas estão ligadas fortemente numa estrutura reforçada.

Isso melhora a interação e as ligações cruzadas entre o sistema de cargas e a matriz resinosa, resultando em **mais eficiência de polimerização e maior rigidez**.

Como resultado, você pode confiar em restaurações de longa duração, mais propensas a **resistir a formação de lascas ou fraturas ao longo do tempo**.

FORÇA MECÂNICA COMPROVADA

Harmonize demonstra **força superior** a outros concorrentes, apresentando um valor de 1,41 MPa.




ESTÉTICA INCOMPARÁVEL

Experimente resultados estéticos realistas, proporcionado pelas nanopartículas de Harmonize - **ART** - que possuem tamanho e configuração especialmente controlados.

- Difusão e reflexão de luz **similar a de um dente natural.**

- **Efeito camaleão melhorado em relação aos concorrentes,** para melhor mimetizar o dente natural.

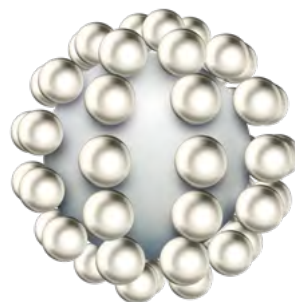

2 A CADA 3 DENTISTAS DECLARARAM QUE HARMONIZE POSSUI, NO GERAL, PROPRIEDADES ESTÉTICAS SUPERIORES EM RELAÇÃO ÀS RESINAS QUE UTILIZAM ATUALMENTE.²

² 18 de 27 Dentistas Líderes de Opinião na Europa, Campo de avaliação da Harmonize, EMEA, Set-2016.

REFLEXÃO DE LUZ COMO UM DENTE NATURAL




Assim como no dente natural humano, e diferentemente de outras resinas compostas universais, Harmonize adapta-se ao comprimento de onda, refletindo a luz de maneira difusa num comprimento de onda baixo, e de maneira especular em resposta a comprimentos de onda maiores.

Isso resulta em um **melhor mimetismo** que o encontrado em resinas líderes do mercado.*

ALTO BRILHO E POLIMENTO DURADOURO

A estrutura e o tamanho da partícula também oferecem **facilidade de polimento**. Assim, durante essa etapa, Harmonize tem demonstrado resultados melhores e mais estáveis que os concorrentes.

Além disso, as partículas desta inovadora resina foram desenvolvidas para uma **maior retenção de brilho**, superando produtos líderes do segmento.*

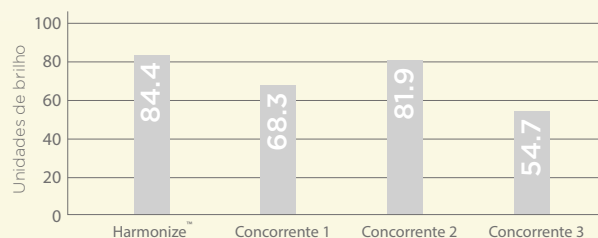


*(dados de estudo interno disponíveis sob consulta)

TÃO SIMPLES E PERFEITO QUANTO O DENTE NATURAL. HARMONIZE-SE.

Harmonize - Refil

Descrição	Referência
Harmonize A1 Dentina Seringa	10134576
Harmonize A2 Dentina Seringa	10134579
Harmonize A3 Dentina Seringa	10134581
Harmonize A3.5 Dentina Seringa	10134582
Harmonize A4 Dentina Seringa	10134586
Harmonize B3 Dentina Seringa	10134587
Harmonize C4 Dentina Seringa	10134588
Harmonize XL2 Dentina Seringa	10134614
Harmonize A1 Esmalte Seringa	10134592
Harmonize A2 Esmalte Seringa	10134594
Harmonize A3 Esmalte Seringa	10134596
Harmonize A3.5 Esmalte Seringa	10134598
Harmonize A4 Esmalte Seringa	10134599
Harmonize B1 Esmalte Seringa	10134601
Harmonize B2 Esmalte Seringa	10134604
Harmonize B3 Esmalte Seringa	10134605
Harmonize B4 Esmalte Seringa	10134606
Harmonize C1 Esmalte Seringa	10134607
Harmonize C2 Esmalte Seringa	10134608
Harmonize C3 Esmalte Seringa	10134609
Harmonize C4 Esmalte Seringa	10134610
Harmonize D2 Esmalte Seringa	10134611
Harmonize D3 Esmalte Seringa	10134612
Harmonize D4 Esmalte Seringa	10134613
Harmonize XL Esmalte Seringa	10134591
Harmonize TA Incisal Seringa	10134615
Harmonize TB Incisal Seringa	10134617
Harmonize TC Incisal Seringa	10134618
Harmonize TG Incisal Seringa	10134619
Harmonize TSC Translucent Seringa	10134620

Dentina

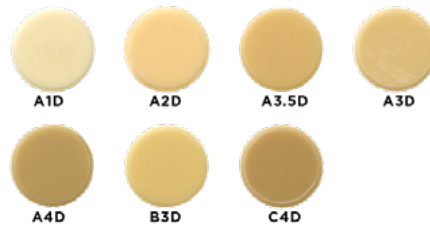

Esmalte



Incisal

