




# PRESSALIT®

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b>                               | VALUE IV bruseklapsæde med støtteben, fastmonteret<br>R1622000112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Farve</b>                                                      | VVS: 777525412<br>RSK: 8162782<br>EAN: 5708590377728<br>HMI: 124486<br><br>Antracitgrå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktbeskrivelse</b>                                         |  <p>VALUE IV bruseklapsæde og ryglæn er den enkle løsning for brugere der har behov for at kunne sidde ned mens de tager brusebad.</p> <p>VALUE IV brusesæde. Fast højde. Sædet er opklappeligt.<br/>Materialer: Trykstøbt aluminium, Rilsan-belagt rustfrit stål og vakuumformet polyethylen (PE).<br/>Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Plugs afhænger af vægtype, og skal bestilles separat.</p>                                                                                                                                 |
| <b>Justerbarhed</b><br><b>Produktkapacitet</b>                    | Fastmonteret<br><br>Maksimal brugervægt: 125 kg.<br>Når sædet belastes med 125 kg, belastes hver monteringskrue med 95 kg.<br><br><i>VALUE brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Materialer</b><br><br><b>Ergonomi</b><br><br><b>Funktioner</b> | Vægbeslaget er fremstillet i trykstøbt aluminium, rammen og støttebenet i Rilsan-belagt, rustfrit stål. Rilsan-belægningen giver god beskyttelse mod rust, er behagelig at røre ved og let at rengøre. Sædet er fremstillet i vakuumformet polyethylen (PE).<br><br>Bruseklapsædet er designet til montering i bruseområdet og kan nemt klappes op og ned efter behov.<br>Ergonomisk udformet sæde med en behagelig overflade.<br><br>Bruseklapsædet kan slås op, når det ikke er i brug - eller for at give plads.<br>Sæde og ryg kan let afmonteres ved rengøring.<br>Bruseklapsædet er udformet, så vandet kan løbe af. |
| <b>Garanti</b>                                                    | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

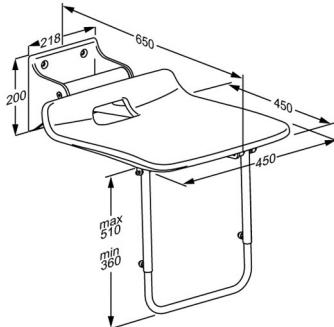

# PRESSALIT®

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                          | VALUE IV bruseklapsæde med støtteben, fastmonteret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Varenummer</b>                       | R1622000112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rengøring</b>                        | <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring.<br/>Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.<br/>Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b><br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> |
| <b>Overensstemmelses-<br/>erklæring</b> | Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

## PRESSALIT®