




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	VALUE IV brusesæde, fastmonteret R1620000112
Farve	VVS: 777525312 RSK: 8162781 EAN: 5708590377711 HMI: 124483 Antracitgrå
Produktbeskrivelse	 VALUE IV bruseklapsæde og ryglæn er den enkle løsning for brugere der har behov for at kunne sidde ned mens de tager brusebad. VALUE IV brusesæde. Fast højde. Sædet er opklappeligt. Materialer: Trykstøbt aluminium, Rilsan-belagt rustfrit stål og vakuumformet polyethylen (PE). Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Plugs afhænger af vægtype, og skal bestilles separat.
Justerbarhed Produktkapacitet	Fastmonteret Maksimal brugervægt: 125 kg. Når sædet belastes med 125 kg, belastes hver monteringsskrue med 95 kg. <i>VALUE brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>
Materialer Ergonomi Funktioner	Vægbeslaget er fremstillet i trykstøbt aluminium, rammen i Rilsan-belagt, rustfrit stål. Rilsan-belægningen giver god beskyttelse mod rust, er behagelig at røre ved og let at rengøre. Sædet er fremstillet i vakuumformet polyethylen (PE). Bruseklapsædet er designet til montering i bruseområdet og kan nemt klappes op og ned efter behov. Ergonomisk udformet sæde med en behagelig overflade. Bruseklapsædet kan slås op, når det ikke er i brug - eller for at give plads. Sæde og ryg kan let afmonteres ved rengøring. Bruseklapsædet er udformet, så vandet kan løbe af.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

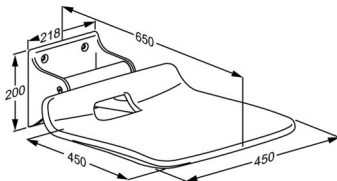

PRESSALIT®

Produkt	VALUE IV brusesæde, fastmonteret
Varenummer	R1620000112
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
Overenstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®